

# NÁVOD K OBSLUZE

masážní akupresurní přístroj  
model BR-1290 limitovaná edice z-lime

## ROLLSKIN





## OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	5
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ VÝHODY	7
CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT	7
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POPIS DISPLEJE	9
DOBÍJENÍ BATERIE	10
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	11
JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	12
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	13
DÉLKA OŠETŘENÍ	14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	14
CERTIFIKACE	14
DOVOZCE	16
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	17

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Rollskin je tělový masážní přístroj nové generace. Reprezentuje výsledek dlouhodobého vývoje odrážející hlavní trendy v boji proti celulitidě. BeautyRelax Rollskin vyniká univerzálním použitím. Všechny problematické partie můžete ošetřit až 5 různými technologiemi. Bezdrátové použití. Podsvícený displej. Špičkový přístroj zatočí s projevy celulitidy a výrazně předčí vaše očekávání!

## UPOZORNĚNÍ

- před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod k použití
- přístroj nepoužívejte v prostředí, kde se nachází přítomnost kouře, prachu, nečistot nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou
- je zakázáno používat přístroj v koupelně
- dodržujte přesně délku a způsob ošetření
- přístroj nekombinujte používáním obdobného přístroje jiného výrobce
- pokud se budete během používání cítit jakkoliv nestandardně, přístroj vypněte a jeho použití zkonzultujte se svým lékařem
- pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nenechávejte ho připojený napájecímu USB kabelu
- napájecí USB kabel neohýbejte; na přístroj nepokládejte ostré, těžké nebo vlhké předměty
- během používání přístroje se vyhněte kontaktu s předměty, jako jsou svíčky, cigarety, lihoviny
- pokud bude mít přístroj jakékoliv technické problémy, využijte kontaktní formulář na adrese [www.beautyrelax.cz](http://www.beautyrelax.cz)
- přístroj se nepokoušejte sami rozebírat ani opravovat – mohli byste se zranit a došlo by ke ztrátě záruky
- pokud nastane některá z těchto situací, přístroj nikdy nepoužívejte:
  - napájecí kabel je poškozen
  - do přístroje vnikla voda
  - na přístroj spadl těžký předmět nebo spadl z velké výšky na zem
- přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti jiného elektrického zařízení
- dbejte na to, aby přístroj a všechny jeho součásti byly vždy suché
- po každém použití očistěte přístroj pomocí jemně navlhčené hadříčky v lihovém roztoku a další hadříčkou vysušte kompletně do sucha



## KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Závažné kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



**Doporučení:** Masážní přístroj Rollskin má vliv na činnost lymfatického systému a krevního oběhu. Pokud máte zdravotní diagnózu se špatnou funkcí lymfatického systému, srdečním onemocněním, případně trpíte zvýšeným krevním tlakem, konzultujte první použití přístroje s vaším lékařem.

## ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Hlava
- Krk (přední i zadní strana)
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



## **PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE**

Celulitida se projevuje hrbolatým povrchem pokožky. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti stehen a hýždí. Celulitidu, tzv. pomerančovou kůži, způsobuje zvětšení objemu tukových buněk. Na pokožce se projevuje nevzhlednými drolíčky. BeautyRelax Rollskin pomocí rotačních kuličkových aplikátorů intenzivně a hloubkově masíruje pokožku. Tímto procesem se podporuje krevní oběh a průtok lymfy. Dochází tak k lepší látkové výměně, což má za následek zmírnění projevů celulitidy. Pleť je hladší a pružnější.

Ideální na použití problematických partií, mezi které patří vnitřní strany stehen, boky, zadeček, břicho a paže. Doporučujeme kombinovat použití přístroje s anticelulitidními krémy nebo masážními esenciálními oleji. Pohyb přístroje po pokožce bude snadnější a výsledný efekt hladké pokožky se dostaví rychleji. V kombinaci s aktivním pohybem a zdravou stravou lze výsledek nejen urychlit, ale také dlouhodobě udržet. Praktické je ergonomické tvarování rukojeti. Přístroj se tak lépe drží při jeho používání.

### **1. Akupresurní masáž**

Sada 4 rotačních aplikátorů efektivně „prohnětávají“ podkožní tukovou tkáň. Tento způsob akupresurní terapie je ve velké míře používán masážními salony zaměřené právě na formování postavy.

### **2. Vibrační masáž**

Aplikátory generují vysokofrekvenční oscilace. Zlepšují krevní oběh a podporují lymfatický systém pro odvod škodlivin a látkovou výměnu, která je pro potlačení projevů celulitidy zásadní.

### **3. Radiofrekvence**

Radiofrekvenční energie působí přímo do vrstvy dermis. Zaměřeno na povadlou a nezdravě vyhlížející pleť. Radiofrekvence aktivuje remodelaci kolagenových a elastických vláken a elastinu. Použití je naprosto bezpečné. Při použití je nezbytné nanést na pleť tenkou vrstvu čirého sonogelu. Slouží ke zlepšení vodivosti pleti a její ochraně.

### **4. EMS elektrické mikropulzy**

Působením času svaly ztrácí přirozenou pružnost a elasticitu. Pleť působí fádáním a unaveným dojmem. Aplikátory přístroje BeautyRelax Rollskin přenáší při kontaktu s pleť jemné elektrické pulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo ke svalům. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.

### **5. Červené a modré světlo**

Červené světlo podporuje přirozenou tvorbu kolagenu. Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek z anticelulitidních krémů. Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni.

## HLAVNÍ VÝHODY

- zcela neinvazivní charakter ošetření
- bezpečné, bezbolestné používání
- bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- skutečně funkční lymfatická masáž podtlakem

## CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT

- okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie
- pokožka je pružnější a jemnější na dotyk
- při pravidelném používání a přiměřeného stravovacího režimu zjemnění příznaků celulitidy
- tvarování a zpevňování paží, stehen, hýždí, břicha, poprsí

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Pracovní napětí: 3,7V.
- Výkon: 9,8W.
- Frekvence vibrační masáže: 165 kminů za sekundu.
- Délka použití na jedno nabití: 30 minut.
- Délka nabíjení: přibližně 3 hodiny.
- Napájení: Li-ion baterie 900mAh.
- Nabíjení baterie: USB kabelem (součástí balení).
- Rozměry: 17,7x8,2x7cm.
- Hmotnost: 215g.

beautyrelax rollskin






excelentní  
kombinace

anticelulitidní  
krém




estetický  
přístroj

## POPIS PŘÍSTROJE

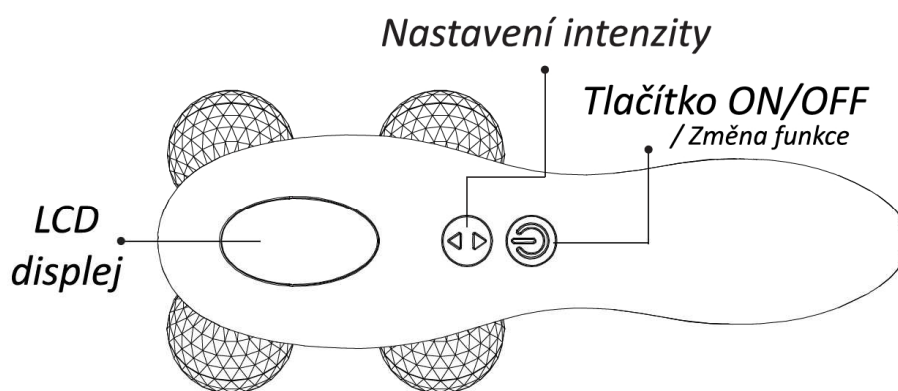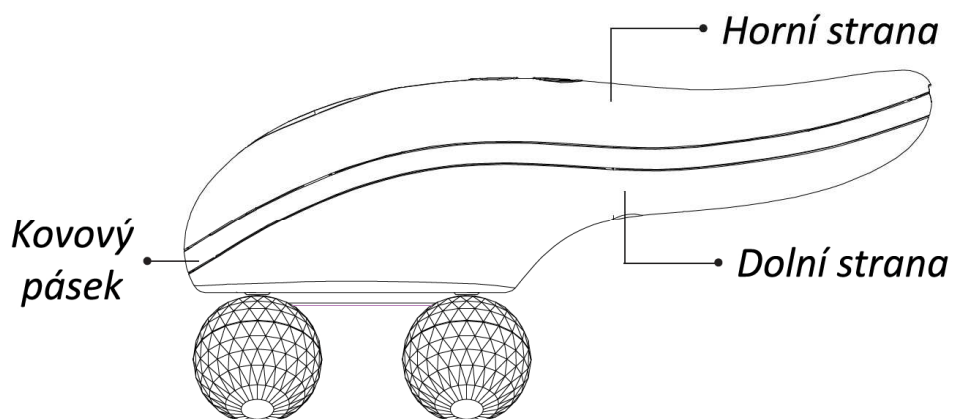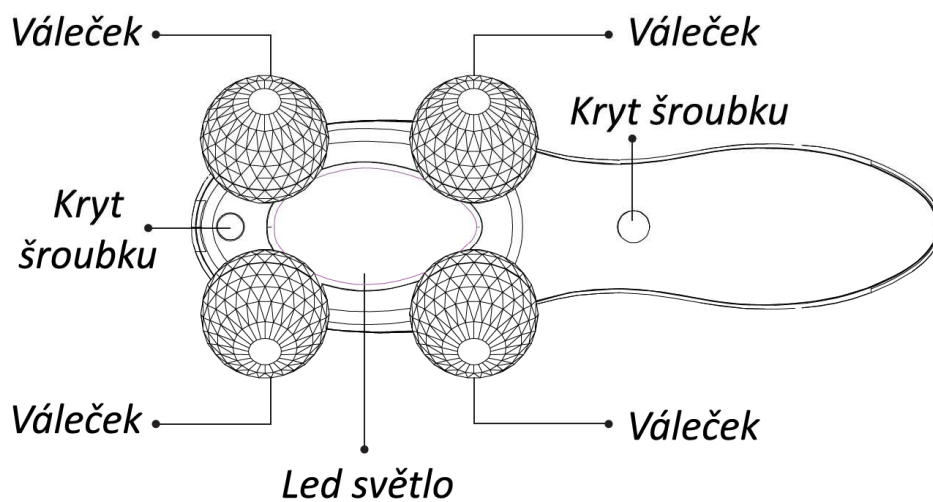



## POPIS DISPLEJE

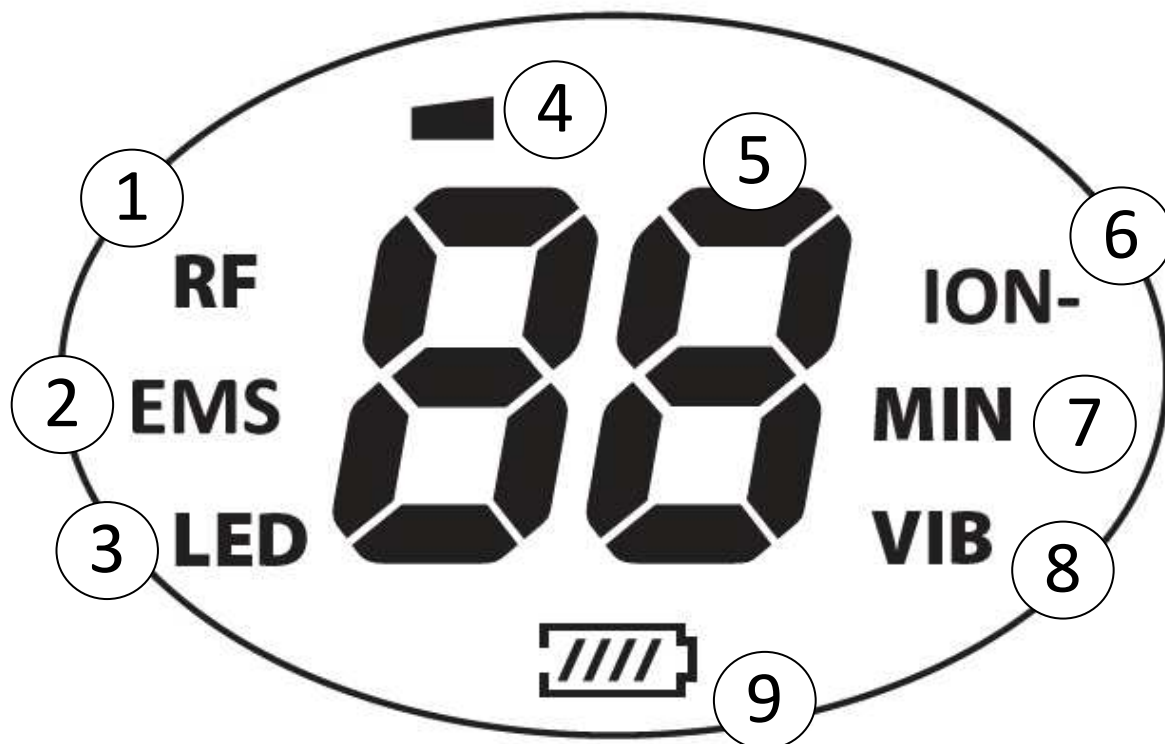


1. *Funkce radiofrekvence*
2. *Funkce EMS*
3. *LED světlo*
4. *Nastavení intenzity*
5. *Nastavení intenzity*
6. *Negativní ionizace*
7. *Čas v minutách*
8. *Vibrace*
9. *Indikace stavu baterie*

## DOBÍJENÍ BATERIE

Před každým použitím přístroje doporučujeme baterii plně nabít. Spotřeba elektrické energie se odvíjí od nastavení síly intenzity radiofrekvence nebo elektrických pulzů. Plně nabitá baterie zajišťuje bezproblémový chod přístroje bez nutnosti přerušit ošetření těla. Přístroj využívá lithiovou baterii s kapacitou 900mA.

1. Jeden konec kabelu připojte do zdířky umístěné na spodní straně přístroje.

2. Druhý konec kabelu připojte do USB portu vašeho počítače nebo notebooku.

3. V průběhu nabíjení jsou na displeji aktivní ikony stavu baterie  a nápis CH.

4. Jakmile je baterie plně nabita, zazní krátký zvukový signál a displej se vypne.



**Poznámka:** Napájení baterie trvá přibližně 3 hodiny v závislosti na stavu baterie. Při plném nabití baterie je přístroj schopen pracovat přibližně 30 minut (spotřebu elektrické energie výrazně ovlivňuje intenzita radiofrekvence a elektrických pulzů).

## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE


Vlastnosti všech funkcí přístroje si můžete nastavit individuálně přesně dle vaší potřeby.

### Zapnutí přístroje

Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka „ON/OFF“. Ihned po zapnutí přístroje se rozsvítí displej a přístroj začne fungovat.


Ihned po zapnutí se spustí automatický režim s přednastavenými funkcemi:

#### Radiofrekvence + vibrační masáž + červené světlo

Pomocí tlačítka  si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvenčních vln. K dispozici jsou 3 úrovně intenzity: nízká (1) střední (2) vysoká (3). Vždy začínejte na nejnižší intenzitě a postupně můžete přidávat.

Stisknutím tlačítka „ON/OFF“ přepněte na druhý automatický režim s přednastavenými funkcemi:

#### EMS mikropulzy + vibrační masáž + modré světlo

Pomocí tlačítka  si můžete nastavit intenzitu působení EMS elektrických mikropulzů. K dispozici jsou 3 úrovně intenzity: nízká (1) střední (2) vysoká (3). Vždy začínejte na nejnižší intenzitě a postupně můžete přidávat.

Každý režim pracuje v délce 5 minut s automatickým vypnutím.

Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka „ON/OFF“.

intenzivní  
akupresura



rotační  
kuličkové  
aplikátory



beautyrelax  
rollskin

## JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

- Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat ošetření po celkové koupeli těla.
- Udělejte si pohodlí. Používání přístroje BeautyRelax Rollskin je relaxační záležitost. Zapalte si vonnou svíčku. Pusťte si příjemnou hudbu nebo oblíbený seriál v televizi. Sedněte si ideálně do měkkého gauče nebo křesla.
- Naneste na partii, kterou chcete ošetřit, jemnou vrstvu pleťového krému, krému proti celulitidě nebo jakýkoliv druh esenciálního masážního oleje. Hlavním důvodem je lepší pohyb masážní baňky po těle. Během masáže mají navíc tyto přípravky mnohem lepší schopnost absorbování do podkožní tkáně.

**Upozornění:** Vždy dbejte na to, aby nedošlo k přímému vniknutí krému nebo oleje přímo dovnitř přístroje. Mohlo by dojít k trvalému poškození.


- Naneste na partii, kterou chcete ošetřit, jemnou vrstvu pleťového krému, krému proti celulitidě nebo jakýkoliv druh esenciálního masážního oleje. Hlavním důvodem je lepší pohyb masážní baňky po těle. Během masáže mají navíc tyto přípravky mnohem lepší schopnost absorbování do podkožní tkáně.

**Poznámka:** Masážní krém nebo tělový olej ponechte před použitím přístroje chvíli vstřebat. Pokud bude pokožka příliš mastná, akupresurní válečky se nebudou točit a budou po povrchu pokožky pouze klouzat, čímž se masážní efekt výrazně sníží.

- Hydratace pleti je nesmírně důležitá pro zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny a elektrické pulzy tak mají lepší schopnost proniknout přes svrchní vrstvu pleti.
- Přístrojem se pohybujte po vybrané tělesné partii v krátkých intervalech. Sami si můžete ovlivnit sílu masáže podle toho, jak moc přitlačíte.
- S přístrojem se můžete zaměřit na tyto partie: předloktí, paže, břicho, stehna, zadeček nebo lýtka.

## POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka

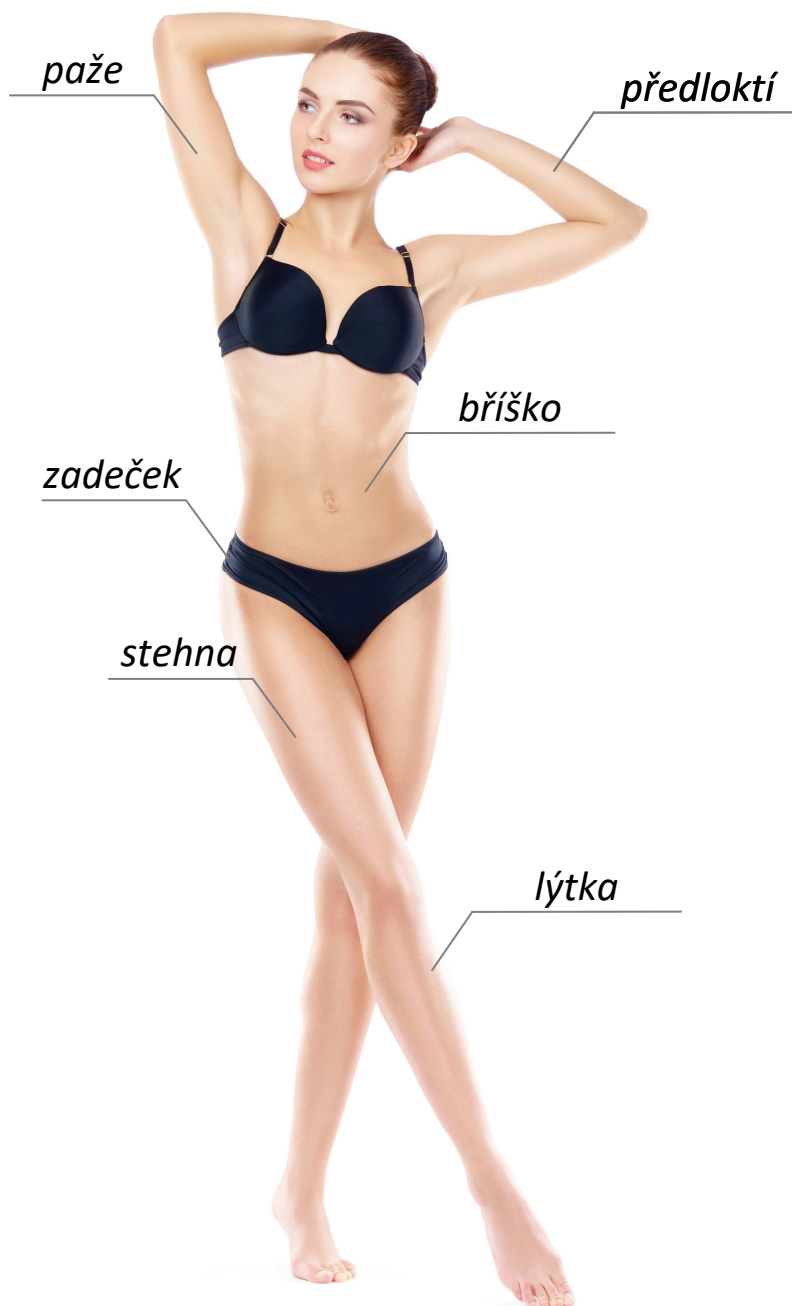

## **DÉLKA OŠETŘENÍ**

Pro každou partii je doporučeno ošetření v maximální délce 15 až 20 minut. Ošetření partií můžete libovolně kombinovat. Je vhodné rozložit si masáž těla do celého týdne. Jako partie je bráno (jedna paže, jedno stehno, jedno lýtko, atd.).

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Po každém použití akupresurní válečky důkladně očistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Tímto přípravkem čistěte výhradně vyměnitelné baňky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje.

## **NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI**

### **Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?**

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro vakuovou masáž přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.

### **Jaké opatření je před a po ošetření nutno dodržovat?**

Před použitím nejsou žádné striktní zásady. Doporučujeme minimálně 4 hodiny před ošetřením těla nekonzumovat těžká nebo mastná jídla. Doporučujeme lehká jídla (např. zeleninový salát, jogurt). Ideální je použití po sportovní aktivitě, kdy akupresurní válečky příjemně rozmasírují unavené svaly.

### **Bolí ošetření přístrojem Rollskin?**

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné. V režimu EMS elektrických mikropulzů můžete cítit jemné mravenčení, které by nemělo přesáhnout hranici nepříjemného pocitu.

### **Mohu používat masážní přístroj bez předchozího ošetření pokožky?**

Před použitím masážního přístroje je nezbytné nanést na pokožku jakýkoliv typ pleťového krému nebo oleje. Jednoduše vytvořit kontaktní vrstvu mezi akupresurním válečkem a pokožkou. Účinné látky z krémů a olejů účinně vmasírují do podkoží.

### **Co mohu od používání přístroje Rollskin očekávat?**

Pravidelným používáním bude vaše pokožka pevnější a hladší zejména v oblastech postižené negativním působením celulitidy. Při celulitidě dochází k zvětšení objemu podkožních tukových buněk, které jsou vytlačovány proti povrchu kůže, a vytváří tak na ní nevzhledné drolíčky, připomínající právě strukturu pomerančové kůry. Masáž přístrojem Rollskin zlepší proudění mízy t k odvádění nečistot z krve. Pomocí této jemné techniky lze zbavit tělo otoků a vyřešit tak zdravotní problémy, kterým by klasická sportovně-rekondiční masáž spíše uškodila.

**Je používání přístroje Rollskin bezpečné?**

Masážní přístroj Rollskin nemá žádné ostré hrany. Neměl by vás jakýmkoliv způsobem zranit. Intenzitu akupresurní masáže si můžete ovlivnit tlakem, kterým budete na tělo působit. Po dokončení ošetření může pokožka zrudnout. Tento efekt však také sám zmizí.

**Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění akupresurních válečků?**

Válečky je třeba po použití důkladně očistit. Očištěním zabráníte případnému vniknutí do přístroje a zajistíte co nejlepší hygienu provozu.

**Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?**

Doporučená délka ošetření jedné partie by měla být v rozsahu od 10 do 15 minut. Jako partie je bráno (jedna paže, jedno stehno, jedno lýtko, atd.).

**Má přístroj časovač?**

Zapnutí a vypnutí přístroje si zvolíte sami. Přístroj má funkci automatického vypnutí po 5 minutách provozu.

**V jakých případech přístroj nepoužívat?**

V tomto návodu k obsluze je v pasáži „kontraindikace“ uveden seznam zdravotního omezení, kdy přístroj není možné používat. Dbejte prosím zvýšenou pozornost na případné kožní defekty. Věnujte pozornost dokončení léčby. Poté není problém přístroj znovu používat.

**Je přístroj zdravotnický prostředek?**

Nikoliv. Spadá do kategorie masážních přístrojů.

**Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?**

Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.

**Má přístroj nějakou certifikaci?**

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu.

**Kde se přístroj vyrábí?**

Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní záruční i pozáruční servis.

**Může přístroj používat více osob?**

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce masážních válečků, druhá osoba přístroj použít může.

**Je přístroj vodotěsný?**

Není.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.



# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s názvem

**masážní akupresurní přístroj**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1290**

EAN: **8594166115279**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1: 2017**

**EN 55014-2: 2015**

**EN 61000-3-2: 2014**

**EN 61000-3-3: 2013**

**Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: CTA-01-1811012**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.9.2019