

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na oční okolí

BeautyRelax BR-2805

SHIATSUGLASSES COMFORT



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
OBSAH BALENÍ	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
NABÍJENÍ BATERIE	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	11
CERTIFIKACE	11
DOVOZCE	11
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	12

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesé distributor odpovědnost.



PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Masážní přístroj Shiatsuglasses Comfort je určen pro okamžité uvolnění oblasti kolem očí. Poskytuje okamžitou úlevu svalového napětí. Unikátní masážní mechanismus imituje pohyby prstů rukou skutečného maséra. Zlepšuje krevní oběh. Příznivě působí na redukci tzv. pytlů pod očima, které vznikají krátkým spánkem nebo nedostatečným odpočinkem. Ideální pro všechny, kdo sedí dlouhé hodiny u monitoru počítače. Díky nastavitelnému pásku se přístroj přizpůsobí každému uživateli. Bezdrátové použití pomocí nabíjecí li-ion baterie. Funkce vyhřívání. 4 rychlosti masáže.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE 3D MASÁŽ POMOCÍ HNĚTENÍ BLAHODÁRNÉ PŮSOBENÍ TEPLA



HLAVNÍ VÝHODY

- Technologie hnětení pro okamžité uvolnění svalů kolem očí
- Imituje prsty rukou skutečného maséra
- 16 kontaktních masážních bodů
- Příjemná relaxace oblasti kolem očí
- Uvolnění svalového napětí
- Snížení otoků
- Potlačení tvorby tmavých kruhů pod očima
- Blahodárné účinky působení tepla
- Reprodukce hudby z vašeho telefonu pomocí Bluetooth technologie
- Ideální při únavě očí při dlouhé práci u monitoru
- Časovač: 10 minut
- 4 rychlosti masáže
- Přizpůsobí se každému uživateli díky nastavitelnému pásku za hlavu
- Odstranitelné masážní aplikátory pro snadnou údržbu
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Kompaktní rozměry
- Napájení: li-ion baterie
- Nabíjení: USB kabelem
- Kapacita baterie: 1200mAh
- Výkon: 5W
- Napětí: 3,7V
- Rozměry: 23x15x10cm
- Hmotnost: 558g




OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj BeautyRelax Shiatsuglasses Comfort
- Nabíjecí kabel.
- Síťový adaptér.
- Návod k obsluze.



POPIS PŘÍSTROJE

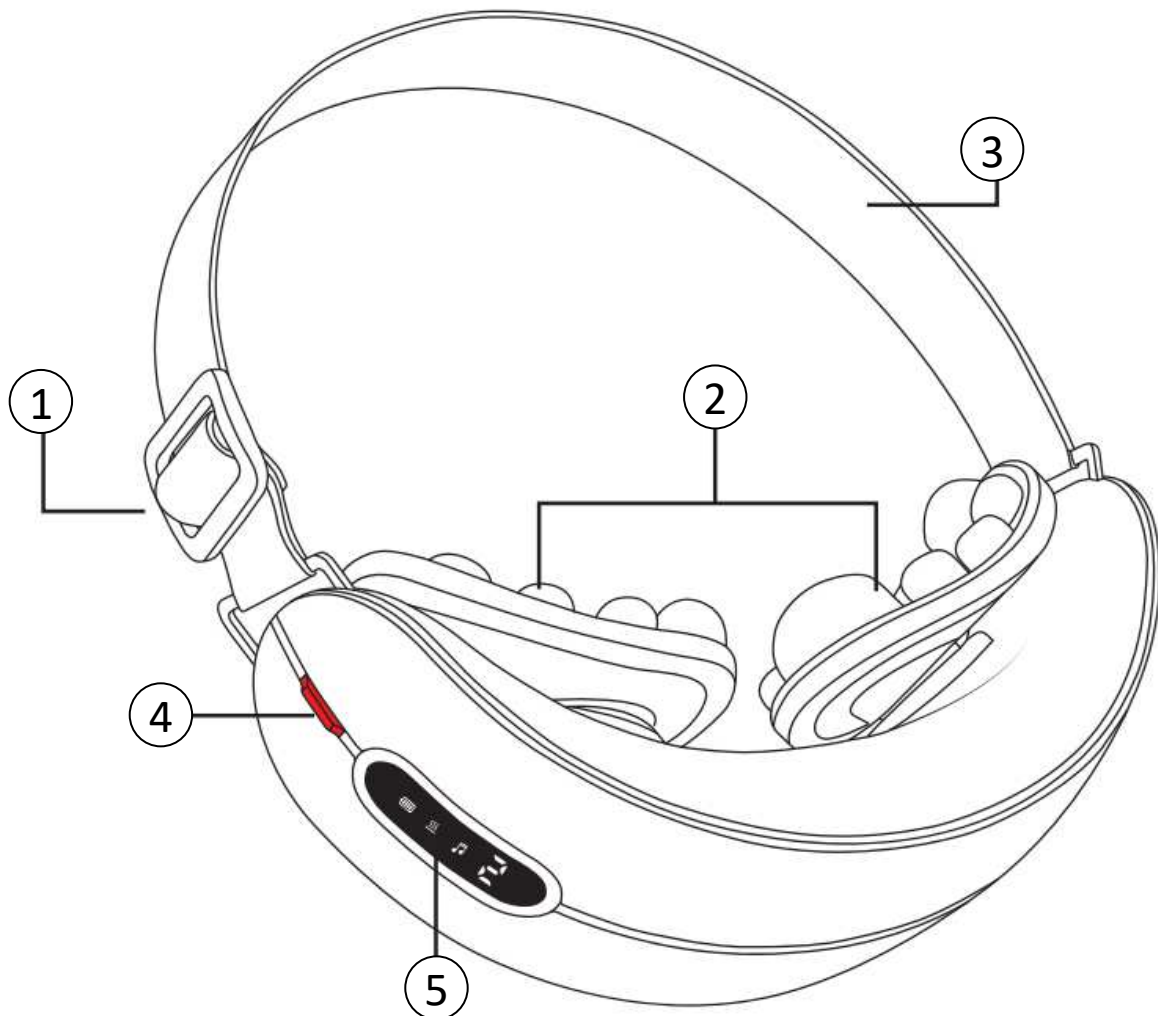

1. Spona pro uchycení popruhu na hlavu
2. Pohyblivé masážní hlavice
3. Elastický popruh na hlavu
4. Tlačítko ON/OFF
5. Displej

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Pro správnou činnost přístroje nabijte baterii. Více v pasáži: **NABÍJENÍ BATERIE**.
2. Udělejte si pohodlí. Ideálně si lehněte na postel nebo pohovku.
3. Přístroj si nasadte na hlavu. Pomocí pásku přizpůsobte tak, aby vám bylo nošení příjemné. Přístroj by neměl silně tlačit na oblast kolem očí, ale zároveň by měl na hlavě dobře držet. Přístroj nesmí být příliš přitažen k hlavě. Při kompresní vzduchové masáži se přístroj na hlavu více přitlačí.
4. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
5. Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF** si můžete měnit mezi jednotlivými masážními programy v následujícím schématu:
 - MASÁŽNÍ MÓD 1**
dostupné technologie: mechanická masáž, hudba, vyhřívání
 - MASÁŽNÍ MÓD 2**
dostupné technologie: mechanická masáž, hudba
 - MASÁŽNÍ MÓD 3**
dostupné technologie: mechanická masáž, vyhřívání
 - MASÁŽNÍ MÓD 4**
dostupné technologie: mechanická masáž
6. Na displeji je zobrazeno číslo masážního programu.
7. Časovač je primárně nastaven na 10 minut. Po uplynutí doby se masáž vypne.
8. Po uplynutí času ukončete použití přístroje nebo pokračujte výběrem masážního programu pro další použití přístroje.
9. Dvojitě rychlé stisknutí tlačítka **ON/OFF** slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce vyhřívání. Rychlé stisknutí 3x za sebou tlačítka **ON/OFF** umožní pozastavení/pokračování masážní funkce.
- 10. Nedoporučujeme přístroj používat déle než 30 minut denně.**
11. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Nabíjecí kabel je součástí balení. Druhý konec zapojíte do síťového adaptéru, který je součástí balení.

Postup nabíjení:

1. Nízký stav baterie indikuje blikání symbolu baterie na displeji.
2. Pro nabíjení používejte napájecí kabel s adaptérem, které jsou součástí balení.
3. V průběhu nabíjení symbol baterie na displeji pulzuje.
4. Jakmile je baterie nabita, pulzování symbolu baterie ustane.
5. Délka nabíjení závisí na vybití baterie a její celkové kondici.
6. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.
7. Nabíjecí baterie je integrovaná uvnitř přístroje. Pokud životnost baterie skončí, kontaktujte autorizovaný servis pro jeho odbornou výměnu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Pokud přístroj používá více osob, dbejte zvýšenou pozornost čištění plochy, která je v kontaktu s pokožkou.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Oční masážní přístroj SHIATSUGLASSES COMFORT

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2805**

EAN **8594166120228**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno
Datum vydání: 1.4.2023

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel