

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj

BeautyRelax BR-3116

ROLLSKIN BODYSHAPE MADERO

PROFESSIONAL SCULPTOR ELITE



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	6
SLOVO ÚVODEM	7
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	9
POUŽITÍ SONOGELU	10
UPOZORNĚNÍ	11
KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT	12
ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	13
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	13
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - RADIOFREKVENCE	13
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - LASER	14
DOPORUČENÍ	14
LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK	15
HLAVNÍ VÝHODY	18
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	18
19 APLIKAČNÍCH HLAVIC	19
TECHNICKÉ PARAMETRY	19
OBSAH BALENÍ	20
URČENO PRO VŠECHNY TYPY POSTAV	21
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	22
METODY REDUKCE VRÁSEK	22
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	23
RADIOFREKVENCE	24
VAKUOVÁ MASÁŽ S RADIOFREKVENCÍ A FOTONOVÝM SVĚTLEM	25
ELEKTROFORÉZA S VYHŘÍVÁNÍM	26
VYSOKOFREKVENČNÍ OSCILACE S VYHŘÍVÁNÍM	27
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	29
LASER	30
ROBOTICKÁ MADEROTERAPIE	32
MADEROTERAPIE PRO RŮZNÉ ČÁSTI TĚLA	33
POPIS HLAVNÍ NABÍDKY PŘÍSTROJE	36
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE – RADIOFREKVENCE SE TŘEMI APLIKAČNÍMI KOLÍČKY	38
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE – RADIOFREKVENCE SE ČTYŘMI APLIKAČNÍMI KOLÍČKY	39

OBSAH:

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE – RADIOFREKVENCE SE ŠESTI APLIKAČNÍMI KOLÍČKY	40
POUŽITÍ HLAVICE S RADIOFREKVENCÍ	41
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE VAKUOVÁ HLAVICE VELIKOST S MALÁ (SMALL)	42
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE VAKUOVÁ HLAVICE VELIKOST M STŘEDNÍ (MEDIUM)	43
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE VAKUOVÁ HLAVICE VELIKOST L VELKÁ (LARGE)	44
POUŽITÍ HLAVICE S VAKUOVOU HLAVICÍ	45
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE HLAVICE S ELEKTROFORÉZOU A VYHŘÍVÁNÍM	46
POUŽITÍ HLAVICE S ELEKTROFORÉZOU	47
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE HLAVICE S OSCILACEMI A VYHŘÍVÁNÍM	48
POUŽITÍ HLAVICE S OSCILACEMI	49
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE HLAVICE S ULTRAZVUKEM	50
POUŽITÍ HLAVICE S ULTRAZVUKEM	51
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE HLAVICE S LASEROVÝM SVĚTLEM	52
POUŽITÍ HLAVICE S LASEROVÝM SVĚTLEM	53
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE HLAVICE S ROBOTICKOU MADEROTERAPIÍ	54
ÚČEL POUŽITÍ	55
MADEROTERAPIE	56
MADEROTERAPIE PRO RŮZNÉ ČÁSTI TĚLA	57
VLASTNOSTI & SPECIFIKACE PRODUKTU	60
POPIS PŘÍSTROJE	61
UVOLNĚNÍ RUKOJETI	64
ROZMĚRY PŘÍSTROJE	65
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	66
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE HLAVICE S VYSOKOFREKVENČNÍ OSCILACÍ	67
ÚČEL POUŽITÍ	68
UVOLNĚNÍ SVALŮ/REDUKCE CELULITIDY	69
POUŽITÍ MASÁŽNÍHO OLEJE NEBO GELU	70
HLAVNÍ BENEFITY PŘÍSTROJE	71
VÝZNAM APLIKAČNÍCH HLAVIC	73

OBSAH:

MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE	74
BEAUTYRELAX VIDEO NA YOUTUBE	77
POPIS PŘÍSTROJE	78
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	79
INSTALACE PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE	80
INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁKY NA HLAVICE	80
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ FILTR	80
NASTAVENÍ INTENZITY ULTRAZVUKU	82
ČAS APLIKACE - ULTRAZVUK	83
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK	84
UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - ULTRAZVUK	85
DÉLKA A FREKVENCE POUŽITÍ HLAVIC	89
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ	90
PŘÍKLADY POUŽITÍ LASEROVÝCH APLIKÁTORŮ	91
UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - VAKUOVÉ SÁNÍ	93
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - VAKUOVÉ SÁNÍ	95
ČAS APLIKACE - RADIOFREKVENCE	96
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	97
METODA APLIKACE OBLIČEJE KRKU DEKOLTU	99
MAPA CITLIVOSTI PLETI	102
DOPORUČENÁ METODA POUŽITÍ HLAVIC	103
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	106
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	109
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	110
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	111
CERTIFIKACE	111
EU DISTRIBUTOR	111
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	112

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – estetické přístroje pro domácí péči i profesionální provozy

BeautyRelax je česká značka zaměřená na vývoj a distribuci estetických přístrojů určených pro široké spektrum uživatelů. Od roku 2010 přinášíme řešení, která nacházejí uplatnění jak v domácí péči, tak v kosmetických salonech, wellness centrech a dalších profesionálních provozech. Díky širokému sortimentu si u nás může vybrat každý – od běžných uživatelů hledajících komfortní péči v domácím prostředí až po profesionály, kteří potřebují spolehlivé přístroje pro každodenní práci.

Jeden sortiment, mnoho možností využití

Přístroje BeautyRelax jsou navrženy s ohledem na různé úrovně zkušeností i rozdílné nároky na provoz. Nabídka zahrnuje jednodušší modely vhodné pro domácí použití i technicky pokročilejší zařízení určená pro profesionální prostředí.

Použité technologie vycházejí z běžně využívaných postupů v oblasti estetické péče, například:

- Radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud

Každý produkt je určen k používání v souladu s návodem výrobce a platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Pro domácí uživatele

Pro jednotlivce, kteří preferují péči v pohodlí domova, nabízí BeautyRelax přístroje:

- s jednoduchým ovládáním
- určené pro pravidelné osobní použití
- umožňující přizpůsobit péči individuálním potřebám

Domácí přístroje jsou navrženy tak, aby se mohly stát součástí běžné rutiny péče o pleť, tělo nebo vlasy.

Pro salony a profesionální provozy

Pro kosmetická studia, salony a wellness zařízení je v nabídce řada přístrojů:

- vhodných pro častější provoz
- s širšími možnostmi nastavení
- určených pro profesionální použití

Profesionální uživatelé mohou vybírat zařízení podle zaměření provozu, typu poskytovaných služeb a individuálních preferencí.

Přehled kategorií přístrojů

- **Kosmetické přístroje** – určené k péči o vzhled a komfort pleti
- **Přístroje pro péči o tělo** – zaměřené na estetickou péči o postavu
- **Masážní přístroje** – vhodné pro relaxaci a regeneraci
- **IPL přístroje** – určené k dlouhodobému omezení růstu chloupků při pravidelném používání

Výběr konkrétního přístroje vždy závisí na individuálních potřebách, zkušenostech uživatele a způsobu použití.

Každý si vybere to své

Ať už hledáte přístroj pro osobní péči doma, nebo zařízení pro profesionální salon, BeautyRelax nabízí široké spektrum možností. Díky rozmanité nabídce modelů, rozdílným technickým parametrům a různým úrovním obsluhy si u nás najde řešení každý uživatel. Rádi vám pomůžeme s výběrem přístroje, který bude odpovídat vašim požadavkům i plánovanému využití.

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili zakoupením našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte všechny informace uvedené v tomto návodu k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním upozorněním a doporučeným postupům používání. Přístroj používejte výhradně v souladu s uvedenými pokyny. Dodržování těchto zásad přispívá k bezpečnému používání přístroje a k jeho optimální funkci.

V následujícím textu jsou podrobně popsány jednotlivé funkce přístroje a doporučený způsob jeho používání. Veškeré informace uvedené v tomto návodu berete prosím vážně. Estetický přístroj pro neinvazivní aplikaci na vybrané části těla využívá moderní technologie určené pro kosmetické a estetické účely. Přístroj byl vyvinut s důrazem na bezpečnost a splňuje veškeré platné technické a legislativní požadavky. Pro dosažení požadovaného kosmetického efektu pracuje přístroj s nastavitelným výkonem, jehož úroveň si uživatel volí sám.

Nedodržení doporučených postupů, bezpečnostních upozornění nebo uvedených omezení použití může vést k nežádoucím reakcím. Zároveň však není důvod k obavám při správném používání. Konstrukce přístroje, jeho vlastnosti a použité technologie jsou navrženy s ohledem na šetrný kontakt s lidským tělem při běžném kosmetickém použití.

Důležité informace k přístroji a jeho používání:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie kosmetických a masážních přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek** a není určen k diagnostice, prevenci ani řešení zdravotních obtíží. Přístroj není určen k řešení obezity ani kožních onemocnění. Nabízí technologie, které mohou při správném a pravidelném používání **přispět ke zlepšení vzhledu pokožky**. Technologie obsažené v přístroji jsou určeny výhradně pro kosmetickou a estetickou péči a mohou při pravidelném a správném používání přispět ke zlepšení vizuálního vzhledu pokožky a subjektivního pocitu komfortu.
- Přístroj je vhodný také pro využití v kosmetických a estetických studiích jako pomůcka pro neinvazivní kosmetické procedury zaměřené na vzhled těla.
- Přístroj BeautyRelax je určen pro **neinvazivní aplikaci**, což znamená, že při jeho používání nedochází k narušení pokožky ani k pronikání jakýchkoliv částí přístroje pod její povrch.
- Přístroj je certifikován a splňuje veškeré platné normy a předpisy vztahující se na zařízení tohoto typu. Bezpečnost elektronických a konstrukčních součástí byla ověřena v souladu s příslušnou legislativou.

- Použití přístroje je vždy spojeno s aplikací čirého vodivého gelu (sonogelu), který zajišťuje optimální kontakt mezi aplikační hlavicí a pokožkou. Gel je běžně dostupný v lékárnách nebo prodejnách zdravotnických potřeb. Pro tento účel postačuje standardní, cenově dostupný typ. Hlavním účelem gelu je zajištění dostatečné vodivosti pokožky.
- Neplatí, že častější používání přístroje vede k rychlejšímu dosažení požadovaného kosmetického efektu. Doporučuje se dodržovat předepsané intervaly použití a dopřát tělu dostatečný čas na přirozenou reakci na aplikované podněty.
- V případě nejasností nebo dotazů týkajících se používání přístroje se na nás neváhejte obrátit. Telefon: **737 196 160** E-mail: mh@santadria.cz

Právní vymezení výrobku

Tento výrobek je určen výhradně ke **kosmetickému, estetickému a wellness použití**.

Přístroj **není zdravotnickým prostředkem, není určen k diagnostice, prevenci, sledování, zmírňování ani léčbě jakýchkoli onemocnění** a nenahrazuje odbornou zdravotní péči.

Veškeré popisy účinků v tomto návodu se vztahují **výhradně k vizuálnímu, subjektivnímu nebo pocitovému vnímání** v rámci kosmetické péče.

Výsledky použití se mohou **výrazně lišit v závislosti na individuálních vlastnostech uživatele, způsobu použití a frekvenci aplikace**. Výrobce ani distributor **nezaručují dosažení konkrétního výsledku**.

K dispozici je vám náš produktový manažer a odborný konzultant **Martin Hrbek**, který vám poskytne potřebné informace. Návod k použití si prosím uschovejte pro případné pozdější použití. Přejeme vám, aby vám přístroj dobře sloužil a splnil vaše očekávání v oblasti kosmetického použití.

Tým BeautyRelax.cz

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Stimulace vybraných oblastí těla pomocí laserového světla je v oblasti estetických a wellness procedur považována za jednu z velmi šetrných technologií dostupných na trhu. Používané zařízení spadá do kategorie **neinvazivních přístrojů**, při jejichž použití nedochází k narušení povrchu pokožky. Aplikační hlavice zůstává po celou dobu v kontaktu pouze s povrchem kůže a žádná její část neproniká do hlubších struktur.

Během aplikace nedochází k mechanickému poškození pokožky ani ke vzniku modřin či podlitin. Laserové světlo působí povrchově a při správném použití dle návodu k obsluze nemá negativní vliv na jemné cévní struktury v podkoží.



Při dodržení doporučené doby a frekvence použití uvedené výrobcem představuje tato technologie **minimální zátěž pro organismus**. Díky svým vlastnostem a uživatelskému komfortu se přístroje využívající laserové světlo postupně rozšířily do provozoven zaměřených na estetickou péči, masáže a kosmetické služby. V současné době jsou běžně dostupné v masážních, kosmetických a estetických studiích napříč Českou republikou.

Při komerčním používání přístroje je provozovatel povinen dodržovat veškeré platné hygienické, bezpečnostní a právní předpisy vztahující se k poskytování kosmetických a wellness služeb. Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za způsob poskytování služby koncovým zákazníkům ani za splnění zákonných povinností provozovatele.

Při provozu přístroje v komerčním prostředí je nutné dbát na dodržování základních hygienických zásad. Po každém uživateli je třeba povrch aplikačních hlavic očistit a dezinfikovat. K tomuto účelu postačuje použití dezinfekčního prostředku na bázi alkoholu naneseného na čistý hadřík, kterým se povrch aplikátorů setře. Následně je nutné hlavice důkladně osušit.

Estetický přístroj BeautyRelax využívá laserové světlo **bezpečnostní třídy I**. Podmínky pro komerční provoz přístrojů pracujících s touto technologií se v jednotlivých členských státech Evropské unie liší a řídí se platnou národní legislativou. Zpravidla je vyžadováno provozování živnosti nebo obchodní společnosti, jelikož je služba poskytována veřejnosti za úplatu.

V některých zemích postačuje absolvování kosmetického nebo masérského kurzu, jinde mohou být stanoveny vyšší kvalifikační požadavky, například zdravotnické vzdělání. Vždy je nezbytné řídit se aktuálními právními předpisy daného státu, které vymezují podmínky pro používání zařízení pracujících s laserovým nebo světelným zdrojem.

POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. **Ultrazvukové vlny a radiofrekvence** se tak mohou na pleť lépe navázat. Při použití aplikačními hlavicemi s těmito technologiemi **nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.**



UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtete tento návod k obsluze, seznámte se se všemi vyobrazeními a návod si uschovejte pro případné pozdější použití.
- Nepoužívejte přístroj na pokožce postižené závažným kožním onemocněním, otevřenými ranami nebo podrážděním. V případě pochybností o vhodnosti používání přístroje doporučíme konzultaci s lékařem.
- Pokud je přístroj používán více osobami, je nutné dodržovat zvýšené hygienické standardy. Po každém použití je třeba aplikační hlavice očistit a dezinfikovat vhodným prostředkem určeným pro povrchy přicházející do styku s pokožkou.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je mechanicky poškozený, nefunguje správně nebo byl vystaven působení vody.
- V případě poškození přístroje se nedotýkejte jeho vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem, může dojít k jeho poškození. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí (např. koupelna, sprcha, bazén).
- Přístroj není vodotěsný ani omyvatelný. Nesmí být ponořen do vody ani čištěn pod tekoucí vodou.
- Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Po každém použití jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě, pokud je to relevantní.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny, aby se zabránilo vzniku kondenzace.
- Přístroj není určen k používání dětmi ani osobami, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti neumožňují bezpečné používání bez dozoru.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na zdrojích tepla nebo v jejich bezprostřední blízkosti (např. radiátory, kamna, otevřený oheň).
- Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat, upravovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém a čistém prostředí, chráněném před prachem a vlhkostí.
- Během používání přístroj žádným způsobem nezakrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Distributor nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v rozporu s tímto návodem k obsluze nebo bezpečnostními pokyny.
- Za škody na zdraví nebo majetku vzniklé v důsledku jiného než určeného způsobu použití přístroje nenese distributor odpovědnost v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT

Použití přístroje se nedoporučuje osobám s následujícími zdravotními stavy.

- těhotenství
- nádorové onemocnění (aktuální nebo v anamnéze)
- kardiovaskulární onemocnění (včetně závažných srdečních onemocnění)
- implantovaný kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát
- epilepsie
- závažné poruchy nervového systému
- závažné poruchy imunitního systému
- žilní trombóza
- závažné poruchy krevního oběhu
- závažné poruchy srážlivosti krve
- těžká cukrovka (diabetes mellitus v závažném stadiu)
- závažné onemocnění jater nebo ledvin
- velmi vysoké hodnoty cholesterolu
- akutní virové onemocnění
- stav vysokých horeček
- anafylaxe
- chronický únavový syndrom
- hypertyreózou
- hypotyreózou
- jinými závažnými hormonálními poruchami
- polycystickými vaječníky
- na pokožce postižené aktivním kožním onemocněním
- na otevřených ranách, zánětech nebo podrážděné pokožce
- při fotosenzitivních kožních onemocněních
- v místě výskytu kovových implantátů nebo cizích těles
(výjimku tvoří zubní náhrady)
- u osob pod vlivem alkoholu nebo návykových látek
- u osob vyžadujících trvalý dohled
- během menstruace
- u osob, které nejsou schopny bezpečně vnímat průběh aplikace

V případě jakýchkoli pochybností o zdravotním stavu uživatele nebo vhodnosti použití přístroje **doporučujeme konzultaci s praktickým lékařem** před zahájením aplikace.

ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK

- Hlava
- Krk (přední i zadní strana)
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK

- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtky



Poznámka: párová oblast těla je brána jako jedna partie

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - RADIOFREKVENCE

- Obličej
- Krk
- Dekolt
- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Boční strana trupu
- Stehna
- Hýždě
- Lýtky



POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - LASER

- Podbradek
- Paže
- Břicho
- Boky
- Stehna
- Lýtka
- Hýždě



DOPORUČENÍ


Přístroj využívá vysoce výkonné optické diody generující **červené světlo s vlnovou délkou 650 nm**, které je používáno v oblasti neinvazivní estetické péče. Intenzita světla je nastavena tak, aby při dodržení pokynů výrobce poskytovala požadované estetické účinky.

- Při používání přístroje se vždy vyhněte přímému pohledu do zdroje červeného světla.
- Před aktivací červeného světla si vždy nasadte ochranné textilní brýle, které jsou součástí balení.
- Přímé nasvícení očí může vést k poškození zraku.
- Přístroj nejprve správně přiložte na vybranou část těla, nasadte ochranné brýle a teprve poté aktivujte působení červeného světla.

Dodržování těchto pokynů je nezbytné pro bezpečné používání přístroje.


LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při používání přístroje **BeautyRelax** se snažte vyhnout oblastem lymfatických uzlin. Letmý nebo náhodný dotyk těchto oblastí nevadí, **dlouhodobou nebo opakovanou stimulaci lymfatických uzlin však nedoporučujeme**. Poloha lymfatických uzlin je znázorněna **velkými zelenými tečkami**.

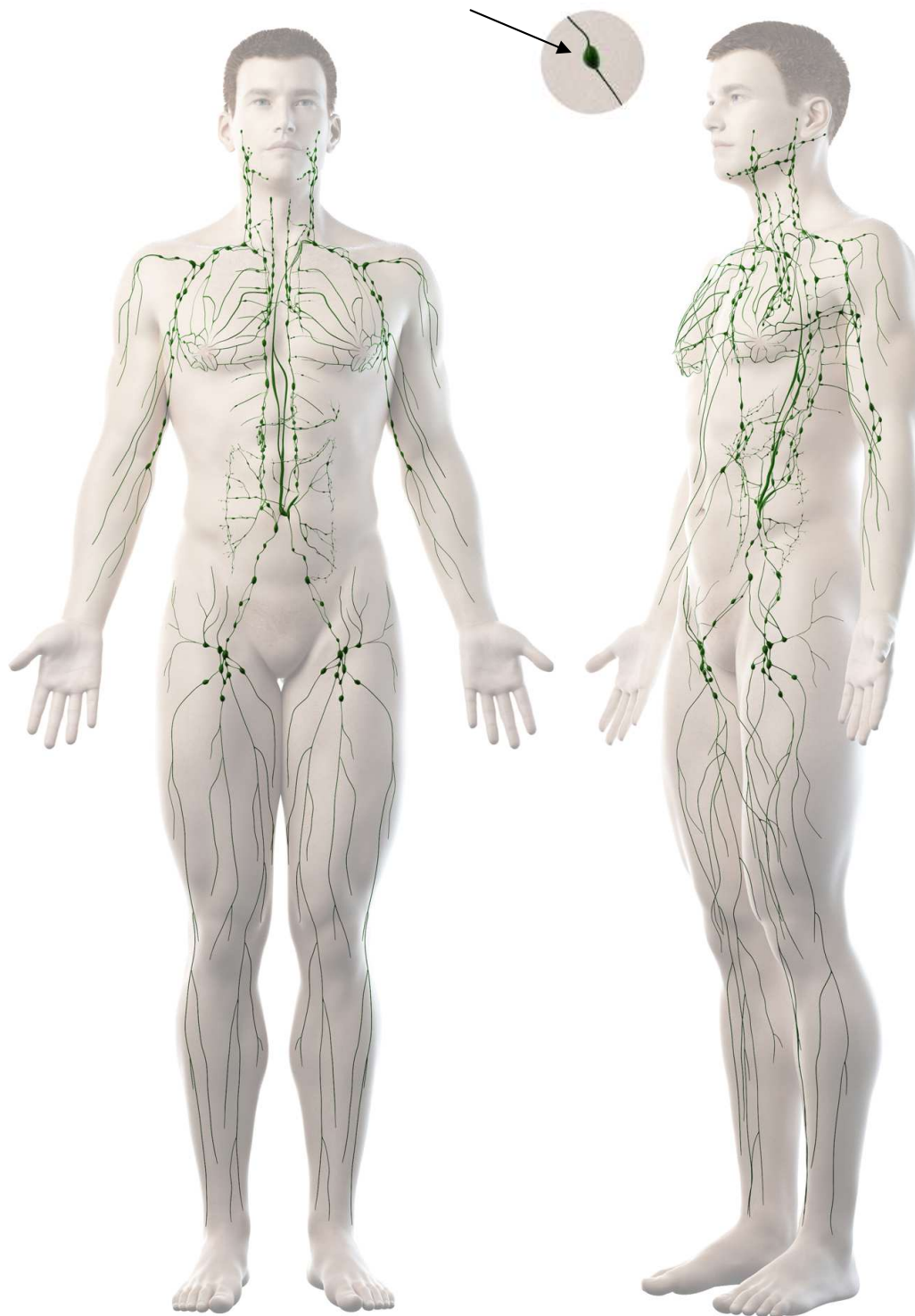


LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při používání přístroje **BeautyRelax** se snažte vyhnout oblastem lymfatických uzlin. Letmý nebo náhodný dotyk těchto oblastí nevadí, **dlouhodobou nebo opakovanou stimulaci lymfatických uzlin však nedoporučujeme**. Poloha lymfatických uzlin je znázorněna **velkými zelenými tečkami**.

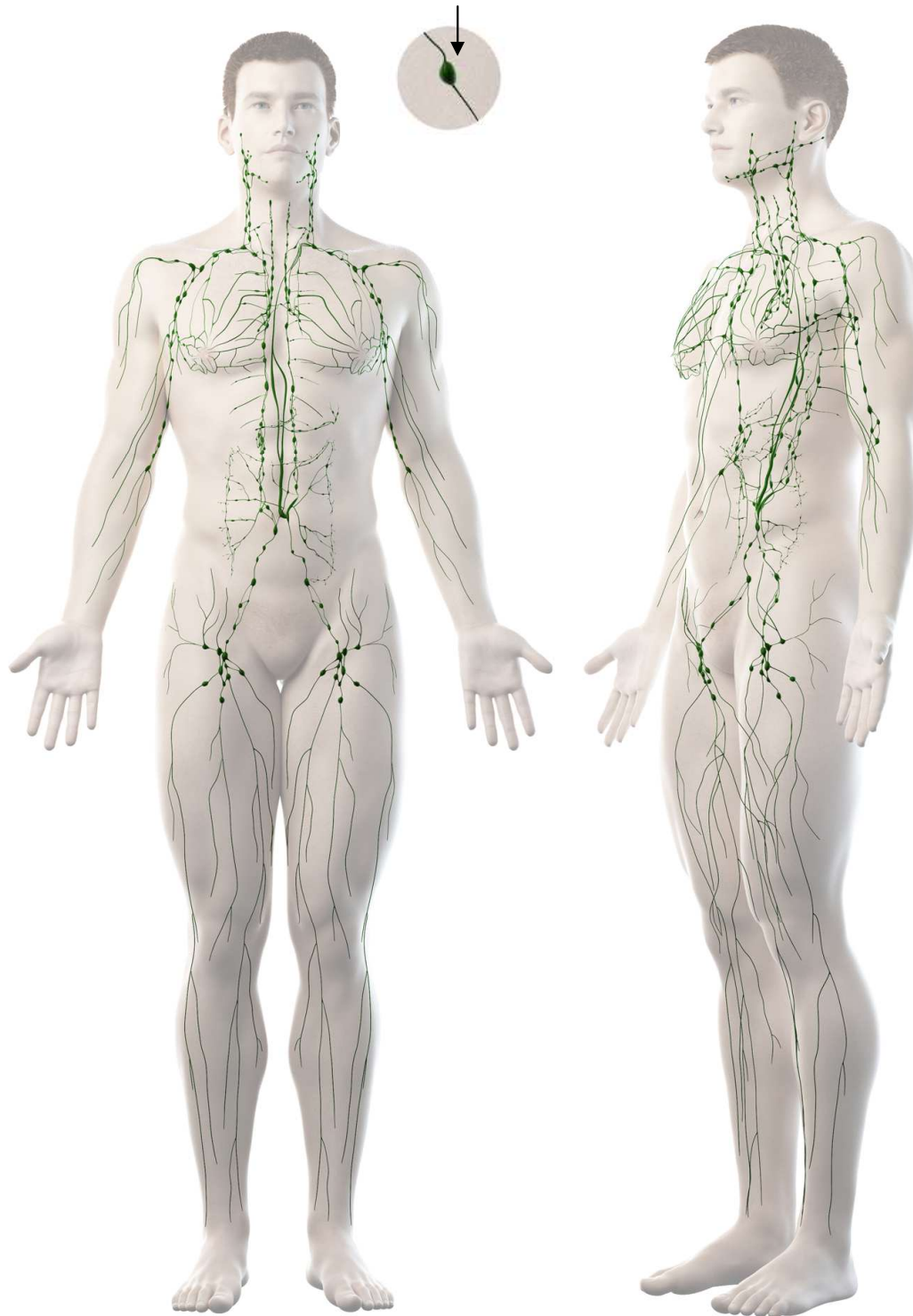

LYMFATICKÉ UZLINY - ULTRAZVUK

Při používání přístroje **BeautyRelax** se snažte vyhnout oblastem lymfatických uzlin. Letmý nebo náhodný dotyk těchto oblastí nevadí, **dlouhodobou nebo opakovanou stimulaci lymfatických uzlin však nedoporučujeme**. Poloha lymfatických uzlin je znázorněna **velkými zelenými tečkami**.

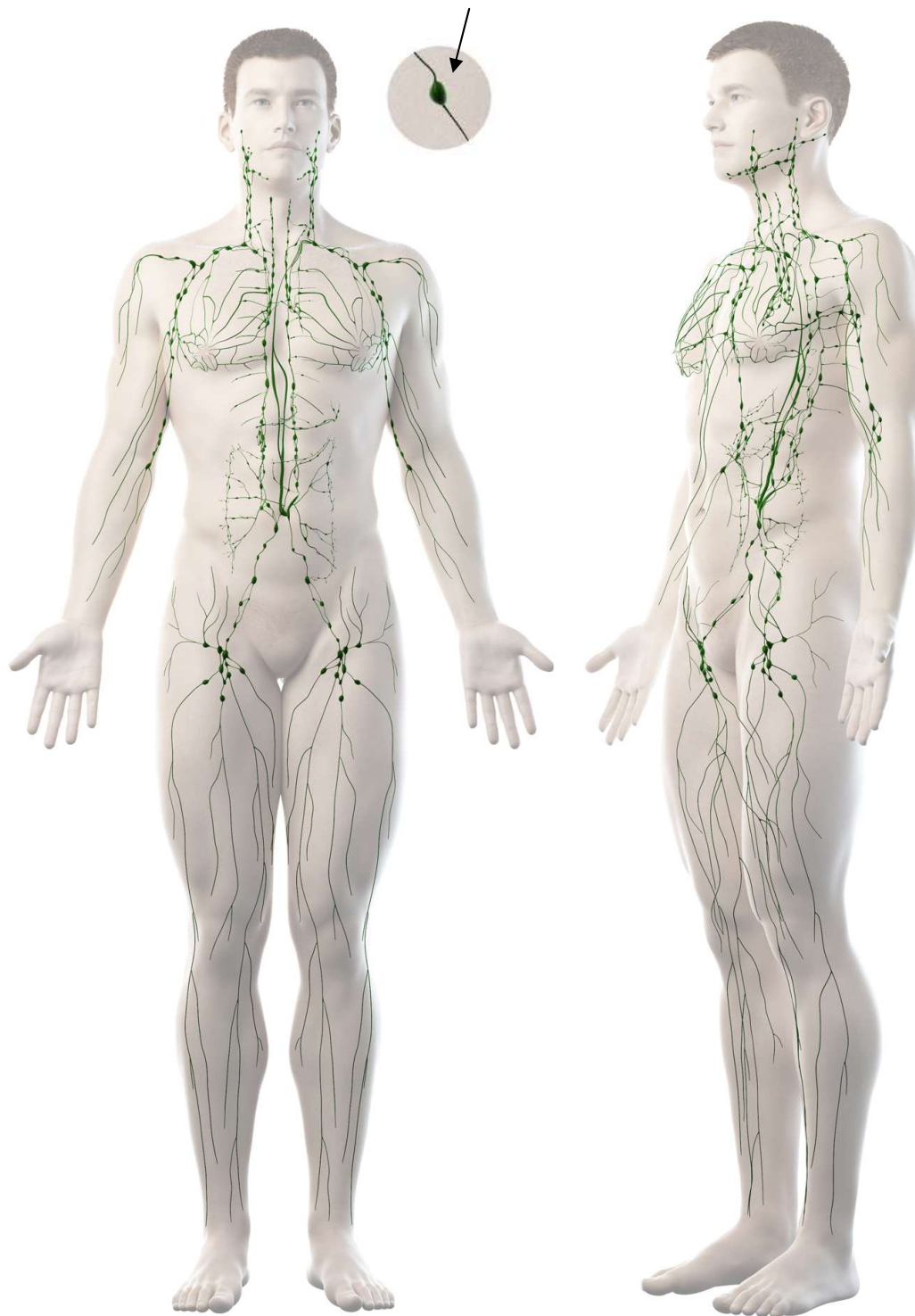

HLAVNÍ VÝHODY

- Podpora celkového vzhledu pokožky v oblasti obličeje
- Přispívá k vizuálnímu sjednocení a hladšímu vzhledu pleti
- Podpora pevnějšího a vypnutějšího vzhledu pokožky
- Vliv na strukturu pokožky z hlediska jejího vzhledu a elasticity
- Podpora zlepšení vzhledu pokožky v oblastech náchylných k nerovnostem
- Přispívá k vizuálnímu zmírnění viditelnosti strií a drobných nerovností pokožky
- Podpora subjektivního pocitu lehkosti v končetinách
- Vhodné pro práci s vybranými tělesnými partiemi zaměřenými na tvarování postavy
- Umožňuje lokální mechanickou stimulaci povrchových struktur pokožky
- Zcela neinvazivní způsob použití
- Použití bez narušení povrchu pokožky
- Použití bez bolesti a bez nepříjemných vjemů

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- Kombinace moderních technologií určených pro estetickou a wellness péči
- Navrženo jako komplexní přístroj pro práci s pokožkou obličeje i těla
- Neinvazivní charakter použití bez zásahu do pokožky
- Šetrné použití s důrazem na uživatelský komfort
- Nevyžaduje žádné omezení běžných denních aktivit
- Přístroj je koncipován pro pravidelné používání
- Změny ve vzhledu pokožky mohou být individuálně pozorovatelné při opakovaném použití
- Všestranné využití pro různé tělesné a obličejové oblasti
- Vhodné pro estetická, kosmetická a wellness studia
- Konstrukce navržena s ohledem na komerční provoz
- Vysoká kvalita použitých komponentů podporující dlouhou životnost zařízení

19 APLIKAČNÍCH HLAVIC

- 1x Hlavičce s radiofrekvencí – 3 aplikační kolíčky
- 1x Hlavičce s radiofrekvencí – 4 aplikační kolíčky
- 1x Hlavičce s radiofrekvencí – 6 aplikačních kolíčků
- 1x Hlavičce s vakuovou masáží velikost S
- 1x Hlavičce s vakuovou masáží velikost M
- 1x Hlavičce s vakuovou masáží velikost V
- 1x Hlavičce s elektroforézou a vyhříváním
- 1x Hlavičce s oscilací a vyhříváním
- 1x Hlavičce s ultrazvukem
- 1x Hlavičce pro robotickou maderoterapii
- 8x Aplikátor s laserovým světlem
- 1x Hlavičce s vysokofrekvenční oscilací

TECHNICKÉ PARAMETRY


- 19 aplikačních hlavic
- Technologie: radiofrekvence, podtlaková masáž, light bio heat, ultrazvuková kavitace, laserové světlo, vibrační terapie s vyhříváním, robotická maderoterapie, vysokofrekvenční oscilace
- Radiofrekvence: 1MHz & 5MHz
- Energie radiofrekvence: 0 až 50J/cm²
- Ultrazvuk: 80kHz
- Energie ultrazvuku: 5 až 30W/cm²
- Vlnová délka laseru: 650nm, bezpečnostní třída I
- Robotická maderoterapie: 3 rychlosti rotace
- Příkon: 500W
- Rozměry: 70x50x60cm
- Hmotnost: 50kg

OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka BeautyRelax BR-3089
- 1x Hlavičce s radiofrekvencí – 3 aplikační kolíčky
- 1x Hlavičce s radiofrekvencí – 4 aplikační kolíčky
- 1x Hlavičce s radiofrekvencí – 6 aplikačních kolíčků
- 1x Hlavičce s vakuovou masáží velikost S
- 1x Hlavičce s vakuovou masáží velikost M
- 1x Hlavičce s vakuovou masáží velikost V
- 1x Hlavičce s elektroforézou a vyhříváním
- 1x Hlavičce s oscilací a vyhříváním
- 1x Hlavičce s ultrazvukem
- 1x Hlavičce pro robotickou maderoterapii
- 8x Aplikátor s laserovým světlem
- 1x Hlavičce s vysokofrekvenční oscilací
- 1x Sonogel 250ml
- 1x Napájecí kabel 220V
- 1x Sada elastický popruh pro uchycení hlavic s laserovým světlem
- 1x Ochranné textilní brýle
- 1x Návod k obsluze

URČENO PRO VŠECHNY TYPY POSTAV

Používání přístroje **BeautyRelax** je vhodné pro ženy i muže bez ohledu na typ postavy nebo lokalizaci tukové tkáně. Použití je určeno osobám, které splňují podmínky uvedené v návodu k obsluze a **nevztahuje se na osoby, u nichž je uvedena některá ze stavů, kdy použití není doporučeno.**

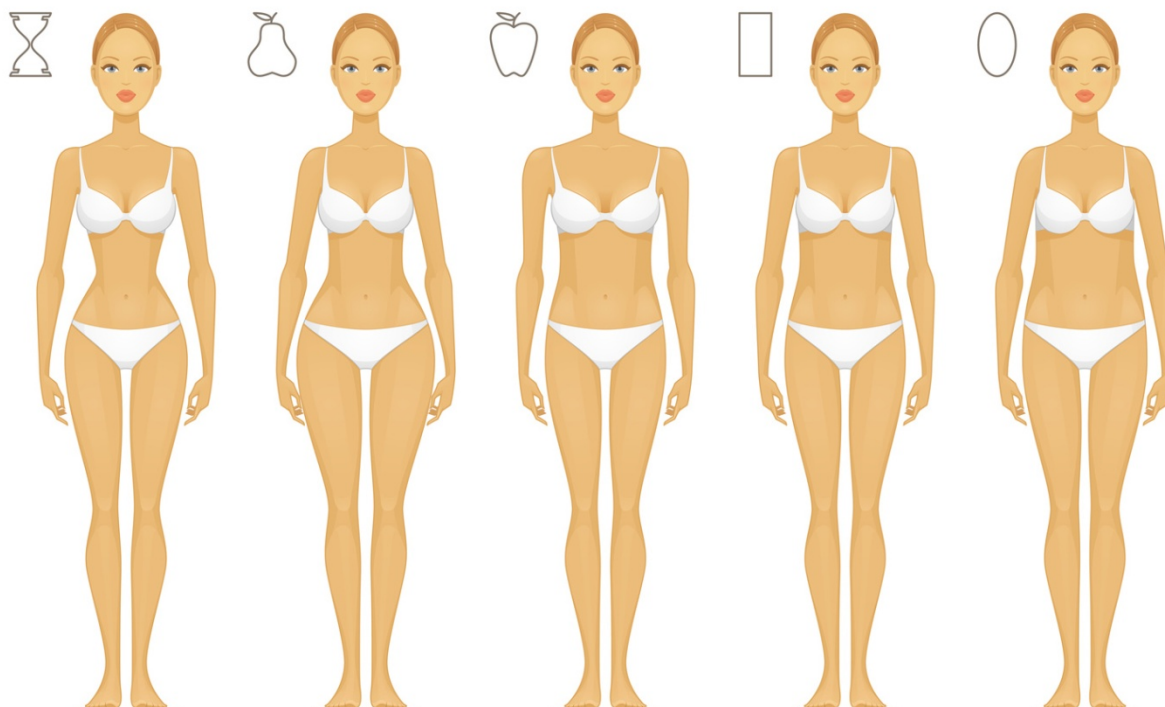

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o Vznik vrásek je přirozenou součástí procesu stárnutí pokožky. S přibývajícím věkem dochází k postupné ztrátě elasticity pleti a ke zpomalení buněčné obnovy. Tyto změny vedou ke snížení přirozené produkce kolagenu, který je klíčový pro pevnost a pružnost pokožky. V důsledku těchto procesů se na povrchu pleti objevují rýhy, které se postupně prohlubují a mohou zasahovat až do vrstvy dermis, tedy podpůrné vrstvy kůže.



Výsledkem je pleť s viditelnějšími a hlubšími vráskami. Vrásky lze rozdělit do dvou základních skupin. Dynamické vrásky vznikají opakovaným stahováním obličejových svalů a obvykle se začínají objevovat přibližně kolem 35. roku života. Statické vrásky jsou důsledkem povolení hlubších vrstev kůže a snížené tvorby kolagenu a zpravidla se objevují kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti péče o vrásky lze rozdělit na invazivní a neinvazivní. Invazivní metody zahrnují chirurgické zákroky nebo injekční aplikace, při nichž dochází k narušení povrchu pokožky. Tyto postupy jsou spojeny s vyšší zátěží pro organismus a delší dobou rekonvalescence. Neinvazivní metody zahrnují používání kosmetických přípravků, jako jsou krémy, gely, oleje nebo séra, a také přístrojové aplikace využívající technologie určené k povrchové stimulaci pokožky. Tyto technologie se zaměřují na podporu přirozených procesů v pleti, zejména stimulaci kolagenních a elastických vláken. Mezi často využívané neinvazivní technologie patří radiofrekvence, která je oblíbená pro svůj příznivý poměr mezi šetrností a estetickým efektem při pravidelném používání.

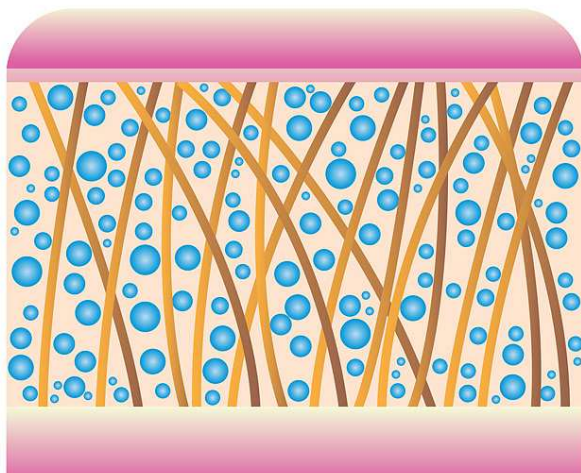

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

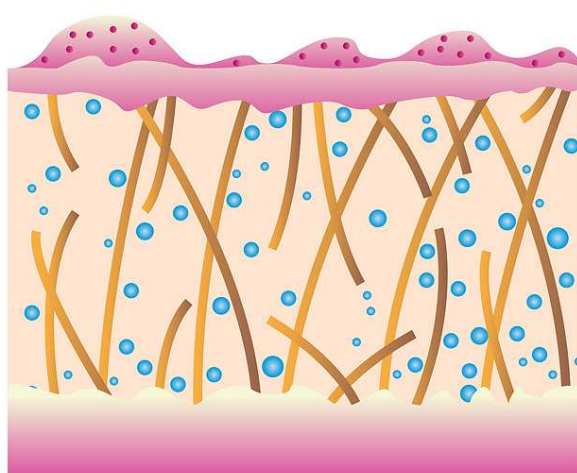

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Rollskin BodyShape Madero Professional Sculptor kombinuje moderní technologie určené pro **estetickou a wellness péči zaměřenou na tvarování postavy a práci s pokožkou**. Přístroj využívá několik technologických režimů, mezi které patří radiofrekvence v různých variantách, vakuová stimulace v kombinaci s radiofrekvencí, Light Bio Heat, ultrazvuk, laserové světlo, vibrační stimulace s vyhříváním a inovativní robotická rotační maderotechnologie.

Zařízení je navrženo pro **podporu vzhledu pokožky**, zlepšení její struktury a práce s vybranými tělesnými partiemi z hlediska jejich tvarování. Přístroj umožňuje cílenou mechanickou a povrchovou stimulaci, která je zaměřena na oblasti náchylné k nerovnostem pokožky a změnám jejího vzhledu.

Použití přístroje je **neinvazivní**, bez narušení povrchu pokožky a s důrazem na uživatelský komfort. Jednotlivé aplikační režimy jsou navrženy tak, aby při dodržení pokynů výrobce umožňovaly bezpečné a pohodlné použití. Změny ve vzhledu pokožky a kontur těla mohou být individuálně pozorovatelné při pravidelném používání.

BeautyRelax Rollskin BodyShape Madero Professional Sculptor je určen pro profesionální provozy v oblasti kosmetické, estetické a wellness péče a představuje moderní řešení pro studia zaměřená na práci s postavou a pokožkou v rámci neinvazivních estetických procedur.

- 1. RADIOFREKVENCE**
- 2. VAKUOVÁ MASÁŽ S RADIOFREKVENCÍ A SVĚTELNOU TERAPIÍ**
- 3. ELEKTROFORÉZA S VYHŘÍVÁNÍM**
- 4. VYSOKOFREKVENČNÍ OSCILACE S VYHŘÍVÁNÍM**
- 5. ULTRAZVUKOVÉ VLNY**
- 6. LASEROVÉ SVĚTLO**
- 7. ROBOTICKÁ MADEROTERAPIE**
- 8. VYSOKOFREKVENČNÍ OSCILACE**

RADIOFREKVENCE

Aplikační hlavice generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Ukončete experimenty s kosmetickými krémy slibující „zázračné omlazení“ s svěřte svoji pleť do „rukou“ špičkové technologie!



RADIOFREKVENCE VE TŘECH PROVEDENÍCH

- **HLAVICE SE *TŘEMI* KOLÍČKY**
- **HLAVICE SE *ČTYŘMI* KOLÍČKY**
- **HLAVICE SE *ŠESTI* KOLÍČKY**

Různé typy aplikačních hlavic s radiofrekvencí využijete na partie těla s různou velikostí. Použití aplikačních hlavic s radiofrekvencí je vždy spojeno se sonogelem.

VAKUOVÁ MASÁŽ S RADIOFREKVENCÍ A FOTONOVÝM SVĚTLEM

Vakuová masáž je v oblasti estetické a wellness péče využívána jako **mechanická stimulace pokožky a podkožních struktur**, zaměřená na zlepšení vzhledu pokožky v oblastech se sklonem k nerovnostem. Působení podtlaku v kombinaci s pohybem aplikační hlavice umožňuje intenzivní práci s vybranými tělesnými partiemi a přispívá k jejich celkovému vzhledu a konturám. Podtlakové působení vytváří **opakovaný mechanický efekt**, který podporuje prokrvení pokožky a může vést k vizuálnímu zjemnění její struktury. Při pravidelném používání lze pozorovat změny ve vzhledu oblastí označovaných jako „pomerančová“ kůže. Použití je neinvazivní a zaměřené na uživatelský komfort.

Aplikační hlavice s vakuovým sáním

(s doplňkovou funkcí radiofrekvence a červeného světla)

Proces probíhá cyklicky v několika krocích:

1. Vytvoření podtlaku a přisátí pokožky
2. Plynulý pohyb aplikátoru po vybraných částech těla
3. Postupné uvolnění podtlaku
4. Současné působení radiofrekvence dle zvoleného režimu

Kombinace podtlaku a řízeného pohybu aplikační hlavice vytváří **intenzivní mechanickou stimulaci pokožky**, která se přizpůsobuje tvarům těla a umožňuje snadnou práci i v obtížně přístupných oblastech. Okraj hlavice působí na povrch pokožky kompresně, což podporuje její celkový vzhled a napětí. Doplňková funkce radiofrekvence přispívá k **zahřívacímu efektu pokožky** a podporuje její vizuální kondici. Celý proces je navržen s důrazem na bezpečné, pohodlné a neinvazivní použití při dodržení pokynů v tomto návodu k obsluze.



ELEKTROFORÉZA S VYHŘÍVÁNÍM

Technologie elektroforézy představuje **moderní technologický postup využívaný v kosmetické a estetické péči**, jehož cílem je podpora rovnoměrného a cíleného zapracování kosmetických přípravků na povrch pokožky a do jejích svrchních vrstev. Metoda je založena na působení **elektrického proudu nízké intenzity**, který napomáhá distribuci vybraných složek kosmetických přípravků v místě aplikace. V kosmetické praxi je elektroforéza využívána jako **neinvazivní alternativa** k mechanickým nebo invazivním způsobům aplikace. Nedochází při ní k porušení povrchu pokožky ani k použití jehel či jiných nástrojů zasahujících do kožní struktury. Použití je zaměřeno především na **zlepšení komfortu aplikace** a podporu využití kosmetických přípravků určených pro práci s pletí.



Proces je uživatelsky šetrný a obvykle vnímán jako příjemný. Díky nízké intenzitě použitého proudu je technologie vhodná i pro osoby s citlivější pokožkou, pokud je používána v souladu s pokyny výrobce a doporučeními pro daný typ pleti.

Aplikační hlavice s funkcí elektroforézy je doplněna o **integrované vyhřívání**, které vytváří jemný tepelný efekt na povrchu pokožky. Tento efekt přispívá k uvolněnému a komfortnímu průběhu aplikace a může podpořit rovnoměrné rozložení kosmetického přípravku na pokožce.

Vlastnosti a přínosy technologie elektroforézy

- Podpora rovnoměrného zapracování kosmetických přípravků
- Komfortní a neinvazivní způsob použití
- Použití bez narušení povrchu pokožky
- Vhodné pro různé typy pleti při dodržení doporučeného postupu
- Šetrné působení s důrazem na bezpečnost a uživatelský komfort

Technologie elektroforézy je určena pro **kosmetickou a estetickou péči** a je navržena jako podpůrný nástroj pro práci s kosmetickými přípravky. Při pravidelném používání mohou být individuálně pozorovatelné změny ve vzhledu pleti a celkovém pocitu komfortu. Díky svému neinvazivnímu charakteru je vhodná pro profesionální i pokročilé kosmetické použití v souladu s platnými hygienickými a provozními požadavky.

VYSOKOFREKVENČNÍ OSCILACE S VYHŘÍVÁNÍM

Oscilační masáž v kombinaci s tepelným působením představuje **mechanickou a povrchovou stimulaci**, která je využívána v oblasti wellness a estetické péče. Řízené vibrace společně s vyhříváním vytvářejí příjemný pocit uvolnění a přispívají k celkovému komfortu při použití. Technologie je zaměřena na práci s povrchovými strukturami těla a pokožky bez narušení jejich integrity.



Tepelný efekt podporuje pocit prohřátí dané oblasti a zvyšuje komfort během aplikace. V kombinaci s oscilačním pohybem může přispívat k lepšímu subjektivnímu vnímání pružnosti pokožky a k celkově uvolněnému pocitu v masírovaných partiích. Tato kombinace je často využívána jako doplněk dalších estetických a wellness technologií.

Charakteristiky kombinace vibrační masáže a vyhřívání

1. Pocit uvolnění a komfortu

Oscilační pohyb vytváří rytmickou mechanickou stimulaci, která je běžně vnímána jako příjemná a relaxační. Vyhřívání přispívá k pocitu tepla a pohodlí v místě použití.

2. Podpora příjemného prokrvení povrchu pokožky

Vibrace a teplo působí na povrchové vrstvy pokožky, což může vést k dočasnému pocitu prohřátí a zvýšeného prokrvení v dané oblasti.

3. Zmírnění pocitu ztuhlosti

Kombinace mechanické stimulace a tepla je často využívána ke zmírnění subjektivního pocitu napětí vznikajícího například při dlouhodobém sezení nebo jednostranné zátěži.

4. Podpora pocitu pohyblivosti

Pravidelné používání může přispívat k lepšímu subjektivnímu vnímání flexibility a volnosti pohybu v daných partiích.

5. Relaxační účinek

Oscilační masáž s vyhříváním je zaměřena také na celkové uvolnění a navozuje pocit relaxace a psychické pohody, což je častým důvodem jejího využití v rámci wellness péče.

6. Podpora vzhledu pokožky

Mechanická stimulace povrchu pokožky může přispět k jejímu hladšímu a sjednocenějšímu vzhledu. Tepelný efekt podporuje příjemný kontakt pokožky s kosmetickými přípravky používanými při aplikaci.

7. Pocit lehkosti v masírovaných oblastech

Kombinace vibrací a tepla je často spojována se subjektivním pocitem lehkosti a uvolnění v daných partiích, zejména při pravidelném používání.

Oscilační masáž s vyhříváním je určena pro **estetickou a wellness péči**, klade důraz na neinvazivní charakter, uživatelský komfort a bezpečné použití při dodržení pokynů výrobce. Změny ve vnímání komfortu, uvolnění a vzhledu pokožky mohou být individuální.

ULTRAZVUKOVÉ VLNY

Aplikační hlavice pracuje s **ultrazvukovými vlnami o stanovené frekvenci**, které jsou přenášeny do povrchových a hlubších vrstev podkoží bez narušení pokožky. Ultrazvuková energie je v místě použití rovnoměrně rozložena a vytváří **mechanický a vibrační efekt**, který je využíván v oblasti estetické a wellness péče zaměřené na práci s vybranými tělesnými partiemi.



Technologie je navržena pro **neinvazivní a komfortní použití**, při kterém uživatelé obvykle nevnímají bolest ani nepříjemné pocity. Působení ultrazvuku je zaměřeno na oblasti se změněnou strukturou podkožních vrstev a nerovnostmi povrchu pokožky, přičemž cílem je **podpora vzhledu kontur těla a celkového vzhledu pokožky**.

Ultrazvuková technologie je často využívána jako součást estetických procedur zaměřených na **tvarování postavy a zlepšení vizuální struktury pokožky**. Při pravidelném používání mohou být individuálně pozorovatelné změny ve vzhledu aplikovaných oblastí. Výsledky se mohou lišit v závislosti na způsobu použití, frekvenci aplikace a individuálních charakteristikách pokožky.

Použití je šetrné, bez mechanického poškození povrchu pokožky a bez nutnosti následného omezení běžných aktivit. Technologie je určena pro profesionální i pokročilé estetické použití při dodržení pokynů výrobce.

Frekvence ultrazvuku: 80 kHz

LASER

Laserové světlo je v oblasti estetické a wellness péče využíváno jako **neinvazivní světelná technologie určená pro práci s vybranými tělesnými partiemi**. Přístroj působí pomocí sady aplikačních modulů vybavených nízkourovňovým diodovým laserem o vlnové délce 650 nm a předem definovaném výkonu.

Světelná energie je aplikována **přes povrch pokožky bez jejího narušení** a je zaměřena na podkožní vrstvy v místech se zvýšeným objemem měkkých tkání. Použití je navrženo tak, aby bylo šetrné, komfortní a bezbolestné, přičemž uživatelé obvykle vnímají pouze mírný pocit tepla nebo žádné výrazné vjemy.

Laserová technologie je využívána především v rámci procedur zaměřených na **tvarování postavy a podporu vzhledu kontur těla**. Při pravidelném používání mohou být individuálně pozorovatelné změny ve vzhledu aplikovaných oblastí, přičemž výsledný efekt se může lišit v závislosti na zvolené intenzitě, frekvenci použití a individuálních vlastnostech pokožky.


Použití laserového světla je koncipováno jako **časově nenáročné**, bez nutnosti omezení běžných denních aktivit. Technologie je určena pro profesionální estetické a wellness provozy při dodržení pokynů výrobce.

Oblasti vhodné pro použití laserového světla

Laserové aplikační moduly lze využít na vybraných částech těla, zejména v oblastech se sklonem ke změnám objemu nebo kontur:

- oblast pod bradou
- paže
- oblast břicha
- boky
- stehna
- lýtka
- hýždě

K dispozici je několik úrovní výkonu, které umožňují přizpůsobení použití konkrétní oblasti a individuálním preferencím uživatele.

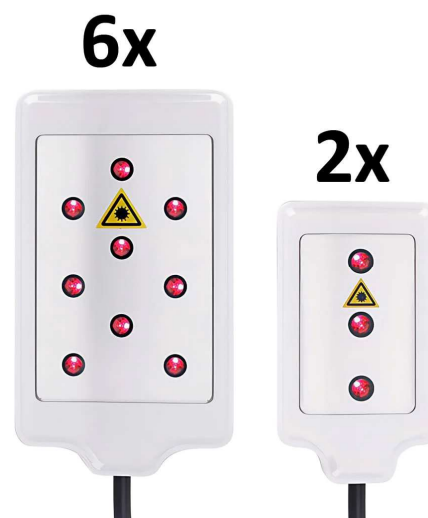

Charakteristiky technologie laserového světla

1. Neinvazivní charakter

Použití probíhá bez zásahu do pokožky a bez mechanického poškození povrchu.

2. Uživatelský komfort

Aplikace je zpravidla vnímána jako příjemná a nevyžaduje žádnou dobu rekonvalescence ani omezení běžného režimu.

3. Časová flexibilita

Technologie je vhodná pro pravidelné používání v kratších časových intervalech v porovnání s některými jinými estetickými metodami.

4. Přesné zacílení

Systém aplikačních modulů umožňuje soustředit působení na konkrétní partie dle potřeby.

ROBOTICKÁ MADEROTERAPIE

Maderotechnologie představuje **mechanickou masážní techniku využívající speciálně tvarované dřevěné nástroje**, navržené s ohledem na ergonomii lidského těla. Tyto nástroje umožňují cílený tlak a plynulý pohyb po povrchu pokožky, zejména v oblastech, kde je kladen důraz na práci s konturami těla a celkovým vzhledem pokožky.

Mechanické působení dřevěných nástrojů vytváří **intenzivní povrchovou stimulaci**, která je zaměřena na oblasti, jako jsou stehna, hýždě, boky, břicho, paže, záda, případně oblast pod bradou. Použití je neinvazivní a probíhá bez narušení pokožky.

Maderotechnologie je v oblasti estetické a wellness péče využívána především pro **podporu vzhledu pokožky**, zjemnění její struktury a zvýraznění tělesných kontur. Při pravidelném používání mohou být individuálně pozorovatelné změny ve vzhledu pokožky v místech se sklonem k nerovnoměrnosti.

Charakter použití a frekvence

Použití maderotechnologie je možné na většině tělesných partií, včetně dolních a horních končetin, trupu, zad, obličeje a oblasti krku. Díky použití přírodních dřevěných nástrojů je metoda často vnímána jako **přirozená a komfortní forma masáže**.

Frekvence použití se může lišit v závislosti na individuálních preferencích, zvolené intenzitě a zaměření aplikace. Pravidelné zařazení této techniky do estetické nebo wellness péče může přispívat k dlouhodobějšímu pocitu komfortu a ke zlepšení celkového vzhledu pokožky.

Charakteristiky masážní metody

- Podpora hladšího a sjednocenějšího vzhledu pokožky
- Mechanická stimulace povrchu pokožky a měkkých tkání
- Zvýraznění tělesných kontur z hlediska vizuálního dojmu
- Podpora tonizovaného a napnutějšího vzhledu pokožky
- Relaxační působení spojené s masážním pohybem
- Vhodné jako doplněk kosmetické a wellness péče
- Neinvazivní použití bez narušení povrchu pokožky

Maderotechnologie je určena pro **estetickou a wellness péči** a klade důraz na mechanické působení, přirozený charakter a uživatelský komfort. Výsledky a vnímané změny ve vzhledu pokožky mohou být individuální a závislé na způsobu a frekvenci použití.


MADEROTERAPIE PRO RŮZNÉ ČÁSTI TĚLA








POPIS HLAVNÍ NABÍDKY PŘÍSTROJE

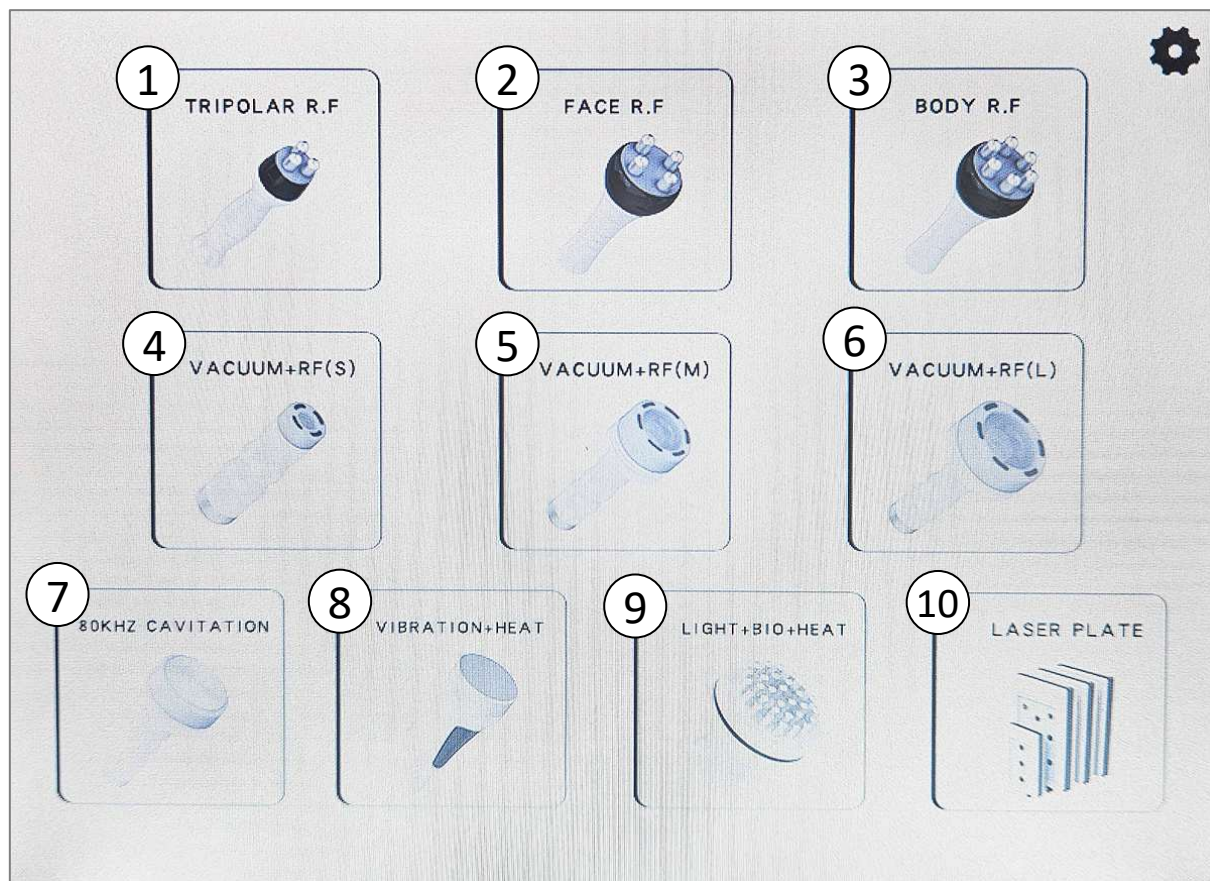

POPIS HLAVNÍ NABÍDKY PŘÍSTROJE


- 1.** Tlačítko funkce radiofrekvence v provedení se třemi kolíčky
- 2.** Tlačítko funkce radiofrekvence v provedení se čtyřmi kolíčky
- 3.** Tlačítko funkce radiofrekvence v provedení se šesti kolíčky
- 4.** Tlačítko funkce vakuové masáže s radiofrekvencí a světelnou terapií velikost S
- 5.** Tlačítko funkce vakuové masáže s radiofrekvencí a světelnou terapií velikost M
- 6.** Tlačítko funkce vakuové masáže s radiofrekvencí a světelnou terapií velikost L
- 7.** Tlačítko funkce ultrazvuku
- 8.** Tlačítko funkce vysokofrekvenčních oscilací a vyhřívání
- 9.** Tlačítko funkce elektroforézy a vyhřívání
- 10.** Tlačítko funkce laserového světla

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE – RADIOFREKVENCE SE TŘEMI APLIKAČNÍMI KOLÍČKY

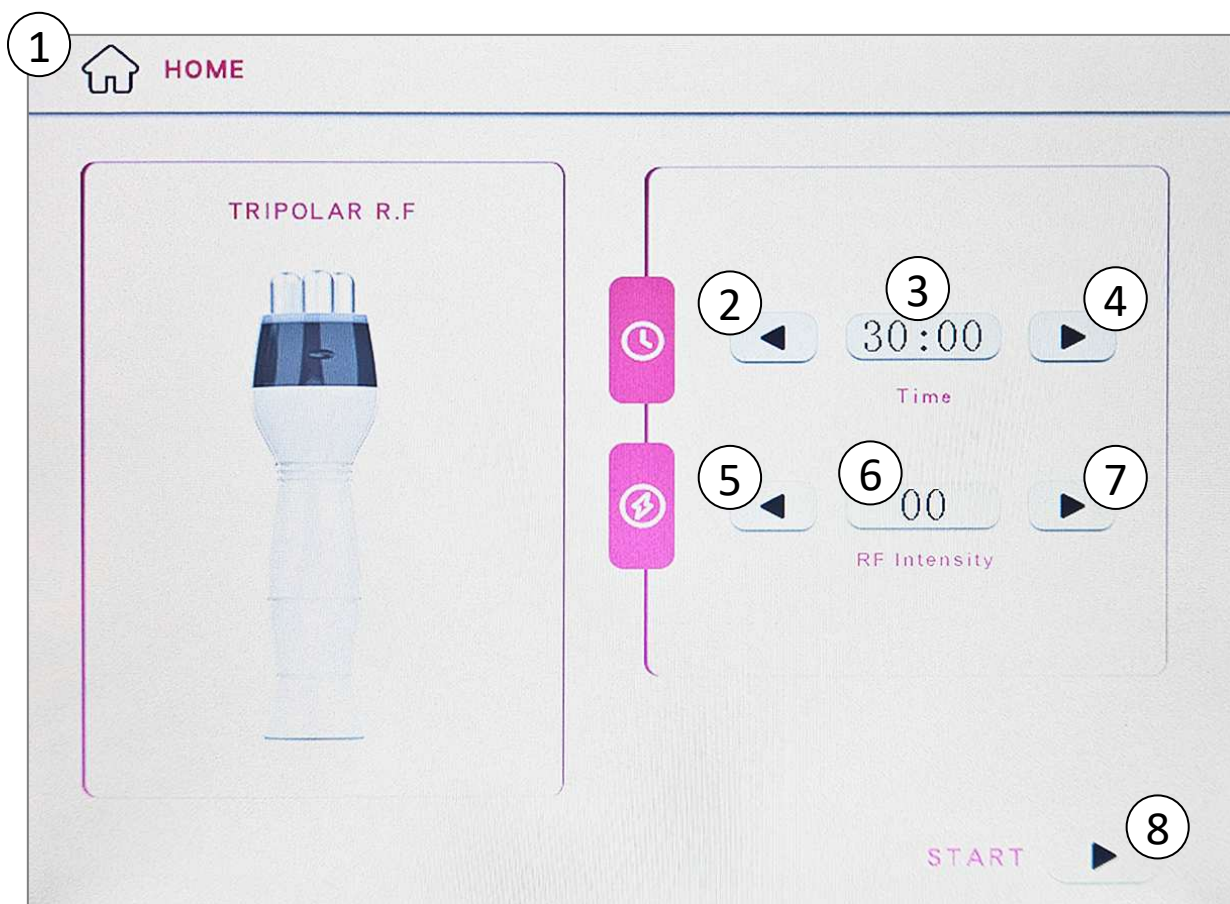


1. návrat do hlavní nabídky
2. snížení času
3. zbývajícím čas
4. zvýšení času
5. snížení intenzity radiofrekvence
6. zobrazení intenzity radiofrekvence
7. zvýšení intenzity radiofrekvence
8. tlačítko START/STOP

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE – RADIOFREKVENCE SE ČTYŘMI APLIKAČNÍMI KOLÍČKY

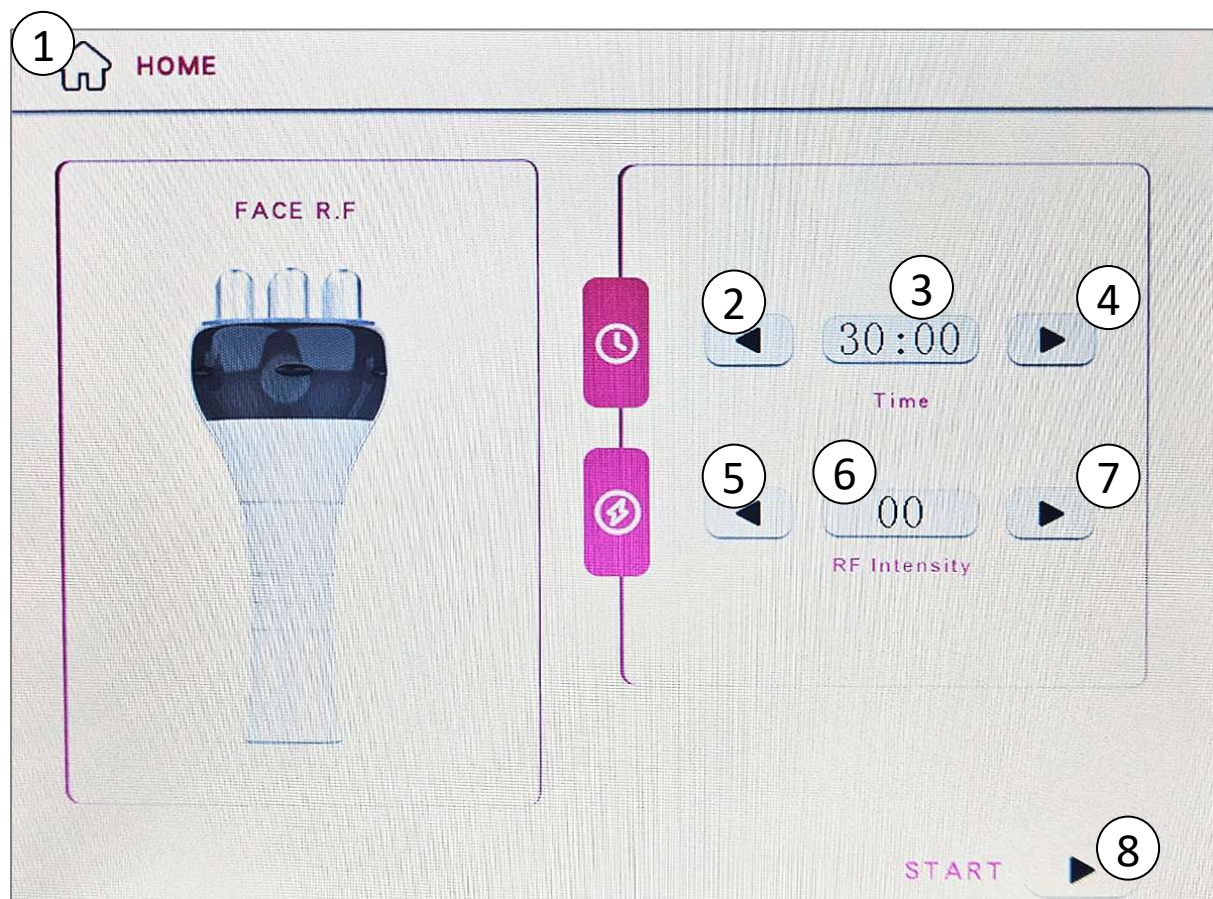

1. návrat do hlavní nabídky
2. snížení času
3. zbývajícím čas
4. zvýšení času
5. snížení intenzity radiofrekvence
6. zobrazení intenzity radiofrekvence
7. zvýšení intenzity radiofrekvence
8. tlačítko START/STOP

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE – RADIOFREKVENCE SE ŠESTI APLIKAČNÍMI KOLÍČKY

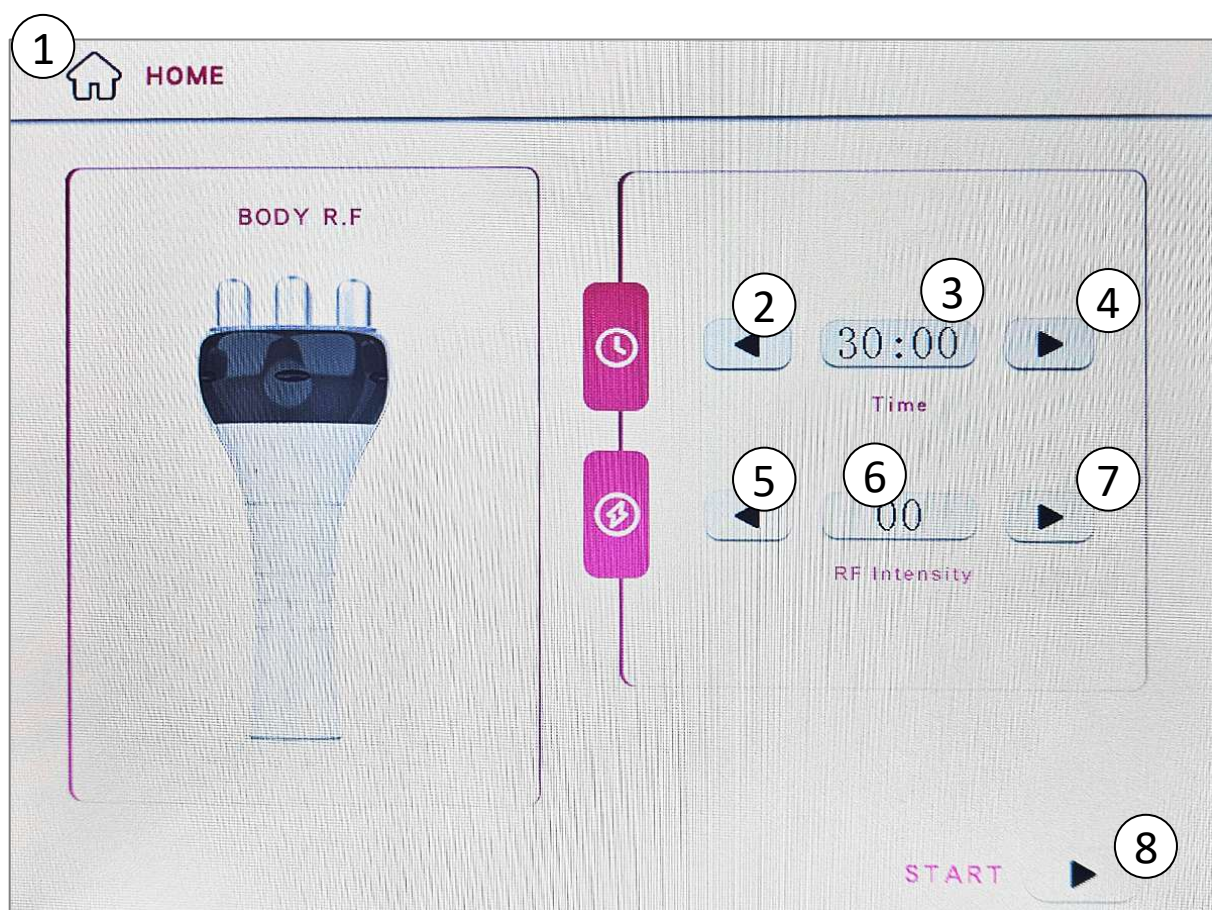


1. návrat do hlavní nabídky
2. snížení času
3. zbývajcí čas
4. zvýšení času
5. snížení intenzity radiofrekvence
6. zobrazení intenzity radiofrekvence
7. zvýšení intenzity radiofrekvence
8. tlačítko START/STOP

POUŽITÍ HLAVICE S RADIOFREKVENCÍ

- 1.** V menu přístroje zvolte funkci radiofrekvence dle typu hlavice, kterou se rozhodnete použít. K dispozici jsou hlavice se třemi, čtyřmi a šesti aplikačními kolíčky. Zvolte typ hlavice podle velikosti partie těla, kterou se rozhodnete s aplikační hlavicí aplikovat.
- 2.** Pomocí tlačítek **(5)** a **(7)** si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvence. Aktuálně zobrazená intenzita působení radiofrekvence je zobrazena na displeji **(6)**.
- 3.** Pomocí tlačítek **(2)** a **(4)** si můžete nastavit čas aplikace. Po uplynutí nastaveného času se funkce radiofrekvence vypne. Čas aplikace můžete libovolně měnit.
- 4.** Pomocí tlačítka **(8)** funkci radiofrekvence spustíte. Pomocí tlačítka **(8)** činnost funkce zastavíte.
- 5.** Pomocí tlačítka **(1)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.


OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE VAKUOVÁ HLAVICE VELIKOST S MALÁ (SMALL)

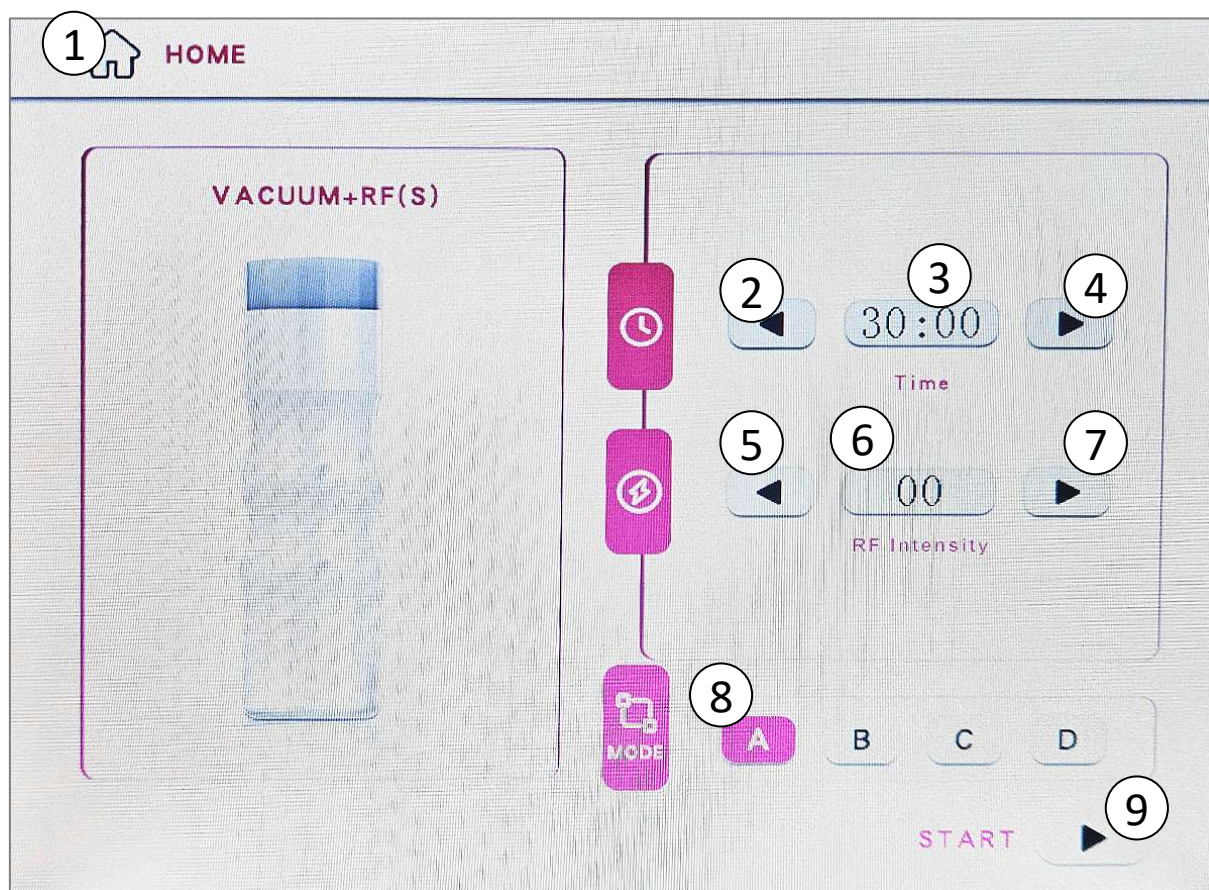

1. návrat do hlavní nabídky
2. snížení času
3. zbývajcí čas
4. zvýšení času
5. snížení intenzity radiofrekvence
6. zobrazení intenzity radiofrekvence
7. zvýšení intenzity radiofrekvence
8. režim působení radiofrekvence A,B,C,D
9. tlačítko START/STOP


OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE VAKUOVÁ HLAVICE

VELIKOST M STŘEDNÍ (MEDIUM)

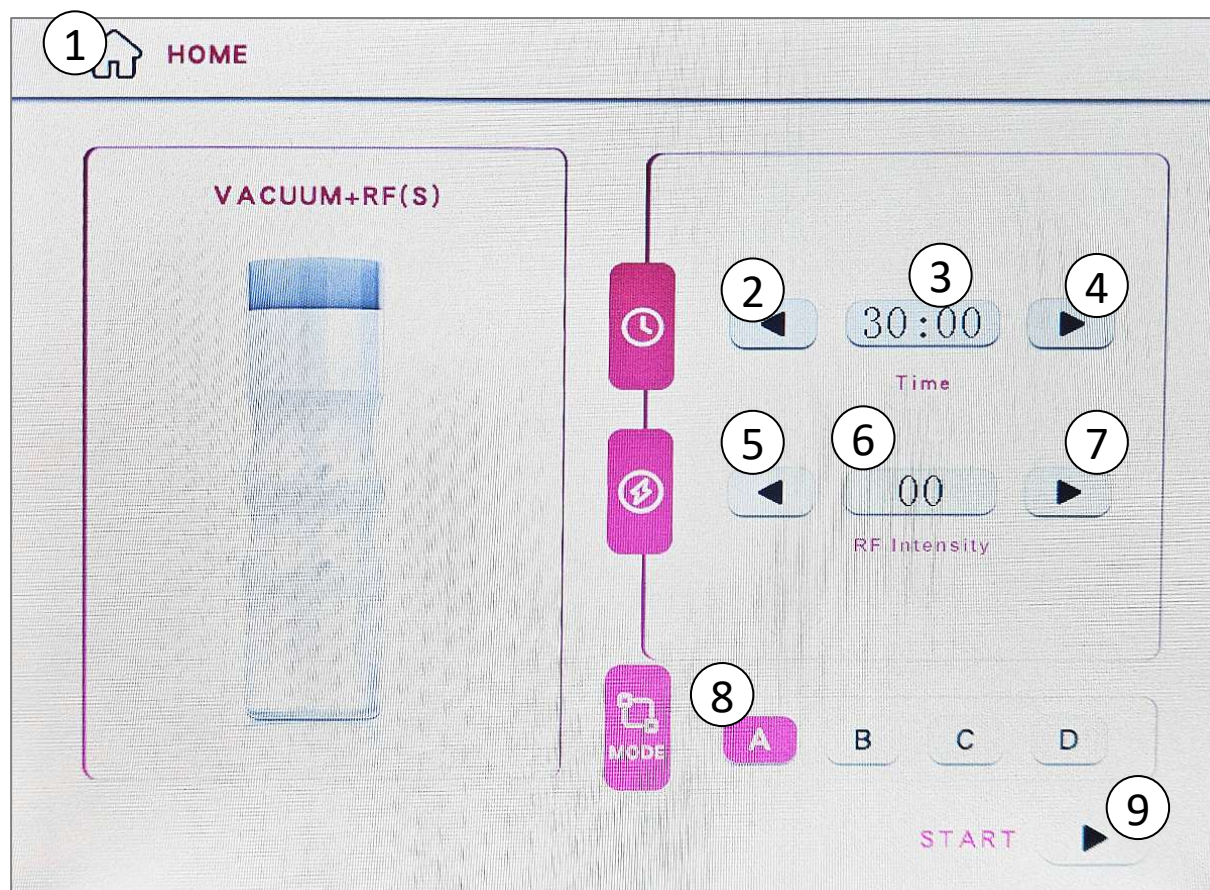

1. návrat do hlavní nabídky
2. snížení času
3. zbývajcí čas
4. zvýšení času
5. snížení intenzity radiofrekvence
6. zobrazení intenzity radiofrekvence
7. zvýšení intenzity radiofrekvence
8. režim působení radiofrekvence A,B,C,D
9. tlačítko START/STOP

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE VAKUOVÁ HLAVICE VELIKOST L VELKÁ (LARGE)

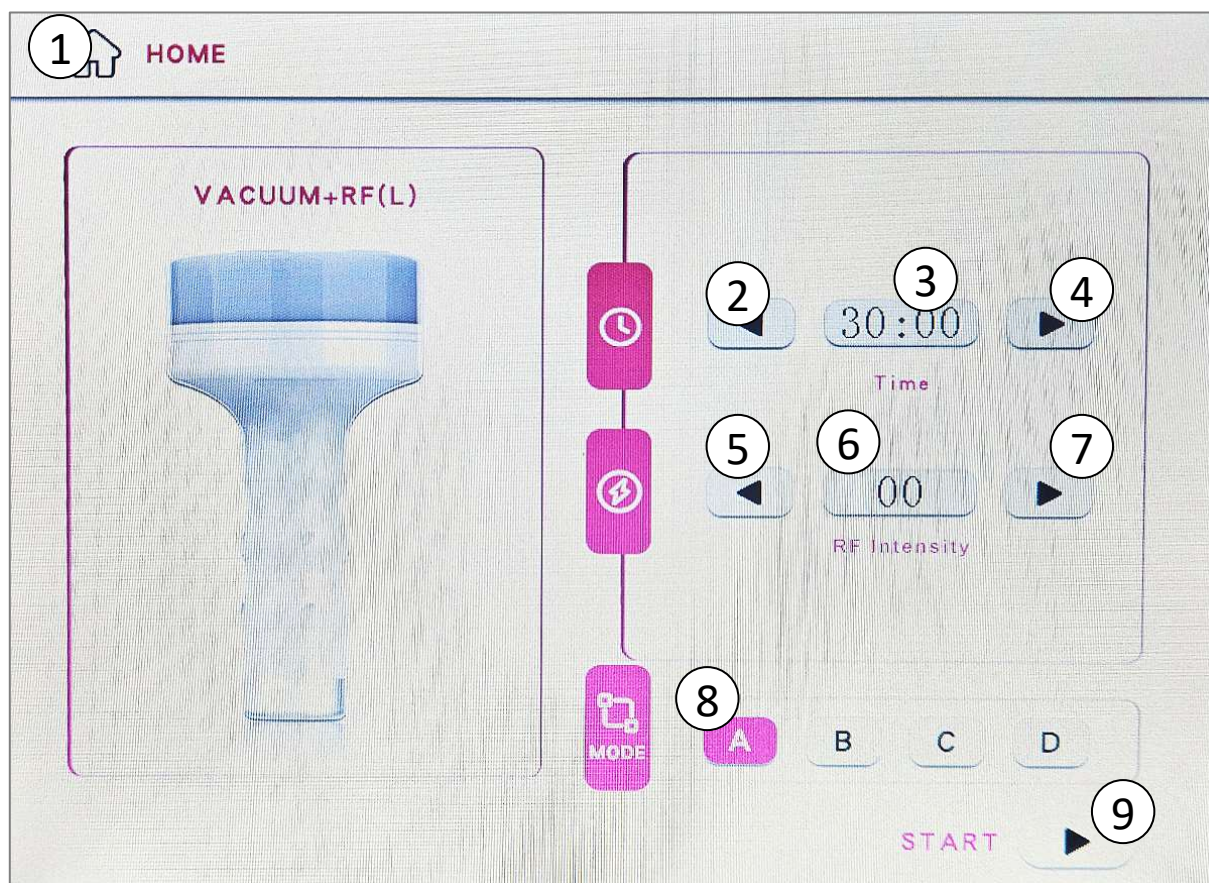


1. návrat do hlavní nabídky
2. snížení času
3. zbývajcí čas
4. zvýšení času
5. snížení intenzity radiofrekvence
6. zobrazení intenzity radiofrekvence
7. zvýšení intenzity radiofrekvence
8. režim působení radiofrekvence A,B,C,D
9. tlačítko START/STOP

POUŽITÍ HLAVICE S VAKUOVOU HLAVICÍ

- 1.** V menu přístroje zvolte funkci pro vakuovou masáž. K dispozici jsou 3 různé vakuové hlavice s různou velikostí - malá, střední, velká. Zvolte hlavici, která vám při použití na těle nejvíce vyhovuje. Pro malé partie těla použijte menší hlavici, na větší tělesné partie hlavici s větším průměrem. Použití aplikačních hlavic je spojeno se vzduchovým kabelem. Ten slouží pro použití se všemi 3 vakuovými hlavicemi. Vzduchový kabel jednoduše připojte k hlavici, se kterou chcete pracovat.
- 2.** Při použití vakuových hlavic mohou pracovat všechny 3 funkce současně – vakuum, radiofrekvence a světelná terapie. Světelná terapie je aktivní vždy. Výkon vakuového nasávání si můžete regulovat pomocí otočného tlačítka na zadní straně přístroje. Výkon působení radiofrekvence si můžete plynule dávkovat pomocí tlačítek na displeji.
- 3.** Pomocí tlačítek **(5)** a **(7)** si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvence. Aktuálně zobrazená intenzita působení radiofrekvence je zobrazena na displeji **(6)**.
- 4.** Pomocí tlačítek **(2)** a **(4)** si můžete nastavit čas aplikace. Po uplynutí nastaveného času se funkce ultrazvuku vypne. Čas aplikace můžete libovolně měnit.
- 5.** Pomocí tlačítek A B C D **(8)** si můžete nastavit program působení radiofrekvence. Každý program pracuje s různým intervalem působení radiofrekvence.
- 6.** Pomocí tlačítka **(9)** funkci vakuové hlavy spustíte. Pomocí tlačítka **(9)** činnost funkce zastavíte.
- 7.** Pomocí tlačítka **(1)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.
- 8.** Během přepojování aplikačních hlavic vždy dbejte maximální pozornost, aby nečistoty (zbytky masážního oleje) nevnikly do konektoru vzduchového kabelu.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE HLAVICE

S ELEKTROFORÉZOU A VYHŘÍVÁNÍM

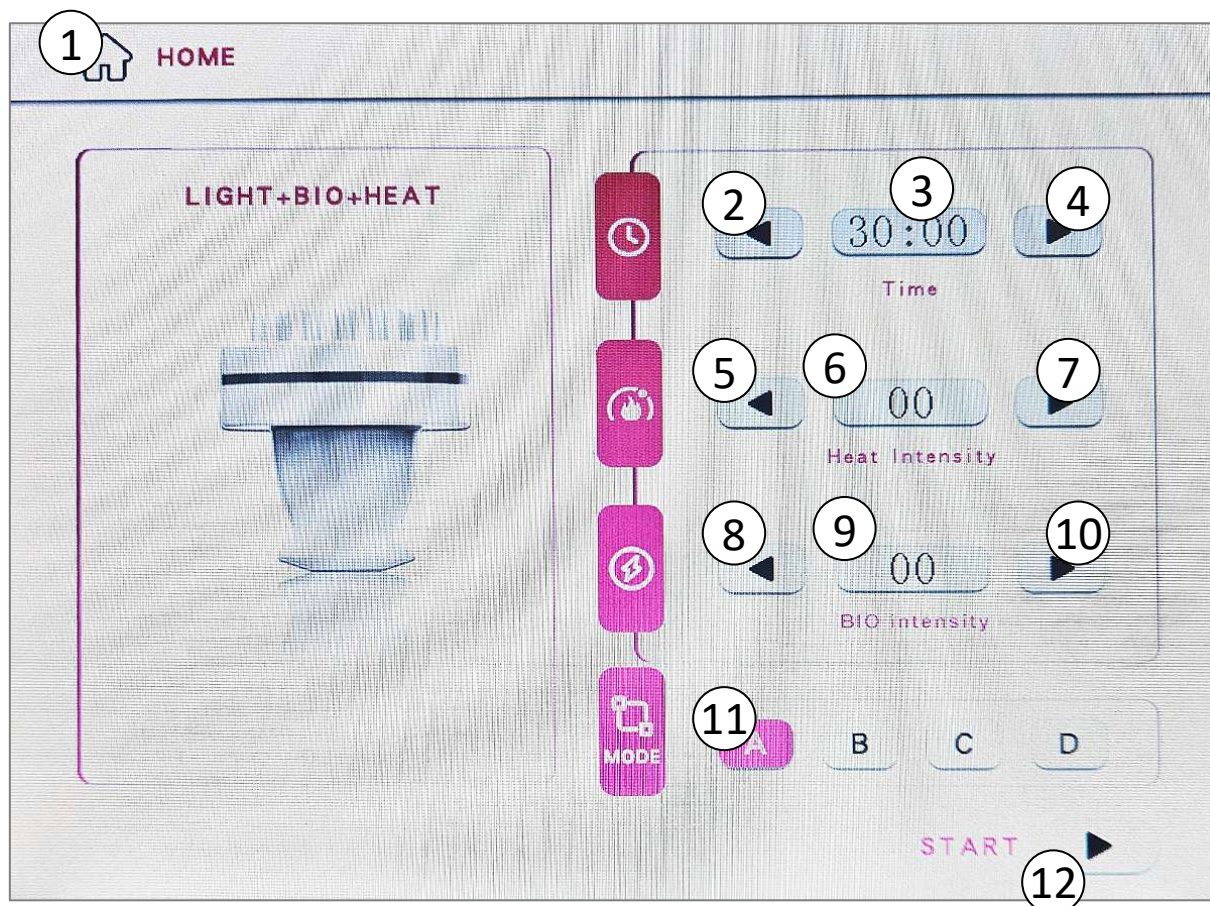


1. návrat do hlavní nabídky
2. snížení času
3. zbývajícím čas
4. zvýšení času
5. snížení intenzity vyhřívání
6. zobrazení intenzity vyhřívání
7. zvýšení intenzity vyhřívání
8. snížení intenzity elektroforézy
9. zobrazení intenzity elektroforézy
10. zvýšení intenzity elektroforézy
11. režim působení elektroforézy A B C D
12. tlačítko START/STOP

POUŽITÍ HLAVICE S ELEKTROFORÉZOU

- 1.** V menu přístroje zvolte funkci pro použití elektroforézy s vyhříváním.
- 2.** Pomocí tlačítek **(5)** a **(7)** si můžete nastavit intenzitu působení vyhřívání. Aktuálně zobrazená intenzita působení vyhřívání je zobrazena na displeji **(6)**.
- 3.** Pomocí tlačítek **(8)** a **(10)** si můžete nastavit intenzitu působení elektroforézy. Aktuálně zobrazená intenzita působení elektroforézy je zobrazena na displeji **(9)**.
- 4.** Pomocí tlačítek **(2)** a **(4)** si můžete nastavit čas aplikace. Po uplynutí nastaveného času se funkce elektroforézy a vyhřívání vypne. Čas aplikace můžete libovolně měnit.
- 5.** Pomocí tlačítek **A B C D (11)** si můžete nastavit program působení elektroforézy. Nejčastěji se používá program A, kdy probíhá působení elektroforézy kontinuálně bez přerušení.
- 6.** Pomocí tlačítka **(12)** funkci elektroforézy a vyhřívání spustíte. Pomocí tlačítka **(12)** činnost funkce zastavíte.
- 7.** Pomocí tlačítka **(1)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE HLAVICE S OSCILACEMI A VYHŘÍVÁNÍM

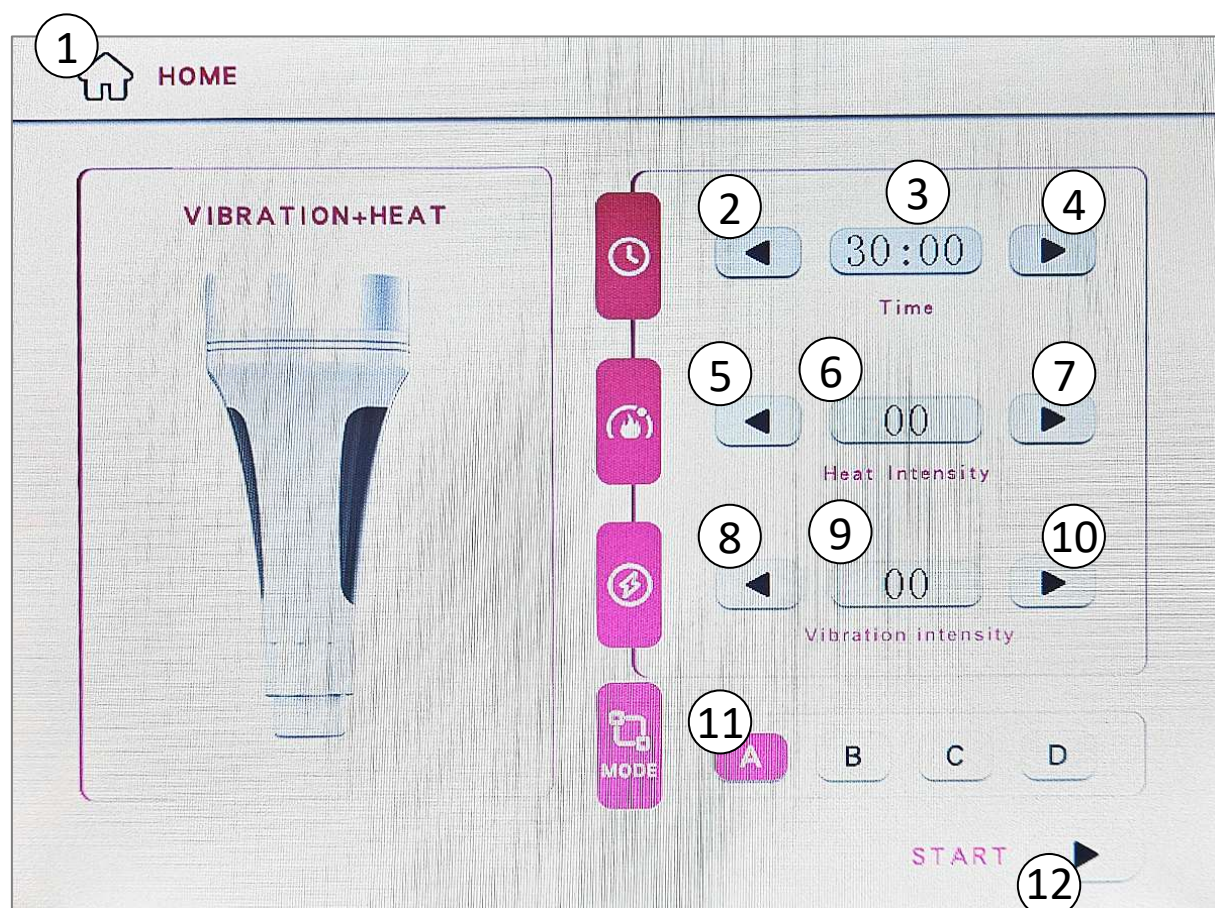


2. návrat do hlavní nabídky
3. snížení času
4. zbývajícím čas
5. zvýšení času
6. snížení intenzity vyhřívání
7. zobrazení intenzity vyhřívání
8. zvýšení intenzity vyhřívání
9. snížení intenzity vibrací
10. zobrazení intenzity vibrací
11. zvýšení intenzity vibrací
12. režim působení vibrací A B C D
13. tlačítko START/STOP

POUŽITÍ HLAVICE S OSCILACEMI

- 1.** V menu přístroje zvolte funkci pro použití oscilace s vyhříváním.
- 2.** Pomocí tlačítek **(5)** a **(7)** si můžete nastavit intenzitu působení vyhřívání. Aktuálně zobrazená intenzita působení vyhřívání je zobrazena na displeji **(6)**.
- 3.** Pomocí tlačítek **(8)** a **(10)** si můžete nastavit intenzitu působení oscilace. Aktuálně zobrazená intenzita působení oscilace je zobrazena na displeji **(9)**.
- 4.** Pomocí tlačítek **(10)** a **(11)** si můžete nastavit čas aplikace. Po uplynutí nastaveného času se funkce elektroforézy a vyhřívání vypne. V průběhu použití můžete čas aplikace postupně upravovat.
- 5.** Pomocí tlačítek **A B C D (11)** si můžete nastavit program působení oscilace. Nejčastěji se používá program A, kdy probíhá působení oscilace kontinuálně bez přerušení.
- 6.** Pomocí tlačítka **(12)** funkci oscilace a vyhřívání spustíte. Pomocí tlačítka **(2)** činnost funkce zastavíte.
- 7.** Pomocí tlačítka **(1)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

HLAVICE S ULTRAZVUKEM

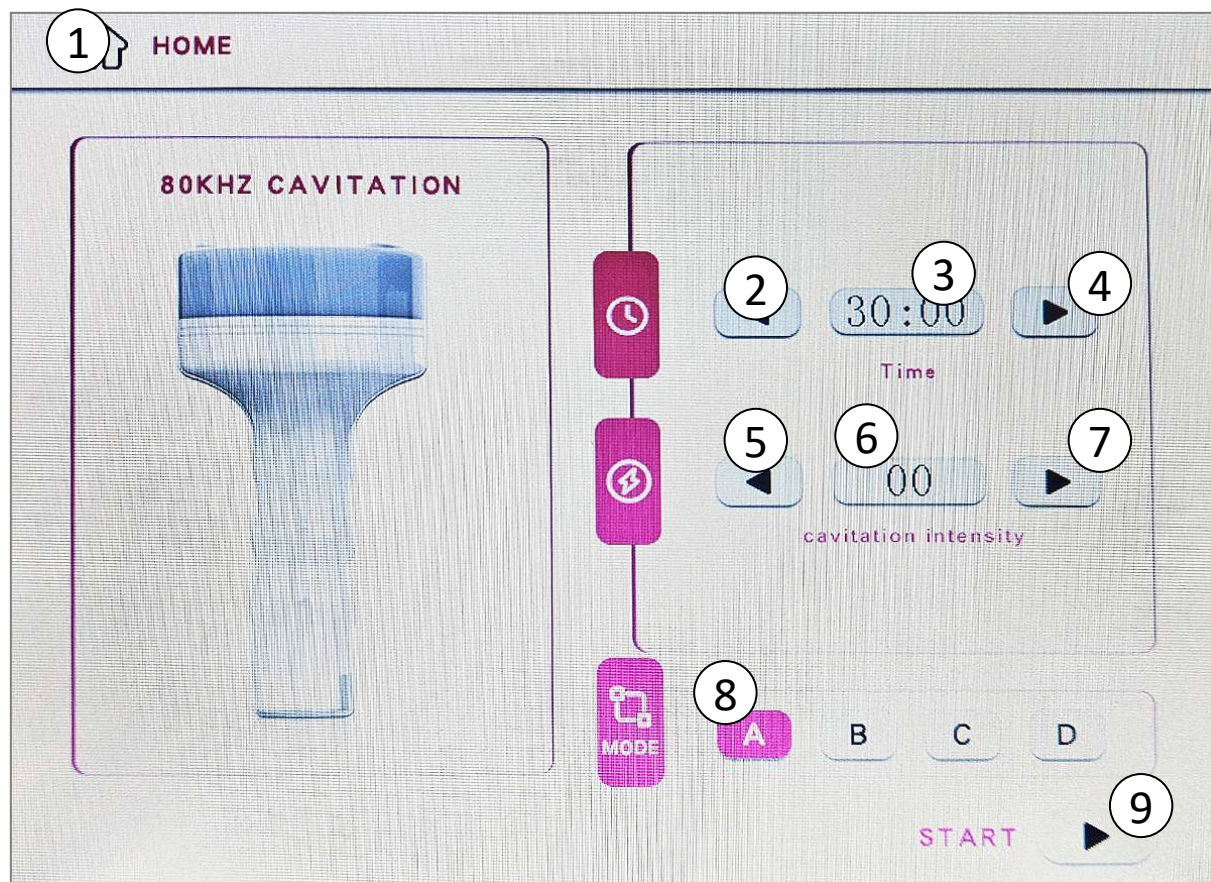


1. návrat do hlavní nabídky
2. snížení času
3. zbývající čas
4. zvýšení času
5. snížení intenzity ultrazvuku
6. zobrazení intenzity ultrazvuku
7. zvýšení intenzity ultrazvuku
8. režim působení ultrazvuku A,B,C,D
9. tlačítko START/STOP

POUŽITÍ HLAVICE S ULTRAZVUKEM

- 1.** V menu přístroje zvolte funkci ultrazvuku.
- 2.** Pomocí tlačítek **(5)** a **(7)** si můžete nastavit intenzitu působení ultrazvuku. Aktuálně zobrazená intenzita působení ultrazvuku je zobrazena na displeji **(6)**.
- 3.** Pomocí tlačítek **(2)** a **(4)** si můžete nastavit čas aplikace. Po uplynutí nastaveného času se funkce ultrazvuku vypne. V průběhu použití můžete čas aplikace postupně upravovat.
- 4.** Pomocí tlačítek A B C D **(8)** si můžete nastavit program působení ultrazvuku. Nejčastěji se používá program A, kdy probíhá působení ultrazvuku kontinuálně bez přerušení.
- 5.** Pomocí tlačítka **(9)** funkci ultrazvuku spustíte. Pomocí tlačítka **(9)** činnost funkce zastavíte.
- 6.** Pomocí tlačítka **(1)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE HLAVICE S LASEROVÝM SVĚTLEM

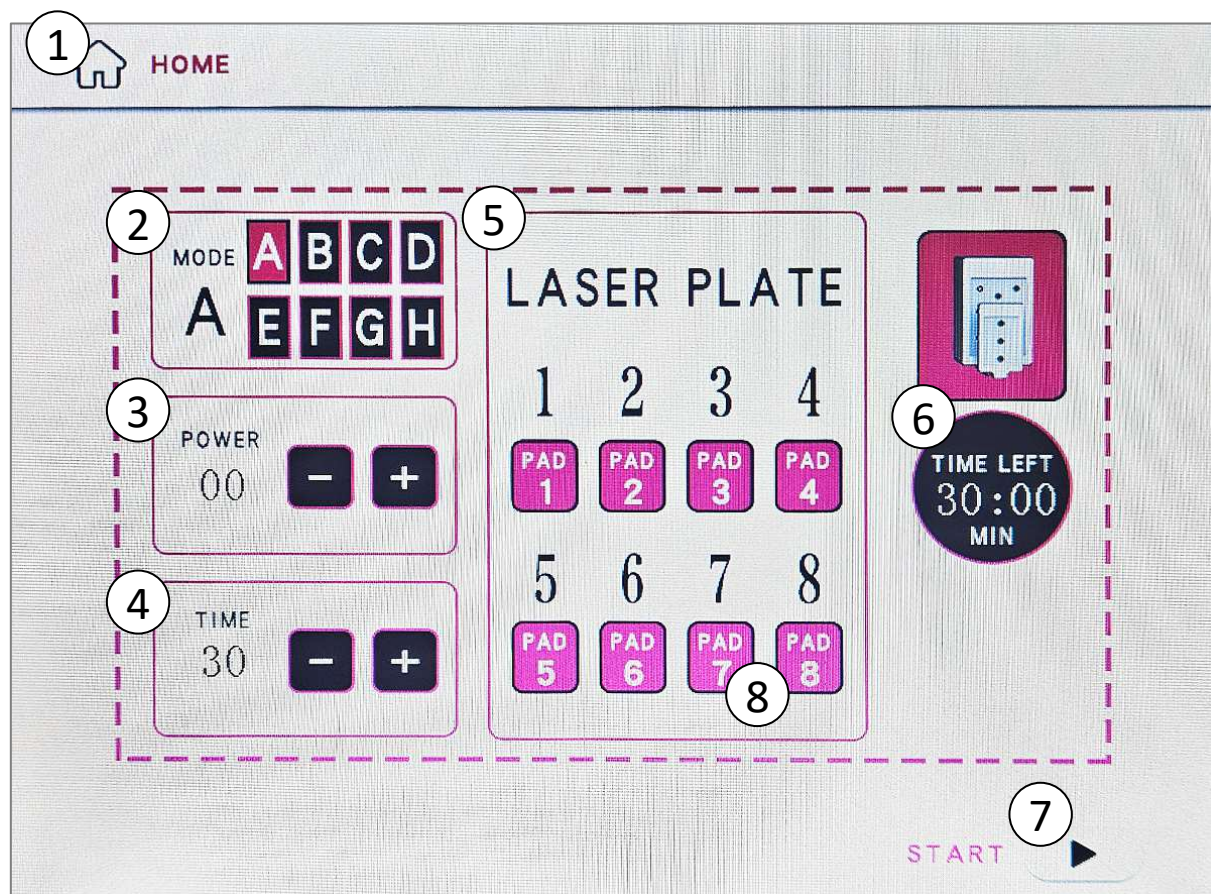

1. návrat do hlavní nabídky
2. Režim působení laseru A,B,C,D,E,F,G,H
3. Nastavení intenzity laseru
4. Nastavení času
5. Aktivace aplikační hlavice (stisk tlačítka koresponduje s číslem na aplikační hlavici)
6. Zobrazení zbývajících času
7. Tlačítko START/STOP

POUŽITÍ HLAVICE S LASEROVÝM SVĚTLEM

- 1.** V menu přístroje zvolte funkci pro použití laserového světla. K dispozici je k použití celkem 8 aplikačních hlavice. Zvolte si počet aplikačních hlavice, které plně pokryjí vámi vybranou partii na těle.
- 2.** Každá aplikační hlavice je označena číslem. Pomocí tlačítek na displeji si můžete aktivovat aplikační hlavici s příslušným číslem. Aktivní tak mohou být všechny hlavice nebo hlavice dle vašeho výběru.
- 3.** Pomocí tlačítek v sekci **(3)** si můžete nastavit intenzitu působení laserového světla. Aktuálně zobrazená intenzita působení laserového světla je zobrazena na displeji **(6)**.
- 4.** Pomocí tlačítek v sekci **(4)** si můžete nastavit čas aplikace. Po uplynutí nastaveného času se funkce laserového světla vypne. V průběhu použití můžete čas aplikace postupně upravovat.
- 5.** Pomocí tlačítek **A B C D E F G H** v sekci **(2)** si můžete nastavit program působení laserového světla. Nejčastěji se používá program A, kdy probíhá působení laserového světla kontinuálně bez přerušení.
- 6.** Pomocí tlačítek **1 2 3 4 5 6 7 8** v sekci **(8)** si můžete aktivovat příslušnou aplikační hlavici dle označení na hlavici.
- 7.** Pomocí tlačítka **(7)** funkci laserového světla spustíte. Pomocí tlačítka **(7)** činnost funkce zastavíte.
- 8.** Pomocí tlačítka **(1)** se vrátíte zpět do hlavní nabídky.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

HLAVICE S ROBOTICKOU MADEROTERAPIÍ



ÚČEL POUŽITÍ

Přístroj BeautyRelax je vysoce účinná pomůcka pro redukci celulitidy masážní technikou maderoterapie. 3D masážní mechanismus působí hloubkově přímo k tukové tkáni. Nekompromisní účinek zajišťuje 39 masážních kuliček integrovaných do elektronicky otočného válce. Možnost regulace rychlosti otočného válce. Cílená stimulace lokálního lymfatického systému. Tlakem si může uživatel sám zvolit sílu masáže. Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny aplikované partie. Napomáhá ke zvýšení pružnosti pleti. Příjemné uvolnění svalového napětí na vybraných částech těla. Zcela neinvazivní charakter aplikace. Určeno zejména pro: břicho, boky, hýždě, stehna, lýtka. Zatočte s pomerančovou kůží jednou pro vždy!



MADEROTERAPIE

Maderoterapie (terapie dřevem) je masážní technika, která využívá anatomicky navržené dřevěné nástroje ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Tyto nástroje umožňují vysoce cílený tlak na problematické partie (např. stehna, hýždě, boky nebo břicho). Tlak zintenzivňuje odbourávání tukových zásob a vláknité celulitidy.

Masáž stimuluje lymfatický odvodňovací systém a odstraňuje z těla nepotřebnou vodu a toxické látky. Také zlepšuje vzhled celulitidy a zároveň vypíná pokožku. Anticelulitidní aplikace se doporučuje provádět každý druhý den (alespoň třikrát týdně). Přináší rychlé výsledky tvarování těla, redukci a snížení projevů celulitidy.

Tento typ masáže provádět prakticky na celém těle: na nohou, břiše, pase, bocích, zádech a pažích, stejně jako na obličeji a části krku (dvojitá brada). Jednou z velkých výhod aplikace je, že je zcela přirozené, protože se provádí dřevěnými nástroji a je neinvazivní.



Hlavní výhody masážní metody:

- Potlačení projevů celulitidy.
- Aktivuje krevní a lymfatický oběh.
- Zvýraznění kontur a tvarování postavy.
- Odvodnění a tonizace pokožky.
- Dosažení relaxačního účinku na svaly.
- Dodatečná hydratace pokožky.
- Stimulace energetické rovnováhy.

MADEROTERAPIE PRO RŮZNÉ ČÁSTI TĚLA







VLASTNOSTI & SPECIFIKACE PRODUKTU

- Vysoce efektivní metoda pro potlačení projevů celulitidy
- Cílená stimulace lokálního lymfatického systému
- Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny aplikované partie
- Napomáhá ke zvýšení pružnosti pleti
- Příjemné uvolnění svalového napětí na vybraných částech těla
- Zcela neinvazivní charakter aplikace
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Určeno zejména pro partie: břicho, boky, hýždě, stehna, lýtka
- Rozsah frekvence otáček: 40 až 320Hz
- Průměr masážní kuličky: 2,5cm
- 39 masážních kuliček
- Kovová konstrukce přístroje pro dlouhou životnost
- Nabíjení: adaptérem ze sítě 220V
- Celkové rozměry přístroje: 55x6x6cm
- Šířka rotační plochy: 19cm
- Hmotnost: 4,9kg




VAROVÁNÍ

UŽIVATEL PŘÍSTROJE MUSÍ VŽDY ZABEZPEČIT, ABY SE V PŘÍPADĚ DLOUHÝCH VLASŮ NEZAMOTALY DO MASÁŽNÍHO VÁLCE. DOŠLO BY K FATÁLNÍ ÚJMĚ NA ZDRAVÍ.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Rukojeť
2. Tlačítko pro uvolnění rukojeti
3. Rotační masážní elektronický mechanismus

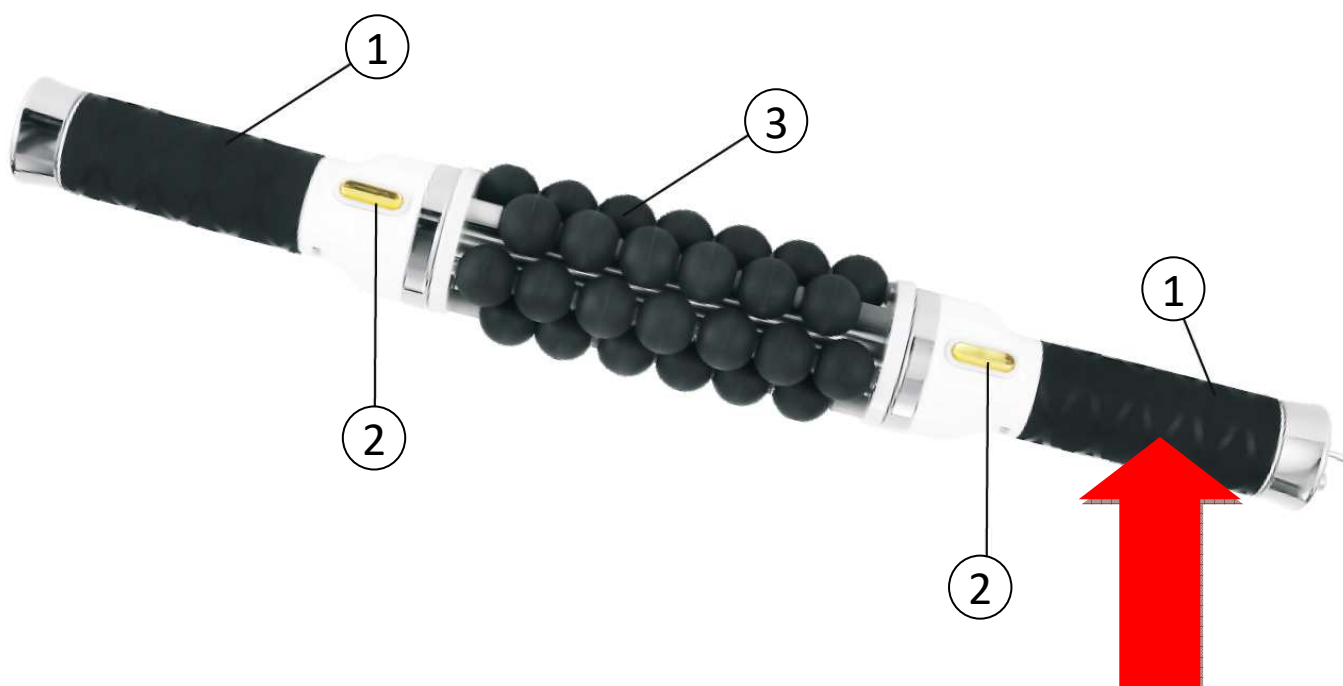

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V PRŮBĚHU ROTACE VÁLEČKU DRŽTE VŽDY V RUCE RUKOJEŤ NA STRANĚ, KAM SE PŘIPOJUJE NABÍJECÍ ADAPTÉR. TATO RUKOJEŤ SE NIKDY NESMÍ TOČIT. DOŠLO BY K PŘEKROUCENÍ KABELU ADAPTÉRU.

POPIS PŘÍSTROJE

- 1.** Vidlice pro vložení do elektrické sítě 220V
- 2.** Otočné kolečko pro ruční regulaci otáček masážního mechanismu




POPIS PŘÍSTROJE

1. Páčka pro změnu směru rotace masážního mechanismu. Páčka nabízí celkem tři polohy nastavení:

- jeden směr pohybu masážního mechanismu
- opačný směr masážního mechanismu
- vypnuto (středová poloha)

2. Vstup pro konektor napájecího adaptéru 220V

Poznámka: Novější verze přístroje jsou namísto páčky vybaveny klasickým spínacím tlačítkem s polohami I, vypnuto, II.

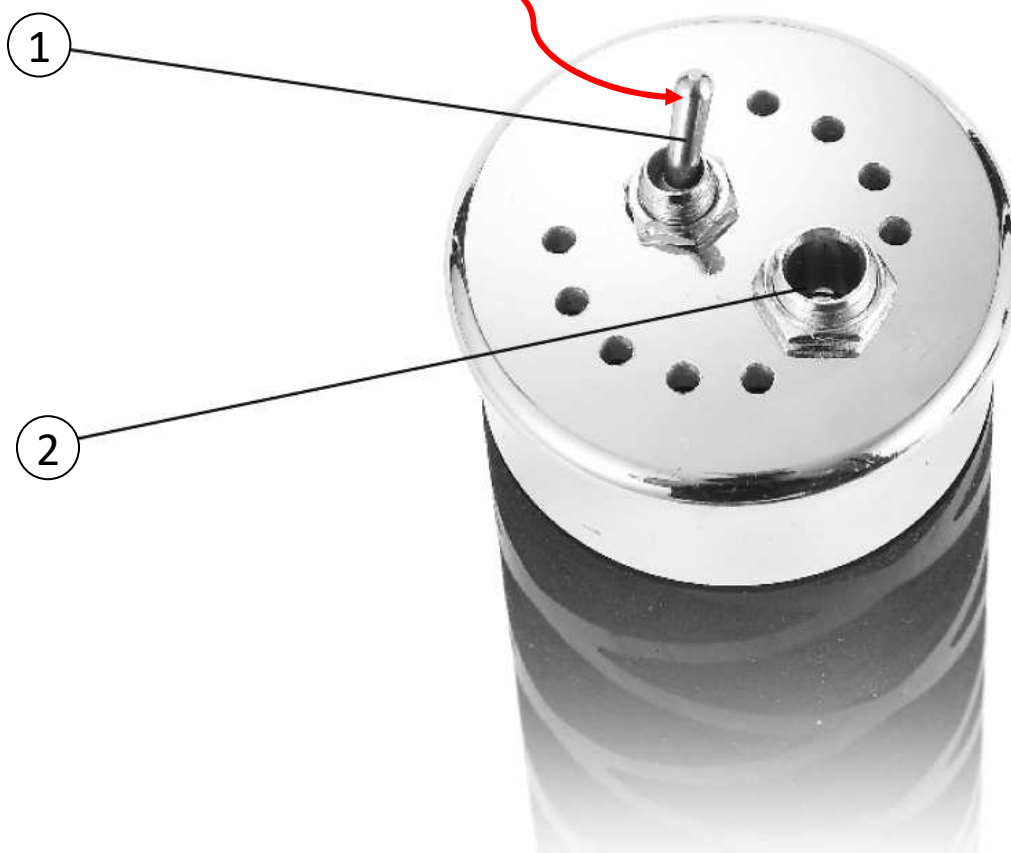

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V PRŮBĚHU POUŽITÍ PŘÍSTROJE VŽDY DBEJTE NA TO, ABY NEDOŠLO K MECHANICKÉMU VYTRŽENÍ KABELU. HLÍDEJTE, ABY KABEL NEBYL PŘI POUŽITÍ PŘÍSTROJE PŘÍLIŠ NAPNUTÝ. VYVARUJTE SE ŠKUBNUTÍ - RYCHLÉMU POHYBU, KTERÉ BY VEDLO K VYTRŽENÍ KABELU.


UVOLNĚNÍ RUKOJETI

Přístroj se skládá ze tří hlavních částí - dvou rukojetí a hlavního masážního mechanismu. Rukojeť je možné snadné odpojit. Postupujte následovně:

- 1.** *Držte mechanické tlačítko*
- 2.** *Rukojeť vysuňte ve směru šipky*



ROZMĚRY PŘÍSTROJE

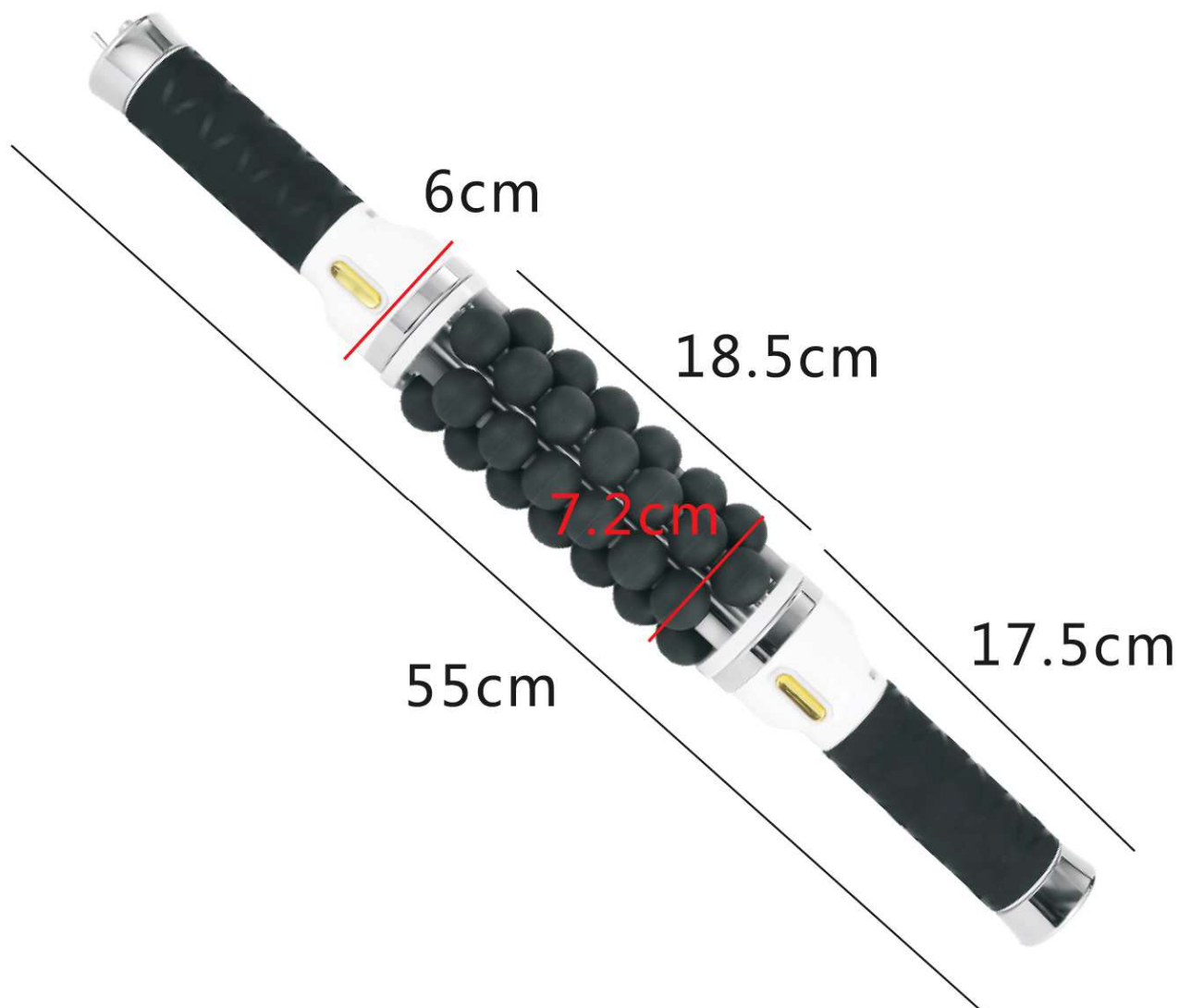

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Přístroj je uložen v přepravním kufříku v rozloženém stavu.
- 2.** K hlavní elektronické masážní jednotce připojte obě rukojeti.
- 3.** Připojte přístroj k napájecímu adaptéru.
- 4.** Před použitím přístroje vizuálně ověřte, zda se mezi kuličkami masážního mechanismu nenachází žádný předmět, který by tvořit fyzickou překážku v rotaci celého masážního bloku.
- 5.** Pomocí páčky na boční straně rukojeti si nastavte směr pohybu masážního mechanismu. Novější verze přístroje jsou namísto páčky vybaveny klasickým spínacím tlačítkem s polohami I, vypnuto, II.
- 6.** Pomocí otočného kolečka na adaptéru nastavte rychlost otáček.
- 7.** Použití přístroje musí být uživateli příjemné a musí se cítit komfortně. Podle toho je třeba upravit sílu tlaku, kterým se působí na tělo.
- 8.** Vždy je dobré začínat na nižších otáčkách masážního mechanismu. Otáčky je možné přidávat postupně s plynulým dávkováním.
- 9.** Délku a místo masáže upravte podle potřeby uživatele, který přístroj používá.
- 10.** Po použití přístroje může pleť zarudnout. Jde o přirozený projev působení masážního mechanismu. Čím je v průběhu aplikace použita větší rychlost a tlak, tím je zásah na tělo intenzivnější a může se to projevit zarudnutím pleti na větší ploše.
- 11.** Masážní kuličky přístroje pravidelně čistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Přístroj není vodotěsný. Žádnou část přístroje nevystavujte proudu tekoucí vody.
- 12.** Po použití odpojte přístroj od napájecího adaptéru.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

HLAVICE S VYSOKOFREKVENČNÍ OSCILACÍ



ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Oscilmax GS Tripple je masážní přístroj určený pro domácí péči o tělo a podporu vzhledu pokožky. Využívá technologii vysokofrekvenčních oscilací aplikační hlavice, které vytvářejí intenzivní vibrační stimulaci při kontaktu s pokožkou. Přístroj je vhodný jako součást péče o pokožku se sklony k nerovnostem (např. vzhled „pomerančové kůže“) a pro celkovou relaxaci těla. Masáž přispívá k pocitu prohřátí, uvolnění a svěžesti ošetřované partie. Samozřejmostí je možnost plynulého nastavení výkonu pomocí otočného regulátoru. Při nižší intenzitě je masáž jemná a relaxační, při vyšší intenzitě poskytuje výraznější stimulační efekt dle individuální preference. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je manipulace snadná a pohodlná. Přístroj umožňuje masírovat různé části těla včetně hůře dostupných míst. Intenzitu masáže lze přizpůsobit nejen volbou rychlosti oscilace, ale také tlakem, který při použití vyvíjíte. Každý si tak může nastavit úroveň stimulace podle vlastního pocitu komfortu. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické a relaxační účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek ani náhradu odborné lékařské péče.


- NASTAVENÍ RYCHLOSTI HLAVICE
- KOMPAKTNÍ RUČNÍ PROVEDENÍ
- 3 VYMĚNITELNÉ APLIKÁTORY
- VYSOCE EFEKTIVNÍ 5D OSCILACE
- ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ
- SNADNÁ OBSLUHA



UVOLNĚNÍ SVALŮ/REDUKCE CELULITIDY

Přístroj BeautyRelax nabízí díky vyměnitelným hlavicím a možnosti nastavení rychlosti široké možnosti využití v oblasti domácí relaxace a péče o tělo. Můžete jej využít pro podporu uvolnění svalů po fyzické aktivitě i jako součást péče o vzhled pokožky se sklony k nerovnostem. Intenzitu působení si lze regulovat dvěma způsoby – nastavením rychlosti oscilace hlavice a tlakem, který na danou partii vyvíjíte prostřednictvím přístroje. Pokud preferujete jemnější a relaxační masáž, zvolte nižší úroveň oscilace, hlavici s většími masážními body a lehčí tlak.

Pro intenzivnější masáž můžete nastavit vyšší úroveň oscilace, použít hlavici s menšími masážními body a přizpůsobit tlak podle vlastního komfortu. Pravidelným používáním si postupně osvojíte techniku, která vám bude nejvíce vyhovovat. Přístroj se tak může stát praktickým pomocníkem pro každodenní péči o tělo v pohodlí domova.

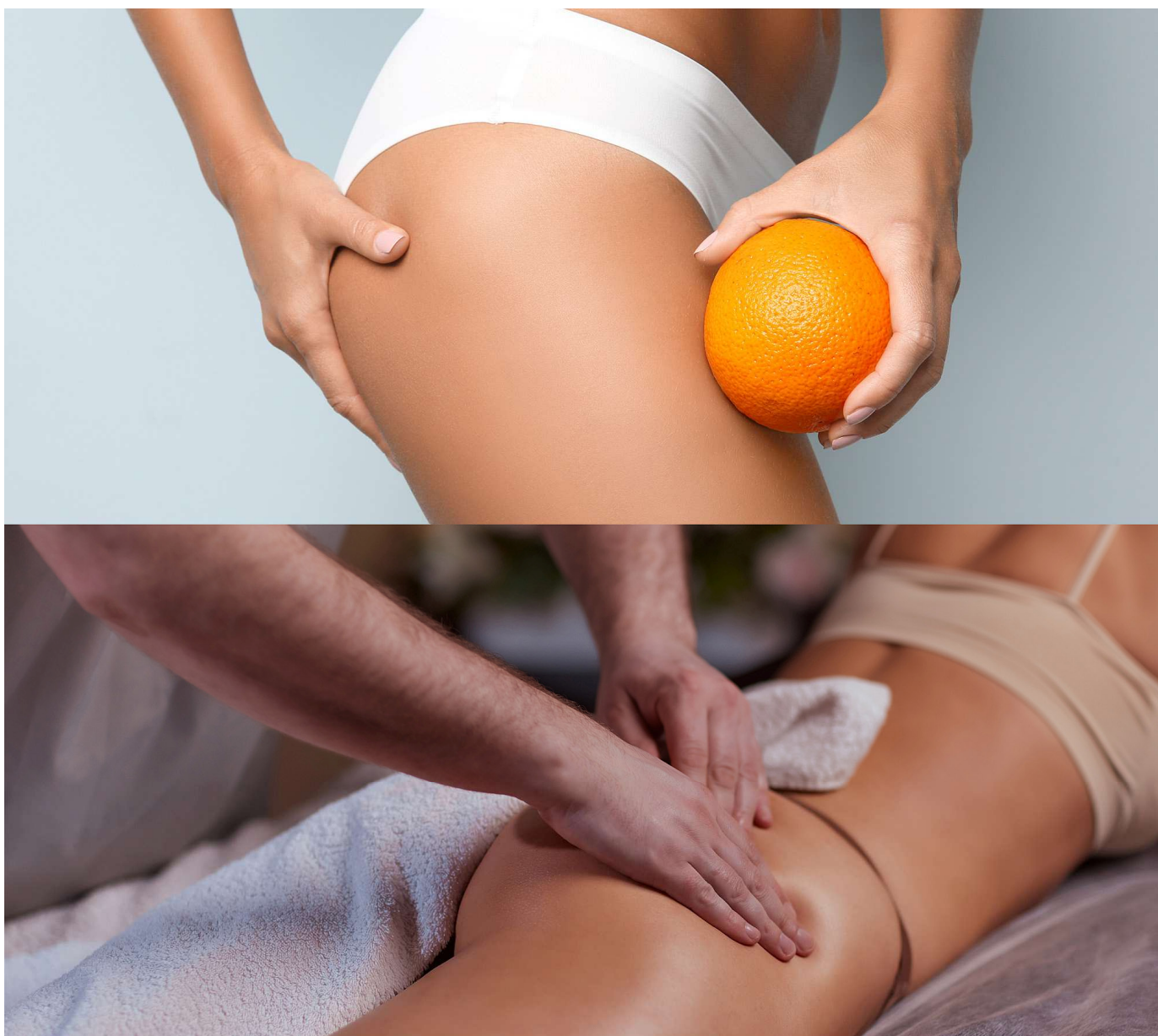

POUŽITÍ MASÁŽNÍHO OLEJE NEBO GELU

Pro maximální účinnost použití doporučujeme nanést na pokožku masážní olejíček nebo gel. Pro komfortní použití doporučujeme před aplikací nanést na pokožku masážní olej nebo gel. Hlavice přístroje se bude po pokožce pohybovat plynuleji a příjemněji. Používáte-li přípravky s obsahem vitamínů či vonných složek, můžete je při masáži rovnoměrně rozetřít po pokožce. Po aplikaci zůstává pokožka jemná a příjemně provoněná. Pokud přístroj používáte jako součást péče o pokožku se sklony k nerovnostem (např. vzhled „pomerančové kůže“), lze kombinovat s kosmetickým přípravkem dle vlastního výběru. Při použití kosmetických přípravků je nutné věnovat zvýšenou pozornost údržbě hlavice. Po každém použití ji důkladně očistěte a odstraňte zbytky přípravku. Je-li přístroj využíván více osobami nebo pro komerční účely, doporučujeme po každém použití aplikátor vyčistit a ošetřit dezinfekčním prostředkem vhodným pro daný materiál. Tím přispějete k dodržování hygienických standardů provozu.



HLAVNÍ BENEFITY PŘÍSTROJE

- Zcela neinvazivní charakter aplikace
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Skutečně funkční vysokofrekvenční oscilační masáž
- Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny aplikované partie
- Pokožka je pružnější a jemnější na dotyk
- Při pravidelném používání a přiměřeném stravování zjemnění příznaků celulitidy
- Efektivně redukuje podkožní tuk
- Napomáhá vyhladit povislou kůži
- Tvarování a zpevňování stehen, hýždí, břicha, boků nebo paží
- Poskytuje příjemnou uvolňující masáž zatuhlého svalstva
- Oblasti použití: Vnější a vnitřní strana stehen, paže, hýždě, břicho, paže
- Možnost nastavení rychlosti oscilací aplikační hlavičky
- 3 vyměnitelné druhy hlavic s různým typem povrchu
- Protiskluzové rukojeti umožňující regulaci intenzity masáže tlakem
- Určeno pro náročné uživatele
- Navrženo s ohledem na komerční provoz s vysokou frekvencí používání
- Komponenty nejvyšší jakosti pro extrémně dlouhou životnost přístroje





NASTAVENÍ RYCHLOSTI
POHYBU HLAVICE

PROTISKLUZOVÁ
RUKOJEŤ



SNADNÁ VÝMĚNA
APLIKAČNÍ HLAVICE

VÝZNAM APLIKAČNÍCH HLAVIC



Velké kontaktní body

- Vhodné pro velké skupiny svalů.
- Uvolňuje svalovou tensi.
- Regeneruje svalovou tkáň po náročné fyzické aktivitě.
- Efektivně rozkmitá tukovou tkáň.



Střední kontaktní body

- Tvarem imitují konečky prstů.
- Velmi intenzivní bodová masáž.
- Účinná podpora činnosti lymfatického systému.



Jemné kontaktní body

- Intenzivní podpora krevního běhu.
- Přispívá ke zlepšení pružnosti pleti.
- Vhodné pro partie s vyšší citlivostí pokožky.
- Odvodnění a tonizace pokožky.


MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE




MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE



MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE

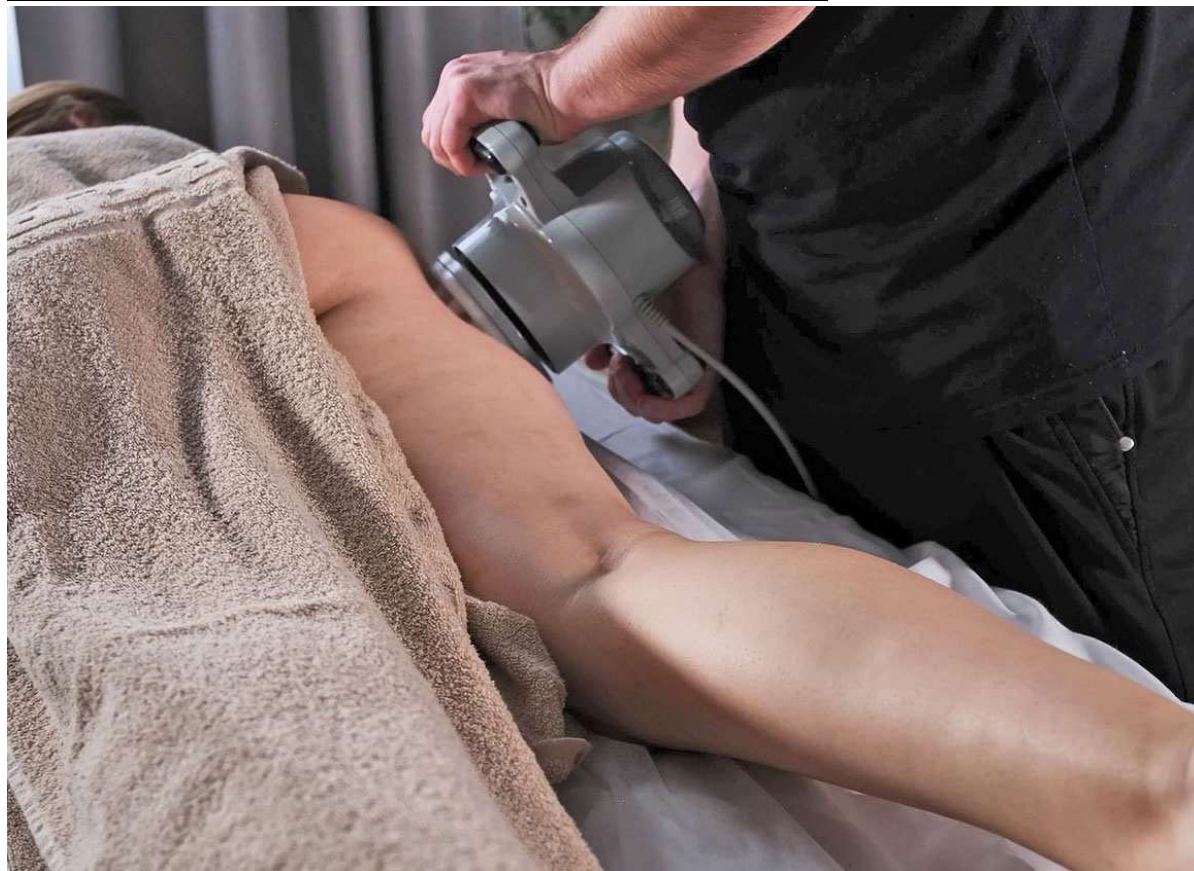

BEAUTYRELAX VIDEA NA YOUTUBE

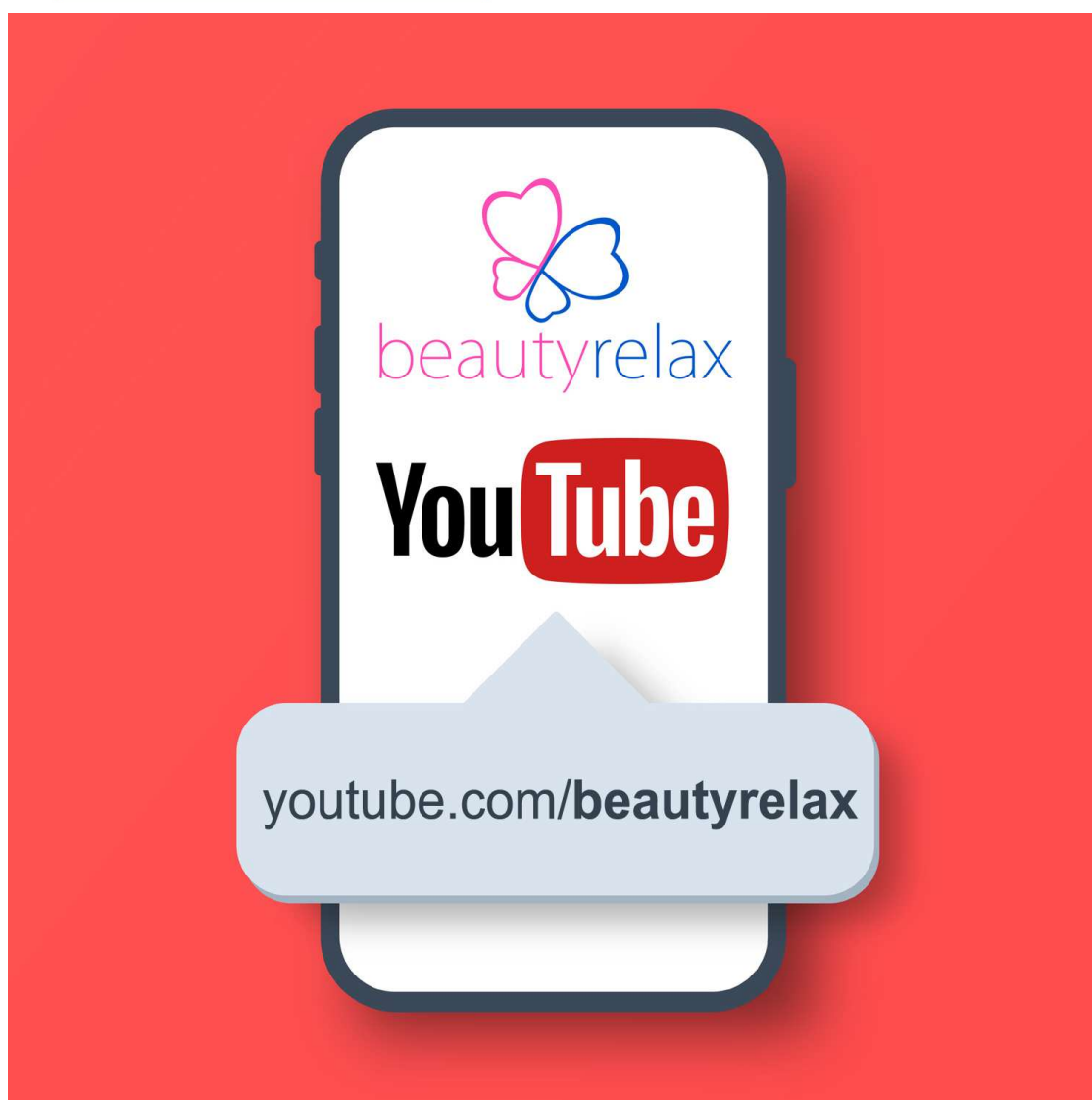

POPIS PŘÍSTROJE



VELKÉ
KONTAKTNÍ BODY





STŘEDNÍ
KONTAKTNÍ BODY



JEMNÉ
KONTAKTNÍ BODY

**APLIKAČNÍ HLAVICE
SE UPEVNĚUJE K PŘÍSTROJI
POMOCÍ ŠROUBOVÉHO ZÁVITU**

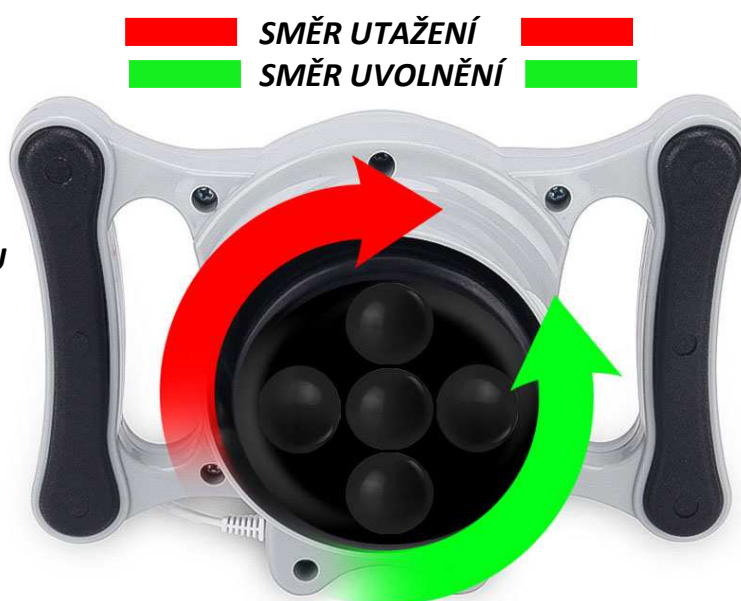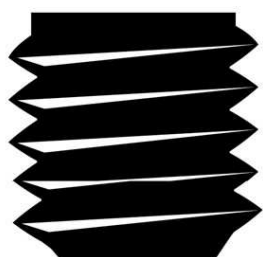

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Použijte aplikační hlavici dle účelu použití. Hlavici vyměňujte vždy, když je přístroj vypnutý. **Hlavice je uchycena pomocí závitů. Hlavici tedy klasicky vyšroubujte (směrem doleva) pro odstranění. Pro instalaci hlavice aplikátor zašroubujte ve směru pohybu hodinových ručiček (doprava).**
2. Připojte přístroj pomocí kabelu k elektrické zásuvce.
3. Přístroj používejte na místě s ohledem na vzdálenost elektrické zásuvky. V průběhu použití přístroje by neměl být kabel extrémně napnutý. Mohlo by dojít k jeho vytržení. Pokud to situace vyžaduje, použijte prodlužovací kabel.
4. Aplikujte na pokožku masážní olej, krém nebo gel. Výrazně tím usnadníte pohyb aplikační po pleti.
5. Pomocí otočného kolečka na přístroji nastavte rychlost oscilací.
6. Použití přístroje musí být uživateli příjemné a musí se cítit komfortně. Podle toho je třeba upravit sílu tlaku, kterým se působí na tělo.
7. Vždy je dobré začínat na nižším výkonu oscilace. Rychlost oscilací je možné přidávat postupně s plynulým dávkováním.
8. Po použití přístroje může pleť zarudnout. Jde o přirozený projev působením oscilací masážního mechanismu. Čím je v průběhu aplikace použita větší rychlost a tlak, tím je zásah na tělo intenzivnější a může se to projevit zarudnutím pleti na větší ploše. Intenzitu masáže si také můžete snadno regulovat tlakem přístroje na pleť pomocí rukou.
9. Aplikační hlavice přístroje pravidelně čistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Přístroj není vodotěsný. Žádnou část přístroje nevystavujte proudu tekoucí vody.
10. Pokud je přístroj sdílen mezi více uživateli, aplikační hlavici pravidelně dezinfikujte roztokem na alkoholové bázi. Zabráníte tak šíření bakterií.
11. Po použití vždy odpojte přístroj ze zásuvky.



INSTALACE PŘÍSTROJE - APLIKAČNÍ HLAVICE

Připojte k hlavní jednotce všechny aplikační hlavice. Vstupy se nachází na zadní straně hlavní jednotky. **Vždy dbejte na to, aby byl konektor správně zapojen do zdířky ve správném úhlu a nadoraz. Konektor má přesně daný úhel, pod kterým ho lze zapojit do zdířky.** Úhel je dán vykrojenou plochou, která přesně zapadne. Instalaci aplikačních hlavice provádějte při vypnutém přístroji. Konektor aplikační hlavice radiofrekvence, ultrazvukových vln, elektroforézy a laseru mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.

INSTALACE PŘÍSTROJE - DRŽÁKY NA HLAVICE

Součástí balení je sada podstavců. Slouží pro umístění aplikačních hlavice. Pomocí šroubků upevněte malé boční podstavce z každé strany a velký stojan na zadní straně přístroje. Použijte křížový šroubovák, který je součástí balení. **Šroubky neutahujte příliš velkou silou. Mohlo by dojít k prasknutí podstavce.** Může se stát, že bude třeba šroubky po nějakém čase znovu dotáhnout. **Hlavní jednotku přístroje umístěte vždy na rovnou plochu.**

INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ FILTR

Na zadní straně přístroje se nachází průhledná kazeta, kde je umístěn hlavní vzduchový filtr bílé barvy. Bez instalace kazety se vzduchovým filtrem do přístroje nebude funkce vakuové drenáže fungovat. Filtr je zodpovědný za to, aby se do vzduchového systému napojeného k čerpadlu nedostaly žádné nečistoty. Filtr je bezúdržbový. Není třeba ho měnit. Jednou za dlouhý čas můžete provést kontrolu filtru. Pokud budete potřebovat náhradní vzduchové filtry, kontaktujte prosím prodejce. Vždy dejte pozor, aby se vám při vysunutí spodní části celý plastový blok neodlomil. Ideálně vždy druhou rukou horní část celého bloku přidržte.



Výsledná podoba zkompletované sady



NASTAVENÍ INTENZITY ULTRAZVUKU

Každé tělo je individuální a jednotlivé části těla se mohou lišit složením a tloušťkou měkkých tkání. Z tohoto důvodu je při používání přístroje důležité **přizpůsobit nastavení intenzity konkrétní oblasti a individuálnímu vnímání uživatele**. Při vývoji estetického přístroje BEAUTYRELAX byl kladen důraz na univerzálnost a možnost regulace výkonu tak, aby bylo možné zařízení používat v souladu s různými potřebami a preferencemi uživatelů.

Možnost plynulého nastavení intenzity ultrazvuku umožňuje použití přístroje osobám, které splňují podmínky uvedené v návodu k použití a na které se nevztahují žádná omezení uvedená v seznamu kontraindikací. Nastavení intenzity je navrženo tak, aby bylo možné jej individuálně přizpůsobit bez nutnosti využití maximálních hodnot.

Na ovládacím panelu lze nastavit intenzitu působení ultrazvuku v rozsahu od úrovně 1 (nejnižší) do úrovně 10 (nejvyšší). Obecně platí, že větší tělesné partie mohou vyžadovat jiné nastavení než menší oblasti, vždy je však nutné řídit se **vlastním komfortem a subjektivním vnímáním**.

Doporučený postup nastavení intenzity

Při nastavování intenzity postupujte vždy **pozvolna a obezřetně**. Doporučuje se zahájit používání přístroje na nejnižší úrovni intenzity (stupeň 1) a postupně sledovat reakci dané oblasti. Během používání může uživatel vnímat mírné pocity, například jemné brnění nebo pocit zahřívání, které jsou pro tento typ zařízení běžné.

Používání by však nemělo být nepříjemné ani bolestivé. Pokud by se během používání objevily nepříjemné pocity, doporučuje se intenzitu snížit nebo používání přerušit. Neexistuje univerzální doporučení pro konkrétní úroveň intenzity pro jednotlivé části těla, a proto je vždy nutné řídit se **pokyny uvedenými v návodu** a vlastním vnímáním.

Vyšší nastavení intenzity **neznamená automaticky lepší nebo rychlejší výsledek z hlediska vzhledu**. Nastavení výkonu by mělo probíhat s rozvahou a bez zbytečného spěchu. Mezi jednotlivými použitími je nutné dodržovat doporučené časové odstupy uvedené v kapitole *Čas použití*. Vzhledem k individuálním rozdílům může nastat situace, kdy uživatel nevyužije celý rozsah dostupných úrovní intenzity. Přístroj je navržen tak, aby bylo možné jej používat bezpečně a komfortně i při nižších nastaveních. Přestože je technologie koncipována jako **neinvazivní**, je nezbytné přistupovat k jejímu používání odpovědně a vždy dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k použití, a to s ohledem na vlastní komfort a bezpečnost.



ČAS APLIKACE - ULTRAZVUK

Délka aplikace ultrazvukem by neměla překročit 20 minut na jednu partii. U párových částí těla se doporučuje rozdělit čas rovnoměrně mezi obě strany. V rámci jednoho dne je vhodné aplikovat přístroj maximálně na dvě oblasti. Opakované použití na stejné partii se doporučuje nejdříve po uplynutí 7 dní. Mezi jednotlivými aplikacemi je vhodné ponechat časový odstup. Přestávky mezi použitím jsou součástí doporučeného režimu a slouží k zachování komfortu a bezpečnosti při používání přístroje. Použití přístroje by mělo vždy probíhat v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ HLAVICE ULTRAZVUKEM

Při použití hlavice s technologií ultrazvuku je nezbytné aplikovat na povrch pleti hostečné množství sonogelu. **Hlavice se nesmí používat na suchou pokožku.** V průběhu použití sonogel z pleti postupně vysychá. **Průběžně tedy gel doplňujte**, aby hlavice stále po gelu klouzala.

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - ULTRAZVUK



UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - ULTRAZVUK

PAŽE




Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na rukou. Aplikační hlavici přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně aplikujte vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujte se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.



Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem aplikujte postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.



Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto aplikujte celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

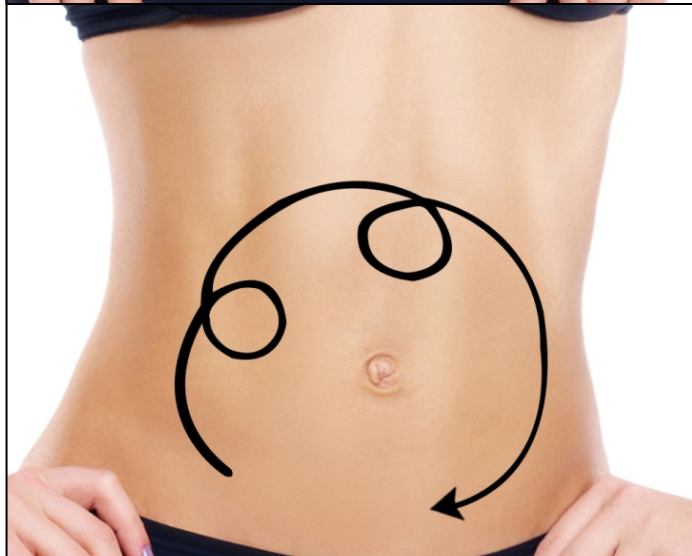

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto aplikujte celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.



Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.




Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.



Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.



Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto aplikovat celou oblast hýždí.

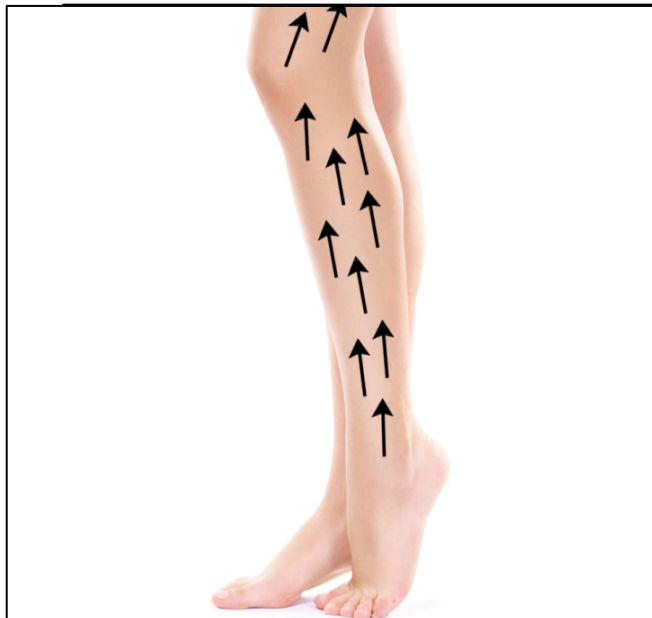

Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.



Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.



Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete aplikovat přední i zadní část končetiny.

DÉLKA A FREKVENCE POUŽITÍ HLAVIC

Použití laserových hlavic je určeno pro povrchovou, neinvazivní estetickou aplikaci. Mezi jednotlivými použitími se doporučuje ponechat časový odstup, aby bylo zajištěno komfortní a bezpečné používání přístroje.

- V průběhu jednoho dne je doporučeno zaměřit se vždy pouze na jednu vybranou partii těla.
- U větších oblastí lze aplikaci rozdělit do více sousedních úseků v rámci jedné partie.
- Celková doba použití na jednu partii by neměla v jednom dni překročit 30 až 40 minut.
- Opakované použití na stejné partii se doporučuje nejdříve po několika dnech, v souladu s doporučeným režimem používání.
- Použití lze zařadit do pravidelného režimu estetické péče dle individuálních preferencí uživatele.

Základní zásady použití:




1. Doba aplikace v jednom dni by neměla přesáhnout doporučený časový limit.
2. Mezi aplikacemi na stejnou oblast je vhodné dodržovat časový odstup.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

- 1.** Aplikačními hlavicemi nesvítit do místnosti. Funkci aktivovat v okamžiku, kdy jsou hlavice na pleti.
- 2.** Po ukončení aplikace může být pokožka v místě použití dočasně zarudlá. Tento jev je běžný a obvykle během krátké doby odezní.
- 3.** Aplikace červeného světla je navržena jako jednoduchá, povrchová a neinvazivní součást estetické péče.
- 4.** Dodržujte bezpečnostní pokyny týkající se ochrany zraku. Světelný zdroj nikdy neaktivujte mimo kontakt aplikačních hlavic s pokožkou a vyvarujte se přímého pohledu do světla.
- 5.** Pro první použití se doporučuje zvolit jednu vybranou oblast a řídit se doporučenou délkou a frekvencí aplikace uvedenou v návodu.
- 6.** Výsledky použití se mohou lišit v závislosti na individuálních faktorech a způsobu používání přístroje.
- 7.** Použití přístroje je určeno jako součást běžné estetické péče a nevyžaduje zvláštní režim před ani po aplikaci.
- 8.** Delší nebo častější používání, než je uvedeno v návodu, nezvyšuje účinnost aplikace a nedoporučuje se.
- 9.** Po použití může uživatel pociťovat dočasnou únavu nebo změny v komfortu, které jsou individuální a obvykle přechodné.

PŘÍKLADY POUŽITÍ LASEROVÝCH APLIKÁTORŮ

Příklady aplikace hlavic s laserovým světlem. Obrázky jsou ilustrační při použití s jiným modelem. Mají informativní charakter. Hlavní význam je znázornění různých možností použití. Slouží pro vaši inspiraci. Vy si samozřejmě můžete upevnit hlavice na vybrané partii těla podle svého.

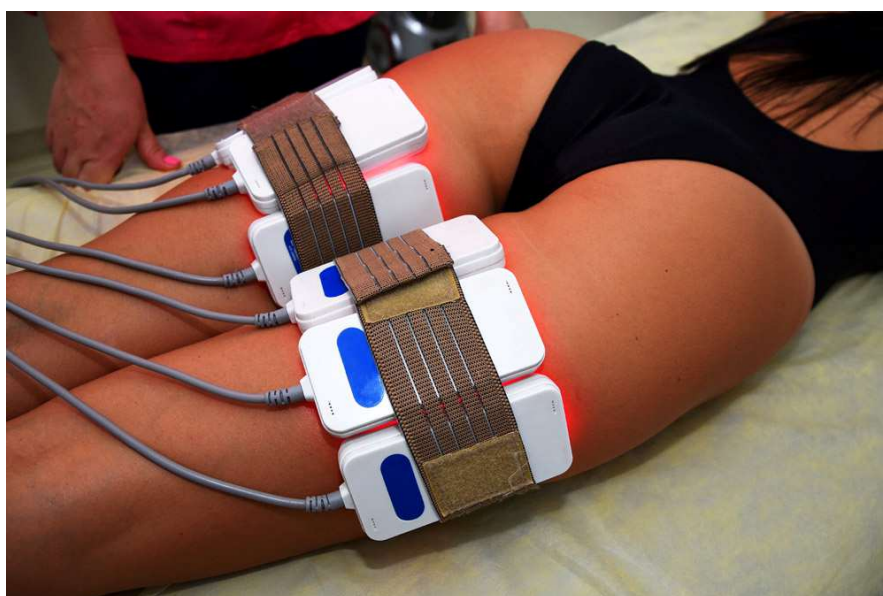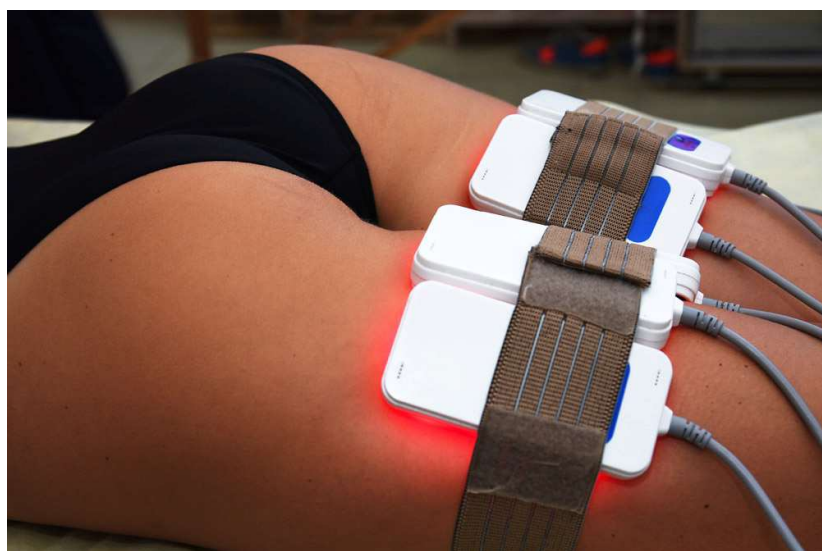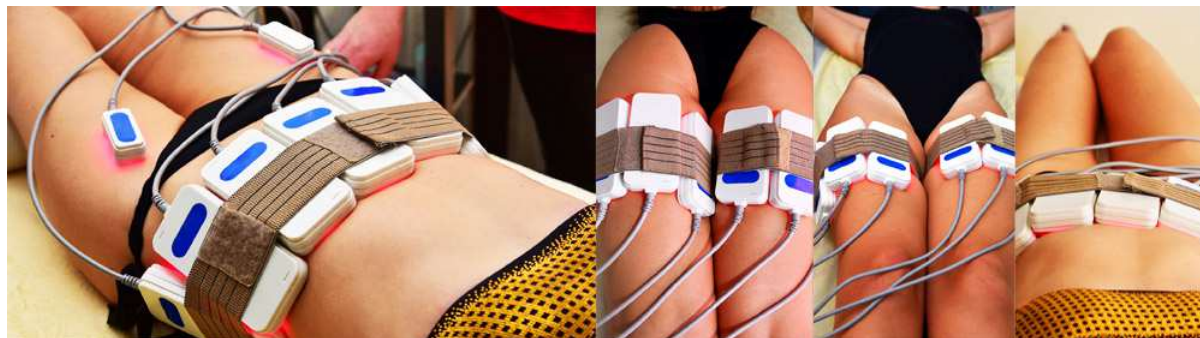

PŘÍKLADY POUŽITÍ LASEROVÝCH APLIKÁTORŮ



UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE - VAKUOVÉ SÁNÍ

pohybová masáž

Aplikační hlavici se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka co nejlépe hydratovaná pomocí kontaktního gelu nebo olejíčku. **Nikdy nepoužívejte masáž přístrojem na sucho, ale v kombinaci s kontaktním sonogelem nebo olejíčkem.** Při pohybové masáži je důležité nastavit sílu nasávání na co nejmenší úroveň. Zároveň nastavit co nejdelší interval uvolnění vakua. Pokud přístroj nasaje část těla až příliš silně, aplikátorem už nebude možné pohnout.




bodová masáž

Bodová masáž spočívá v aplikaci konkrétní tělesné partie po částech – viz. obrázek. Přístroj zapněte a přiložte aplikátor k pleti. Po nastavení všech parametrů spustí přístroj funkci nasávání v síle a délce, kterou si sami zvolíte. Při bodové masáži může po aplikaci na pleť zarudnout. Pokud si nastavíte nasávání příliš silné, mohou se na pleti objevit i mírné otoky až modřiny, které však v průběhu několika dní zcela zmizí. Vždy začínejte na nižší síle působení vakua a postupně si přidávejte dle vašeho pocitu. **Rozhodně hned nezačínajte na nejvyšších hodnotách!**



Při aplikaci ostatních částí těla postupujte podle následující grafické vizualizace. Rozdíl mezi pohybovou a bodovou masáží spočívá nejen v odlišné technice, ale v účinku působení na tělo. **Pohybová masáž** přispívá zejména ke zlepšení činnosti lymfy. Tělo získá lepší odvádět nadbytečnou vodu z končetin. Při **bodové masáži** podpoříte lokální krevní oběh, což přispívá k celkové efektivnější látkové výměně a odvodu škodlivin. Ideální na použití partií s výskytem příznaků celulitidy (pomerančové kůže).

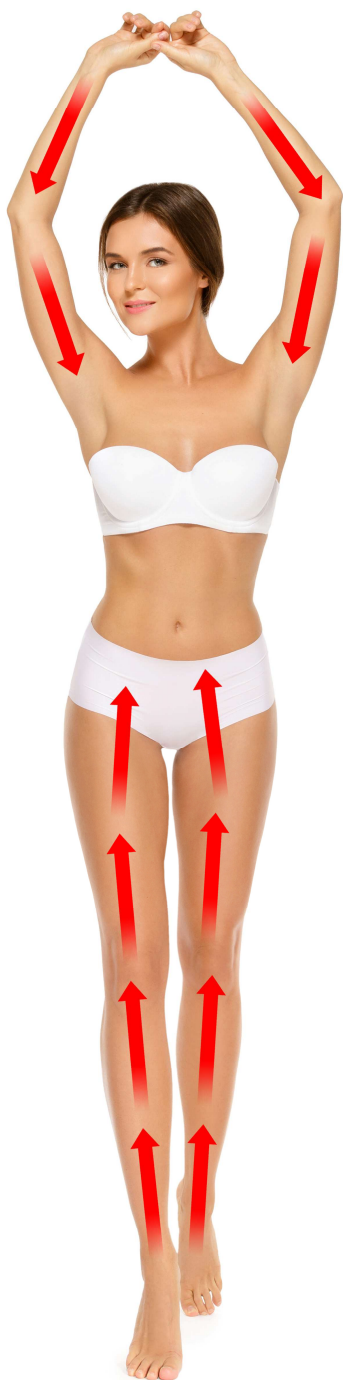

pohybová masáž



bodová masáž

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE - VAKUOVÉ SÁNÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



DŮLEŽITÝ TIP K POUŽÍVÁNÍ VAKUOVÉ HLAVICE

Před použitím vakuové hlavice doporučujeme na pleť aplikovat masážní olejíček libovolné značky. Nezáleží na značce, ale olejové konzistenci. Aplikální hlavice bude po těle lépe klouzat. Olejíček navíc tak rychle nevysychá ve srovnání se sonogelem. V tomto případě nedoporučujeme aktivovat funkci radiofrekvence na vakuové hlavici. Olejová konzistence a přípravku si s radiofrekvencí příliš „nerozumí“. Pro aplikaci těla radiofrekvencí použijte aplikální hlavici s radiofrekvencí (k dispozici jsou 3 různé typy). Pokud si přesto přejete používat vakuovou hlavici s radiofrekvencí, kterou přenáší dvě kontaktní plochy, aplikujte na pleť sonogel.

ČAS APLIKACE - RADIOFREKVENCE

Délku aplikace na pleti nelze stanovit s absolutní přesností podle pevně daných tabulek nebo jednotných časových údajů. Optimální délka stimulace pleti pomocí radiofrekvenčních vln se může lišit v závislosti na řadě individuálních faktorů, mezi které patří zejména aktuální stav pleti, věk uživatele, typ a citlivost pleti, stejně jako dlouhodobý způsob péče o pleť. V obecné rovině platí, že při úplně prvním použití by měla být aplikace krátká, zpravidla v řádu jednotek minut. Úvodní použití slouží především k tomu, aby uživatel mohl sledovat, jakým způsobem pleť na působení radiofrekvenčních vln reaguje, a jak rychle se po aplikaci vrací do běžného stavu, například z hlediska citlivosti na dotyk nebo přechodného zarudnutí. Na základě této individuální reakce lze následně orientačně upravit délku aplikace i časový rozestup mezi jednotlivými procedurami. Délka aplikace by měla vždy zohledňovat také velikost aplikované plochy. Aplikování celé plochy obličeje je časově náročnější než cílená aplikace na menší oblasti, například koutky úst nebo jemné vrásky v okolí očí.

Pokud vycházíme z běžné uživatelské praxe a orientačních zkušeností, stejnou oblast pleti je možné znovu aplikovat pomocí radiofrekvence zpravidla po uplynutí přibližně 7 až 10 dnů, vždy s ohledem na individuální reakci pleti a dodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

CO JE NORMÁLNÍ PO APLIKACI

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

JAK POKOŽKU CO NEJLÉPE ZKLIDNIT

1) Chladit, ale ne ledem přímo

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhněte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teplu 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Pleť ponechejte v klidu.

5) Použít SPF

- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Pleť je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.
- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU



METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

1. Čelo

- Pohybuj hlavicí **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Veď hlavicí **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu veď pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby veď **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavicí **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhní se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavici **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhní se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt


- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavici **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení

- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavici klouzat po pleti

Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů


MAPA CITLIVOSTI PLETI

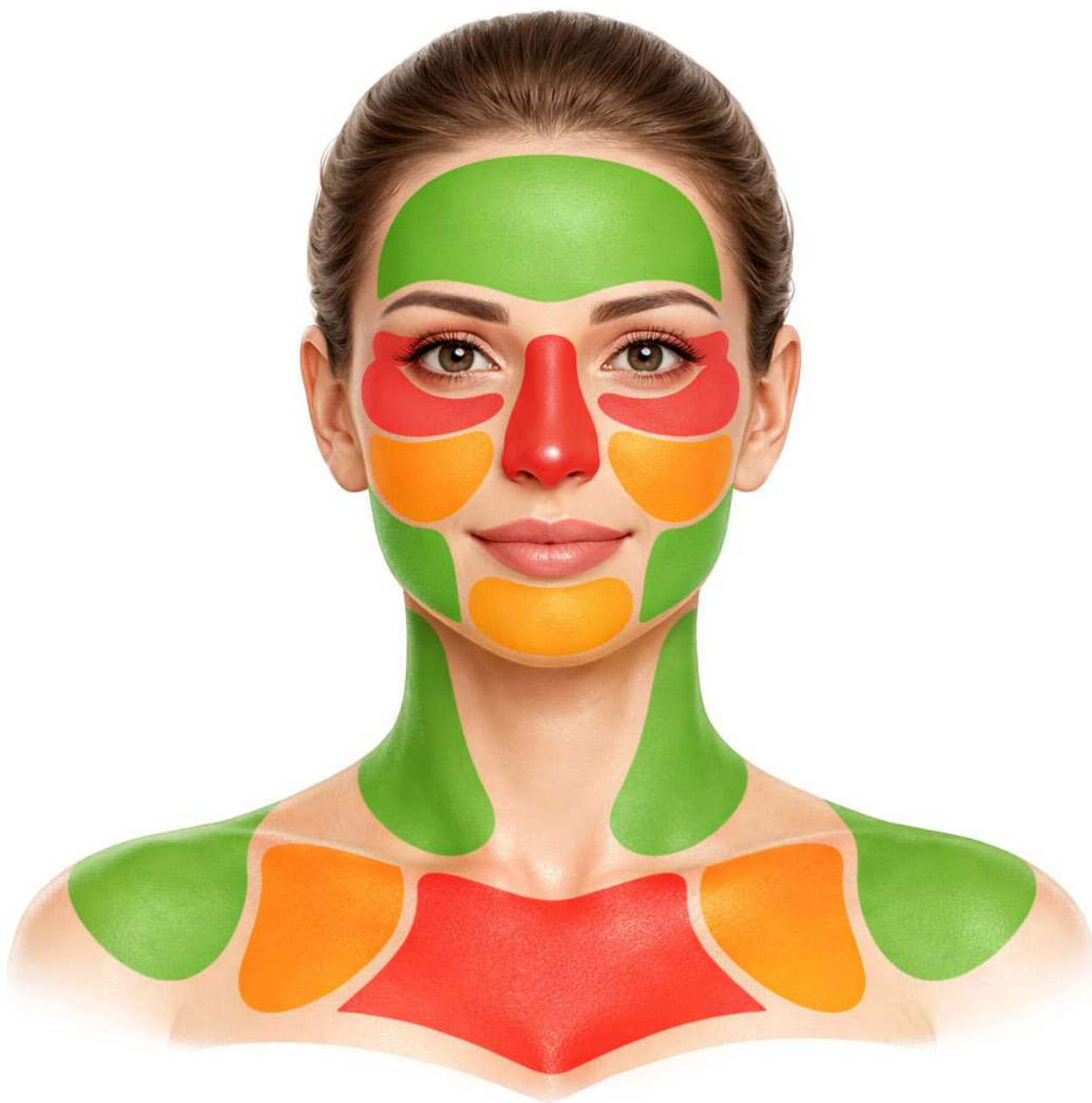

- NÍZKÁ CITLIVOST
- STŘEDNÍ CITLIVOST
- VYSOKÁ CITLIVOST

DOPORUČENÁ METODA POUŽITÍ HLAVIC

Při použití aplikační hlavice na vybrané části těla je třeba vždy vycházet z optimálního načasování délky kontaktu aplikačních kolíčků s pletí a vhodného dávkování intenzity radiofrekvenčních vln. V tomto směru si můžete pohyby přizpůsobit podle sebe. V případě aplikace druhé osoby aktivní komunikací sledujte míru, jakou uživatel vnímá projev tepla působením radiofrekvence. Zde jsou doporučené dvě možnosti práce s aplikační hlavicí:

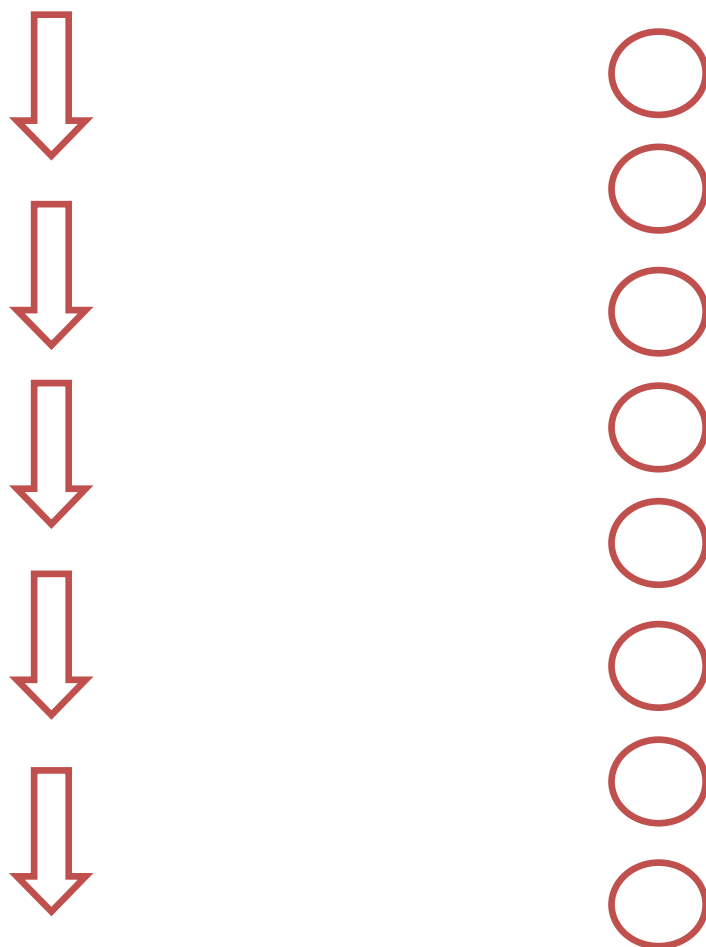


plynulý pohyb

Aplikační hlavici se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí sonogelu. **Nikdy nepoužívejte stimulaci pleti aplikační hlavici „na sucho“.** Při stimulaci pleti plynulým pohybem je celkově zkrácen čas kontaktu aplikačních kolíčků s konkrétním místem. **Při konstantním nastavením úrovně intenzity radiofrekvence můžete při rychlejším pohybu vnímat menší míru působení radiofrekvence ve srovnání s pomalejším pohybem.**

**razítkování**

Při aplikaci vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu pár sekund (tzv. razítkováním). Intenzitu přidávejte vždy podle pocitu.



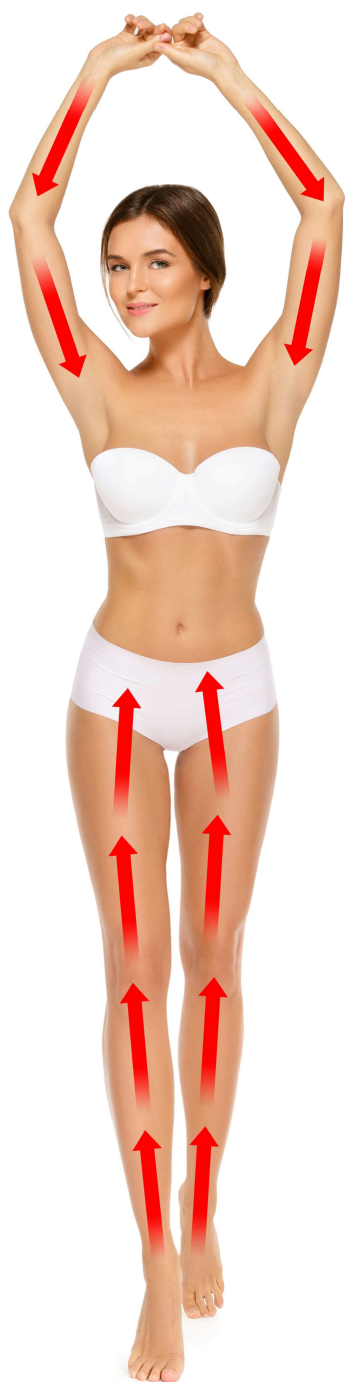

plynulý pohyb



razítkování

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo používání přístroje správně probíhat?

Před prvním použitím přístroje si důkladně prostudujte veškeré informace uvedené v tomto návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména seznamu kontraindikací a doporučením pro bezpečné používání. Pokud si nejste jisti vhodností jednotlivých technologií s ohledem na váš aktuální zdravotní stav, doporučujeme konzultaci s praktickým lékařem. Seznamte se rovněž s přehledem tělesných partií, pro které jsou jednotlivé aplikační hlavice určeny. Přístroj používejte v klidném prostředí, v poloze, která vám zajistí dostatečný komfort. Doporučuje se lehké a pohodlné oblečení, které neomezuje pohyb.

Doporučené časy a intervaly použití jednotlivých technologií

V návodu jsou uvedeny doporučené časy a intervaly použití pro ultrazvuk, laserové světlo a radiofrekvenci. Tyto intervaly vycházejí z rozdílného charakteru působení jednotlivých technologií. U ultrazvuku a laserového světla je vhodné ponechat organismu dostatečný časový prostor, aby mohl přirozeným způsobem pracovat s uvolněnou energií z tukové tkáně. U radiofrekvence je doporučen odstup z důvodu probíhajících fyziologických procesů ve vrstvě dermis, kde dochází ke změnám struktury kolagenních a elastických vláken. V praxi je možné si sestavit vlastní plán používání jednotlivých technologií. V jeden den lze kombinovat například ultrazvuk nebo laserové světlo (včetně vakuové hlavice) s radiofrekvencí, vždy však při dodržení doporučených intervalů pro další použití.

Kombinace ultrazvuku a laserového světla

Ultrazvuk i laserové světlo jsou technologie určené ke stimulaci tukové tkáně. Tyto technologie není doporučeno používat současně v rámci jednoho použití na stejné tělesné partii. Uživatel si může zvolit jednu z těchto metod podle svého aplikačního plánu. V další plánovaný den je možné použít opět jednu z technologií, vždy s ohledem na doporučené časové rozestupy.

Použití přístroje při výrazné nadváze

Přístroj není určen jako řešení výrazné nadváhy nebo obezity. Nejedná se o náhradu zdravého životního stylu, vyvážené stravy ani pravidelného pohybu. V případě výrazné nadváhy doporučujeme obrátit se na odborníka – praktického lékaře nebo výživového poradce – a řešit úpravu tělesné hmotnosti pod odborným dohledem.

Pro koho je přístroj BeautyRelax vhodný?

Přístroj je určen pro uživatele, kteří mají zájem o zlepšení vzhledu vybraných partií těla nebo pleti neinvazivní, kosmeticko-estetickou cestou. Je vhodný pro osoby, které i přes běžnou

péči vnímají nerovnoměrnosti v oblasti tukové tkáně nebo sníženou pružnost pokožky. Přístroj je dále určen pro uživatele, kteří zaznamenávají známky únavy pleti, ztrátu elasticity nebo zvýšený výskyt vrásek a chtějí podpořit její vzhled pravidelnou stimulací.

Doporučení před a po použití ultrazvuku nebo laserového světla

Minimálně 4 hodiny před použitím se doporučuje nekonzumovat těžká a mastná jídla. Vhodná jsou lehká jídla, například zeleninový salát nebo jogurt. Den před použitím, v den použití a několik dní po použití zvýšte příjem tekutin na přibližně 2–2,5 litru čisté neperlivé vody denně. Vyhněte se slazeným a perlivým nápojům. Po dobu přibližně jednoho týdne po použití ultrazvuku se doporučuje omezit konzumaci alkoholu, vyšších dávek kofeinu, nikotinu a těžkých jídel, jelikož tyto faktory zvyšují zátěž organismu. Po použití je vhodné zařadit lehkou pohybovou aktivitu, která podpoří krevní oběh a lymfatický systém.

Pohybová aktivita během používání přístroje

Používání přístroje není nutné kombinovat s intenzivním sportem. Doporučuje se však lehká aktivita, například krátká procházka, nenáročný běh, jízda na kole nebo rotopedu. Pokud není možné opustit domov, postačí lehké protažení. Cílem není vysoká fyzická zátěž, ale podpora metabolismu a lymfatického systému, ideálně po použití přístroje.

Doporučené pořadí použití aplikačních hlavic

Aplikační hlavice s ultrazvukem nebo laserem lze používat samostatně. Z hlediska celkového komfortu a podpory lymfatického systému je vhodné následně použít vakuovou hlavici, která mechanicky stimuluje aplikovanou oblast.

Vnímání během používání přístroje

- Používání přístroje je při dodržení návodu bezbolestné.
- Ultrazvuk může být vnímán jako jemné mravenčení nebo lehké brnění.
- Radiofrekvence je spojena s pocitem tepla.
- Laserové aplikátory nejsou na povrchu pleti výrazně vnímatelné.

Jedná se o běžné průvodní vjemy.

Akustické projevy ultrazvuku

Při používání ultrazvuku může být slyšitelné slabé pískání. Jedná se o přirozený průvodní jev této technologie, nikoli o závadu přístroje. Citlivější osoby mohou tento zvuk vnímat intenzivněji. Pro zvýšení komfortu lze snížit intenzitu výkonu nebo použít špunty do uší či sluchátka.

Výsledky a očekávání

Výsledný efekt je individuální a závisí na řadě faktorů, jako je životospráva, pohybová aktivita, stav lymfatického systému a individuální metabolismus. Přístroj je určen jako podpůrný kosmeticko-estetický nástroj. Pro dosažení viditelných změn je vhodné kombinovat jeho používání s vyváženým životním stylem.

Bezpečnost používání

Při používání na určených partiích a při respektování kontraindikací je používání přístroje považováno za bezpečné. Přístroj není zdravotnický prostředek a nenahrazuje odbornou péči. Použití ultrazvuku je vždy spojeno s použitím kontaktního gelu, který zajišťuje správný přenos energie.

Hygiena a péče o aplikační hlavice

Po každém použití je nutné aplikační hlavice důkladně očistit od gelu a dezinfikovat, zejména při použití více osobami. Doporučuje se dezinfekční prostředek na bázi alkoholu. Hlavici vždy osušte měkkým hadříkem.

Další důležité informace

- Přístroj není zdravotnický prostředek
- Nenahrazuje zdravý životní styl
- Je určen výhradně ke kosmeticko-estetickému použití
- Přístroj není vodotěsný a nesmí být oplachován pod tekoucí vodou
- Splňuje platné evropské normy a certifikační požadavky

ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

1. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Odstranění sonogelu/nanášeného přípravku.
- Hlavici otřete měkkým, suchým ubrouskem (např. mikrovlákno) nebo vatičkou.
- Pokud je gel zaschlý, můžete použít vlhčený ubrousek bez alkoholu (určený pro elektroniku).

2. DEZINFEKCE (POKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ VÍCE OSOB)

Postup dezinfekce:

- Nastříkejte isopropylalkohol (70–80%) ve spreji na hadřík (NE přímo na hlavici!).
- Jemnými pohyby otřete povrch hlavice.
- Nechte zcela vyschnout (alkohol se rychle odpaří).

Pozor! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (aceton, čpavek, chlor).

3. OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

- Hlavici NENAMÁČEJTE – voda by mohla poškodit elektroniku.
- Po čištění vždy důkladně osušte suchým hadříkem.

4. DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, aplikujte na kovové části hlavice tenkou vrstvu antiseptického přípravku (např. lékařský alkohol), aby nedošlo k oxidaci.
- Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

5. UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte hlavici do vody ani čisticích roztoků!
- Nepoužívejte abrazivní materiály (kartáče, drátěnky)!
- Nepoužívejte horkou vodu nebo páru!

DOPORUČENÍ PRO PRODLUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

- Čistěte hlavici ihned po použití – zabráníte zasychání gelu.
- Při dezinfekci používejte pouze isopropylalkohol – nepoškozuje materiály.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození (praskliny, koroze).

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma **SANTADRIA s.r.o.**, IČO: 29195454, DIČ: CZ29195454, tímto informuje zákazníka, že výrobek je určen ke **masážním a relaxačním** v souladu s návodem k obsluze a **není zdravotnickým prostředkem** ani neslouží k diagnostice, prevenci nebo léčbě jakéhokoli onemocnění.

Prodávající odpovídá za vlastnosti výrobku v rozsahu stanoveném **platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky**, zejména za shodu výrobku s technickými a bezpečnostními požadavky v okamžiku jeho uvedení na trh.

Prodávající **nenese odpovědnost za škody nebo újmy**, které vzniknou v důsledku:

- používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bezpečnostními pokyny nebo určeným účelem použití,
- neodborného, nevhodného nebo nadměrného používání výrobku,
- používání výrobku osobami, u nichž je jeho použití podle návodu kontraindikováno,
- zásahů do výrobku, jeho úprav, oprav nebo manipulace provedených neoprávněnou osobou,
- používání výrobku v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je výrobek používán.

V případě **komerčního používání výrobku** bere zákazník na vědomí, že **odpovědnost za splnění veškerých požadavků vyplývajících z platné legislativy**, zejména v oblasti odborné způsobilosti obsluhy, licencí, povolení nebo jiných zákonných podmínek, **nese výhradně provozovatel** zařízení. Prodávající nenese odpovědnost za právní důsledky vyplývající z komerčního používání výrobku v rozporu s právními předpisy platnými v konkrétní jurisdikci.

Tato doložka **neomezuje ani nevylučuje práva zákazníka**, která mu náleží podle závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele, ani odpovědnost prodávajícího za vady výrobku či škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu, v jakém ji nelze podle práva vyloučit.

Tento výrobek je určen výhradně ke kosmetickému, estetickému a wellness použití. Nejedná se o zdravotnický prostředek. Výrobek není určen k diagnostice, prevenci, sledování, zmírňování ani léčbě jakýchkoli onemocnění a nenahrazuje odbornou zdravotní péči. Veškeré popisy účinků se vztahují výhradně k subjektivnímu nebo vizuálnímu vnímání v rámci kosmetické péče. Výsledky se mohou lišit v závislosti na individuálních vlastnostech uživatele a způsobu použití.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz

beautyrelax

 **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Masážní přístroj

Rollskin BodyShape Madero Professional Sculptor Elite

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-3116**

EAN **8594166124165**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60601-1-2:2007 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008 EN 60601-1:2006+A11:2011


EN 60825-1:2007

Produkt není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného onemocnění. Je určen pro rekondiční masáž těla vakuem a působením tepla. Při nastavení nízkých hodnot výkonu přístroje nedosahuje vyššího tepla než 42°C.
Laserové světlo bezpečnostní třídy I.

Technologiemi a funkcemi je určen pro použití v kosmetických a masážních studiích.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.

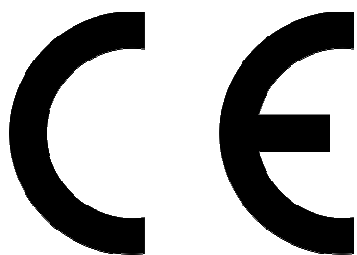

Místo vydání:
Datum vydání:

Brno
1.2.2025

Martin Hrbek, jednatel