

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj

BeautyRelax BR-3101

ROLLSKIN MADERO PROFESSIONAL

TWIN STUDIO



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
SLOVO ÚVODEM	5
PRO KOHO NENÍ PŘÍSTROJ URČEN	7
UPOZORNĚNÍ	8
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	8
DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	10
LYMFATICKÝ SYSTÉM V NAŠEM TĚLE	11
SPRÁVNÁ PÉČE O LYMFATICKÝ SYSTÉM	12
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K TÉMATU LYMFATICKÉHO SYSTÉMU	13
BENEFITY MADERO MASÁŽE PRO VAŠE TĚLO	14
MADEROTERAPIE	16
MADEROTERAPIE PRO RŮZNÉ ČÁSTI TĚLA	17
HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE	20
OBSAH BALENÍ	20
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	21
POPIS PŘÍSTROJE	22
POPIS DISPLEJE	24
POPIS DISPLEJE - REŽIM PRÁCE S OBĚMA HLAVICEMI	25
POPIS DISPLEJE - REŽIM PRÁCE S JEDNOU HLAVICÍ	26
VÝMĚNA MASÁŽNÍHO VÁLCE - VELKÁ HLAVICE	27
VELKÁ HLAVICE S MASÁŽNÍM VÁLCEM	28
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	29
POUŽITÍ ELASTICKÝCH OBLEKŮ	30
ZAKOUPENÍ ELASTICKÝCH OBLEKŮ	32
SMĚRY POHYBU HLAVICE NA TĚLE	33
SMĚRY POHYBU HLAVICE NA TVÁŘI	34
MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE	35
POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE	55
BEAUTYRELAX VIDEO NA YOUTUBE	56
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	57
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	60
ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU	61
INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA	62
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	63
CERTIFIKACE	63
EU DISTRIBUTOR	63
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	64

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – Špičková technologie krásy pro domácí i profesionální použití

Vítejte ve světě profesionální estetiky v pohodlí domova! BeautyRelax je ryze česká značka, která od roku 2010 přináší inovativní přístroje pro péči o pleť, tělo a vlasy. Naše zařízení kombinují nejmodernější technologie s jednoduchým ovládáním, takže si můžete dopřát salonní péči bez nutnosti návštěvy kosmetického studia.



Proč si vybrat BeautyRelax?

Vysoká účinnost – Používáme stejné technologie jako profesionální salony (radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud).

Univerzální použití – Vhodné pro domácí i komerční využití.

Odborné poradenství – Pomůžeme vám vybrat ideální přístroj na míru vašim potřebám.

Nadstandardní služby – Rychlé doručení, záruční a pozáruční servis.

Naše kategorie přístrojů

Kosmetické přístroje – Pro dokonalou pleť bez vrásek, akné nebo pigmentace.

Přístroje na formování postavy – Redukce celulitidy, lifting a modelace kontur.

Masážní technologie – Lymfatické masáže, relaxace a regenerace svalů.

IPL depilace – Trvalé odstranění chloupků šetrnou cestou.

Špičková péče moderními technologiemi

Díky pokrokům v estetických technologiích si nyní můžete dopřát účinná aplikaci, která je zpravidla vnímána jako komfortní. Ať už řešíte:

- Vrásky, povadlou pleť nebo nedostatek elasticity
- Celulitidu, ochablé kontury nebo otoky
- Nechtěné chloupky nebo problematickou pokožku

S BeautyRelax dosáhnete viditelných výsledků šetrně, bezpečně a bez nepříjemných pocitů.

Vize zakladatele

„Od začátku naší cesty je naší prioritou zpřístupnit špičkové estetické technologie každému. Ať už hledáte přístroj pro osobní péči, nebo profesionální studio, nabízíme řešení s vysokou užitnou hodnotou, dlouhou životností a rychlou návratností investice.“

Martin Hrbek, zakladatel a odborný konzultant BeautyRelax

Ušetřete čas i peníze

Pravidelným používáním přístrojů BeautyRelax můžete výrazně snížit náklady na kosmetické procedury a zároveň mít svou péči plně pod kontrolou.

- Výsledky bez bolesti a zbytečného stresu
- Šetrná neinvazivní řešení pro všechny typy pleti
- Vybírejte z desítek modelů pro různé potřeby

Objevte kouzlo moderní estetiky a vyberte si svůj ideální přístroj v naší kompletní nabídce. Těšíme se, že s námi budete sdílet vášně pro krásu a inovace!



(+420) 737 196 160
mh@santadria.cz
shop.beautyrelax.cz
www.beautyrelax.cz
facebook.com/BeautyRelaxEquipment

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

MARTIN HRBEK odborný konzultant a školitel
SANTADRIA s.r.o. Mojžírovo nám. 75/2 Brno 62100 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru při zakoupení tohoto přístroje. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte celý návod k obsluze a seznámte se se všemi informacemi týkajícími se bezpečného a správného používání. Zvláštní pozornost věnujte upozorněním, bezpečnostním pokynům a kontraindikacím uvedeným v tomto dokumentu.

Používejte přístroj výhradně v souladu s návodem k obsluze a jeho určením. Dodržování uvedených zásad přispívá k bezpečnému provozu, dlouhé životnosti přístroje a především k ochraně zdraví uživatele. Tento návod má za cíl srozumitelně vysvětlit princip fungování přístroje a doporučený způsob jeho používání v rámci kosmetické a rekondiční péče.

Masážní přístroj **BeautyRelax Rollskin Madero Professional Twin Studio** je určen pro **neinvazivní povrchovou masáž** a je navržen tak, aby při správném používání poskytoval komfortní a bezpečný zážitek. Přístroj pracuje s mechanickou rotační masáží prostřednictvím aplikačních hlavic, které nepůsobí invazivně a nenarušují integritu pokožky.

Přístroj splňuje veškeré platné technické a bezpečnostní normy pro tento typ zařízení a je certifikován pro použití v zemích Evropské unie. Jeho konstrukce a použité materiály jsou přizpůsobeny i častému využívání, včetně komerčního provozu, za předpokladu dodržení všech hygienických, provozních a legislativních požadavků.

ÚVODNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘÍSTROJI A JEHO POUŽÍVÁNÍ

- Masážní přístroj **BeautyRelax Rollskin Madero Professional Twin Studio** spadá do kategorie **kosmetických a rekondičních masážních přístrojů**. **Nejedná se o zdravotnický prostředek** a přístroj **není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci jakýchkoliv onemocnění**.
- Přístroj využívá **mechanickou rotační masáž**, která působí výhradně na povrchové vrstvy měkkých tkání. Žádná část aplikačních hlavic neproniká pod povrch pokožky a použití je **neinvazivní**.
- Neinvazivní charakter přístroje přispívá k jeho šetrnosti při kosmetickém použití. Při komerčním provozu je však vždy nutné respektovat **aktuálně platnou legislativu**,

hygienické předpisy a požadavky na odbornou způsobilost obsluhy v dané zemi provozu.

- Přístroj je certifikován a splňuje požadavky kladené na bezpečnost elektrických zařízení tohoto typu. Veškeré elektronické komponenty jsou navrženy s důrazem na bezpečný a stabilní provoz.
- Intenzitu masáže je možné **individuálně nastavit** podle citlivosti uživatele a ošetřované oblasti. Při komerčním používání se doporučuje, aby se obsluha před zahájením práce s klienty seznámila s reakcí organismu na jednotlivá nastavení a aplikační hlavice.
- Při použití přístroje **není nutné využívat maximální intenzitu**. Masáž by měla být vždy vnímána jako příjemná a komfortní. Použití nesmí vyvolávat bolest, výrazný diskomfort nebo jiné nepříjemné pocity.
- Častější nebo nadměrné používání přístroje **nevede k rychlejším ani lepším výsledkům**. Doporučuje se dodržovat přiměřenou frekvenci aplikací a ponechat tělu dostatek času na regeneraci.
- Po aplikaci se doporučuje dbát na **dostatečný pitný režim** a běžnou péči o pokožku vhodnými kosmetickými přípravky v souladu s individuálními potřebami uživatele.
- V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů nebo pochybností ohledně používání přístroje se obraťte na odbornou podporu výrobce nebo distributora.

KONTAKTNÍ INFORMACE

V případě dotazů týkajících se produktu nebo jeho používání nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: mh@santadria.cz Produktový manažer **Martin Hrbek** Vám rád poskytne odborné informace a technickou podporu.

PRO KOHO NENÍ PŘÍSTROJ URČEN

Přístroj není doporučeno používat pro osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:



1. Celkové zdravotní stavy (preventivní omezení)

- akutní horečnaté stavy nebo celková fyzická indispozice
- akutní virové nebo bakteriální onemocnění
- výrazná únava, vyčerpání nebo oslabení organismu
- stav po nedávném chirurgickém zákroku (méně než 6 týdnů)
- těhotenství

2. Kardiovaskulární a cévní omezení

- závažné srdeční obtíže
- neléčený nebo nestabilní vysoký krevní tlak
- poruchy krevního oběhu v pokročilém stádiu
- stavy spojené se zvýšeným rizikem vzniku krevních sraženin
- žilní onemocnění v pokročilém stádiu (např. výrazné varixy)

3. Neurologické a metabolické stavy

- epilepsie
- závažné poruchy srážlivosti krve
- diabetes v pokročilém nebo nestabilním stavu

4. Kožní a lokální omezení (v místě aplikace)

- akutní zánětlivá nebo infekční kožní onemocnění
- otevřené rány, oděrky, popáleniny nebo čerstvé jizvy
- velmi citlivá, tenká nebo bolestivá pokožka se sklonem k tvorbě modřin
- kožní projevy nejasného původu

5. Implantáty a cizí tělesa

- přítomnost kardiostimulátoru
- kovové implantáty v oblasti aplikace, pokud by mechanický tlak vyvolával bolest nebo nepříjemné pocity

6. Další omezení použití

- osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných a návykových látek
- osoby se sníženou schopností vnímat bolest nebo nepohodlí
- osoby neschopné aktivní komunikace o svém aktuálním stavu během masáže

Důležité upozornění

Pokud si uživatel **není jistý svým aktuálním zdravotním stavem**, doporučuje se **konzultovat vhodnost použití přístroje s lékařem**. Použití přístroje je vždy **dobrovolné** a probíhá na **vlastní odpovědnost uživatele** při dodržení tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ

Vážený zákazníku, ochrana vašeho zdraví je pro nás při používání přístrojů z naší nabídky prioritou. Z tohoto důvodu uvádíme přehled situací a zdravotních stavů, při kterých **není používání přístroje doporučeno**. Tyto případy se zpravidla týkají **závažných nebo pokročilých zdravotních omezení**. Pokud jste fyzicky aktivní osoba a nemáte od svého ošetřujícího lékaře **výslovně omezenou či zakázanou pohybovou aktivitu**, je používání přístroje obecně považováno za vhodné. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem. Upozorňujeme, že během používání přístroje může docházet ke **zvýšené zátěži krevního oběhu**, podobně jako při běžné fyzické aktivitě. Tato zátěž může představovat **dočasné zvýšení nároků na činnost srdce**, což je individuální a závisí na celkovém zdravotním stavu uživatele. Z bezpečnostních důvodů **nedoporučujeme používat funkci vyhřívání a vzduchové masáže současně ve stejný okamžik**. Používání přístroje je vždy na vlastní odpovědnost uživatele a nenahrazuje odbornou lékařskou péči ani doporučení zdravotnického pracovníka.

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Masážní přístroj **BeautyRelax ROLLSKIN MADERO PROFESSIONAL TWIN STUDIO** je určen pro **kosmetické, relaxační a rekondiční masážní použití** na profesionální úrovni. Přístroj **není zdravotnickým prostředkem a není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci jakýchkoliv onemocnění**. Přístroj využívá **mechanickou rotační masáž** prostřednictvím válce integrovaného do aplikační hlavičky. Žádná z aplikačních hlavic **nenarušuje integritu pokožky**, nevyužívá jehly ani jiné invazivní prvky a **neproniká pod povrch pokožky**. Použití přístroje je **neinvazivní**. Přístroj je navržen pro **navození pocitu uvolnění svalového napětí**, zlepšení **subjektivního komfortu pokožky** a **kosmetickou péči o vzhled masírovaných partií**. Účinky se mohou lišit v závislosti na individuálních vlastnostech uživatele, způsobu použití a četnosti aplikace.



Použití v komerčním provozu

Při používání přístroje v komerčním provozu se doporučuje, aby obsluha disponovala **odpovídající odbornou kvalifikací nebo absolvovala kurz zaměřený na masážní techniky**, případně jiné vzdělání požadované platnou legislativou v místě provozu.

Rozsah oprávnění a požadavky na odbornou způsobilost pro komerční používání masážních přístrojů jsou **stanoveny právními předpisy jednotlivých států Evropské unie**. Provozovatel je povinen zajistit, aby používání přístroje probíhalo **v souladu s platnými zákony, vyhláškami a hygienickými předpisy** platnými v místě provozu.

Distributor a prodejce **SANTADRIA s.r.o.** odpovídá za vlastnosti výrobku **v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy**. Distributor ani prodejce **neodpovídá za škody vzniklé v důsledku použití přístroje v rozporu s tímto návodem k obsluze, s jeho určením nebo v rozporu s platnou legislativou v zemi použití**. Používání přístroje v komerčním provozu je možné pouze v případě, že provozovatel disponuje **odpovídajícím oprávněním dle aktuálně platných právních předpisů**. Tímto ustanovením **nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele**.

DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Příklad není doporučeno používat svépomocí. Použití by měla provádět jiná osoba, která může průběžně kontrolovat průběh masáže a reakce klienta.
- Pokud se během použití přístroje objeví **nepříjemné pocity**, výrazný diskomfort, nevolnost, pocit dušnosti, bušení srdce nebo psychická nepohoda, **použití přístroje ihned ukončete**.
- Při prvním použití nebo při seznamování se s přístrojem **vždy začínejte s nižší intenzitou a rychlostí masážního válce**. Intenzitu zvyšujte postupně a vždy s ohledem na individuální vnímání uživatele.
- Použití přístroje **zvažte v případě velmi tenké, citlivé nebo snadno pohmožditelné pokožky**. Pokud se i při mírném tlaku objevují podlitiny nebo bolestivost, použití přístroje se nedoporučuje.
- Použití přístroje může představovat **zvýšenou fyzickou zátěž organismu**, obdobně jako běžná masáž nebo lehká pohybová aktivita. Osoby se **závažnými nebo nestabilními potížemi krevního tlaku** by měly použití přístroje předem zvážit a řídit se seznamem kontraindikací uvedeným v tomto návodu.
- Osoby se **závažnými poruchami srážlivosti krve** nebo s jinými rizikovými stavy uvedenými v části „Kontraindikace“ by měly použití přístroje **konzultovat se svým lékařem** nebo se použití přístroje vyhnout.
- Frekvence a počet opakování masáže se mohou **lišit v závislosti na individuálních preferencích, stavu pokožky a subjektivním komfortu uživatele**. Doporučený počet sezení není závazný a výsledky se mohou u jednotlivých osob lišit.
- Pokud se uživatel v daný den **necítí v dobré fyzické nebo psychické kondici**, doporučuje se použití přístroje odložit.
- Příklad **BeautyRelax ROLLSKIN MADERO PROFESSIONAL TWIN STUDIO** není **zdravotnickým prostředkem**. Neslouží k diagnostice, léčbě ani prevenci jakéhokoliv onemocnění. Příklad je určen výhradně pro **kosmetickou a sportovní rekondiční masáž** za podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.

LYMFATICKÝ SYSTÉM V NAŠEM TĚLE

Lymfatická soustava je **jednosměrný systém** v lidském těle, jehož hlavním úkolem je **odvádění mezibuněčné (tkáňové) tekutiny** zpět do krevního oběhu. Lymfa (míza) proudí z mezibuněčných prostor prostřednictvím lymfatických kapilár a cév a postupně se vrací do krevního řečiště.

Lymfatický systém tvoří:

- lymfa (míza),
- lymfatické kapiláry,
- lymfatické cévy,
- lymfatická tkáň a lymfatické uzliny.

Jak lymfatický systém funguje

Lymfatické cévy jsou rozprostřeny po celém těle a každý den **přenesou z tkání zpět do krevního oběhu více než dva litry tkáňové tekutiny**. Tato tekutina je následně přefiltrována a znovu využita organismem.

Součástí lymfatických drah jsou **lymfatické uzliny**, drobné útvary velikosti fazole, kterých se v těle nachází více než sto. Tyto uzliny se podílejí na **filtraci lymfy** a hrají významnou roli v obranných procesech organismu. Při zvýšené zátěži (například při infekci) mohou být dočasně zvětšené a citlivé.

Základní funkce lymfatického systému

Lymfatický systém se podílí zejména na:

- odvádění přebytečné tkáňové tekutiny z tkání,
- transportu tuků ve formě drobných kapének,
- obranných mechanismech organismu,
- odvádění nežádoucích látek z tkání,
- transportu některých živin do krevního oběhu,
- udržování **vnitřní rovnováhy organismu** (homeostázy).

Možné projevy snížené funkce lymfatického systému

Při dlouhodobém přetížení nebo snížené aktivitě lymfatického systému se **u některých osob mohou objevovat různé nespecifické obtíže**, například:

- pocity únavy nebo těžkosti,
- sklon k zadržování tekutin,
- změny tělesné hmotnosti,
- trávicí obtíže,
- kloubní nebo svalová nepohoda,
- opakující se bolesti hlavy,
- častější výskyt kožních obtíží (např. akné, vyrážky).

Uvedené projevy jsou obecné a **nemusí nutně souviset výhradně s funkcí lymfatického systému**. V případě dlouhodobých nebo výrazných obtíží je vždy vhodné obrátit se na lékaře.

SPRÁVNÁ PÉČE O LYMFATICKÝ SYSTÉM



1. Dostatečný příjem tekutin

Tělo musí mít dostatečnou vláhu. Je to stejné, jako s autem, které potřebuje palivo, aby jezdilo. Obecně se deklaruje doporučený příjem tekutin 40ml na kilogram hmotnosti. Existuje však celá řada mýtů a pověr. Malé množství tekutin je problém, ale příliš velké množství příjmu tekutin je zbytečná zátěž pro náš organismus. Základem je pití čisté vody. Množství přizpůsobit podle hmotnosti, tělesné aktivity, ale i podle ročního období.



2. Použití kompresních návleků

Měli bychom si dát pozor na nošení velmi těsného oblečení. Nejčastěji se to může týkat např. ponožek. Přesto však existují případy, kdy je naopak doporučeno používat speciální kompresní návleky. Obvykle tomu předchází doporučení od lékaře. Kompresní návleky na vybrané partie těla napomáhají otoky snížit a slouží jako prevence proti vzniku cévní trombózy.



3. Pohyb

Pohyb má celou řadu pozitivních vlivů na naše tělo. Nemusí se jednat o extrémní sportovní výkony. Naopak. Po zdravotní stránce je velice prospěšná krátká procházka. Jakákoliv lehká aerobní aktivita. Zlepší se krevní oběh. Krev se okyslíčí. Podpoříte trávení. Uvolní se endorfiny, které přispívají k lepší náladě. Pohybem se vhodnou formou aktivujete lymfatický systém.



4. Sauna

Saunování má celou řadu příznivých účinků pro tělo. Podporuje tvorbu endorfinů, které potlačují příznaky deprese. Dochází k uvolnění svalů. Snížení míry stresu. Dochází k celkovému zlepšení nálady. Použití je ideální v měsících, kdy je méně slunečního svitu. Posílíte imunitu. Perfektně se uvolníte a budete celkově mnohem odolnější. Krev se rozproudí (podobně, jako při sportu). Z těla se vyplaví škodliviny a toxické látky.



5. Složení stravy

Výživa patří mezi jeden z nejdůležitějších faktorů, která ovlivňuje správnou činnost našeho organismu. Měli bychom co nejméně konzumovat průmyslově zpracované potraviny. Vyhledávat stravu bohatou na bílkoviny. Pokud je to jen možné, řídit se zdravým jídelníčkem - co konzumovat ve větší a menší míře. Zejména vysoký příjem nekvalitních tuků je jeden z dalších faktorů, se kterým se lymfatický systém musí složitě vypořádat.



6. Masáž

Lymfatický systém je možné velmi efektivně rozproudit pomocí ruční nebo přístrojové masáže. Velkým trendem poslední doby je právě využití přístrojů na masáž těla. Můžete se snadno zaměřit nejen na oblast nohou, ale také na další partie těla při použití příslušného návleku (pas nebo paže).

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K TÉMATU LYMFATICKÉHO SYSTÉMU

Co může mít nepříznivý vliv na lymfatický systém?

Mezi faktory, které jsou **obecně spojovány se sníženou aktivitou lymfatického systému**, patří zejména dlouhodobý stres, nepravidelný životní styl, nevyvážená strava s vysokým podílem sladkých a tučných jídel a nedostatek pohybu. Vliv těchto faktorů je individuální a může se u každého člověka lišit.

Jak lze činnost lymfatického systému přirozeně podpořit?

Mezi běžně doporučované způsoby podpory patří zejména:

- pravidelný a přiměřený pohyb,
- dostatečný příjem tekutin během dne,
- střídání teplé a chladnější vody při sprchování,
- pobyt v sauně (pokud není zdravotně omezen),
- vyvážený a pestrý jídelníček,
- jemné pohybové aktivity, například jóga,
- ruční nebo přístrojová lymfatická masáž v rámci relaxační a kosmetické péče.

Uvedené postupy nenahrazují odbornou zdravotní péči.

Co bývá nejčastěji spojováno se zpomalením lymfatického systému?

Se zpomalením toku lymfy je často spojován dlouhodobý stres nebo výrazné a rychlé změny tělesné hmotnosti. V některých případech může docházet ke **zvýšenému zadržování tekutin v určité části těla**, což se může projevit pocitem napětí nebo objemovými změnami dané oblasti.

Existují další možnosti podpory lymfatického systému?

Na trhu je dostupná řada bylinných čajů a doplňků stravy, které jsou **tradičně spojovány s podporou přirozených očištných procesů organismu**. Tyto produkty obvykle obsahují směsi bylin, jako jsou například kopřiva, přeslička, pampeliška, citronová tráva nebo řebříček. Účinky bylinných přípravků jsou individuální a jejich užívání by mělo být v souladu s doporučením výrobce. V případě zdravotních obtíží je vhodné poradit se s lékařem nebo lékárníkem.

BENEFITY MADERO MASÁŽE PRO VAŠE TĚLO


Uvolnění svalového napětí a pocit relaxace

Madero masáž je oblíbená mezi osobami s aktivním i sedavým životním stylem, stejně jako u lidí, kteří při práci dlouhodobě stojí. Po zvýšené fyzické zátěži nebo dlouhém dni mohou svaly působit zatuhle a unaveně. Masáž pomocí rotačního válce může přispět k uvolnění svalového napětí a k celkovému pocitu fyzické úlevy. Pravidelné používání umožňuje dopřát svalům relaxaci i v pohodlí domova.




Lokální podpora prokrvení pokožky

Masáž rotačním válcem je spojována s dočasnou stimulací lokálního krevního oběhu v místě aplikace. Tento efekt je vnímán zejména v oblasti dolních končetin, kde může přispět k pocitu lehkosti a tepla. Vnímání účinku je individuální a závisí na celkovém zdravotním stavu uživatele. Přístroj není určen jako zdravotnický prostředek a jeho používání nenahrazuje lékařskou péči.

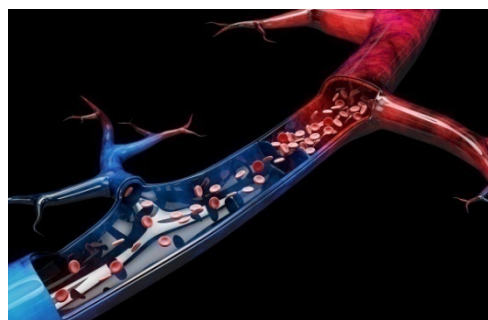

Podpora přirozených procesů

Lymfatický systém se podílí na odvádění přebytečné tekutiny z tkání. Mechanická masáž dolních končetin může podpořit přirozené procesy spojené s tokem lymfy a přispět k subjektivnímu pocitu lehčích nohou a uvolnění. Účinek je individuální a může se u jednotlivých osob lišit.

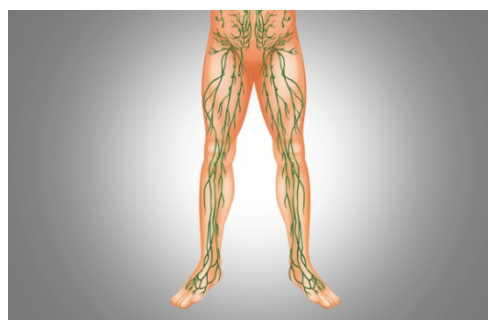

Pocit regenerace po fyzické zátěži

Po intenzivní fyzické aktivitě se mohou objevit pocity únavy, ztuhlosti nebo nepohodlí ve svazech. Masáž je často využívána jako součást relaxační a regenerační rutiny, která může přispět k celkovému komfortu svalů po zátěži. Nejedná se o léčbu ani náhradu odborné péče.



Uvolnění oblasti pat a chodidel

Chodidla jsou při dlouhém stání, chůzi nebo turistice výrazně zatěžována. Masáž rotačním válcem lze aplikovat nejen na stehna a lýtka, ale také na oblast chodidel. Jemná mechanická stimulace může přispět k pocitu uvolnění a relaxace této namáhané části těla.



Závěrečné upozornění

Madero masáž je relaxační a kosmetická metoda. Účinky jsou individuální a mohou se u jednotlivých uživatelů lišit. Přístroj není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění. V případě zdravotních obtíží nebo pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.

MADEROTERAPIE

Madero masáž (masáž pomocí dřevěných nástrojů) je **kosmetická masážní technika**, která využívá anatomicky tvarované masážní prvky k **mechanickému působení na povrchové vrstvy měkkých tkání**. Masážní nástroje umožňují **cílený tlak a pohyb** na vybrané oblasti těla, jako jsou stehna, hýždě, boky, břicho, záda nebo paže, s cílem **zlepšit subjektivní komfort pokožky a navodit pocit uvolnění**.

Masáž působí **mechanicky a neinvazivně**, přičemž může **přispět k pocitu lehkosti, prohrátí a uvolnění masírovaných partií** a ke **zlepšení vzhledu pokožky**, zejména v oblastech s nerovnostmi. Vnímání účinků je **individuální** a může se lišit v závislosti na četnosti aplikace, použité intenzitě a individuálních vlastnostech uživatele.

Masáž lze provádět na různých částech těla, zejména na **nohách, břiše, pase, bocích, zádech, pažích**, a při použití odpovídající techniky a jemnější intenzity také na **obličeji a v oblasti krku**. Aplikace je **neinvazivní**, nenarušuje integritu pokožky a probíhá výhradně na jejím povrchu.

Doporučená frekvence a délka aplikace nejsou závazné a **měly by být vždy přizpůsobeny individuálním preferencím a komfortu uživatele**.

Hlavní charakteristiky masážní techniky

- Přispívá ke **zlepšení vzhledu pokožky** v masírovaných oblastech
- Může navodit **pocit uvolnění a relaxace svalového napětí**
- Podporuje **kosmetickou péči o kontury těla**
- Přispívá k **subjektivnímu pocitu lehkosti a komfortu pokožky**
- Je **neinvazivní a bez porušení povrchu pokožky**
- Vhodná jako součást **kosmetické a rekondiční péče**

MADEROTERAPIE PRO RŮZNÉ ČÁSTI TĚLA







HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE

- Kosmetická masážní metoda zaměřená na **zlepšení vzhledu pokožky** v oblastech s nerovnostmi
- Mechanické působení na povrchové vrstvy tkání v masírované oblasti
- Může přispět k **pocitu prohrátí a uvolnění** masírovaných partií
- Může přispět ke **zlepšení subjektivního vnímání pružnosti pokožky**
- Příjemný **relaxační účinek na svalové napětí** ve vybraných částech těla
- **Neinvazivní charakter** masáže bez narušení povrchu pokožky
- Navrženo pro **komfortní a šetrné používání** při dodržení návodu k obsluze
- Určeno zejména pro oblasti: **hlava, břicho, boky, hýždě, stehna a lýtka**
- **Robustní kovová konstrukce** přístroje zajišťující dlouhou životnost
- Použití **kvalitních materiálů** umožňujících časté využití v komerčním provozu
- Hlavní jednotka vybavena **dotykovým ovládacím displejem**
- Aktuální nastavení intenzity masáže je **vizuálně indikováno světelnou signalizací** na aplikační hlavici
- Změnu intenzity masáže lze **ovládat přímo na aplikační hlavici** pomocí integrovaného ovládacího tlačítka

OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka ve stolním provedení.
- 1x Velká aplikační hlavice.
- 1x Malá aplikační hlavice.
- 4x Masážní vyměnitelný válec pro velkou hlavici.
- 3x Masážní vyměnitelný válec pro malou hlavici.
- 2x Kovové držáky na hlavice.
- 1x Napájecí kabel 220V.
- 1x Návod k obsluze.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Rollskin Madero Professional Twin Studio je vysoce kvalitní profesionální masážní zařízení určené pro **kosmetickou a rekondiční masáž** v komerčním i domácím prostředí. Precizní konstrukční zpracování a odolný mechanismus zajišťují **dlouhou životnost přístroje i při častém používání**. Přístroj je vybaven **dvěma aplikačními hlavicemi** – větší hlavice je určena pro aplikaci **rozsáhlejších partií těla**, menší hlavice je navržena pro **menší a citlivější oblasti**, například oblast hlavy. Součástí balení je **sada vyměnitelných masážních válců**, které umožňují přizpůsobit **intenzitu a charakter masáže** podle individuálních preferencí uživatele. Masážní válce jsou dostupné v provedení s **měkkými silikonovými prvky** nebo s **pevnějšími masážními segmenty**, což umožňuje volbu mezi jemnější a intenzivnější formou mechanické masáže. Každá aplikační hlavice je vybavena **ergonomicky tvarovanou rukojetí**, která usnadňuje manipulaci a umožňuje komfortní aplikace i hůře dostupných oblastí těla. Přístroj je navržen pro **neinvazivní povrchovou masáž**, jejímž cílem je **navození pocitu uvolnění svalového napětí a zlepšení subjektivního komfortu pokožky** při dodržení podmínek uvedených v návodu k obsluze.



POPIS PŘÍSTROJE

1. Velká aplikační hlavice s rotačním válcem
2. Malá aplikační hlavice s rotačním válcem
3. Dotykový displej přístroje
4. Mřížka ventilátoru přístroje
5. Tlačítko **ON/OFF**




POPIS PŘÍSTROJE

1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Mřížka ventilátoru přístroje
3. Držák hlavice
4. Hlavní tlačítko **ON/OFF**
5. Zásuvka pro připojení napájecího kabelu




POPIS DISPLEJE

- 1. Volba režimu práce s jedním typem hlavice*
- 2. Volba režimu práce s oběma hlavicemi současně*

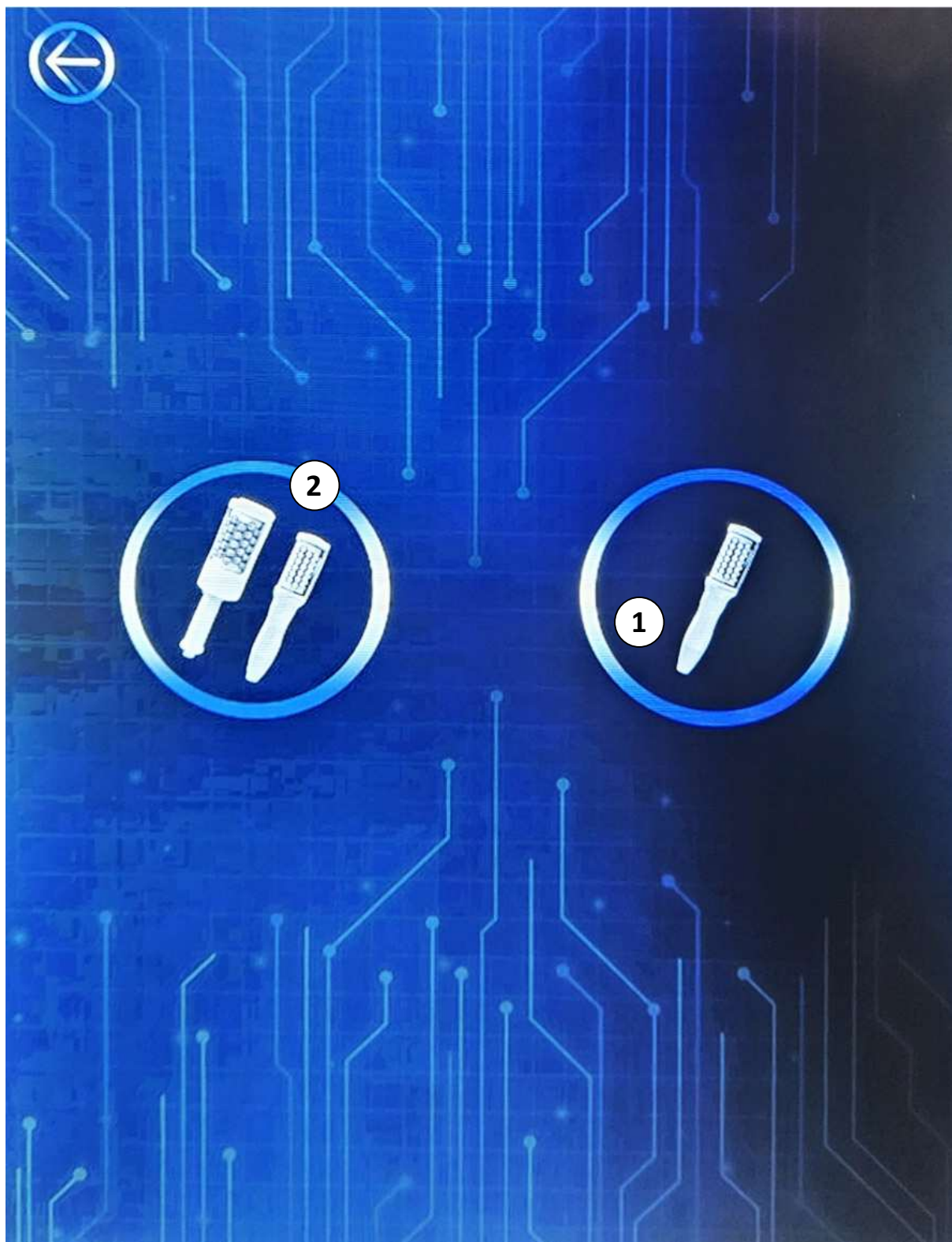


POPIS DISPLEJE - REŽIM PRÁCE S OBĚMA HLAVICEMI

1. návrat do předchozí nabídky
2. změna směru rotace masážního válce velké hlavice
3. změna směru rotace masážního válce velké hlavice
4. čas masáže pro velkou hlavici
5. rychlost masážního válce pro velkou hlavici
6. tlačítko **START/STOP** pro velkou hlavici
7. změna směru rotace masážního válce malé hlavice
8. změna směru rotace masážního válce malé hlavice
9. čas masáže pro malou hlavici
10. rychlost masážního válce pro malou hlavici
11. tlačítko **START/STOP** pro malou hlavici

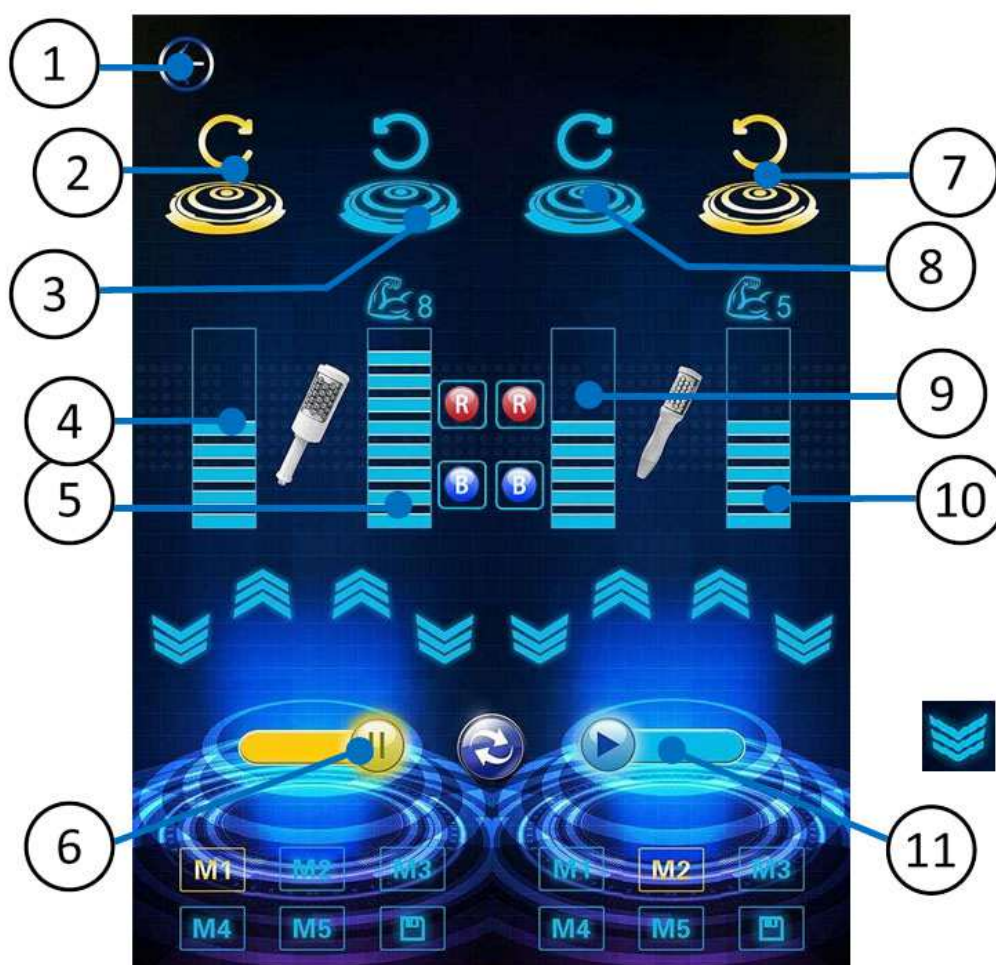

POPIS DISPLEJE - REŽIM PRÁCE S JEDNOU HLAVICÍ

1. *Návrat do předchozí nabídky*
2. *Výběr velké masážní hlavice*
3. *Změna směru rotace masážního válce*
4. *Čas masáže*
5. *Tlačítko **START/STOP***
6. *Výběr malé masážní hlavice*
7. *Změna směru rotace masážního válce*
8. *Rychlost masážního válce*
9. *Uložení parametrů masáže do paměti*

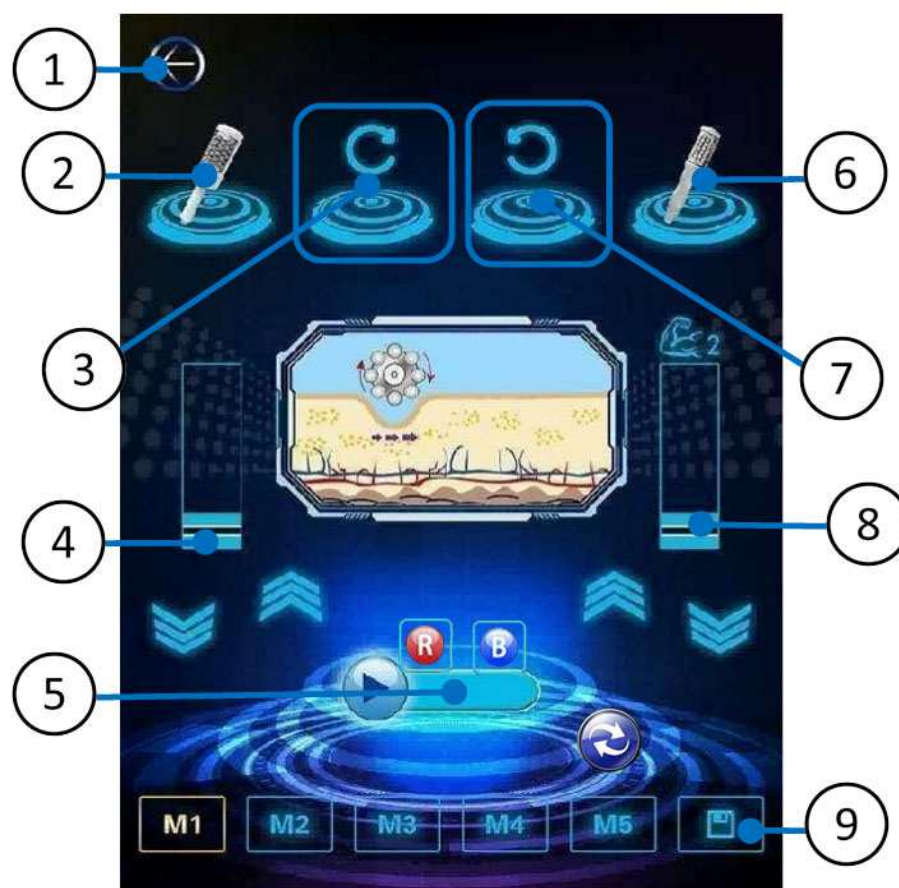

VÝMĚNA MASÁŽNÍHO VÁLCE - VELKÁ HLAVICE

Velká a malá masážní hlavice umožňuje použití tří různých masážních válců. Každý válec má plochu z jiného materiálu, které je možné na těle vnímat s různou intenzitou. Zvolte vždy typ válce, který bude nejvíce vyhovovat potřebám uživatele. **Instalaci a výměnu válce provádějte vždy, když je přístroj vypnutý.**

Při výměně masážního válce pro velkou hlavici postupujte následovně:



1. Stiskněte tlačítka na boční straně horního krytu masážní hlavice
2. Odstraňte horní kryt masážní hlavice a vysuňte tlakem masážní válec
3. Zatlačte masážní válec do masážní hlavice a vraťte nazpět horní kryt
4. Masážní hlavice je připravena k použití



[VIDEO - POSTUP VÝMĚNY VÁLCE]

VELKÁ HLAVICE S MASÁŽNÍM VÁLCEM

1. Čas masáže
2. Rychlost rotace masážního válce
3. Změna směru rotace masážního válce
4. START/STOP
5. Rychlost rotace masážního válce
6. Tlačítko změny rychlosti masáže
7. Tlačítko změny směru rotace válce (na boční straně hlavice)



POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Hlavní jednotku připojte pomocí napájecího kabelu do elektrické zásuvky odpovídající specifikaci přístroje. Jednotku umístěte tak, aby **napájecí kabel nebyl nadměrně napnutý ani mechanicky namáhaný**. V případě potřeby lze použít vhodný prodlužovací kabel. Hlavní jednotku umístěte na **rovnou a stabilní plochu**. Pro snadnější manipulaci při aplikaci různých částí těla se doporučuje umístění na **mobilní stolek**.
2. Během provozu **hlavní jednotku nezakrývejte**. Je nutné zajistit volnou cirkulaci vzduchu. **Ventilační mřížky**, zejména na boční straně přístroje, musí zůstat po celou dobu používání volné.
3. Před spuštěním přístroje ověřte, že je **napájecí kabel pevně připojen** k hlavní jednotce a že jsou **kabely obou aplikačních hlavic správně zapojeny** do příslušných konektorů. Každý konektor je určen pro konkrétní zdířku a musí být **zajištěn otočným fixačním prstencem**.
4. Přístroj zapněte stisknutím **hlavního tlačítka ON/OFF** na těle jednotky.
5. Na barevném dotykovém displeji nastavte **požadovaný režim práce**, zvolte typ aplikační hlavy a **intenzitu (rychlost) rotace masážního válce** dle individuálních preferencí uživatele.
6. Vždy začínejte s **nižší intenzitou rotace masážního válce** a případné zvýšení provádějte postupně. Masáž by měla být **komfortní a příjemná**, nikoliv bolestivá.
7. Při aplikaci lze na masážní válec vyvíjet **mírný tlak**, vždy s ohledem na velikost ošetřované partie a subjektivní vnímání uživatele. Začínejte s menším tlakem a hlavici **plynule vedte po povrchu pokožky**. Průběžně komunikujte s klientem a intenzitu upravujte tak, aby nedocházelo k nepříjemným pocitům.
8. Doporučená maximální doba nepřetržitého použití přístroje je **60 minut**. Frekvence opakování aplikace by měla být **přizpůsobena individuálním preferencím, komfortu uživatele a charakteru aplikace**.
9. Při použití aplikačních hlavic **není nutné aplikovat masážní olej, krém ani gel**. Rotační válec je navržen tak, aby se po pokožce pohyboval plynule i bez použití kosmetických přípravků. Použití olejů může zvýšit náročnost následné údržby přístroje.
10. Pokud je aplikační hlavy vybavena **světelnou (fotonovou) funkcí**, doporučuje se, aby měl uživatel během aplikace **zavřené oči**. Použití speciálních ochranných pomůcek není při běžném použití vyžadováno.
11. Po ukončení práce doporučujeme ponechat přístroj **v pohotovostním režimu po dobu alespoň 5 minut**, aby došlo k postupnému ochlazení elektronických komponent a k zachování dlouhé životnosti přístroje.

POUŽITÍ ELASTICKÝCH OBLEKŮ

U metody robotické maderoterapie (masáž pomocí rotačního válce) je doporučeno používat elastické tělové obleky z několika důležitých důvodů, které zlepšují účinnost a pohodlí během masáže:



M | L | XL | XXL



Naskenuj a objednávej!

1. Hygiena a ochrana pokožky

Elastický oblek vytváří **ochrannou vrstvu mezi pokožkou a aplikační hlavicí přístroje**, čímž přispívá k udržení hygienických podmínek při použití přístroje, zejména při střídání více uživatelů. Zároveň omezuje přímý kontakt hlavice s pokožkou a může **snížit riziko mechanického podráždění**. Oblek je určen k opakovanému použití při dodržení pravidel hygieny a údržby.

2. Plynulejší pohyb aplikační hlavice

Použití elastického obleku umožňuje **plynulejší klouzáni rotačního válce po povrchu těla**, což zvyšuje komfort aplikace a omezuje nežádoucí tahání nebo napínání pokožky. Oblek usnadňuje manipulaci s hlavicí a přispívá k **rovnoměrnému vedení pohybů** po ošetřované oblasti.

3. Rovnoměrné rozložení mechanického tlaku

Elastický oblek pomáhá **rovnoměrně rozložit mechanický tlak působící na povrch pokožky**, čímž přispívá k vyváženému a kontrolovanému průběhu masáže. To umožňuje konzistentní působení přístroje na celé ošetřované ploše.

4. Zvýšení komfortu během aplikace

V některých oblastech těla může být mechanické působení přístroje vnímáno jako méně komfortní. Elastický oblek **snižuje tření mezi pokožkou a hlavicí**, čímž zvyšuje celkový komfort aplikace, zejména při aplikaci citlivějších partií.

5. Podpora rovnoměrného působení přístroje

Použití elastického obleku přispívá k **stabilnímu kontaktu aplikační hlavice s povrchem těla** a umožňuje rovnoměrné vedení masáže na různých částech těla. Díky tomu je aplikace přehlednější, kontrolovatelnější a komfortnější pro uživatele.



ZAKOUPENÍ ELASTICKÝCH OBLEKŮ

Obleky jsou v různých velikostech. Nakupujte na shop.beautyrelax.cz



Tělový oblek pro
masáž přístrojem
BeautyRelax Rollskin
BodyShape
Professional velikost M

289 Kč



Tělový oblek pro
masáž přístrojem
BeautyRelax Rollskin
BodyShape
Professional velikost L

289 Kč



Tělový oblek pro
masáž přístrojem
BeautyRelax Rollskin
BodyShape
Professional velikost XL

289 Kč



Tělový oblek pro
masáž přístrojem
BeautyRelax Rollskin
BodyShape
Professional velikost
XXL

289 Kč

Naskenuj a objednávej!




SMĚRY POHYBU HLAVICE NA TĚLE

Při pohybu aplikační hlavice na těle je vždy třeba následovat směr šipek na níže uvedeném obrázku.



SMĚRY POHYBU HLAVICE NA TVÁŘI

Při pohybu aplikační hlavice na tváři je vždy třeba následovat směr šipek na níže uvedeném obrázku.

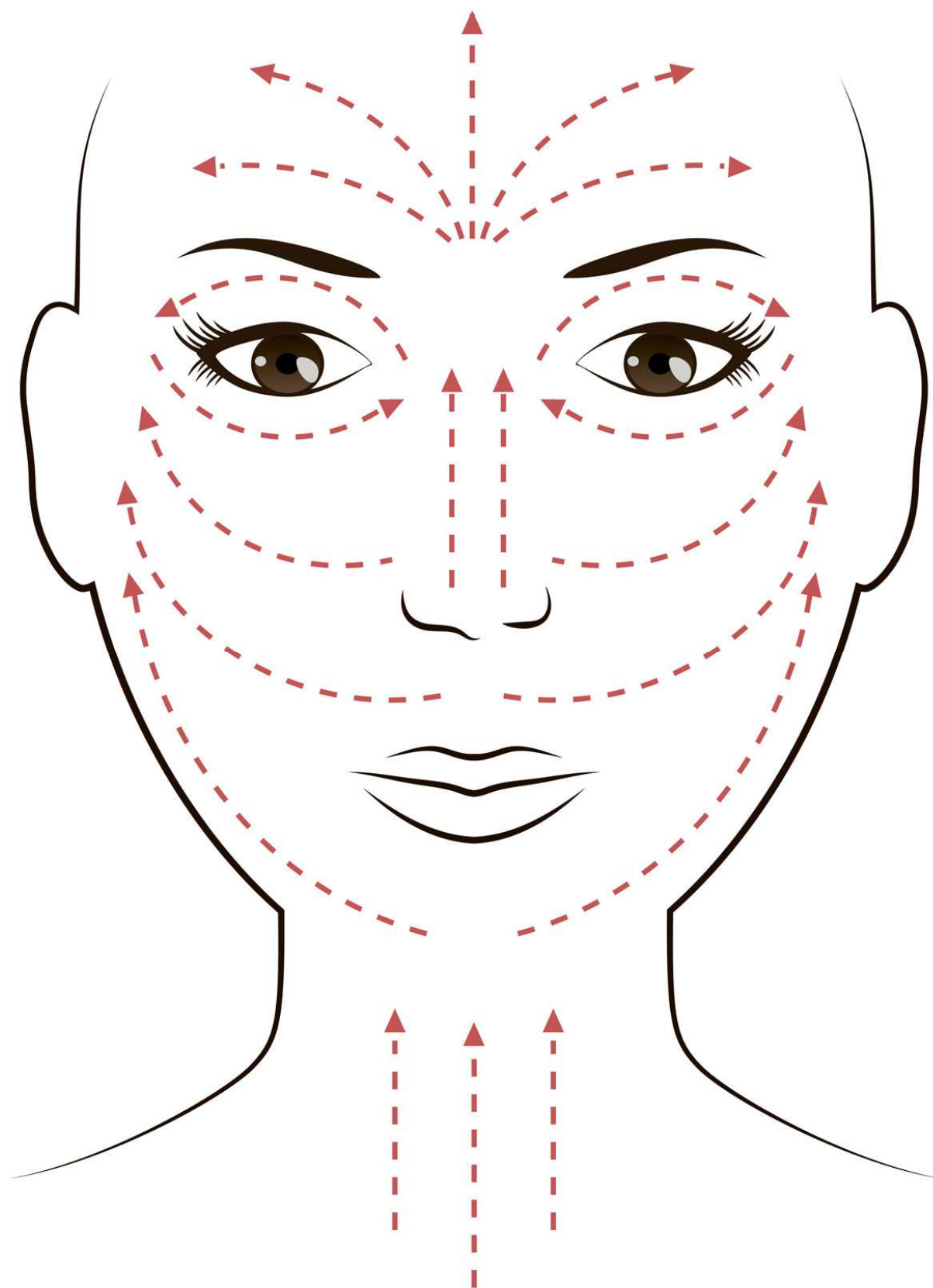

MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE


























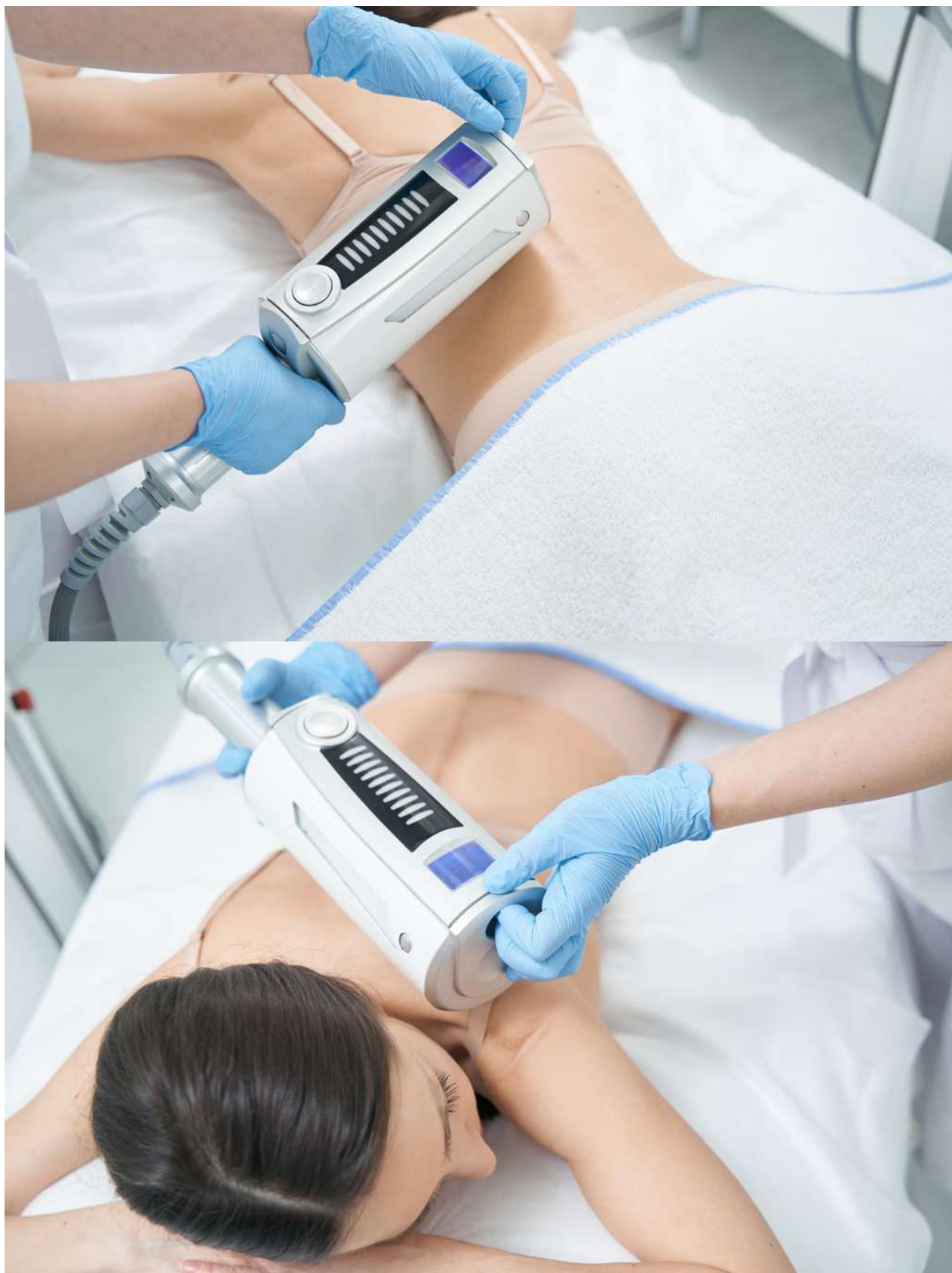
















POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Příklad **není doporučeno používat svépomocí**. Použití by měla provádět **jiná osoba**, která přístroj obsluhuje, zatímco uživatel je v pozici klienta. Klient by měl být během aplikace **v pohodlné, stabilní poloze**, zpravidla vleže nebo v jiné vhodné relaxační poloze.
2. Před zahájením aplikace by měl klient **odložit veškeré šperky, hodinky a další kovové nebo pevné předměty**, zejména v oblasti, která bude masírována, aby nedošlo k nepohodlí nebo mechanickému poškození.
3. Příklad **nevyžaduje pravidelnou technickou údržbu ani dokupování spotřebního materiálu**. Je však nutné dodržovat pokyny pro čištění a hygienu uvedené v tomto návodu.
4. Rychlost rotace masážního válce vždy **přizpůsobte individuálním preferencím a komfortu klienta**. Masáž by měla být vnímána jako příjemná a komfortní.
5. Zvýšenou pozornost věnujte zejména použití **v oblasti obličeje**, kde je pokožka citlivější. V těchto partiích používejte **nižší intenzitu a jemnější nastavení** masáže.
6. Při komerčním používání přístroje se doporučuje **předem ověřit, zda se na klienta nevztahují omezení nebo kontraindikace uvedené v tomto návodu**. Vhodnou praxí je **písemné potvrzení klienta**, že si je vědom těchto omezení a že se ho žádné z nich netýká.
7. Během používání přístroje pravidelně kontrolujte, aby **nedocházelo k nadměrnému ohýbání, přiskřípnutí nebo mechanickému namáhání** napájecího kabelu ani kabelů aplikačních hlavic. Poškozené kabely mohou vést k nesprávné funkci přístroje nebo jeho trvalému poškození.
8. Pokud si v jakékoliv fázi používání přístroje **nejste jisti správným postupem**, obraťte se na informační a servisní podporu výrobce nebo distributora. Rádi vám poskytneme další informace a doporučení.

BEAUTYRELAX VIDEO NA YOUTUBE

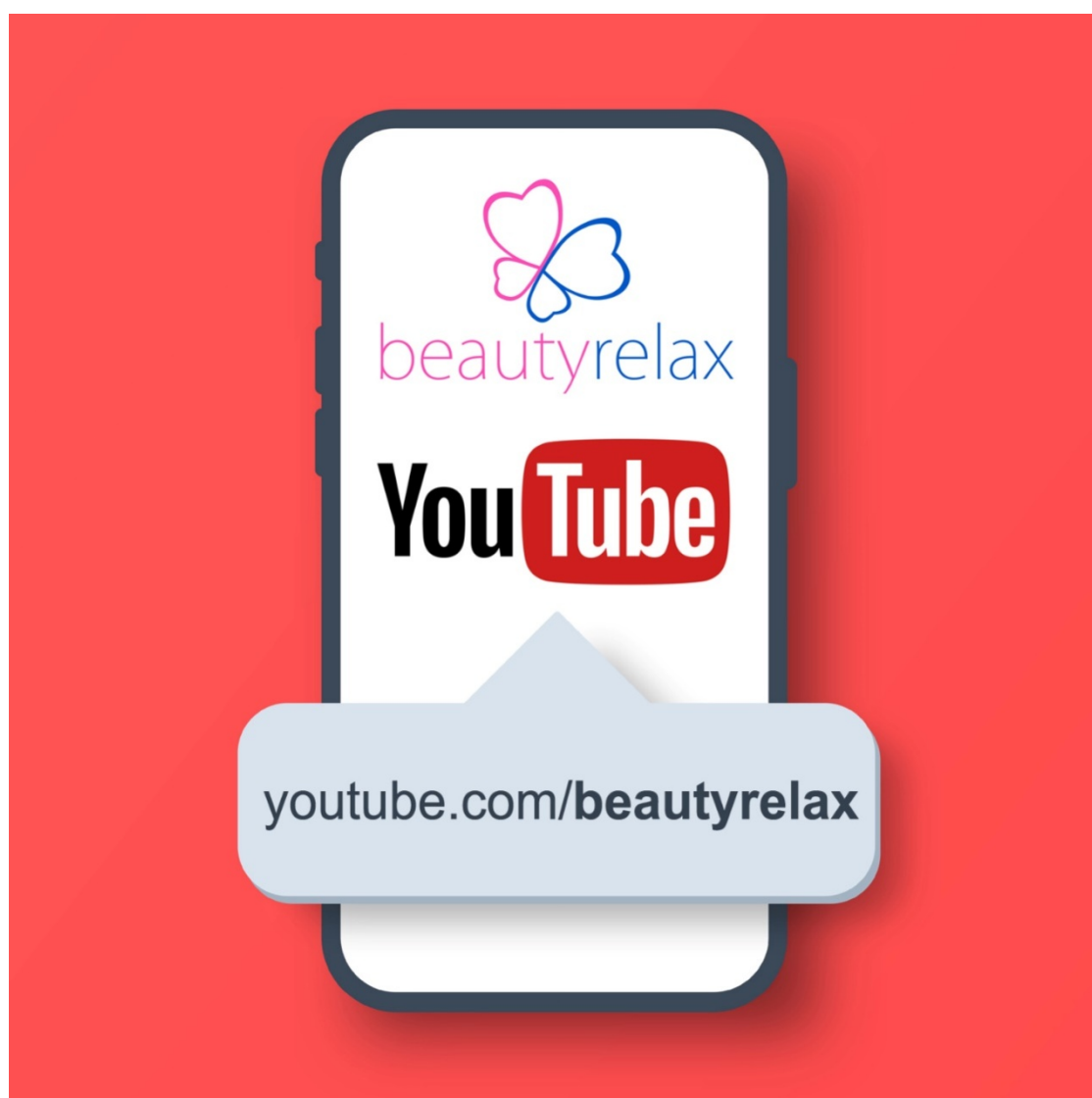

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

JAK DLOUHO OBVYKLE TRVÁ MASÁŽ TĚLA METODOU MADEROTERAPIE?

Maderoterapie je **kosmetická a relaxační masážní technika** prováděná pomocí speciálních dřevěných nástrojů. Jedna masážní aplikace obvykle trvá **přibližně 30 až 40 minut**, přičemž konkrétní délka se vždy přizpůsobuje **rozsahu aplikace, individuálním potřebám klienta a zvoleným partiím těla**.

Orientační délka masáže podle rozsahu

Masáž větší části těla (např. celé nohy, trup, kombinace partií) Obvykle trvá přibližně **40–60 minut**, aby byl zajištěn dostatek času na rovnoměrné a plynulé aplikace jednotlivých oblastí.

Masáž vybraných partií Masáž zaměřená pouze na konkrétní oblast (např. stehna, hýždě nebo záda) obvykle trvá **30–40 minut**.

Frekvence a délka masážního programu

Frekvence aplikací V praxi se maderoterapie často zařazuje **1–3× týdně**, zejména na začátku programu. Frekvence se vždy přizpůsobuje individuálním možnostem a preferencím klienta.

Délka programu Masážní program se běžně plánuje v rozsahu **několika týdnů**, přičemž délka závisí na osobních cílech klienta a reakci organismu. Uvedené údaje jsou orientační. Výsledky a subjektivní vnímání účinku se mohou u jednotlivých osob lišit.

NA KTERÉ ČÁSTI TĚLA SE MADEROTERAPIE BĚŽNĚ POUŽÍVÁ?

Maderoterapie se využívá na různé části těla v rámci **kosmetické a relaxační péče**.

Nejčastěji ošetřované oblasti

Nohy

- stehna
- hýždě
- lýtka

Břicho a pas

- oblast břicha
- boky

Paže

- horní i dolní část paží

Záda

- dolní, střední i horní část zad

Obličej a krk

- obličej (s použitím menších nástrojů)
- krk

Rozsah aplikace se vždy stanovuje **po dohodě s klientem**.

MOŽNÉ ÚČINKY MADEROTERAPIE (OBECNĚ UVÁDĚNÉ)

V rámci kosmetické praxe je maderoterapie spojována zejména s těmito účinky:

- podpora **celkového prokrvení pokožky**,
- podpora **pocitu lehkosti a uvolnění**,
- zlepšení **vzhledu pokožky**,
- **relaxace svalového napětí**,
- příjemný **regenerační a relaxační efekt**.

Maderoterapie **nenahrazuje lékařskou péči** a není léčebným výkonem.

SMĚR A ZPŮSOB POHYBU PŘI MADEROTERAPII

Při masáži se volí **plynulé, rytmické a přiměřené pohyby**, které respektují přirozené linie těla.

Obecné zásady

- pohyby jsou vedeny **od periferních částí těla směrem k trupu**,
- tlak je **rovnoměrný a přizpůsobený citlivosti klienta**,
- masáž **nesmí být bolestivá** ani nepříjemná.

Specifika podle oblastí

- **Nohy a paže:** pohyby obvykle směřují zespodu nahoru
- **Břicho:** jemné kruhové pohyby, vždy s ohledem na komfort klienta
- **Záda:** tahy směrem od páteře do stran
- **Obličej a krk:** velmi jemná technika, menší nástroje, minimální tlak

JAKÉ PARTIE LZE OŠETŘIT PŘI JEDNÉ APLIKACI?

Během jedné masáže lze kombinovat více oblastí, například:

- nohy + hýždě
- břicho + boky
- záda + paže
- obličej + krk

Rozsah aplikace závisí na **časové délce masáže a individuální dohodě**.

JAKOU SILOU TLAČIT PŘI MADEROTERAPII?

Síla tlaku se vždy volí **individuálně** a přizpůsobuje se:

- ošetřované oblasti,
- citlivosti klienta,
- fázi masáže.

Orientační rozdělení tlaku

- **Lehký tlak:** obličej, krk, citlivé oblasti
- **Střední tlak:** většina těla
- **Intenzivnější tlak:** pouze po dohodě s klientem a bez vzniku bolesti

Masáž musí být vždy **komfortní a bezpečná**.

DOPORUČENÍ PŘED A PO MADEROTERAPII (STRAVA A REŽIM)

Před masáží

- lehké jídlo alespoň **1–2 hodiny předem**,
- dostatečná **hydratace**,
- vyhnout se alkoholu a těžkým jídlům.

Po masáži

- pokračovat v **pitném režimu**,
- lehká a vyvážená strava,
- dopřát tělu **odpočinek**.

ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ

Maderoterapie je **kosmetická a relaxační masážní služba**. Nenahrazuje zdravotní péči a není určena k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění. V případě zdravotních obtíží je vždy nutné konzultovat lékaře.

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma **SANTADRIA s.r.o.**, IČO: 29195454, DIČ: CZ29195454, tímto informuje zákazníka, že výrobek je určen ke relaxačnímu **použití** v souladu s návodem k obsluze a **není zdravotnickým prostředkem** ani neslouží k diagnostice, prevenci nebo léčbě jakéhokoli onemocnění.

Prodávající odpovídá za vlastnosti výrobku v rozsahu stanoveném **platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky**, zejména za shodu výrobku s technickými a bezpečnostními požadavky v okamžiku jeho uvedení na trh.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledku:

- používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bezpečnostními pokyny nebo určeným účelem použití,
- neodborného, nevhodného nebo nadměrného používání výrobku,
- používání výrobku osobami, u nichž je jeho použití podle návodu kontraindikováno,
- zásahů do výrobku, jeho úprav, oprav nebo manipulace provedených neoprávněnou osobou,
- používání výrobku v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je výrobek používán.

V případě **komerčního používání výrobku** bere zákazník na vědomí, že **odpovědnost za splnění veškerých požadavků vyplývajících z platné legislativy**, zejména v oblasti odborné způsobilosti obsluhy, licencí, povolení nebo jiných zákonných podmínek, **nese výhradně provozovatel** zařízení. Proávající nenese odpovědnost za právní důsledky vyplývající z komerčního používání výrobku v rozporu s právními předpisy platnými v konkrétní jurisdikci.

Tato doložka **neomezuje ani nevylučuje práva zákazníka**, která mu náleží podle závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele, ani odpovědnost prodávajícího za vady výrobku či škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu, v jakém ji nelze podle práva vyloučit.

ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU

Pravidelná a správná údržba přístroje je nezbytná, zejména v případě, že je přístroj používán více osobami. Dodržování níže uvedených pokynů přispívá k zachování hygieny, bezpečnosti a správné funkčnosti přístroje.

Při údržbě přístroje dbejte zejména na následující zásady:

- Povrch rotačního válce a dalších částí, které přicházejí do přímého kontaktu s pokožkou, je nutné po každém použití důkladně očistit. K čištění doporučujeme použít **dezinfekční přípravek nebo roztok s obsahem alkoholu**, určený pro povrchy v kontaktu s pokožkou.
- K čištění **nepoužívejte agresivní, abrazivní ani leptavé čisticí prostředky**, které by mohly poškodit povrch přístroje nebo jeho funkční části.
- Dbejte na to, aby **vlhkost nikdy nepronikla do vnitřních částí aplikačních hlavic**.
- **Aplikační hlavice nejsou vodotěsné** a nejsou určeny k oplachování pod tekoucí vodou ani k ponoření do vody.

Nesprávná údržba nebo vniknutí vlhkosti do přístroje může vést k jeho poškození a ztrátě záruky.

INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA

V průběhu používání přístroje můžete narazit na situaci, kdy budete potřebovat poradit ohledně používání přístroje nebo technického problému. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme vám plně k dispozici.



Facebook: facebook.com/BeautyRelaxEquipment/

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160



737 196 160

mh@santadria.cz

shop.beautyrelax.cz

www.beautyrelax.cz

facebook.com/BeautyRelaxEquipment



Martin Hrbek
odborný konzultant

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

SANTADRIA s.r.o. Mojmírovo nám. 75/2 Brno 61200 Brno 61200 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

BEAUTYRELAX ROLLSKIN MADERO

PROFESSIONAL TWIN STUDIO

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3101**

EAN: **8594166124011**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2021 EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2024

EN 55014-2:2021 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2020 EN 61000-4-4:2012

EN 61000-4-11:2020 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Slouží pro sportovní rekondiční masáž za účelem uvolnění svalů na vybraných částech těla.

Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů - TARIC 90191010. Přístroj je určen pro profesionální účely v komerčním provozu.

Při použití více osobami dbejte na správnou hygienu provozu.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.6.2024