

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní podtlakový přístroj

BeautyRelax model BR-2837

VACUFORM DELUXE EMS



OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	6
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	7
LOKÁLNÍ MASÁŽ PODTLAKEM	8
ÚROVNĚ INTENZITY NASÁVÁNÍ	8
EMS ELEKTRICKÉ PULZY	9
INFRAČERVENÉ VYHŘÍVÁNÍ	9
HLAVNÍ VÝHODY	10
CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT	10
TECHNICKÉ PARAMETRY	10
OBSAH BALENÍ	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	12
POPIS DISPLEJE	13
VÝMĚNA FILTRAČNÍHO VÁLEČKU	14
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	15
POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE	16
JAK PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT	17
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	19
DÉLKA OŠETŘENÍ	20
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	20
ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍ HLAVICE PŘÍSTROJE	21
INTENZITA VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ	22
POUŽÍVEJTE MASÁŽNÍ OLEJ	23
ZBARVENÍ PLETI	24
DOBÍJENÍ BATERIE	24
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	25
RYCHLOST POHYBU PO PLETI	25
SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE	26
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	27
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	29
CERTIFIKACE	29
EU DISTRIBUTOR	29
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	30

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Masážní přístroj na vakuovou drenáž BeautyRelax Vacuform Deluxe EMS. Vysoce výkonný nástroj pro intenzivní potlačení projevů celulitidy. Skutečně funkční podtlaková vakuová drenáž. Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie. Praktická funkce vyhřívání pro lokální podporu krevního oběhu. Technologie EMS pulzů pro stimulaci svalových vláken. Možnost plynulého dávkování výkonu. Zatočte s pomerančovou kůží působením účinných technologií!



UPOZORNĚNÍ

- před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod k použití
- přístroj nepoužívejte v prostředí, kde se nachází přítomnost kouře, prachu, nečistot nebo tam, kde by mohl přístroj spadnout do vody
- dodržujte přesně délku a způsob ošetření
- pokud se budete během používání cítit jakkoliv nestandardně, přístroj vypněte a jeho použití zkonzultujte se svým lékařem
- kabel adaptéru neohýbejte; na přístroj nepokládejte ostré, těžké nebo vlhké předměty
- během používání přístroje se vyhýbejte kontaktu s předměty, jako jsou svíčky, cigarety, lihoviny
- pokud bude mít přístroj jakékoliv technické problémy, využijte kontaktní formulář na adrese www.beautyrelax.cz
- přístroj se nepokoušejte sami rozebírat ani opravovat – mohli byste se zranit a došlo by ke ztrátě záruky
- pokud nastane některá z těchto situací, přístroj nikdy nepoužívejte:
 - napájecí kabel je poškozen
 - do elektroniky přístroje vnikla voda (týká se to zejména displeje)
 - na přístroj spadl těžký předmět nebo spadl z velké výšky na zem
- přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti jiného elektrického zařízení
- pokud přístroj používá více osob, aplikační hlavici dezinfikujte po každém použití pomocí jemně navlhčené hadříčky v lihovém roztoku



KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Při stavu vysokých horeček
- Závažné kožní onemocnění na oblasti použití přístroje
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Cévní poruchy nebo arterioskleróza
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



***Doporučení:** Masážní přístroj Vacuform Deluxe EMS má vliv na činnost lymfatického systému a krevního oběhu. Pokud máte zdravotní diagnózu se špatnou funkcí lymfatického systému, srdečním onemocněním, případně trpíte zvýšeným krevním tlakem, konzultujte první použití přístroje s vaším lékařem.*

ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Hlava
- Krk (přední i zadní strana)
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Masážní přístroj na vakuovou drenáž BeautyRelax Vacuform Deluxe EMS. Vysoce výkonný nástroj pro intenzivní potlačení projevů celulitidy. Skutečně funkční podtlaková vakuová drenáž. Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie. Zcela neinvazivní charakter ošetření. Praktická funkce vyhřívání pro lokální podporu krevního oběhu. K dispozici vám budou 4 úrovně intenzity vakuového nasávání a 4 úrovně působení EMS pulzů. Pomerančová kůže nemá proti modelu Vacuform Deluxe EMS žádnou šanci!



LOKÁLNÍ MASÁŽ PODTLAKEM

Lymfatická masáž patří mezi nejúčinnější způsoby pro redukci projevů celulitidy. Rytmické hnětení svalů zajišťuje správné proudění lymfy v těle. Přispívá k odvádění nečistot z krve. Prostřednictvím podtlakové terapie lze tělo zbavit nežádoucích otoků a nevzhledně vypadající pomerančové kůže.



ÚROVNĚ INTENZITY NASÁVÁNÍ

Masážní přístroj BeautyRelax Vacuform Deluxe EMS nabízí 4 úrovně síly podtlaku. Každá tělesná partie vyžaduje jiné nastavení výkonu nasávání. Vyšší výkon pro skutečně hloubkovou intenzivní masáž. Jemnější nasávání oceníte na menších tělesných partiích se zvýšenou citlivostí na dotyk.



EMS ELEKTRICKÉ PULZY

Působením času svaly ztrácí přirozenou pružnost a elasticitu. Pleť působí fádním a unaveným dojmem. Do aplikační hlavice přístroje je integrovaných 10 kontaktních ploch, které generují EMS elektrické pulzy. Pulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo ke svalům. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů. 4 úrovně intenzity.



INFRAČERVENÉ VYHŘÍVÁNÍ

Po obvodu aplikační hlavice jsou zabudované světelné zářiče. Infračervené paprsky pronikají do těla o vlnové délce v rozsahu 8 až 12nm. Infračervené záření má ve srovnání s ostatními zdroji tepla lepší schopnost pronikat hlouběji do podkožní tkáně. Infračerveným teplem je výrazně podpořen krevní oběh. Tělo je tak schopno rychleji se zbavit škodlivin a odpadních látek. Rozsah od 35°C do 50°C.



HLAVNÍ VÝHODY

- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Skutečně funkční podtlaková masáž

CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT

- Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie
- Pokožka je pružnější a jemnější na dotyk
- Při pravidelném používání a přiměřeném stravování zjemnění příznaků celulitidy
- Tvarování a zpevňování stehen, hýždí, břicha

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vyhřívání: ano
- Rozsah: 35°C až 50°C
- Vakuové sání: 4 úrovně
- Maximální výkon podtlaku: 120KPa
- Možnost nastavený výkonu EMS pulzů
- Podsvícený digitální displej: ano
- Indikace stavu baterie
- Napájení: vestavěná baterie li-ion
- Kapacita baterie: 3000mAh
- Nabíjení: USB kabel (součást balení)
- Rozměry: 15x10x12cm
- Hmotnost: 590g

OBSAH BALENÍ

- 1x BeautyRelax model BR-2837 VACUFORM DELUXE EMS
- 1x Nabíjecí síťový adaptér
- 1x Sada náhradních filtračních válečků
- 1x Hadička
- 1x Návod k obsluze



POPIS PŘÍSTROJE

1. Umístění filtračního tampónku
2. Otvor pro vakuové nasávání
3. Aplikátor pro EMS elektrické pulzy
4. Zdroj infračerveného tepla
5. Vstup pro napájecí kabel
6. Ovládací panel s tlačítky
7. Displej
8. Madlo pro snadné používání



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko *HEATING*

Tlačítko pro aktivaci působení funkce tepla.

2. Tlačítko *EMS*


Tlačítko pro aktivaci působení funkce EMS. K dispozici jsou celkem 4 úrovně.

3. Tlačítko *VACUUM*

Tlačítko pro aktivaci působení funkce vakuového sání. K dispozici jsou celkem 4 úrovně.


4. Tlačítko *ON/OFF*

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje.

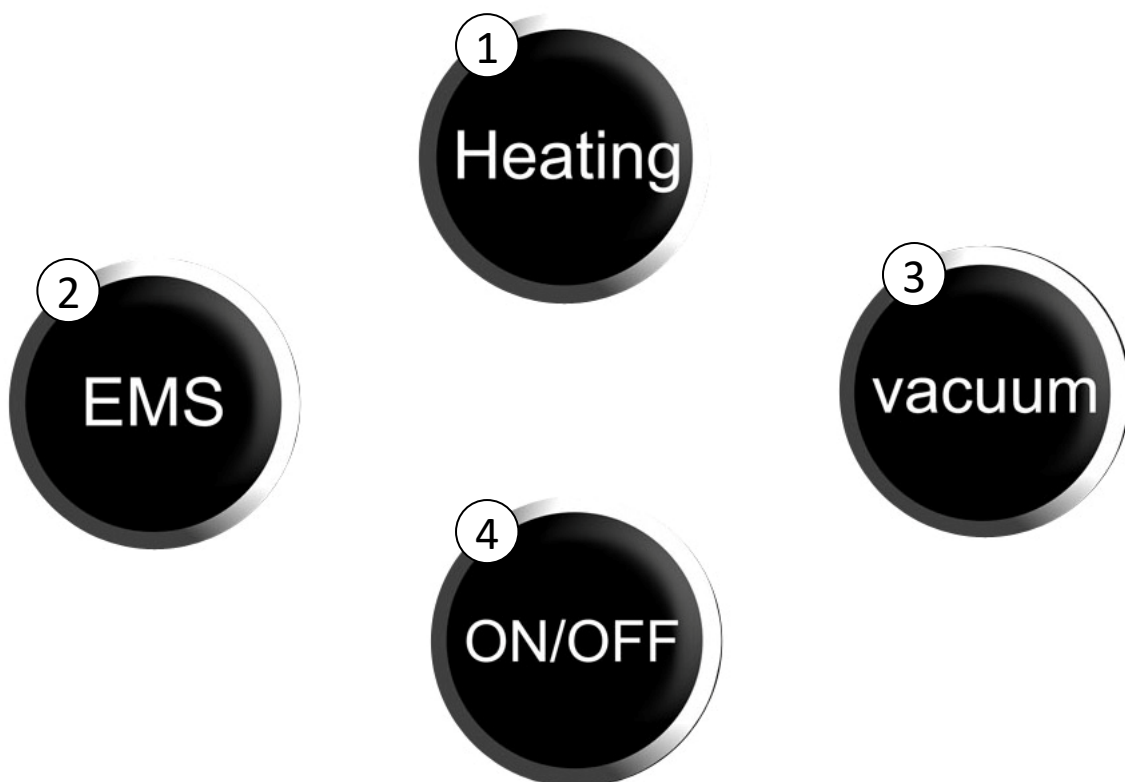

POPIS DISPLEJE

1. Indikace stavu baterie
2. Aktuální dosažená teplota na povrchu aplikátoru
3. Indikace funkce vyhřívání
4. Indikace funkce vakuového sání
5. Indikace úrovně výkonu vakuového sání
6. Indikace úrovně výkonu EMS pulzů

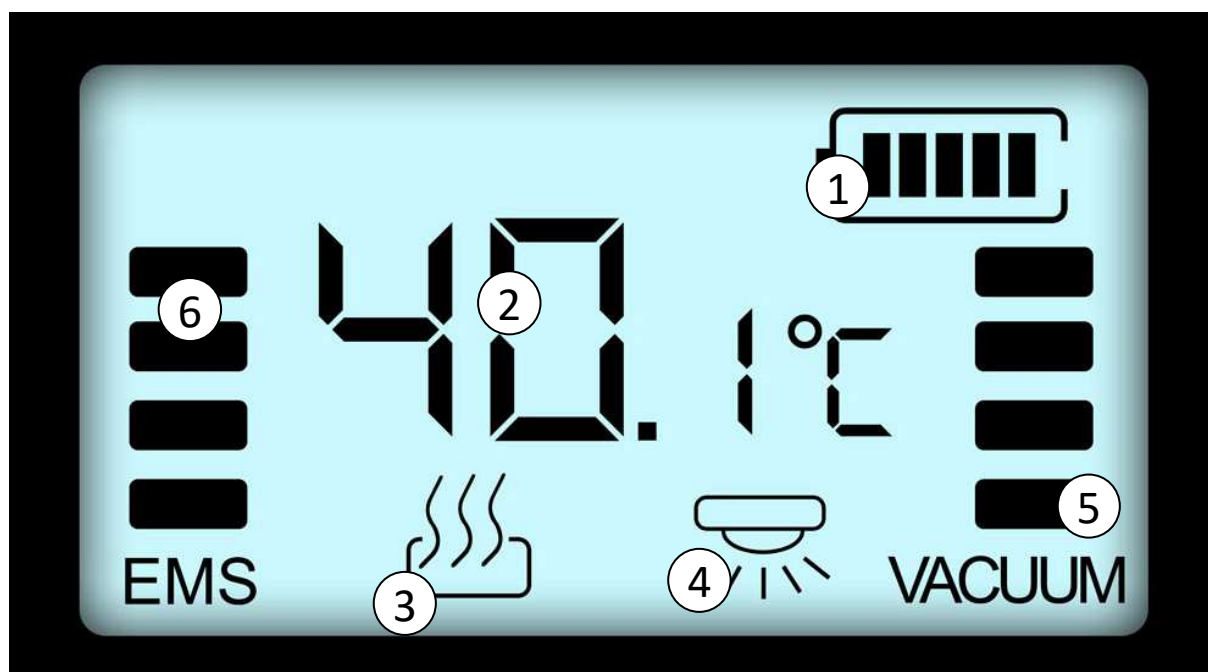

VÝMĚNA FILTRAČNÍHO VÁLEČKU

Součástí balení jsou filtrační válečky. Válečky vytváří mechanickou bariéru, která zabraňuje vniknutí nečistot do cirkulace vzduchu uvnitř přístroje. Váleček je vyroben ze speciálního materiálu, který umožňuje proudění vzduchu, ale zároveň zabrání průniku částic nečistot. Kompresní vzduchový systém přístroje je tak chráněn, aby nedošlo k nasátí nečistot a poškození přístroje. Filtrační válečky není třeba měnit po každém použití přístroje. Mají poměrně dlouhou životnost. Doporučujeme provést pravidelně vizuálně kontrolu jeho stavu. V případě znečištění proveďte jeho výměnu za nový. Délka životnosti opět závisí na frekvenci použití přístroje. Pokud je znečištěný, proveďte výměnu za nový. V případě potřeby kontaktujte prodejce s možností zakoupení nové sady spotřebního materiálu.



1. Z balíčku vyberte filtrační váleček
2. Odstraňte průhlednou krytku filtru. Stačí zatáhnout. Kryt není upevněn na závit.
3. Vyjměte použitý filtrační váleček za nový.
4. Vložte nový filtrační váleček a kryt nasadte nazpět nadoraz.

Jak poznat, kdy filtr vyměnit?

Filtr je po vizuální stránce velmi znečištěn nebo již nepropouští cirkulaci vzduchu. To můžete ověřit, pokud v průběhu činnosti přístroje s funkcí vakuovým váním neucítíte na prstu v blízkosti krytu tampónku proudění vzduchu. Pokud vzduch neproudí, je správný čas na výměnu filtračního válečku.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Stiskněte krátce tlačítko **ON/OFF**. Aktivuje se displej. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Zapnutí přístroje doprovází zvuková signalizace.
- 2.** Pomocí tlačítka **VACUUM** si můžete nastavit výkon působení vzduchového sání. Výkon si můžete nastavit mačkáním tlačítka **VACUUM**.
Funkce vakuového sání má tyto režimy: vypnuto - 1 - 2 - 3 - 4 - vypnuto. Úroveň intenzity působení vakua je zobrazena v pravé části displeje.
- 3.** Pomocí tlačítka **EMS** si můžete nastavit výkon působení EMS pulzů. Výkon si můžete nastavit mačkáním tlačítka **EMS**.
Funkce EMS pulzů má tyto režimy: vypnuto - 1 - 2 - 3 - 4 - vypnuto. Úroveň působení EMS pulzů je zobrazena v levé části displeje.
- 4.** Pomocí krátkého stisku tlačítka **HEATING** si můžete zapnout nebo vypnout působení funkce tepla. Funkci vyhřívání indikuje ikona vyhřívání uprostřed displeje.
- 5.** Pomocí dlouhého stisku tlačítka **HEATING** se dostanete do režimu nastavení teploty. K dispozici je rozsah od 35°C do 50°C. Úroveň teploty můžete měnit krátkým mačkáním tlačítka **HEATING**. Jakmile mačkat přestanete, vyčkejte několik vteřin. Přístroj si nastavenou teplotu zapamatuje. Dále již na displeji zobrazuje aktuální teplotu povrchu aplikátoru.
- 6.** Displej také zobrazuje aktuální teplotu povrchu aplikační hlavy. Trvá několik minut, než se plocha aplikátoru zahřeje na maximální teplotu.
- 7.** Pokud je přístroj v pohotovostním režimu déle než 30 minut, přístroj se automaticky vypne.
- 8.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Přístroj nepoužívejte nikdy na sucho. Vždy na pleť aplikujte jakýkoliv masážní olej nebo krém. Cokoliv, co umožní, aby aplikační hlavice po pleti dobře klouzala. Ideální je olejíček. Na pleti vysychá pomalu a má skvělou konzistenci.
- 2.** Při nastavení výkonu postupujte vždy se zvýšenou opatrností. Platí to jak pro úroveň výkonu vakuového sání, tak pro funkci EMS pulzů. Vždy nastavte nejprve úroveň 1. Přidávejte postupně podle vašeho pocitu. Technologie přístroje musí být na pokožce cítit. Přesto by používání přístroje nemělo překročit mez, kdy už to pro vás nebude snesitelné.
- 3.** Při použití přístroje není třeba mít všechny funkce zapnuté. Můžete mít bez problémů zapnuté pouze vakuové sání. Funkci EMS pulzů a vyhřívání aktivujete podle potřeby.
- 4.** Čím více nastavíte výkon vakuového sání, tím intenzivněji bude na vaši pleť probíhat mechanická podtlaková masáž. O to více mohou na vaší pleti zůstat stopy v podobě zarudnutí, které může v krajním případě přejít až v lehké podlitiny. V případě zarudnutí se pleť dostane do normálu v řádu hodin. Pokud zarudnutí přejde v podlitinu modré barvy, návrat do normálu vezme několik dní. Proto je vždy na každém uživateli, jaké individuální nastavení přístroje zvolí.
- 5.** Než se s přístrojem podrobně seznámíte a získáte jistou zkušenost, provádějte po těle krátké táhlé pohyby. Vybranou partii je možné také ošetřit staticky - s přístrojem zůstanete na jednom místě a necháte tukovou tkáň přístrojem nasát po delší dobu. Čím delší čas je přístroj k tukové tkáni nasátý, tím se více projeví zarudnutí až modřiny. Tento efekt snížíte přidáním masážního oleje nebo snížením úrovně působení vakuové masáže.

JAK PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT

- Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat ošetření po celkové koupeli těla. Pletť je krásně zahřátá a vláčná.
- Naneste na partii, kterou chcete ošetřit, jemnou vrstvu pleťového krému, krému proti celulitidě nebo jakýkoliv druh **esenciálního masážního oleje** (doporučujeme spíše přípravek na olejové bázi). Hlavním důvodem je lepší pohyb masážní hlavice po těle. Během masáže mají navíc tyto přípravky mnohem lepší schopnost absorbování do podkožní tkáně. **Bez podobného přípravku přístroj NEPOUŽÍVEJTE.**

pohybová masáž


Přístrojem se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí krému nebo oleje. **Nikdy nepoužívejte masáž přístrojem na sucho.** Při pohybové masáži je důležité nastavit **sílu nasávání na co nejmenší úroveň**. Pokud přístroj nasaje část těla až příliš silně, s přístrojem už nebude možné pohnout. Rychlost pohybu hlavice po pleti upravte podle nastaveného výkonu vakuové masáže.

bodová masáž

Bodová masáž spočívá v ošetření konkrétní tělesné partie po částech – viz. obrázek. Přístroj zapněte a přiložte aplikátor k pleti. Po nastavení všech parametrů spustí přístroj funkci nasávání v síle, kterou si sami zvolíte. Při bodové masáži může po ošetření pletť zarudnout. Pokud si nastavíte nasávání příliš silné, mohou se na pleti objevit i mírné otoky až modřiny, které však v průběhu několika dní zcela zmizí. Vždy začínejte na nižší síle působení vakua a postupně si přidávejte dle vašeho pocitu. **Rozhodně hned nezačínajte na nejvyšších hodnotách!**



Při ošetření ostatních částí těla postupujte podle následující grafické vizualizace. Rozdíl mezi pohybovou a bodovou masáží spočívá nejen v odlišné technice, ale v účinku působení na tělo. **Pohybová masáž** přispívá zejména ke zlepšení činnosti lymfy. Tělo získá lepší odvádět nadbytečnou vodu z končetin. Při **bodové masáži** podpoříte lokální krevní oběh, což přispívá k celkové efektivnější látkové výměně a odvodu škodlivin. Ideální na použití partií s výskytem příznaků celulitidy (pomerančové kůže).

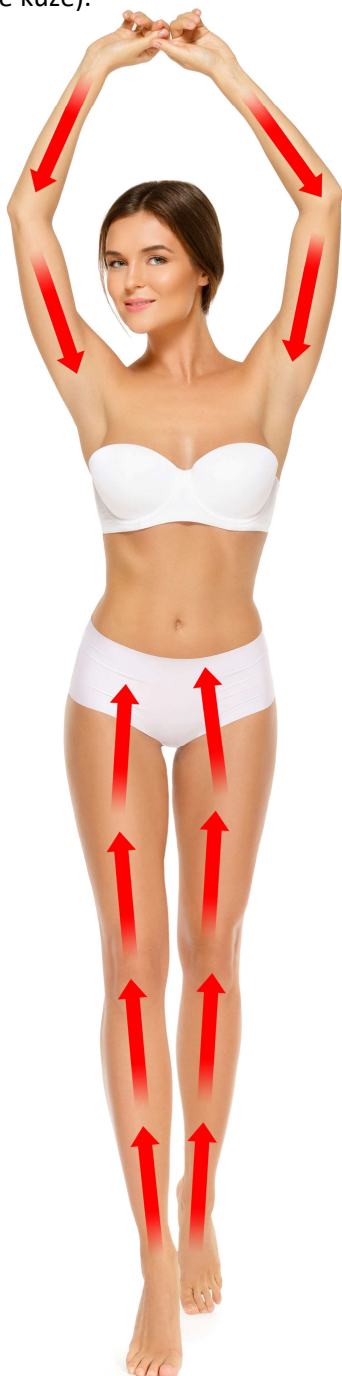

pohybová masáž



bodová masáž

POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



DÉLKA OŠETŘENÍ

Pro každou partii je doporučeno ošetření v maximální délce 15 až 20 minut. Ošetření partií můžete libovolně kombinovat. Je vhodné rozložit si masáž těla do celého týdne. Jako partie je bráno (jedna paže, jedno stehno, jedno lýtko, atd.). Určitě nedoporučujeme ošetření přístrojem stejnou partií každý den.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití vnitřek aplikátoru důkladně očistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Zejména, pokud přístroj používá více osob. Jednou za čas je dobré provést kompletní čištění vnitřního systému přístroje. Postupujte následovně:



1. Odšroubujte spodní krytku aplikační hlavice.
2. Odstraňte průhlednou krytku a filtr.
3. K přístroji připojte hadičku.
4. Připravte si dvě sklenice. Následně zapněte přístroj a aktivujte funkci působení vakua. Přístroj tekutinu přečerpá z jedné sklenice do druhé.
5. Přístroj nechte několik hodin vyschnout. Poté vraťte zpět filtrační váleček a kryt.

ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍ HLAVICE PŘÍSTROJE

1. Před údržbou

Přístroj vždy vypněte a odpojte od napájení. Pro udržení provozu je nezbytně nutné po ošetření povrchu důkladně osušit. V opačném případě mohou látky na povrchu hlavice negativně zareagovat.

2. Po každém použití

- Odstraňte zbytky masážního oleje nebo sonogelu suchým ubrouskem.
- Otřete hlavici měkkým hadříkem navlhčeným teplou vodou.
- Důkladně osušte.

3. Denní dezinfekce

- Použijte dezinfekci na bázi alkoholu (max. 70 %).
- Naneste na hadřík nebo vatovou tyčinku.
- Jemně otřete nerezové koncovky.
- Nechte krátce působit a poté osušte.

4. Odstranění zabarvení (dle potřeby)

- Použijte jemný čisticí prostředek nebo neabrazivní čistič na nerez.
- Čistěte jemnými krouživými pohyby.
- Otřete vlhkým hadříkem a osušte.

5. Zakázané postupy

- Nepoužívejte abrazivní houbičky, kartáče ani drátěnky.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie (chlór, kyseliny).
- Neponořujte přístroj do vody.
- Nemyjte v myčce.


6. Skladování

- Skladujte v suchém prostředí.
- Nenechávejte na hlavici zbytky gelu nebo oleje.
- Chraňte před vlhkostí.

7. Kontrola

- Pravidelně kontrolujte stav nerezových koncovek.
- Při výrazném poškození přestaňte přístroj používat a kontaktujte servis.

• INTENZITA VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ

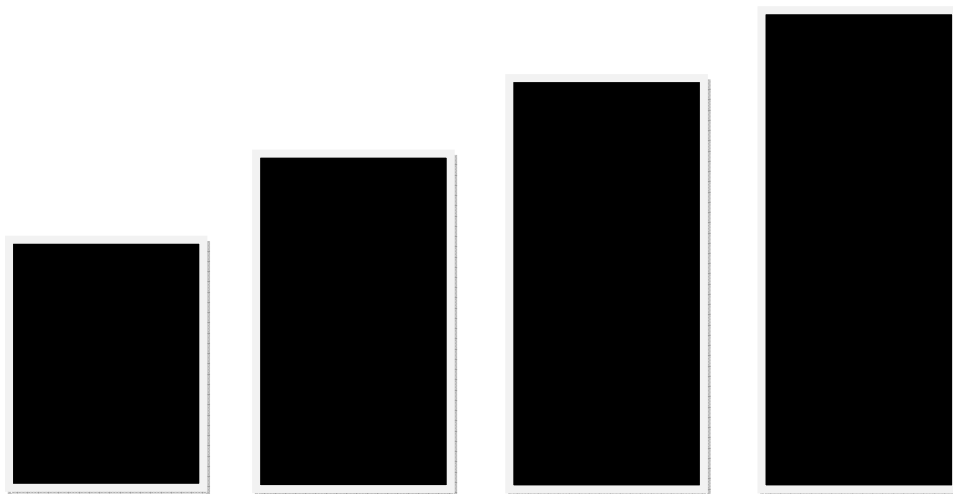

Masáž pomocí podtlaku je základní předpoklad k tomu, aby byla tuková tkáň stimulována s maximální efektivitou. Každý máme jinou citlivost pleti. Každý můžeme vnímat působení podtlaku jinak. Právě z toho důvodu umožňuje přístroj nastavení výkonu ve 4 úrovních intenzity. Ošetření pomocí metody vakuové masáže bude vždy na pleti cítit. Můžete vnímat, jak aplikační hlavice postupně nasává pokožku. Takto správně má podtlaková masáž probíhat. Pokud nastane situace, kdy by pro vás byla vakuová masáž i při nejnižší úrovni intenzity 1 až příliš silná, máme pro vás pár tipů, jak používat přístroj s vyšší úrovní komfortu:

- 1.** Na pokožku, kde chcete přístroj použít, naneste větší množství masážního oleje. Pokud bude povrch pleti mastný, aplikační hlavice přístroje bude mít na pleti lepší skluz. S přístrojem se tak můžete po pleti snadněji pohybovat.
- 2.** I když máte nastavenou úroveň intenzity na nejnižším stupni číslo 1, po přiložení přístroje k pleti ho nenechávejte nasát až do momentu, kdy je celý vnitřní prostor hlavice kompletně nasátý vaší pokožkou. V průběhu startu nasávání postupně přístroj od pleti ručně odstraňte. Takto postupujte část po části, kousek po kousku.
- 3.** Když chcete přístroj odstranit z pleti, nevolte směr kolmo od pleti, ale snažte se naklonit jeden o z okrajů aplikační hlavice. Jakmile se přeruší vakuum a do hlavice se dostane opět vzduch, přístroj snadno od pleti oddělíte.

Síla podtlaku je nastavitelná a klíčové je neponechávat hlavici dlouho na jednom místě – zejména u citlivější pokožky nebo v oblastech s tenčí kůží (vnitřní strana stehen, břicho). Doporučujeme pracovat v pomalých, krouživých pohybech (ideálně 3–5 sekund na jednu zónu) a vyhnout se statickému sání. Přístroj je certifikovaný a bezpečný při správném použití. Důrazně doporučujeme: Vždy kombinovat s dynamickým pohybem hlavice (ne statické přisátí!). Po aplikaci zařadit jemnou lymfodrenáž rukou pro podporu cirkulace. Bohužel, technická úprava síly podtlaku u již vyrobeného přístroje není možná. Intenzitu však lze regulovat: Pohybem rukou – čím rychleji hlavici pohybujete, tím nižší je lokální účinek.

POUŽÍVEJTE MASÁŽNÍ OLEJ



Pro bezpečnou, komfortní a maximálně efektivní masáž je nezbytné před každým použitím přístroje aplikovat na pokožku kvalitní masážní olej nebo krém.

Proč je to tak důležité?

- **Snižuje tření** – zabraňuje nepříjemnému tahání za pokožku a možnému podráždění.
- **Zlepšuje kluznost** – umožňuje plynulý pohyb hlavice bez nežádoucího „přisávání“ na jednom místě.
- **Zvyšuje účinnost masáže** – olej pomáhá přístroji lépe pracovat s pokožkou, což podporuje stimulaci tukových buněk a rozproudění lymfy.
- **Chrání pokožku** – předchází vzniku mikroporanění, zarudnutí nebo modřin.

Doporučení pro výběr oleje/krému:

- **Hypoalergenní přípravky** (vhodné pro citlivou pokožku).
- **Lehké konzistence** (snadno se roztírají, nezanechávají mastný film).
- **Přírodní složení** (např. mandlový, jojobový nebo kokosový olej).

Jak správně aplikovat?

- **Naneste dostatečné množství oleje** na ošetřovanou partii.
- **Rozetřete po celé ploše dlaní**, aby byla pokožka rovnoměrně pokrytá.
- **Během masáže případně doplňujte** – pokud pocítíte zvýšené tření.

UPOZORNĚNÍ

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ NA SUCHOU POKOŽKU! MOHLO BY DOJÍT K JEJÍMU POŠKOZENÍ A SNÍŽENÍ ÚČINNOSTI TERAPIE.

ZBARVENÍ PLETI

Působením podtlakové masáže mohou na pleti vznikat červené fleky až téměř podlitiny (v případě použití opravdu silného výkonu podtlakové masáže). Jedná se o zcela přirozený jev. V průběhu několika hodin (v závislosti na výkonu podtlakové masáže) zbarvení pleti postupně zmizí. V případě nejvyšších hodnot podtlakové masáže se mohou červené fleky proměnit až v modřiny. V tomto případě trvá návrat do přirozené barvy pleti déle.



DOBÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. K nabíjení používejte výhradně síťový adaptér, který je součástí balení. Stav baterie indikuje ikona baterie na displeji.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte nabíjecí síťový adaptér, který je součástí balení.
2. Délka nabíjení závisí na aktuální kondici baterie.
3. Průběh nabíjení indikuje blikající symbol baterie.
4. Délka nabíjení závisí na stavu vybití baterie.
5. Jakmile je baterie nabita, blikání ustane.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Masážní přístroj dosahuje poměrně velkého výkonu. Ten i můžete snadno nastavit pomocí ovládacího panelu. K dispozici jsou na výběr 4 úrovně - nejnižší, nízká, střední, vysoká. I v případě použití nejnižšího výkonu může být při delším nasátí komplikovanější opět aplikační hlavici z pokožky odstranit. Nejlepší metoda je šikmé naklonění přístroje. Při kolmém směru by se odpojení aplikační hlavice od pokožky mohlo jevit jako problematické.

RYCHLOST POHYBU PO PLETI

Jednou z masážních technik použití přístroje je tzv. razítkování. Metoda spočívá v nasátí aplikační hlavice pokožky na jednom místě. Poté se aplikační hlavice odstraní a stejný proces provedete o kousek vedle. Rozpojení aplikační hlavice s pletí je nejlépe provádět šikým náklonem. Při používání masážního přístroje je třeba zohlednit působení vakuového nasávání v čase. S délkou kontaktu aplikační hlavice s pletí na jednom místě vakuové nasátí postupně graduje (při nastavení libovolného výkonu). Pokud se s hlavicí přístroje budete pohybovat po pleti v rychlejších táhlých pohybech, gradování působení vakua v případě stání na jednom místě výrazně eliminujete. Jednoduše řečeno. Při rychlejším pohybu hlavice po pleti se vám bude pohyb provádět snadněji, avšak s nižší mírou působení vakua. Znovu zdůrazňujeme, že je vždy třeba pleť dostatečně hydratovat. Ideálně masážním olejíčkem. Pokud pokožku dostatečně „promažete“, má to na komfort použití přístroje zcela zásadní vliv.

SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE

Boj s celulitidou představuje běh na dlouhou trať. Přesto však existují účinné technologie, které z dlouhodobého hlediska napomáhají k potlačení projevů pomerančové pleti. Optimální je kombinace ultrazvukové kavitace a podtlakové vakuové drenáže. Ultrazvuk se aktivně zaměřuje na stimulaci tukových buněk. Vakuová drenáž stimuluje vhodným způsobem krevní oběh a lymfatický systém. V masážních salonech se jedná o běžný postup ošetření. V první fázi ošetříte vybranou partii ultrazvukem a ve druhé fázi vakuovou drenáží. Účinek působení ultrazvuku je tak maximálně podpořen.



BEAUTYRELAX 3v1



CAVIMAX



CAVIMAX OPTIMAL



CELLUFORM



CELLUFORM ULTIMATE



CAVIMAX ULTIMATE

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro vakuovou masáž přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.

Jaké opatření je před a po ošetření nutno dodržovat?

Minimálně 4 hodiny před ošetřením nejzte těžká nebo mastná jídla. Doporučujeme lehká jídla (např. zeleninový salát, jogurt). Den před ošetřením, v den ošetření a několik dní po ošetření zvyšte váš pitný režim na 2 až 2,5 litru čisté vody denně. Vyhýbejte se perlivým a slazeným vodám. Týden po ošetření ultrazvukem byste se měli vyvarovat konzumaci alkoholu, kofeinu, nikotinu, těžkých a mastných jídel.

Bolí ošetření masážním přístrojem?

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné. Při nastavení síly vakuového sání vždy začínejte na nejnižší hodnotě.

Mohu používat masážní přístroj bez předchozího ošetření pokožky?

Před použitím masážního přístroje je nezbytné nanést na pokožku jakýkoliv typ pleťového krému nebo oleje. Jednoduše vytvořit kontaktní vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Pohyb aplikátoru bude mnohem snadnější. Navíc se účinné látky z krémů a olejů účinně vmasírují do podkoží.

Co mohu od používání masážního přístroje očekávat?

Pravidelným používáním bude vaše pokožka pevnější a hladší zejména v oblastech postižené negativním působením celulitidy. Při celulitidě dochází k zvětšení objemu podkožních tukových buněk, které jsou vytlačovány proti povrchu kůže, a vytváří tak na ní nevzhledné droličky, připomínající právě strukturu pomerančové kůry. Masáž přístrojem zlepší proudění mízy k odvádění nečistot z krve. Pomocí této jemné techniky lze zbavit tělo otoků a vyřešit tak zdravotní problémy, kterým by klasická sportovně-rekondiční masáž spíše uškodila.

Je používání masážního přístroje bezpečné?

Masážní přístroj nemá žádné ostré hrany. Neměl by vás jakýmkoliv způsobem zranit. Dbejte však zvýšenou pozornost nastavení síly vakuového sání. Začínajte na nízkých hodnotách a postupně navyšujte dle vašeho pocitového vnímání. Zvýšená intenzita sání může způsobit mírné otoky až modřiny, které by měli během hodin až dní zmizet. Po dokončení ošetření může pokožka zrudnout. Tento efekt však také sám zmizí.

Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavičky?

Aplikátor je třeba po použití důkladně očistit. Očištěním zabráníte případnému vniknutí do přístroje a zajistíte co nejlepší hygienu provozu.

Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?

Doporučená délka ošetření jedné partie by měla být v rozsahu od 10 do 15 minut. Jako partie je bráno (jedna paže, jedno stehno, jedno lýtko, atd.).

V jakých případech přístroj nepoužívat?

V tomto návodu k obsluze je v pasáži „kontraindikace“ uveden seznam zdravotního omezení, kdy přístroj není možné používat. Dbejte prosím zvýšenou pozornost na případné kožní defekty. Věnujte pozornost dokončení léčby. Poté není problém přístroj znovu používat.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Nikoliv. Spadá do kategorie masážních přístrojů.

Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?

Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Může přístroj používat více osob?

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce aplikační hlavice, druhá osoba přístroj použít může.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Masážní podtlakový přístroj VACUFORM DELUXE EMS

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2837**

EAN 8594166120556

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60601-1-2:2007

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 60601-1:2006+A11:2011

EN 60825-1:2007

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno
Datum vydání: 1.10.2022

.....
Martin Hrbek, jednatel