

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj

BeautyRelax model BR-3151

VACUFORM EXPERT EMS



OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	6
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	8
HLAVNÍ VÝHODY	18
5 TECHNOLOGIÍ V JEDNOM PŘÍSTROJI	18
TECHNICKÉ PARAMETRY	18
OBSAH BALENÍ	18
POPIS PŘÍSTROJE	19
MASÁŽNÍ PROGRAMY	20
VÝMĚNA FILTRAČNÍHO TAMPÓNKU	21
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE KROK ZA KROKEM	22
POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE	26
DALŠÍ MOŽNOSTI POHYBU PO PLETI	27
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	29
ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍ HLAVICE PŘÍSTROJE	30
INTENZITA VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ	31
POUŽÍVEJTE MASÁŽNÍ OLEJ	32
ZBARVENÍ PLETI	33
DOBÍJENÍ BATERIE	33
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	34
RYCHLOST POHYBU PO PLETI	34
SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE	35
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	36
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	39
CERTIFIKACE	39
EU DISTRIBUTOR	39
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	40

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Vacuform Expert EMS je multifunkční masážní přístroj určený pro péči o pokožku a problematické partie se sklony k celulitidě. Kombinuje vakuovou masáž, EMS mikroproudy, LED světelnou terapii, vibrační masáž a příjemné nahřívání pro maximální komfort a účinnost. Podtlaková technologie podporuje mikrocirkulaci a lymfatický systém, zatímco EMS stimulace pomáhá zpevňovat ošetřované partie. Tři přednastavené režimy a tři úrovně intenzity umožňují přizpůsobit péči individuálním potřebám. Ergonomický design zajišťuje pohodlné používání na stehnech, hýždích, bocích, břiše i pažích. Díky kompaktním rozměrům a bezdrátovému provozu je ideální pro pravidelnou domácí péči. Při pravidelném používání pomáhá zlepšit vzhled pokožky, podpořit její pevnost, pružnost a přispět k redukci viditelných projevů celulitidy.



UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití a uschovejte jej pro případnou budoucí potřebu.
- Přístroj používejte pouze v souladu s tímto návodem a pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí se zvýšeným výskytem kouře, prachu nebo jiných nečistot ani v místech, kde hrozí jeho pád do vody nebo jiné kapaliny.
- Dodržujte doporučenou dobu ošetření i doporučený způsob použití.
- Pokud během používání pocítíte jakékoli neobvyklé nebo nepříjemné pocity, přístroj ihned vypněte a další používání konzultujte se svým lékařem.
- Napájecí kabel neohýbejte nadměrnou silou, nekruťte jej ani jej nevystavujte mechanickému namáhání. Na přístroj ani na napájecí kabel nepokládejte ostré, těžké nebo vlhké předměty.
- Během používání udržujte přístroj mimo dosah otevřeného ohně, zapálených svíček, cigaret a jiných zdrojů tepla. Chraňte jej také před kontaktem s hořlavými kapalinami, včetně lihovin.
- Dojde-li k technické závadě, přístroj nepoužívejte a kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese **shop.beautyrelax.cz**.
- Přístroj sami nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravovat. Mohlo by dojít ke zranění, poškození přístroje a ztrátě nároku na záruku.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud:
 - je poškozen napájecí kabel nebo síťový adaptér,
 - do elektronických částí přístroje vnikla voda nebo jiná kapalina (zejména do oblasti displeje nebo ovládacích prvků),
 - přístroj spadl z větší výšky nebo na něj spadl těžký předmět,
 - je přístroj viditelně poškozen nebo nepracuje správně.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných elektrických nebo elektronických zařízení, pokud by mohlo docházet k jejich vzájemnému ovlivňování.
- Používá-li přístroj více osob, po každém použití očistěte aplikační hlavici jemně navlhčenou měkkou utěrkou s vhodným dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu. Dbejte na to, aby do přístroje nevnikla žádná kapalina.
- Přístroj ani napájecí adaptér nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Děti smějí přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby, pokud je to v návodu výslovně uvedeno.

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Přístroj **nesmí** používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Těhotenství.
- Kardiostimulátor (pacemaker).
- Implantovaný kardioverter-defibrilátor (ICD).
- Jiný implantovaný elektronický zdravotnický přístroj.
- Závažné srdeční onemocnění.
- Poruchy srdečního rytmu.
- Aktivní nádorové onemocnění.
- Probíhající onkologická léčba.
- Hluboká žilní trombóza.
- Tromboflebitida (zánět žil).
- Výrazné křečové žíly (nepoužívat přímo na postižené místo).
- Poruchy srážlivosti krve.
- Hemofilie.
- Užívání vysokých dávek léků na ředění krve.
- Akutní infekční onemocnění.
- Horečka.
- Epilepsie.
- Neurologická onemocnění spojená se záchvaty.
- Diabetická neuropatie nebo výrazně snížená citlivost pokožky.
- Otevřené rány.
- Krvácející poranění.
- Popáleniny.
- Aktivní ekzém.
- Dermatitida.
- Lupénka v aktivní fázi.
- Kožní infekce.
- Hnisavé záněty pokožky.
- Výrazné otoky.
- Silně podrážděná nebo poškozená pokožka.
- Čerstvé jizvy po operaci.
- Bezprostředně po chirurgickém zákroku.
- Bezprostředně po estetických zákrocích (např. liposukce) bez souhlasu lékaře.

Přístroj nepoužívejte na

- Oči.
- Oční víčka.
- Obličej.
- Krk v oblasti štítné žlázy.
- Oblast srdce.
- Genitálie.
- Sliznice.
- Otevřené rány.
- Místa s aktivním zánětem.
- Místa s kovovými implantáty nebo kloubními náhradami (bez doporučení lékaře).

Okamžitě přerušete používání při výskytu

- Silné bolesti.
- Výrazného pálení.
- Krvácení.
- Vzniku modřin.
- Výrazného otoku.
- Alergické reakce.
- Závratí.
- Nevolnosti.
- Dlouhotrvajícího zarudnutí pokožky.

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Vacuform Expert EMS kombinuje pět moderních technologií do jednoho kompaktního přístroje, které společně poskytují komplexní kosmetickou péči o pokožku a podkožní tkáň. Spojením vakuové masáže, EMS mikroproudů, LED světelné terapie, vibrační masáže a jemného nahřívání nabízí účinné ošetření zaměřené na zlepšení vzhledu pokožky, podporu její pružnosti, stimulaci svalů i zvýšení komfortu během používání. Jednotlivé technologie se vzájemně doplňují a vytvářejí synergický efekt pro maximální účinnost domácí péče.

Vakuová masáž

Vakuová (podtlaková) masáž využívá řízený podtlak, který jemně nadzvedává pokožku a podkožní tkáň. Tím dochází ke stimulaci povrchového krevního oběhu a lymfatického systému. Mechanická masáž podporuje lepší okysličené tkání a přirozené metabolické procesy v pokožce. Při pravidelném používání může přispět ke zlepšení pružnosti pokožky, podpořit hladší vzhled problematických partií a snížit pocit napětí ve svalech po fyzické zátěži. Současně usnadňuje vstřebávání kosmetických přípravků aplikovaných před ošetřením.

EMS mikroproudy

EMS (Electrical Muscle Stimulation) využívá jemné elektrické impulzy, které vyvolávají přirozené stahy svalových vláken podobně jako při běžném pohybu. Tato technologie pomáhá aktivovat hlubší svalové vrstvy, které nejsou při běžné masáži stimulovány. Pravidelné používání může přispět ke zlepšení svalového tonusu, podpořit zpevnění ošetřovaných partií a napomáhat lepšímu prokrvení tkání. Intenzitu EMS lze nastavit podle individuální citlivosti uživatele.

LED světelná terapie

Přístroj využívá tři druhy LED světla, z nichž každé působí odlišným způsobem na pokožku.

Červené světlo podporuje přirozenou regeneraci pokožky a může napomáhat zlepšení její elasticity a pevnosti. Je vhodné zejména pro unavenou nebo méně pružnou pokožku.

Modré světlo působí zklidňujícím způsobem a je vhodné pro pokožku se sklonem k podráždění. Pomáhá navodit pocit svěžesti a komfortu během ošetření.

Fialové světlo představuje kombinaci účinků červeného a modrého světla. Spojuje regenerační vlastnosti červeného světla se zklidňujícím působením modrého světla a je vhodné pro běžnou kosmetickou péči.

LED světelná terapie je neinvazivní a probíhá automaticky podle zvoleného pracovního režimu.

Vibrační masáž

Integrovaný vibrační systém vytváří jemné mechanické vibrace, které zpříjemňují průběh masáže a podporují uvolnění svalového napětí. Vibrace současně zlepšují kontakt masážní hlavičky s pokožkou a společně s vakuovou masáží a EMS zvyšují účinnost celého ošetření. Funkci vibrací lze podle potřeby zapnout nebo vypnout.

Nahřívání

Masážní hlavička je vybavena funkcí jemného nahřívání, která zvyšuje komfort během používání. Mírně zvýšená teplota pomáhá uvolnit pokožku a podkožní tkáň, podporuje jejich prokrvení a usnadňuje klouzáni přístroje po pokožce. V kombinaci s vakuovou masáží a vibracemi přispívá k příjemnějšímu pocitu během ošetření a podporuje lepší vstřebávání pečujících kosmetických přípravků.

Synergický účinek všech technologií

BeautyRelax Vacuform Expert EMS spojuje pět vzájemně se doplňujících technologií do jednoho přístroje. Vakuová masáž stimuluje pokožku a podporuje mikrocirkulaci, EMS aktivuje svalová vlákna, LED světelná terapie pečuje o vzhled pokožky, vibrace zvyšují komfort masáže a nahřívání napomáhá uvolnění tkání. Díky této kombinaci poskytuje přístroj komplexní kosmetickou péči zaměřenou na zlepšení vzhledu pokožky, její pružnosti a celkového komfortu při pravidelném používání.

Máte stejný problém?

Různé typy těla a problémy pleti.

Komplexní péče o tělo



Synergie více technologií

Efektivnější tvarování těla



Hlubková penetrace

Pomáhá řešit různé problémy pleti



Přesné tvarování postavy

Cílená redukce tukové tkáně



Bezpečné a šetrné

Jemné a vhodné pro každodenní péči



Pokročilé technologie



Bezpečné použití



Šetrné k pokožce



Viditelné výsledky

Multifunkční vakuový přístroj pro péči o pokožku a tvarování postavy

Definujte svou krásu

10 minut denně,
vytvářejte svou postavu a získejte sebevědomí!



3 nastavitelné úrovně
Přizpůsobená péče
pro různé potřeby pokožky



Bezpečný a šetrný
Šetrný k pokožce,
vhodný pro každodenní použití



Pro obličej i tělo
Univerzální péče
pro celé tělo



Kompaktní a elegantní
Lehký design,
snadno přenosný



Bezpečné použití
Šetrné k pokožce



Snadné ovládání
Jeden přístroj,
mnoho výhod



Neinvazivní péče
Bez bolesti,
bez výpadku



Viditelné výsledky
Krásnější kontury těla

8 mosazných masážních bodů

Příjemná masáž bez nepříjemného tahání pokožky

Komfortní péče pro celé tělo

Mosazné
masážní body



Hřejivý komfort

Příjemné zahřátí
pro pocit uvolnění



Šetrná masáž

Plynulý pohyb po pokožce
bez nepříjemného tření



Ergonomický kontakt 360°

Přizpůsobí se křivkám těla
pro pohodlné použití



Komfort při každém použití

Pro každodenní péči
o pokožku celého těla



Vhodné pro různé
části těla



Skvělý doplněk
pro každodenní péči



Kvalitní materiály
pro dlouhou
životnost



Elegantní design
a příjemné
používání

Podpořte svůj metabolismus

Vakuový přístroj pro krásnější tělo

Vytvářením podtlaku, který stimuluje pokožku, podporuje prokrvení a urychluje metabolismus.



Silné vakuové sání

Hlubkově působí na podkožní vrstvu tukové tkáně.



Podpora prokrvení

Podporuje krevní oběh a zrychluje odbourávání tuků.



Podpora metabolismu

Napomáhá zlepšit tvar těla a celkový metabolismus.



Bezpečné použití
Šetrné k pokožce



Snadné ovládání
Jeden přístroj, mnoho výhod



Neinvazivní péče
Bez bolesti, bez výpadku



Viditelné výsledky
Krásnější kontury těla

EMS mikroproudová technologie

Zpevněte svou pleť

Zlepšuje vzhled celulitidy, zvýrazňuje kontury těla a pomáhá tvarovat pevnější a štíhlejší postavu.



Mikroproudové impulzy

Simulují přirozené bioelektrické proudy v těle. Bezpečné a šetrné k pokožce.



Hlubkový účinek

Působí do hlubokých vrstev pokožky, pomáhá zpevnit povadlou pleť.



Podpora metabolismu

Podporuje krevní oběh a revitalizuje pokožku.



Bezpečné použití
Šetrné k pokožce



Snadné ovládání
Jeden přístroj,
mnoho výhod



Neinvazivní péče
Bez bolesti,
bez výpadku



Viditelné výsledky
Krásnější kontury těla

3 REŽIMY POŘÍZENÉ POKROČILOU TECHNOLOGIÍ

Vícedimenzionální péče,
pro obnovu vitality pokožky.

01

**FIALOVÉ SVĚTLO + EMS
+ VIBRACE + HORKÝ KOMPRES**

Zpevňuje a vyhlazuje pokožku,
zlepšuje její pružnost.



02

**ČERVENÉ SVĚTLO + EMS
+ VIBRACE + HORKÝ KOMPRES**

Pomáhá důkladně vyčistit pokožku
a zlepšit její vzhled.



03

**MODRÉ SVĚTLO + EMS
+ VIBRACE + HORKÝ KOMPRES**

Zklidňuje a osvěžuje pokožku,
podporuje její čistý vzhled.



360° péče
Komplexní kontakt
pro pohodlné použití



Vibrace
Jemná vibrace
pro příjemný pocit



Horký kompres
Příjemné teplo
pro komfortní zážitek



Bezpečné použití
Šetrné k pokožce,
vhodné pro každodenní péči

4 KLÍČOVÉ TECHNOLOGIE

Vícedimenzionální péče, viditelné výsledky

1

MIKROPROUDOVÉ PULZY

Podporují tonus a pevnost pokožky pro svěží vzhled.



3 ÚROVNĚ

L1: 35 Hz, 43 μ A


L2: 35 Hz, 50 μ A

L3: 35 Hz, 56 μ A

2

VYSOKOFREKVENČNÍ VIBRACE

Pomáhají uvolnit napětí, podporují prokrvení a zlepšují vstřebávání.

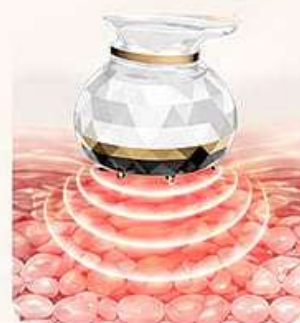

3 ÚROVNĚ

L1: Intenzita 60 %

L2: Intenzita 75 %

L3: Intenzita 95 %

3

VAKUOVÁ TECHNOLOGIE

Jemně přisává pokožku, podporuje její pružnost a hladký vzhled.



3 ÚROVNĚ

L1: -64 kPa

L2: -65 kPa

L3: -66 kPa

TEPELNÁ PÉČE

Příjemné teplo pomáhá otevřít póry, zlepšit vstřebávání a přináší pocit komfortu.



3 ÚROVNĚ

L1: 38 °C $\pm$ 2 °C

L2: 43 °C $\pm$ 2 °C

L3: 46 °C $\pm$ 2 °C



Komplexní péče
pro obličej i tělo



Bezpečné
a šetrné použití



Nastavitelné úrovně
pro individuální potřeby



Rychlé a efektivní
pro každodenní péči

Péče, která přináší výsledky.

M**PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ**

Krátce stiskněte tlačítko M
pro přepnutí mezi 3 režimy.

**PŘEPÍNÁNÍ INTENZITY**

Krátce stiskněte tlačítko napájení
pro přepnutí mezi 3 úrovněmi
intenzity.

**VIBRAČNÍ FUNKCE**

Dlouze stiskněte tlačítko M
pro zapnutí/vypnutí vibrací.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

1 Dlouze stiskněte
tlačítko napájení
pro zapnutí.

2 Krátce stiskněte
tlačítko M
pro výběr režimu.

3 Krátce stiskněte
tlačítko napájení
pro nastavení intenzity.

4 Dlouze stiskněte
tlačítko M
pro zapnutí/vypnutí vibrací.

HLAVNÍ VÝHODY

- Podpora redukce viditelných projevů celulitidy
- Zpevnění a vyhlazení pokožky
- Podpora mikrocirkulace a lymfatického systému
- Bezdrátový provoz s dobíjecí baterií
- Ergonomický design pro pohodlné používání
- Tři úrovně intenzity ošetření
- Automatické vypnutí po 10 minutách
- Vhodný pro domácí použití bez návštěvy salonu

5 TECHNOLOGIÍ V JEDNOM PŘÍSTROJI

- Vakuová masáž
- EMS mikroproudy
- LED světelná terapie
- Vibrační masáž
- Nahřívání

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Rozměry: 102 × 100 × 86 mm
- Hmotnost: 245 g
- Baterie: 1200 mAh
- Nabíjení: USB-C (5V / 1A)
- Materiál: ABS, PC, silikon, poniklovaná mosaz
- Automatické vypnutí po 10 minutách

OBSAH BALENÍ

- 1x BeautyRelax Vacuform Expert EMS
- 1x USB-C nabíjecí kabel
- 1x Nabíjecí adaptér 220V
- 1x Uživatelský manuál

POPIS PŘÍSTROJE

1. Displej
2. Tlačítko **ON/OFF**
3. Tlačítko **MODE**
4. Vstup pro napájecí kabel
5. Krytka filtračního tampónku
6. Kontaktní masážní body
7. Kontaktní masážní body



MASÁŽNÍ PROGRAMY

Přístroj nabízí tři automatické programy, které seskupují jednotlivé funkce přístroje. Uživatel si snadno vybere ten nejvhodnější pro svou potřebu.

Program 1

- Fialové LED světlo
- EMS mikroproudy
- Vibrace
- Nahřívání

Program 2

- Červené LED světlo
- Vakuová masáž
- Vibrace
- Nahřívání

Program 3

- Modré LED světlo
- EMS mikroproudy
- Vakuová masáž
- Vibrace
- Nahřívání

Poznámka k ovládání:

*Během činnosti přístroje můžete plynule reagovat na potřeby ošetřované oblasti. Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** měníte sílu podtlaku – k dispozici jsou tři přednastavené úrovně (nízká, střední a vysoká intenzita). Pro aktivaci nebo deaktivaci doplňkové vibrační masáže stiskněte dlouze tlačítko **MODE**.*

VÝMĚNA FILTRAČNÍHO TAMPÓNKU

Na spodní straně přístroje je umístěn filtrační tamponěk, který brání vniknutí nečistot do cirkulace vzduchu uvnitř přístroje. Filtr je vyroben ze speciálního materiálu, který umožňuje proudění vzduchu, ale zároveň zabrání průniku částic nečistot. Kompresní vzduchový systém přístroje je tak chráněn, aby nedošlo k nasátí nečistot a poškození přístroje. Filtr není třeba měnit po každém použití přístroje. Mají poměrně dlouhou životnost. Doporučujeme provést pravidelně vizuálně kontrolu jeho stavu. V případě znečištění proveďte jeho výměnu za nový. Délka životnosti opět závisí na frekvenci použití přístroje. Pokud je znečištěný, proveďte výměnu za nový. V případě potřeby kontaktujte prodejce s možností zakoupení nové sady spotřebního materiálu.

Výměna filtru

- 1. Odstraňte pryžovou krytku filtru. Stačí vyloupnout nehtem.*
- 2. Vyjměte použitý filtrační váleček za nový.*
- 3. Vložte nový filtrační váleček a kryt nasadte nazpět nadoraz.*

Jak poznat, kdy filtr vyměnit?

Filtr je po vizuální stránce velmi znečištěn nebo již nepropouští cirkulaci vzduchu. To můžete ověřit, pokud v průběhu činnosti přístroje s funkcí vakuovým váním neucítíte na prstu v blízkosti krytu tampónku proudění vzduchu. Pokud vzduch neproudí, je správný čas na výměnu filtračního válečku.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE KROK ZA KROKEM

Před prvním použitím

1. Přístroj plně nabijte pomocí dodaného USB-C kabelu a adaptéru. Indikátor baterie během nabíjení bliká a po úplném nabití svítí trvale. Dostatečná kapacita baterie zajistí, aby pracovaly všechny funkce s maximálním výkonem.
2. Ošetřovanou oblast důkladně omyjte a osušte.
3. Na pokožku naneste dostatečné množství masážního oleje, tělového séra nebo masážního gelu. Díky tomu bude přístroj po pokožce snadno klouzat a vakuová masáž bude příjemnější. Výrobce doporučuje před použitím nanést vhodný pečující přípravek.

Ošetření pokožky

KROK 1 – ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Podržte dlouze tlačítko **ON/OFF**.

Přístroj se zapne v **Programu 1** s intenzitou **1** (číslo 1 na displeji zobrazuje nízkou intenzitu působení vakuové masáže, nikoliv programu).

KROK 2 – VÝBĚR PRACOVNÍHO PROGRAMU

Krátkým stiskem tlačítka **MODE** vyberte požadovaný program.

PROGRAM 1

- Fialové LED světlo
- EMS mikroproudy
- Vibrace
- Nahřívání

PROGRAM 2

- Červené LED světlo
- Vakuová masáž
- Vibrace
- Nahřívání

PROGRAM 3

- Modré LED světlo
- EMS mikroproudy
- Vakuová masáž
- Vibrace
- Nahřívání

KROK 3 – NASTAVENÍ INTENZITY

Vyberte jednu ze tří úrovní intenzity vakuového nasávání.

- **Úroveň 1** – citlivá pokožka nebo první použití
- **Úroveň 2** – běžné používání
- **Úroveň 3** – intenzivnější masáž

Začátečníkům doporučujeme vždy začínat na nejnižší intenzitě.

KROK 4 – ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ VIBRACÍ

Pokud chcete vibrace vypnout nebo znovu zapnout, podržte dlouze tlačítko **MODE**.

KROK 5 – PŘILOŽENÍ PŘÍSTROJE

Přiložte masážní hlavici celou plochou na pokožku. Po přiložení přístroje k pleti začne vakuová masáž postupě přisávat pokožku. Nepřikládejte přístroj na kostnatá místa ani na oblast kloubů.

KROK 6 – POHYB PŘÍSTROJE

Přístrojem neustále pomalu pohybujte. Nikdy jej nenechávejte dlouho na jednom místě. Doporučená rychlost pohybu je přibližně **2–4 cm za sekundu**.

Doporučené směry masáže

Stehna: Ved'te přístroj od kolene směrem k hýždím.

Lýtka: Od kotníku směrem ke koleni.

Hýždě: Krouživými pohyby zdola nahoru.

Boky: Od spodní části boků směrem vzhůru.

Břicho: Provádějte pomalé kruhy po směru hodinových ručiček. Vyhněte se oblasti pupku při silném podtlaku.

Paže: Od lokte směrem k rameni.

STEHNA

Ved'te přístroj od kolene směrem k hýždím.



LÝTKA

Od kotníku směrem ke koleni.



HÝŽDĚ

Krouživými pohyby zdola nahoru.



BOKY


Od spodní části boků směrem vzhůru.



BŘICHO

Provádějte pomalé kruhy po směru hodinových ručiček.

Vyhněte se oblasti pupku při silném podtlaku.

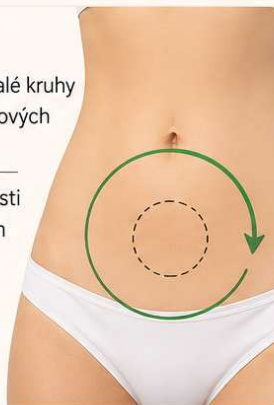

PAŽE

Od lokte směrem k rameni.



Doba používání

- Jedna oblast těla:

5–10 minut

- Celková doba jedné procedury:

20–30 minut

- Doporučená frekvence:

3–5× týdně

Po ukončení ošetření

1. Podržte tlačítko **ON/OFF** pro vypnutí přístroje.
2. Otřete masážní hlavici měkkým navlhčeným hadříkem.
3. Odstraňte zbytky oleje nebo kosmetického přípravku.
4. Uložte přístroj na suché místo.

Praktické doporučení

Pro dosažení nejlepších výsledků:

- používejte přístroj pravidelně,
- pijte dostatek vody před i po masáži,
- po proceduře naneste zpevňující nebo hydratační tělový krém,
- první viditelné výsledky lze při pravidelném používání očekávat přibližně po 4–8 týdnech.

Poznámka: Mírné zarudnutí pokožky po použití je běžnou reakcí na vakuovou masáž a obvykle během jednoho dne samo odezní.

POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1. Přístroj nikdy nepoužívejte na suchou pokožku.** Před každým ošetřením naneste na pokožku dostatečné množství masážního oleje, séra nebo krému, aby aplikační hlavice po pokožce snadno klouzala. Nejvhodnější je masážní olej, který pomalu vysychá, má ideální konzistenci a zajišťuje plynulý pohyb přístroje.
- 2. Výkon vakuového sání nastavujte vždy postupně.** Začněte na **úrovni 1** a intenzitu zvyšujte pouze podle vlastního pocitu a citlivosti pokožky. Účinek vakuové masáže by měl být znatelný, nikdy by však neměl způsobovat silnou bolest nebo být pro vás nepříjemný.
- 3. Automatické programy můžete během používání kdykoliv změnit** stisknutím tlačítka **MODE**. Vyzkoušejte jednotlivé režimy a zvolte ten, který nejlépe vyhovuje ošetřované partii a požadovanému efektu.
- 4. Vyšší výkon vakuového sání znamená intenzivnější masáž.** S rostoucí intenzitou se zvyšuje účinek mechanické podtlakové masáže, ale zároveň může dojít k výraznějším reakcím pokožky. Po ošetření je běžné přechodné zarudnutí, které obvykle během několika hodin odezní. Při příliš vysoké intenzitě nebo delším působení na jednom místě se mohou objevit drobné podlitiny (modřiny), jejichž vymizení může trvat několik dní. Vhodnou intenzitu si proto vždy přizpůsobte individuálně podle citlivosti své pokožky.
- 5. Pokud s přístrojem začínáte, používejte jej nejprve plynulými tahy.** Přístrojem provádějte pomalé, táhlé pohyby po ošetřované oblasti a nezůstávejte dlouho na jednom místě. Po získání zkušeností lze vybrané partie ošetřovat také staticky, tedy ponechat hlavici na jednom místě po delší dobu. Mějte však na paměti, že čím déle vakuum působí na jednom místě, tím větší je pravděpodobnost vzniku zarudnutí nebo podlitin. Riziko těchto reakcí snížíte použitím většího množství masážního oleje, plynulým pohybem přístroje nebo snížením intenzity vakuového sání.

DALŠÍ MOŽNOSTI POHYBU PO PLETI

- Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat ošetření po celkové koupeli těla. Pletť je krásně zahřátá a vláčná.
- Naneste na partii, kterou chcete ošetřit, jemnou vrstvu pleťového krému, krému proti celulitidě nebo jakýkoliv druh **esenciálního masážního oleje** (doporučujeme spíše přípravek na olejové bázi). Hlavním důvodem je lepší pohyb masážní hlavice po těle. Během masáže mají navíc tyto přípravky mnohem lepší schopnost absorbování do podkožní tkáně. **Bez podobného přípravku přístroj NEPOUŽÍVEJTE.**

pohybová masáž


Přístrojem se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka co nejlépe hydratovaná pomocí krému nebo oleje. Nikdy nepoužívejte masáž přístrojem na sucho. Při pohybové masáži je důležité nastavit sílu nasávání na co nejmenší úroveň. Pokud přístroj nasaje část těla až příliš silně, s přístrojem už nebude možné pohnout. Rychlost pohybu hlavice po pleti upravte podle nastaveného výkonu vakuové masáže.

bodová masáž

Bodová masáž spočívá v ošetření konkrétní tělesné partie po částech – viz. obrázek. Přístroj zapněte a přiložte aplikátor k pleti. Po nastavení všech parametrů spustí přístroj funkci nasávání v síle, kterou si sami zvolíte. Při bodové masáži může po ošetření pletť zarudnout. Pokud si nastavíte nasávání příliš silné, mohou se na pleti objevit i mírné otoky až modřiny, které však v průběhu několika dní zcela zmizí. Vždy začínejte na nižší síle působení vakua a postupně si přidávejte dle vašeho pocitu. Rozhodně hned nezačínajte na nejvyšších hodnotách!



Při ošetření ostatních částí těla postupujte podle následující grafické vizualizace. Rozdíl mezi pohybovou a bodovou masáží spočívá nejen v odlišné technice, ale v účinku působení na tělo. **Pohybová masáž** přispívá zejména ke zlepšení činnosti lymfy. Tělo získá lepší odvádět nadbytečnou vodu z končetin. Při **bodové masáži** podpoříte lokální krevní oběh, což přispívá k celkové efektivnější látkové výměně a odvodu škodlivin. Ideální na použití partií s výskytem příznaků celulitidy (pomerančové kůže).

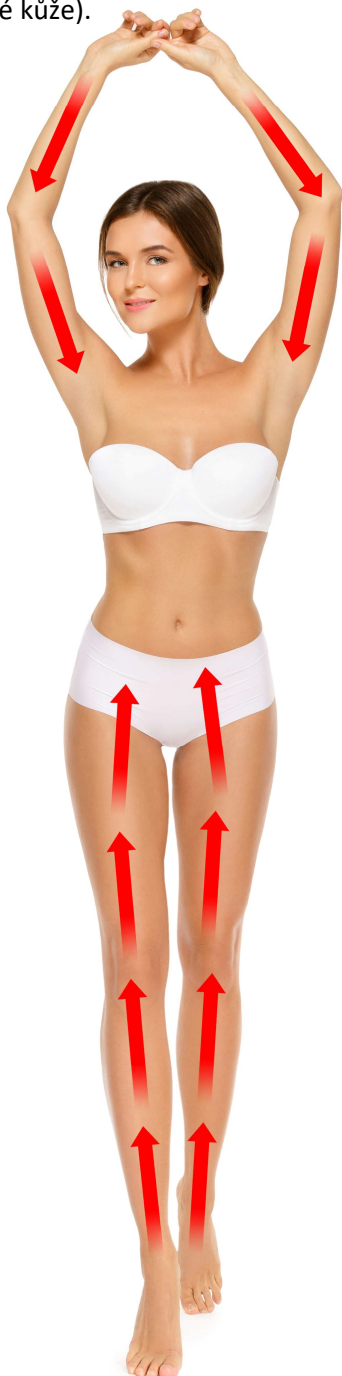

pohybová masáž



bodová masáž

POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍ HLAVICE PŘÍSTROJE

1. Před údržbou

Pro udržení provozu je nezbytně nutné po ošetření povrchu důkladně osušit. V opačném případě mohou látky na povrchu hlavic negativně zareagovat.

2. Po každém použití

- Odstraňte zbytky masážního oleje nebo sonogelu suchým ubrouskem.
- Otřete hlavici měkkým hadříkem navlhčeným teplou vodou.
- Důkladně osušte.

3. Dezinfekce

- Použijte dezinfekci na bázi alkoholu (max. 70 %).
- Naneste na hadřík nebo vatovou tyčinku.
- Jemně otřete kovové koncovky.
- Nechte krátce působit a poté osušte.

4. Čištění kovových hlavic

- Použijte jemný čisticí prostředek nebo neabrazivní čistič na nerez.
- Čistěte jemnými krouživými pohyby.
- Otřete vlhkým hadříkem a osušte.

5. Zakázané postupy

- Nepoužívejte abrazivní houbičky, kartáče ani drátěnky.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie (chlór, kyseliny).
- Neponořujte přístroj do vody.
- Nemyjte v myčce.


6. Skladování

- Skladujte v suchém prostředí.
- Nenechávejte na hlavici zbytky gelu nebo oleje.
- Chraňte před vlhkostí.

7. Kontrola

- Pravidelně kontrolujte stav kovových koncovek.
- Při výrazném poškození přestaňte přístroj používat a kontaktujte servis.

INTENZITA VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ

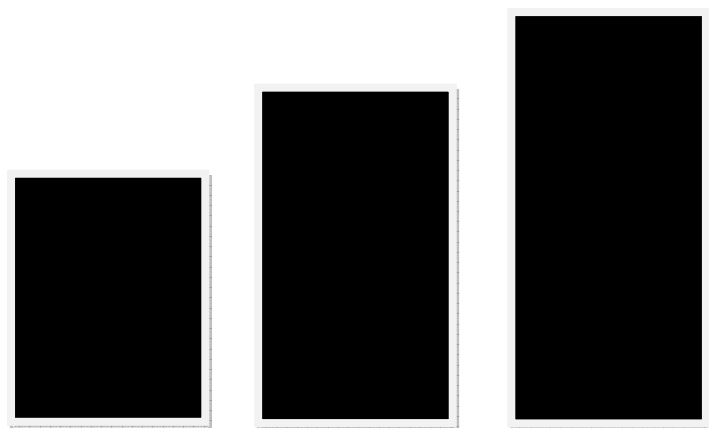

Masáž pomocí podtlaku je základní předpoklad k tomu, aby byla tuková tkáň stimulována s maximální efektivitou. Každý máme jinou citlivost pleti. Každý můžeme vnímat působení podtlaku jinak. Právě z toho důvodu umožňuje přístroj nastavení výkonu ve 3 úrovních intenzity. Ošetření pomocí metody vakuové masáže bude vždy na pleti cítit. Můžete vnímat, jak aplikační hlavice postupně nasává pokožku. Takto správně má podtlaková masáž probíhat. Pokud nastane situace, kdy by pro vás byla vakuová masáž i při nejnižší úrovni intenzity 1 až příliš silná, máme pro vás pár tipů, jak používat přístroj s vyšší úrovní komfortu:

- 1.** Na pokožku, kde chcete přístroj použít, naneste větší množství masážního oleje. Pokud bude povrch pleti mastný, aplikační hlavice přístroje bude mít na pleti lepší skluz. S přístrojem se tak můžete po pleti snadněji pohybovat.
- 2.** I když máte nastavenou úroveň intenzity na nejnižším stupni číslo 1, po přiložení přístroje k pleti ho nenechávejte nasát až do momentu, kdy je celý vnitřní prostor hlavice kompletně nasátý vaší pokožkou. V průběhu startu nasávání postupně přístroj od pleti ručně odstraňte. Takto postupujte část po části, kousek po kousku.
- 3.** Když chcete přístroj odstranit z pleti, nevolte směr kolmo od pleti, ale snažte se naklonit jeden o z okrajů aplikační hlavice. Jakmile se přeruší vakuum a do hlavice se dostane opět vzduch, přístroj snadno od pleti oddělíte.

Síla podtlaku je nastavitelná a klíčové je neponechávat hlavici dlouho na jednom místě – zejména u citlivější pokožky nebo v oblastech s tenčí kůží (vnitřní strana stehen, břicho). Doporučujeme pracovat v pomalých, krouživých pohybech (ideálně 2–4 sekund na jednu zónu) a vyhnout se statickému sání. Přístroj je certifikovaný a bezpečný při správném použití. Důrazně doporučujeme: Vždy kombinovat s dynamickým pohybem hlavice (ne statické přisátí!). Po aplikaci zařadit jemnou lymfodrenáž rukou pro podporu cirkulace. Bohužel, technická úprava síly podtlaku u již vyrobeného přístroje není možná. Intenzitu však lze regulovat: Pohybem rukou – čím rychleji hlavici pohybujete, tím nižší je lokální účinek.

POUŽÍVEJTE MASÁŽNÍ OLEJ



Pro bezpečnou, komfortní a maximálně efektivní masáž je nezbytné před každým použitím přístroje aplikovat na pokožku kvalitní masážní olej nebo krém.

Proč je to tak důležité?

- **Snižuje tření** – zabraňuje nepříjemnému tahání za pokožku a možnému podráždění.
- **Zlepšuje kluznost** – umožňuje plynulý pohyb hlavice bez nežádoucího „přisávání“ na jednom místě.
- **Zvyšuje účinnost masáže** – olej pomáhá přístroji lépe pracovat s pokožkou, což podporuje stimulaci tukových buněk a rozproudění lymfy.
- **Chrání pokožku** – předchází vzniku mikroporanění, zarudnutí nebo modřin.

Doporučení pro výběr oleje/krému:

- **Hypoalergenní přípravky** (vhodné pro citlivou pokožku).
- **Lehké konzistence** (snadno se roztírají, nezanechávají mastný film).
- **Přírodní složení** (např. mandlový, jojobový nebo kokosový olej).

Jak správně aplikovat?

- **Naneste dostatečné množství oleje** na ošetřovanou partii.
- **Rozetřete po celé ploše dlaní**, aby byla pokožka rovnoměrně pokrytá.
- **Během masáže případně doplňujte** – pokud pocítíte zvýšené tření.

UPOZORNĚNÍ

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ NA SUCHOU POKOŽKU! MOHLO BY DOJÍT K JEJÍMU POŠKOZENÍ A SNÍŽENÍ ÚČINNOSTI TERAPIE.

ZBARVENÍ PLETI

Působením podtlakové masáže mohou na pleti vznikat červené fleky až téměř podlitiny (v případě použití opravdu silného výkonu podtlakové masáže). Jedná se o zcela přirozený jev. V průběhu několika hodin (v závislosti na výkonu podtlakové masáže) zbarvení pleti postupně zmizí. V případě nejvyšších hodnot podtlakové masáže se mohou červené fleky proměnit až v modřiny. V tomto případě trvá návrat do přirozené barvy pleti déle.



DOBÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. K nabíjení používejte výhradně síťový adaptér, který je součástí balení. Stav baterie indikuje ikona baterie na displeji.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte nabíjecí síťový adaptér, který je součástí balení.
2. Délka nabíjení závisí na aktuální kondici baterie.
3. Průběh nabíjení indikuje blikající symbol baterie.
4. Délka nabíjení závisí na stavu vybití baterie.
5. Jakmile je baterie nabita, blikání ustane.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Masážní přístroj dosahuje poměrně velkého výkonu. Ten i můžete snadno nastavit pomocí ovládacího panelu. K dispozici jsou na výběr 3 úrovně - nízká, střední, vysoká. I v případě použití nejnižšího výkonu může být při delším nasátí komplikovanější opět aplikační hlavici z pokožky odstranit. Nejlepší metoda je šikmé naklonění přístroje. Při kolmém směru by se odpojení aplikační hlavy od pokožky mohlo jevit jako problematické.

RYCHLOST POHYBU PO PLETI

Jednou z masážních technik použití přístroje je tzv. razítkování. Metoda spočívá v nasátí aplikační hlavy pokožky na jednom místě. Poté se aplikační hlava odstraní a stejný proces provedete o kousek vedle. Rozpojení aplikační hlavy s pletí je nejlépe provádět šikmým náklonem. Při používání masážního přístroje je třeba zohlednit působení vakuového nasávání v čase. S délkou kontaktu aplikační hlavy s pletí na jednom místě vakuové nasátí postupně graduje (při nastavení libovolného výkonu). Pokud se s hlavicí přístroje budete pohybovat po pleti v rychlejších táhlých pohybech, gradování působení vakua v případě stání na jednom místě výrazně eliminujete. Jednoduše řečeno. Při rychlejším pohybu hlavy po pleti se vám bude pohyb provádět snadněji, avšak s nižší mírou působení vakua. Znovu zdůrazňujeme, že je vždy třeba pleť dostatečně hydratovat. Ideálně masážním olejkem. Pokud pokožku dostatečně „promažete“, má to na komfort použití přístroje zcela zásadní vliv.

SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE

Boj s celulitidou představuje běh na dlouhou trať. Přesto však existují účinné technologie, které z dlouhodobého hlediska napomáhají k potlačení projevů pomerančové pleti. Optimální je kombinace ultrazvukové kavitace a podtlakové vakuové drenáže. Ultrazvuk se aktivně zaměřuje na stimulaci tukových buněk. Vakuová drenáž stimuluje vhodným způsobem krevní oběh a lymfatický systém. V masážních salonech se jedná o běžný postup ošetření. V první fázi ošetříte vybranou partii ultrazvukem a ve druhé fázi vakuovou drenáží. Účinek působení ultrazvuku je tak maximálně podpořen.




BEAUTYRELAX 3v1



CAVIMAX



CAVIMAX OPTIMAL

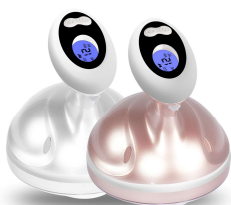

CELLUFORM



CAVIMAX ULTIMATE

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?

Před prvním použitím přístroje si pečlivě prostudujte celý návod k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména části věnované kontraindikacím a upozorněním. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás použití přístroje vhodné, poraďte se se svým praktickým lékařem nebo jiným odborníkem. Seznamte se také s doporučenými oblastmi těla určenými pro vakuovou masáž. Během ošetření zaujměte pohodlnou polohu vleže nebo vsedě a zajistěte si dostatek komfortu. Doporučujeme lehké a volné oblečení, které nebude omezovat pohyb ani přístup k ošetřované partii.

Jaká opatření je nutné dodržovat před a po ošetření?

Nejméně 4 hodiny před ošetřením se vyhněte těžkým a tučným jídlům. Vhodnější jsou lehká jídla, například zeleninový salát, ovoce nebo jogurt. Den před ošetřením, v den ošetření i několik dní po něm doporučujeme zvýšit příjem tekutin na přibližně 2–2,5 litru čisté neperlivé vody denně. Omezte slazené a sycené nápoje. Po intenzivnějším ošetření doporučujeme alespoň po dobu jednoho týdne omezit konzumaci alkoholu, nadměrného množství kofeinu, nikotinu a těžkých či mastných jídel. Dodržování těchto doporučení podporuje přirozené regenerační procesy organismu.

Bolí ošetření masážním přístrojem?

Při správném používání je ošetření bezbolestné a bezpečné. Sílu vakuového sání vždy nastavujte od nejnižší úrovně a postupně ji zvyšujte podle citlivosti a individuálního pocitu komfortu.

Mohu používat masážní přístroj bez předchozího ošetření pokožky?

Ne. Před každým použitím doporučujeme nanést na pokožku vhodný masážní olej, tělový olej nebo krém. Tím vznikne kluzná vrstva mezi aplikační hlavicí a pokožkou, která usnadní pohyb přístroje a zvýší komfort během ošetření. Současně se aktivní látky obsažené v použitých přípravcích lépe zapracují do pokožky.

Co mohu od pravidelného používání masážního přístroje očekávat?

Pravidelné používání může přispět ke zlepšení vzhledu pokožky. Ta může působit pevněji, hladčeji a pružněji, zejména v oblastech postižených celulitidou. Celulitida vzniká zvětšením objemu tukových buněk v podkoží, které vytvářejí typické nerovnosti připomínající pomerančovou kůru. Vakuová masáž podporuje prokrvení pokožky, stimulaci lymfatického systému a přirozené regenerační procesy organismu. Masáž může rovněž napomáhat zmírnění pocitu těžkých nohou, podpoře odvodu přebytečných tekutin a redukci drobných

otoků. Výsledky jsou individuální a závisí na pravidelnosti používání, životním stylu, pohybové aktivitě i vyvážené stravě.

Je používání masážního přístroje bezpečné?

Ano, při používání v souladu s návodem je přístroj bezpečný. Neobsahuje žádné ostré hrany ani jiné prvky, které by mohly způsobit poranění. Důležité je správné nastavení intenzity vakuového sání. Začínáte vždy na nejnižším stupni a intenzitu zvyšujete postupně podle vlastních pocitů. Při příliš vysokém nastavení může dojít k přechodnému zarudnutí pokožky, drobným otokům nebo vzniku modřin. Tyto projevy jsou obvykle dočasné a během několika hodin až dnů samovolně odezní.

Proč je důležité čistit a dezinfikovat aplikační hlavici?

Po každém použití je nutné aplikační hlavici důkladně očistit a podle potřeby dezinfikovat. Pravidelná údržba zajišťuje vysokou úroveň hygieny, prodlužuje životnost přístroje a zabraňuje pronikání zbytků krémů, olejů nebo nečistot do vnitřních částí přístroje.

Jak dlouho by mělo trvat jedno ošetření?

Doporučená délka ošetření jedné partie je přibližně 15 až 30 minut. Za jednu partii se považuje například jedno stehno, jedno lýtko, jedna paže nebo jiná samostatně ošetřovaná oblast těla.

Ve kterých případech přístroj nepoužívat?

Před použitím si vždy prostudujte kapitolu „**Kdy přístroj nepoužívat**“, kde jsou uvedeny všechny kontraindikace. Přístroj nepoužívejte zejména na poraněnou, zanícenou nebo jinak poškozenou pokožku ani v průběhu léčby kožních onemocnění. Po úplném zahojení a ukončení léčby lze používání zpravidla obnovit, pokud tomu nebrání jiné zdravotní důvody.

V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

Je přístroj zdravotnickým prostředkem?

Ne. Přístroj není zdravotnickým prostředkem. Jedná se o masážní přístroj určený pro domácí použití.

Jak postupovat, když baterie po delší době ztratí kapacitu?

Pokud se po delší době používání výrazně sníží kapacita akumulátoru, kontaktujte nás na e-mailové adrese mh@santadria.cz.

Poskytneme vám informace o možnostech výměny baterie nebo doporučeném servisním postupu.

Má přístroj certifikaci?

Ano. Přístroj splňuje požadavky platných evropských předpisů a norem vztahujících se k této kategorii výrobků. Na vyžádání vám rádi zašleme elektronickou kopii Prohlášení o shodě. Kontaktujte nás na e-mailové adrese mh@santadria.cz.

Může přístroj používat více osob?

Primárně doporučujeme, aby byl přístroj používán pouze jednou osobou. Pokud jej používají členové jedné domácnosti, je nezbytné po každém použití důkladně vyčistit a dezinfikovat aplikační hlavici a dodržovat všechna hygienická doporučení uvedená v návodu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Masážní přístroj VACUFORM EXPERT EMS

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-3151**

EAN 8594166124646

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60601-1-2:2007 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008 EN 60601-1:2006+A11:2011

EN 60825-1:2007

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Slouží pro masážní a relaxační účely. Neléčí žádné onemocnění.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.3.2026

.....
Martin Hrbek, jednatel