

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj **BeautyRelax BR-3079**

## MAXCOMFORT ULTIMATE





## OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	5
DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	6
HLAVNÍ VÝHODY	7
OBSAH BALENÍ	7
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	8
POPIS PŘÍSTROJE	19
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	20
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	21
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	22
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	24
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	24
CERTIFIKACE	24
EU DISTRIBUTOR	24
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	25

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořen do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nese distributor odpovědnost.



## **NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT**

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Kardiostimulátor
- Kovové implantáty v oblasti dolních končetin
- Křečové žíly (varixy) ve velmi vážném stádiu
- Při stavu vysokých horeček
- Chronické kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (pouze v případě, pokud by tlak nohavic způsoboval v oblasti výskytu kovového implantátu bolest)
- Cévní poruchy nebo arteroskleróza
- Otoky a edémy velkých rozměrů
- Osteoporóza
- Těhotenství
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



## **DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ**

- Pokud se během používání přístroje nebudete cítit komfortně, zvýší se vám výrazně rychlost dýchání nebo pociťujete stavy úzkosti, přístroj vypněte.
- První použití zahajte vždy na nejnižší stupeň masáže.
- Pokud je i při nejnižším stupni kompresní masáže tlak na vaše nohy až příliš silný, masáž ukončete a přístroj vypněte.
- Používání přístroje zvažte v případě, pokud máte velmi tenkou pokožku a již při mírném zmáčknutí či dotyku se vám objeví podlitiny až pohmožděniny.
- Používání přístroje výrazně zvyšuje krevní tlak. Pokud trpíte vysokým krevním tlakem, je používání přístroje přísně zakázáno.
- Pokud máte zdravotní problémy se srážlivostí krve, je používání přístroje zakázáno.
- Maximální délka použití by neměla přesahovat 10 až 20 minut za den.
- Četnost použití přístroje upravte podle používané intenzity výkonu, vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzické aktivitě.
- Masážní přístroj BeautyRelax není zdravotnický prostředek. Neléčí žádné nemoci indikované vaším lékařem. Přístroj patří do kategorie masážních přístrojů, které může uživatel používat v pohodlí domova bez odborného dohledu při splnění podmínek uvedených v návodu k obsluze.

## **HLAVNÍ VÝHODY**


- Kombinuje několik metod masáže: vzduchová, hnětací, tlaková, rotační a vibrační masáž
- Napomáhá uživatelům, kteří trpí neuropatií chodidel
- Potlačení chronické bolesti chodidel
- 5 masážních programů
- 9 úrovní intenzity masáže
- Ovládací panel pro snadné nastavení funkcí
- Rychlý nástup působení tepla
- Vysoká účinnost masáže
- Časovač: 15 nebo 30 minut
- Dálkový ovladač pro snadné nastavení funkcí přístroje
- Gumové nožičky na spodní straně přístroje zabraňují klouzání
- Pratelný odnímatelný látkový potah na chodidla
- Nabíjení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry: 49x44x41cm
- Hmotnost: 5kg

## **OBSAH BALENÍ**

- Masážní přístroj BeautyRelax BR-3079 MAXCOMFORT ULTIMATE
- Dálkový ovladač
- Návod k obsluze

## **PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE**

Masážní přístroj na chodidla BeautyRelax Maxcomfort Ultimate představuje důmyslné technologické řešení pro příjemnou relaxaci vašich unavených chodidel. Poskytuje relaxační masáž pro obě nohy zároveň. Přímé zacílení na celou spodní část nohy a oblast nártu. Kombinuje několik metod masáže: vzduchová, hnětací, tlaková, rotační a vibrační masáž. Pomáhá při neuropatické necitlivosti nohou. Pro chodidla do velikosti až 45 EU. 5 masážních programů. 2 úrovně vyhřívání. 9 úrovní intenzity. Poskytuje maximální komfort pro vaše chodidla. Odpočinek. Uvolnění. Zklidnění bolesti. Relaxace. Navození pohody. To je BeautyRelax Maxcomfort Ultimate!

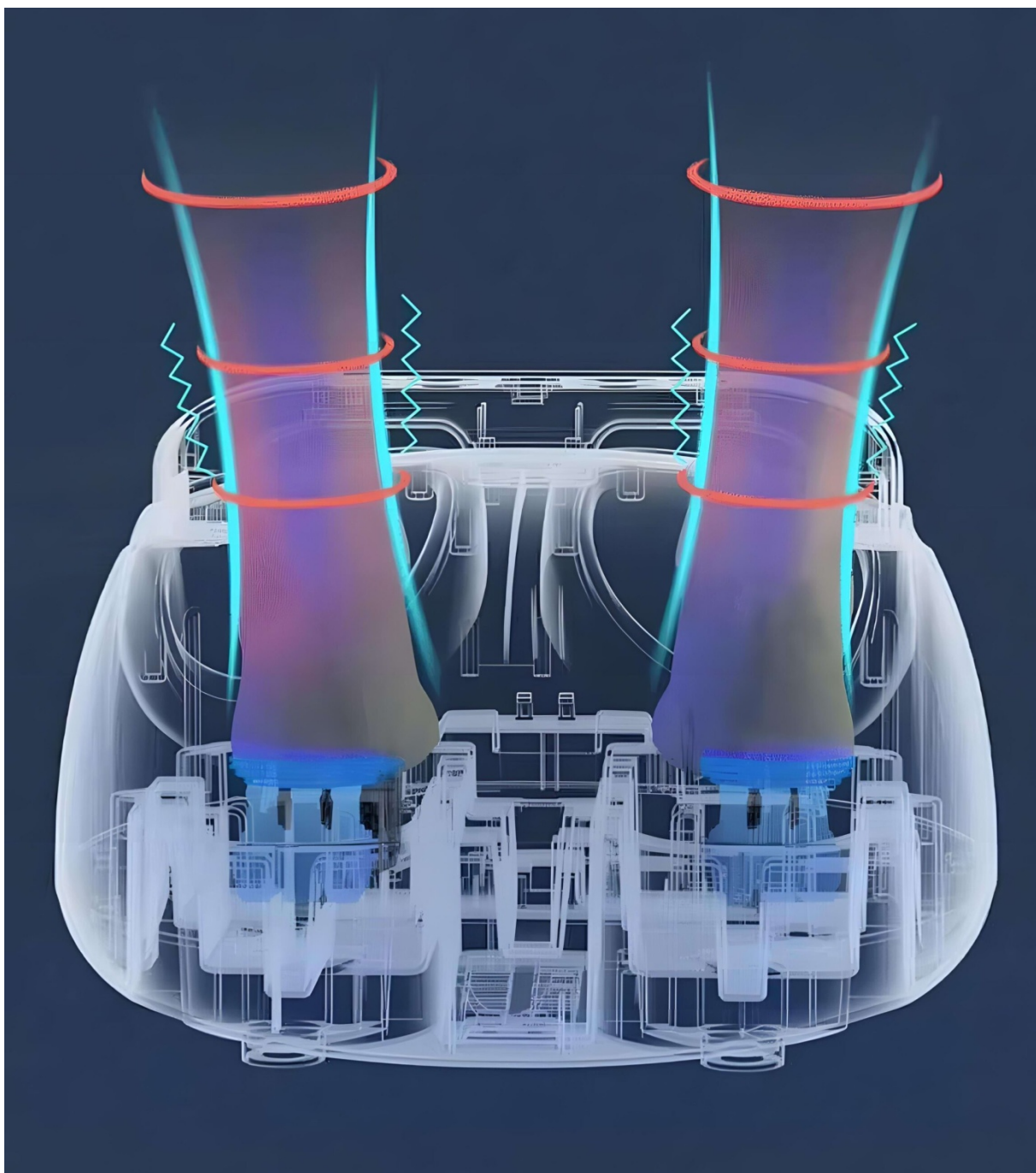



# MAXIMÁLNÍ RELAXACE NOHOU PO NÁROČNÉM DNI

VZDUCHOVÁ  
MASÁŽ

VÁLEČKOVÁ  
MASÁŽ


VYHŘÍVÁNÍ









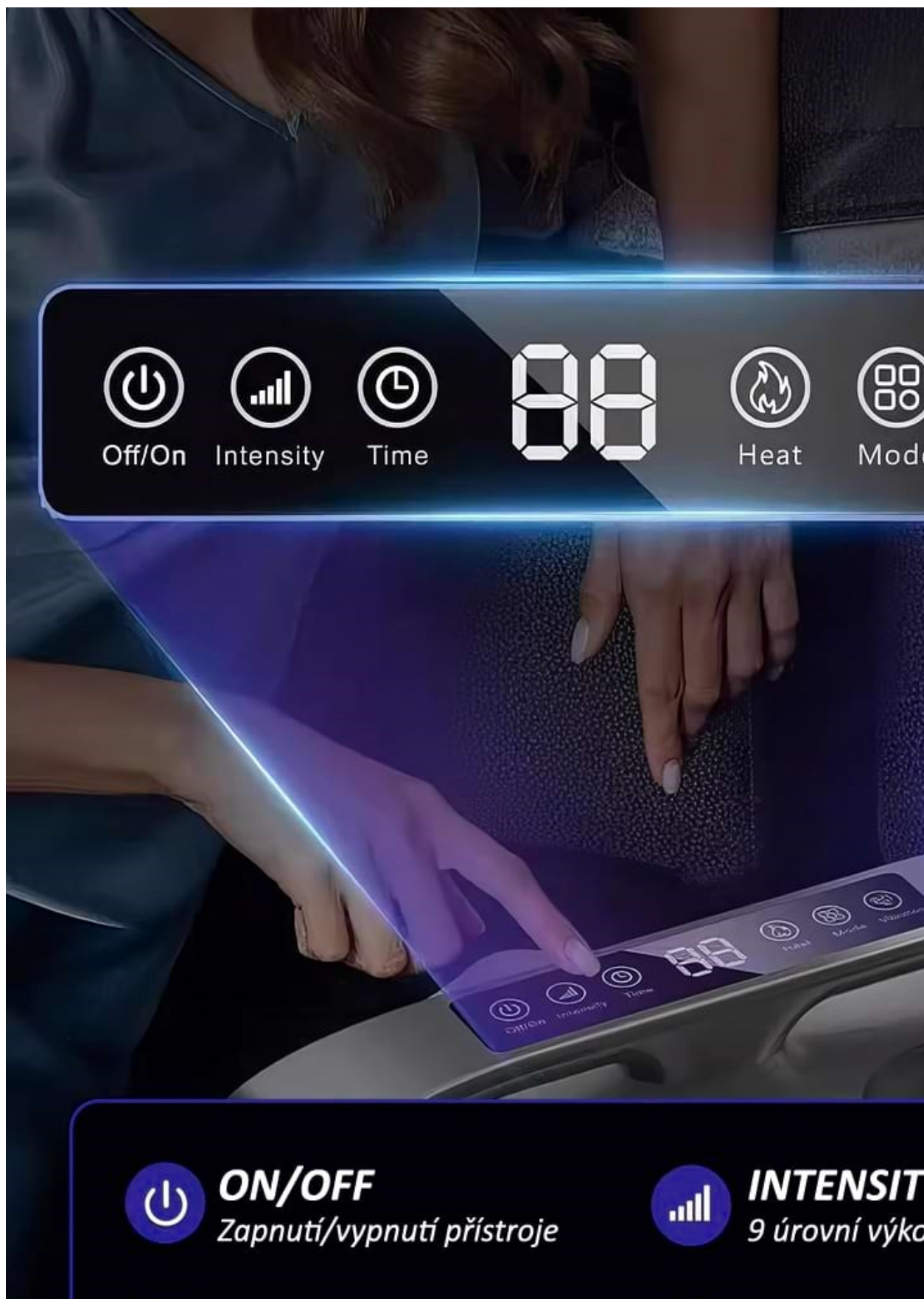

*OVLÁDACÍ PANEL  
S DOTYKOVÝMI TLAČÍTKY*


---


*POVRCH Z ODOLNÉHO  
TVRZENÉHO PLASTU*

---

*VZDUCHOVÁ MASÁŽ*

---

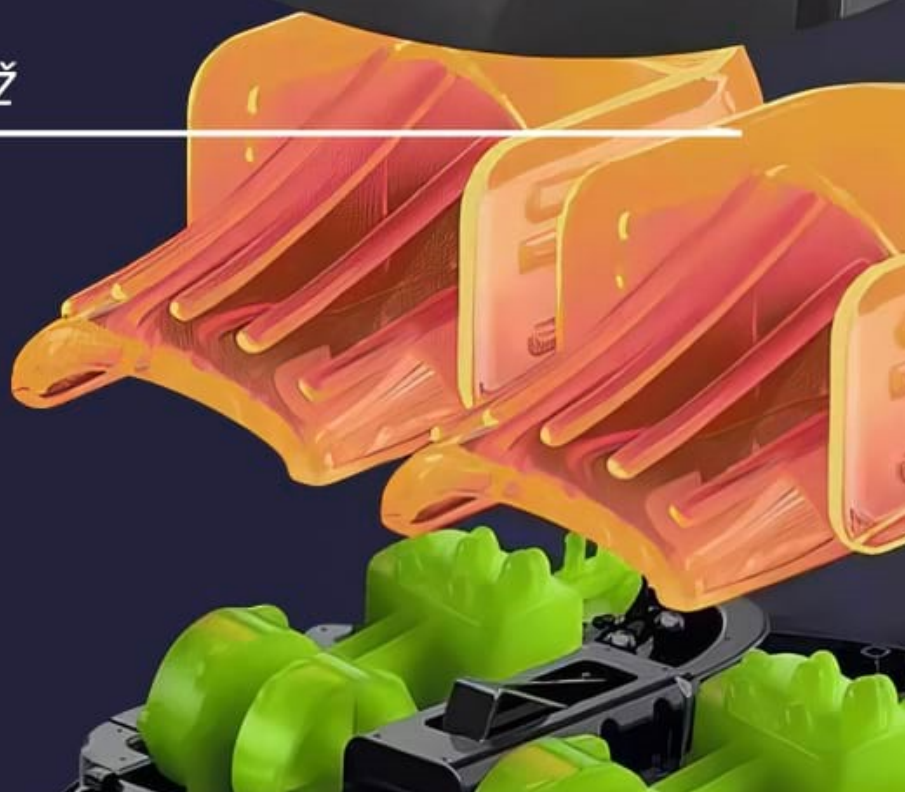

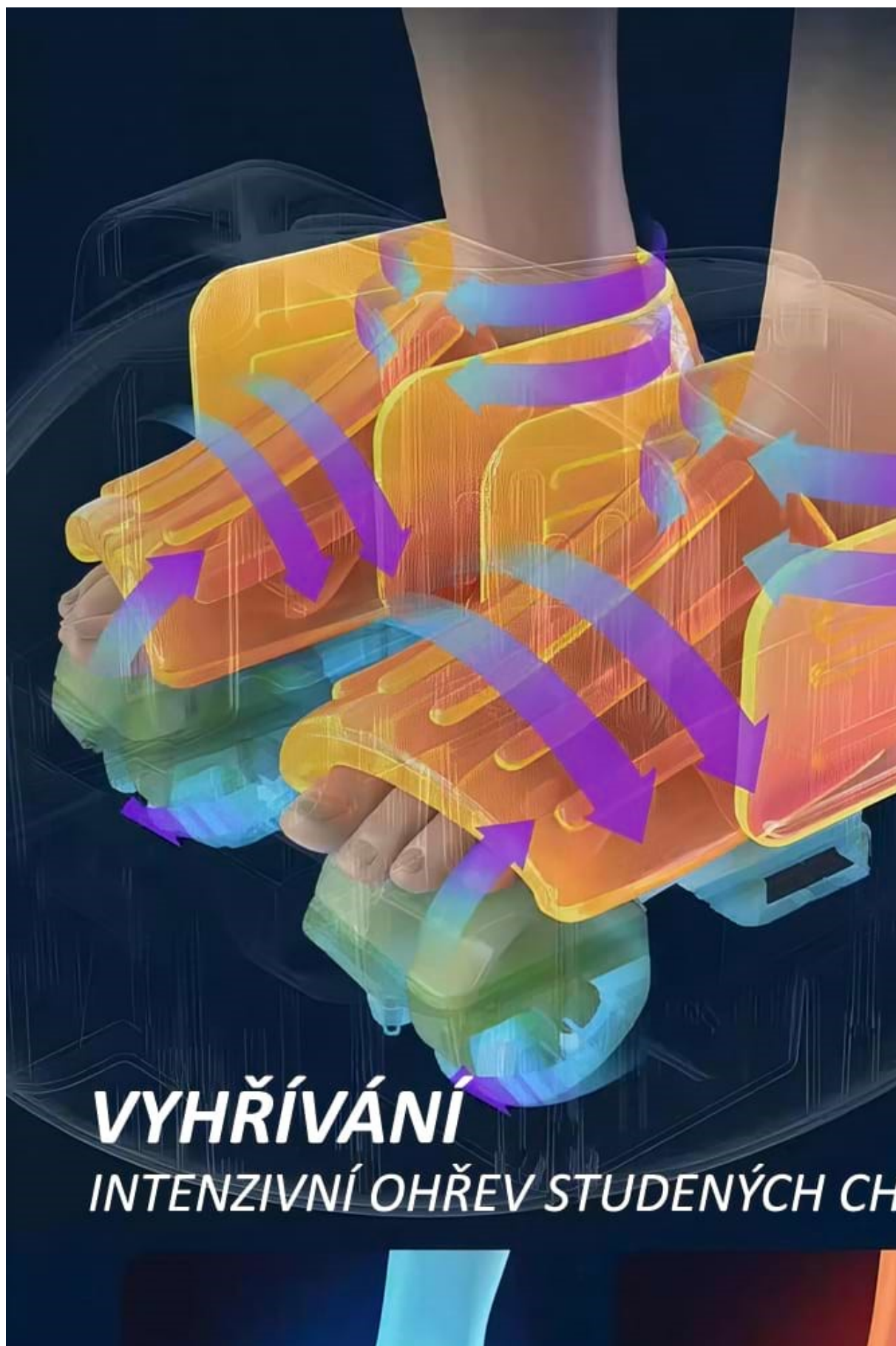

**VYHŘÍVÁNÍ**  
INTENZIVNÍ OHŘEV STUDENÝCH CH


### VÁLEČKOVÁNÍ




### HNĚTENÍ




### AKUP

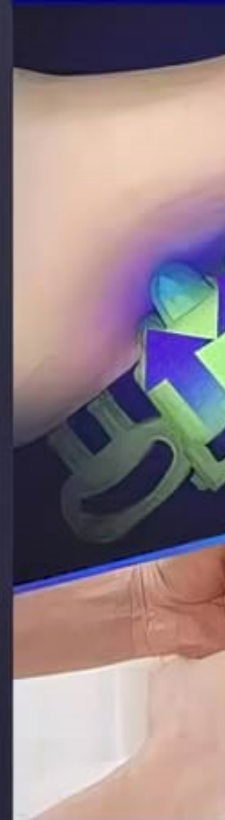

### VYHŘÍVÁNÍ

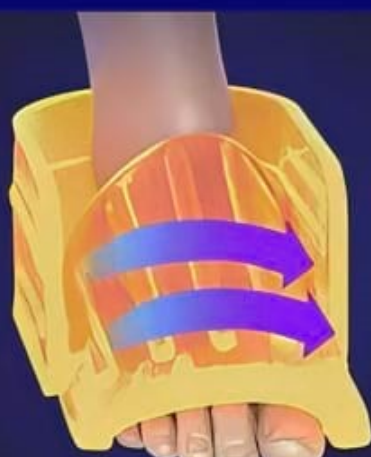

### POKRYTÍ CELÉHO C

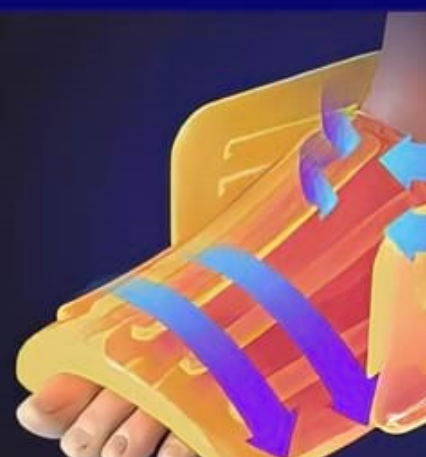







## POPIS PŘÍSTROJE



1. Ovládací panel
2. Vstup pro chodidla
3. Dálkový ovladač

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **INTENZITA**
3. Tlačítko **ČAS**
4. Displej
5. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
6. Tlačítko **MASÁŽNÍ PROGRAM**
7. Tlačítko **VIBRACE**

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapojte do elektrické sítě.
2. Pro ovládání přístroje můžete použít tlačítka na přístroji nebo dálkový ovladač.
3. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
4. Pomocí tlačítka **INTENZITY** si můžete nastavit intenzitu masáže. K dispozici je rozsah od 1 (nejnižší) do 9 (nejvyšší).
5. Pomocí tlačítka **ČAS** si můžete nastavit čas masáže. K dispozici je možnost nastavení 5, 10, 15, 20, 25 a 30 minut.
6. Pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** si můžete zapnout nebo vypnout působení tepla.
7. Pomocí tlačítka **MASÁŽNÍ PROGRAM** si můžete nastavit program masáže. K dispozici je 5 programů (P1 až P5). Každý program střídá jednotlivé technologie přístroje. Nastavte si program, který vám nejvíce vyhovuje.
8. Pomocí tlačítka **VIBRACE** si můžete nastavit 3 různé programy vibrační masáže: **F1, F2, F3**.
9. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

### Tlačítka na dálkovém ovladači:

- **ON/OFF** - tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
- **HEAT** - tlačítko vyhřívání
- **INTENZITY** - tlačítko intenzita masáže
- **MODE** - tlačítko masážní program
- **TIME** - tlačítko nastavení času
- **VIBRATION** - tlačítko vibrační masáž

## NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

### **Jak poznám, že je můj zdravotní stav v souladu s podmínkami používání přístroje?**

Věnujte prosím pozornost stavům, kdy přístroj není možné používat, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Dbejte zvýšenou pozornost vašemu zdravotnímu stavu, zejména kondici kardiovaskulárního systému s ohledem na váš krevní tlak. Pokud si přesto nejste jisti, konzultujte první použití s vaším praktickým lékařem.



### **Jak by mělo používání přístroje správně probíhat v domácím prostředí?**

Udělejte si pohodlí. Navodte si relaxační atmosféru. Zapalte vonnou svíčku a pomalou relaxační hudbu nebo můžete přístroj používat např. při sledování televize.

### **Jak dlouho a s jakými časovými rozestupy přístroj používat?**

Základní doporučení je použití 1x denně v délce maximálně 10 až 20 minut. Frekvence použití by se měla odvíjet s ohledem na vaši zdravotní a fyzickou kondici. V plánu používání můžete zohlednit aktuální fyzickou námahu, ať již v práci nebo při volnočasových aktivitách. V ideálním případě používejte přístroj každý den. Pokud je kondice snižená, snižte adekvátně frekvenci používání.

### **Jaké oblečení je ideální při používání přístroje?**

Zvolte lehké oblečení z příjemného materiálu. Při použití doporučujeme obléci si tenké ponožky.

### **Bolí používání masážního přístroje?**

Pokud nemáte pokožku velmi citlivou na dotyk, masáž bolestivá není. V praxi to znamená, že po silnějším stisku se vám nevytváří otoky nebo podlitiny. Používání je naopak velmi příjemné a komfortní. Neměli byste cítit žádné nepříjemné stavy.

### **Je možné přístroj použít jinak než pro masáž dolních končetin?**

Hlavní jednotka přístroje je určena výhradně pro masáž chodidel.

### **Jak postupovat, pokud se mi během používání udělá nevolno?**

Masáž ukončete a přístroj vypněte.

**Co mohu od přístroje očekávat? Jaká je reálná funkčnost přístroje?**

Konstrukce přístroje je speciálně navržena tak, aby pomocí kompresní masáže stimulovala vaše chodidla. Obrovskou výhodou je možnost nastavení intenzity úrovně masáže. Celkový vjem z masáže je naprosto odlišný od masáže pomocí lidských rukou. Hlavní smysl přístroje spočívá v okamžitém uvolnění namožených nohou. S tím souvisí další výhody používání: podpora krevního oběhu a účinná rehabilitace pro chodidla.

**Je používání přístroje bezpečné?**

Pokud se vás netýká žádná z uvedených stavů, kdy přístroj nepoužívat, používání přístroje je naprosto bezpečné. Pakliže si skutečně nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem.

**Je přístroj zdravotnický prostředek? Mohu s přístrojem řešit léčbu konkrétních nemocí?**

Přístroj není zdravotnický prostředek. Aktivně neléčí žádnou konkrétní nemoc. Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů s použitím v domácích podmínkách. Stimulace chodidel má spoustu blahodárných účinků pro vaši fyzickou a psychickou pohodu.

**Má přístroj nějakou certifikaci?**

Přístroj má evropskou certifikaci. Splňuje všechny normy, které jsou na přístroje tohoto typu kladeny.

**Může přístroj používat více osob?**

Přístroj je určen primárně pro osobní použití. Pokud je zachován základní princip hygieny - tzn. přístroj není v přímém kontaktu s pleť, výrazně snížíte riziko přenosu případné kožní choroby. Není tak přímo zakázáno používat přístroj více osobami.

**Je přístroj vodotěsný?**

Hlavní jednotka ani návleky na nohy nejsou určeny pro ponoření do vody.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. K čištění používejte mírně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř hlavní jednotky. Návleky nejsou určeny k praní v pračce. Návleky neponořujte do vody. V případě potřeby pomocí zipu odstraňte textilní návleky. Nepoužívejte pračku. Perte v ruce s menším množstvím pracího prášku nebo aviváže. Před zpětnou instalací dokonale vysušte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.



# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

**Masážní přístroj BeautyRelax**

**MAXCOMFORT ULTIMATE**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3079**

EAN: **8594166123793**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1:2006+A1: 2009+A2: 2011**

**EN 61000-3-2: 2014**

**EN 61000-3-3: 2013**

**EN 55014-2: 2015**

**Přístroj není zdravotnický prostředek.**

Slouží pro sportovní rekondiční masáž za účelem uvolnění svalů na vybraných částech těla.

Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů - TARIC 90191010

Při komerčním použití je třeba klást důraz na hygienu provozu přístroje.

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....  
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.2.2024