

NÁVOD K OBSLUZE

Ultrazvuková kavitace **Beautyrelax BR-1410**

CAVIMAX



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	5
LYMFATICKÉ UZLINY	6
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	7
ČAS OŠETŘENÍ	7
HLAVNÍ VÝHODY	8
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	8
TECHNICKÉ PARAMETRY	8
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	9
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	9
TERAPIE INFRAČERVENÝM SVĚTLEM	9
ELEKTRICKÁ STIMULACE SVALŮ (EMS)	9
POUŽITÍ SONOGELU	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	11
POPIS DISPLEJE	11
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	12
DOPORUČENÉ MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA	14
UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE	15
DALŠÍ MOŽNOSTI MASÁŽE	16
POUŽITÍ FUNKCE EMS	20
NEBEZPEČÍ	20
VÝSTRAHA	20
DŮLEŽITÉ POKYNY	21
UPOZORNĚNÍ	21
UMÍSTĚNÍ GELOVÝCH ELEKTROD	22
POKYNY PRO POUŽITÍ FUNKCE EMS	22
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	23
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	23
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	25
CERTIFIKACE	25
DOVOZCE	25
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	26

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



OBSAH BALENÍ

- Beautyrelax BR-1410.
- Napájecí adaptér 220V.
- Gelové elektrody s kabelem.
- Návod k obsluze.

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Hlava
- Krk (přední i zadní strana)
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



LYMFATICKÉ UZLINY

Při ošetření přístrojem Beautyrelax Cavimax se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyb přístroje v těchto oblastech je **přísně zakázáno**. Oblasti jsou zobrazeny velkými zelenými skvrnami na obrázku:



POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtka



Poznámka: párová oblast těla je brána jako jedna partie

ČAS OŠETŘENÍ

Čas ošetření by neměl přesáhnout **15 minut**. V případě párové části těl rozdělit tento čas na polovinu. Tzn. 7,5 minuty jedno stehno a 7,5 minut druhé stehno.

Ošetřit lze najednou maximálně dvě partie ve frekvenci maximálně jedenkrát do týdne. Stejnou partii je možné ošetřit nejdříve za 7 dní.

Příklad rozvrhu ošetření těla

Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota	Neděle
paže + lýtka	volno	volno	stehna + lýtka	volno	volno	volno

Proč volné dny?

Po ošetření přístrojem Beautyrelax Cavimax je nezbytně nutné dát tělo nějaký čas, než proběhne cyklus nastartovaného procesu v těle. Uvolněný tuk se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Po ukončení tohoto procesu je možné bezpečně přístrojové ošetření opakovat.

HLAVNÍ VÝHODY

- Certifikovaný přístroj garantuje ošetření maximálně šetrné k vašemu tělu.
- Ideální na tělesné partie, které je problematické vyformovat cvičením.
- Neinvazivní, šetrné a vysoce účinné řešení.
- Ultrazvukové vlny nezpůsobí na těle žádné modřiny, otoky nebo jizvy.
- Dvě úrovně nastavení intenzity ultrazvukových vln.
- Velká aplikační hlavice.
- Vybrané partie: Ruce, břicho, hýždě, stehna, lýtka.
- Jednoduché intuitivní používání.
- Snadné ovládání.
- Používání přístroje zvládnete v domácím prostředí.
- Návod k obsluze zahrnuje veškeré podrobné instrukce.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

- Terapie infračerveným světlem.
- 8 infračervených zářičů po obvodu hlavice.
- Podporuje krevní oběh a látkovou výměnu.
- Příznivě stimuluje metabolismus.
- Populární metoda používaná po celém světě.
- Velké aplikační gelové elektrody.
- k dispozici je na výběr až 5 úrovní intenzity.
- 5 různých režimů EMS masáže: poklep, masáž, hnětení, protahování, formování.
- Partie, které lze ošetřit: ruce, břicho, hýždě, stehna, lýtka.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Evropská certifikace: Ano.
- Frekvence ultrazvuku: 1Mhz.
- Napájení: adaptérem z elektrické sítě 220V.
- Rozměry: 19,5x8x5,4cm.
- Hmotnost: 296g.

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Masážní přístroj BeautyRelax Cavimax podpoří vaši snahu k vysněné postavě. Multifunkční aplikační hlavice disponuje funkcí ultrazvukových vln a infračerveného světla. Součástí balení jsou gelové elektrody, které poskytují elektrickou stimulaci svalů EMS. Velký LED displej. Ergonomický design.

ULTRAZVUKOVÉ VLNY

Velká aplikační hlavice z ušlechtilé nerez oceli generuje ultrazvukové vlny, které pronikají přes povrch pokožky až do podkoží, kde se nachází tuková tkáň. Dochází k neinvazivnímu porušení integrity tukových buněk a následnému uvolnění tuku. Takto uvolněný tuk se dále štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Odstraněný tuk se zpět do tkáně nevrací. Ultrazvuková kavitace je bezbolestná, neinvazivní, šetrná, účinná a hlavně trvalá metoda pro odstranění tukové tkáně, redukci celulitidy a vyhlazení pokožky.

TERAPIE INFRAČERVENÝM SVĚTLEM

Po obvodu aplikační hlavice přístroje je zabudováno 8 světelných zářičů. Infračervené paprsky pronikají do těla o vlnové délce v rozsahu 8 až 12nm. Infračervené záření má ve srovnání s ostatními zdroji tepla lepší schopnost pronikat hlouběji do podkožní tkáně. Infračerveným teplem je výrazně podpořen krevní oběh. Tělo je tak schopno rychleji se zbavit škodlivin a odpadních látek. Přispívá k celkové regeneraci a ozdravení těla.

ELEKTRICKÁ STIMULACE SVALŮ (EMS)

Domácí kavitace má také funkci elektrostimulátoru. Základem pohybu těla je kontrakce svalů, které dostávají příkazy k činnosti prostřednictvím impulzů vysílané z mozku. Pohybem se svaly přirozenou cestou posilují. Svaly pracují přesně na těch partiích, kam gelové elektrody nalepíte. Můžete snadno nastavit sílu impulzů, které jsou od elektrod přes pokožku přenášeny ke svalům. Silnější impulzy slouží k aktivnímu posilování svalstva. Jemnější naopak k jejich uvolnění po fyzické námaze. Můžete využít k aplikaci dvě elektrody najednou.

POUŽITÍ SONOGELU


Na ošetřovanou partii vždy naneste tenkou vrstvu čirého aplikačního gelu (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikační hlavicí a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavicí. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Přístroj v režimu ultrazvukové kavitace není možno bez přítomnosti gelu na pokožce používat.

POPIS PŘÍSTROJE



1. Aplikační hlavice
2. Infračervené světlo
3. LED displej
4. Výstup pro kabely s elektrodami
5. Tlačítko MODE
6. Tlačítko OK
7. Změna/zvýšení úrovně intenzity
8. Změna/snížení úrovně intenzity
9. Vstup pro napájecí kabel

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

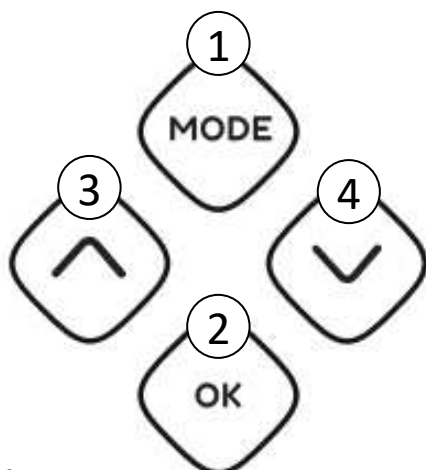

1. Tlačítko *MODE*
2. Tlačítko *OK*
3. Změna/zvýšení úrovně intenzity
4. Změna/snížení úrovně intenzity

1. Tlačítko *MODE*

Přepnutí mezi jednotlivými režimy použití přístroje (infračervené světlo, ultrazvuková kavitace, elektrické pulzy EMS)

2. Tlačítko *OK*

Potvrzení zvoleného výběru nastavení.

3. Změna/zvýšení úrovně intenzity

Zvýšení intenzity zvolené funkce nebo přepnutí mezi jednotlivými režimy masáže.

4. Změna/snížení úrovně intenzity

Snížení intenzity zvolené funkce nebo přepnutí mezi jednotlivými režimy masáže.



POPIS DISPLEJE



1. Infračervené světlo
2. Ultrazvuková kavitace
3. Elektrické pulzy EMS
4. Úroveň intenzity
5. Tapping (poklep)
6. Massage (masáž)
7. Knead (hnětení)
8. Scrap (protahování)
9. Slim (formování)



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **MODE**. Na displeji se zobrazí blikající nápis **INFRARED**.

Stiskem tlačítka  potvrdíte výběr pro zapnutí této funkce. Stiskem tlačítka  potvrdíte výběr pro vypnutí této funkce.



2. Stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr funkce **SONIC** (ultrazvuk). Na displeji se zobrazí blikající nápis

SONIC. Stiskem tlačítka  nebo  vybere intenzitu působení ultrazvuku - **Nízká L (jedna čárka)** nebo **vysoká H (dvě čárky)**. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru.






3. Stiskněte tlačítko **MODE** pro nastavení funkce elektrických pulzů **EMS**.




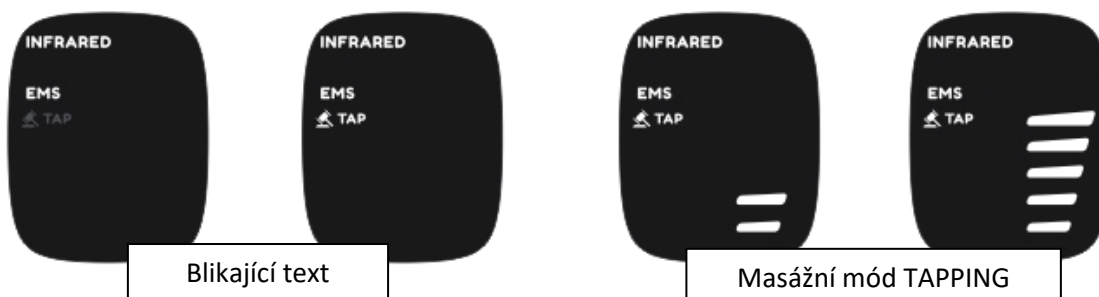

4. Stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr režimu **TAPPING** (poklep). Na displeji se zobrazí blikající nápis

TAPPING. Stiskem tlačítka  nebo  vyberte sílu masáže od úrovně 1 po úroveň 5. Výběr potvrdíte stiskem tlačítka OK.



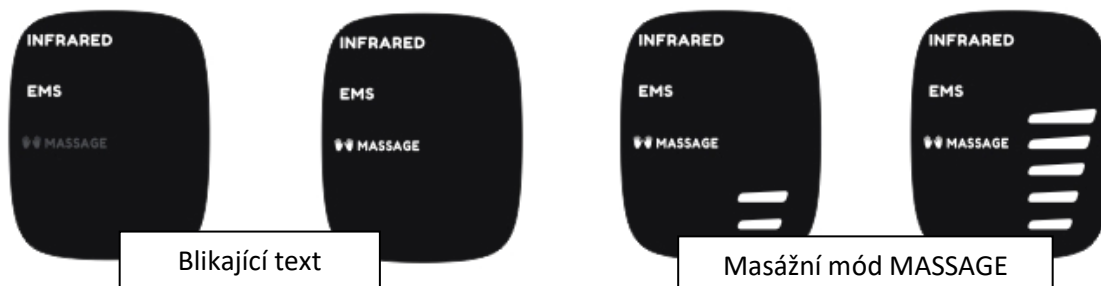


5. Stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr režimu **MASSAGE** (masáž). Na displeji se zobrazí blikající nápis **MASSAGE**. Stiskem tlačítka  nebo  vyberte sílu masáže od úrovně 1 po úroveň 5. Výběr potvrdíte stiskem tlačítka OK.






6. Stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr režimu **KNEAD** (hnětení). Na displeji se zobrazí blikající nápis **KNEAD**. Stiskem tlačítka  nebo  vyberte sílu masáže od úrovně 1 po úroveň 5. Výběr potvrdíte stiskem tlačítka OK.

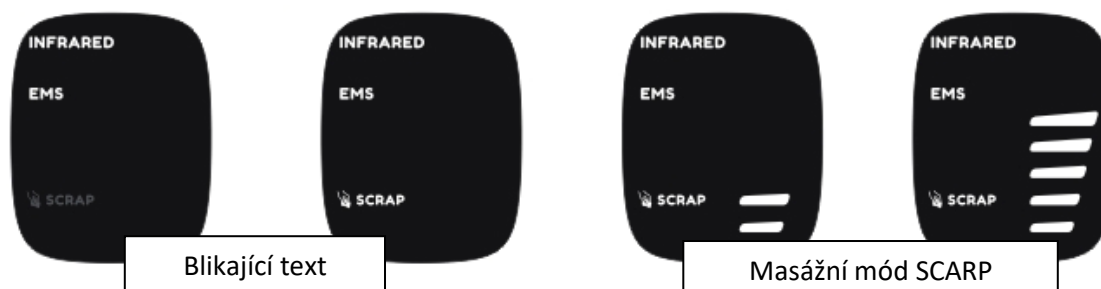

7. Stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr režimu **SCRAP** (protahování). Na displeji se zobrazí blikající nápis **SCRAP**. Stiskem tlačítka  nebo  vyberte sílu masáže od úrovně 1 po úroveň 5. Výběr potvrdíte stiskem tlačítka OK.



8. Stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr režimu **SLIM** (formování). Na displeji se zobrazí blikající nápis **SLIM**. Stiskem tlačítka  nebo  vyberte sílu masáže od úrovně 1 po úroveň 5. Výběr potvrdíte stiskem tlačítka OK.

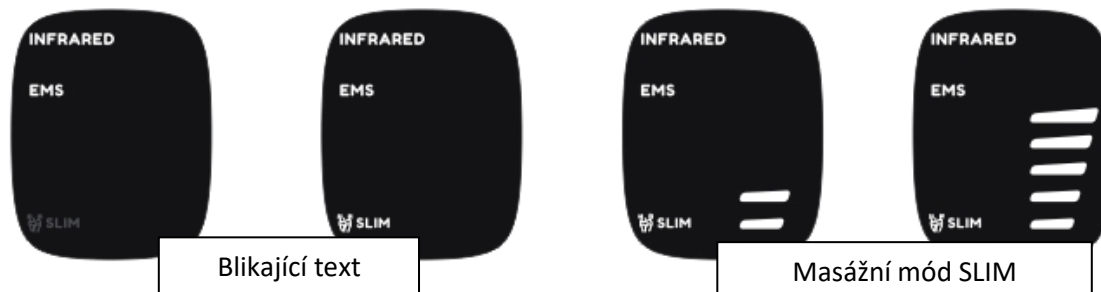

Stiskem tlačítka **MODE** se vrátíte zpět na začátek výběru jednotlivých masážních funkcí a výběr můžete znovu nastavit podle vaší potřeby.

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA

- Při použití přístroje vždy dbejte na to, aby byly ošetřeny pouze ty partie těla, na které lze přístroj použít.
- Vždy provádějte masáž přímo na pleť bez oblečení.
- Během ošetření těla se snažte, aby byla vždy aplikační hlavice v plném kontaktu s pleť.
- Zvýšenou pozornost věnujte zejména partiím, které přístrojem nelze ošetřit.
- Přístrojem se pohybujte po pleť pomalými krouživými i táhlými pohyby v opakovaných intervalech. S aplikační hlavici nezůstávejte dlouho na jednom místě. Snažte se vždy ošetřit co největší plochu dané partie.
- Zde uvádíme několik příkladů s doporučením, jaké pohyby je vhodné přístrojem po těle provádět.
- Obrázky jsou ilustrační.



UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE



DALŠÍ MOŽNOSTI MASÁŽE

PAŽE



Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na ruce. Aplikační hlavicí přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně ošetřete vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujte se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.




Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem ošetřete postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.

PAS & BŘÍŠKO

Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.

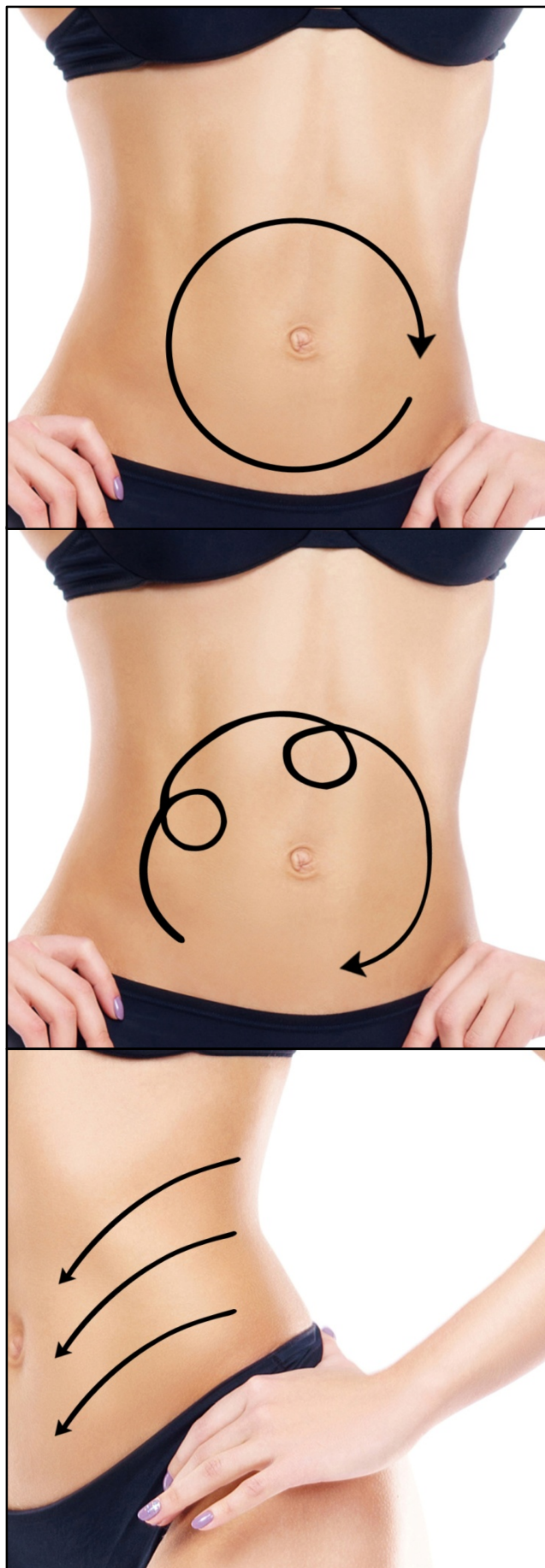

HÝŽDĚ


Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto ošetřit celou oblast hýždí.

STEHNA & LÝTKA

Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

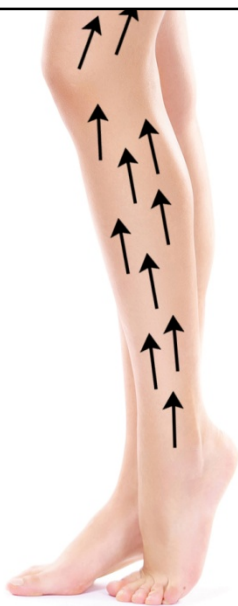

Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.



Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete ošetřit přední i zadní část končetiny.



POUŽITÍ FUNKCE EMS

Věnujte prosím čas následujícím instrukcím, aby bylo používání přístroje **správné** a **bezpečné**.

NEBEZPEČÍ

Funkci elektrických pulzů EMS je zakázáno používat, pokud současně používáte tyto přístroje:

1. Lékařské elektronické přístroje (např. kardiostimulátor).
2. Lékařské elektronické přístroje, které podporují životní funkce (např. umělé srdce, plíce, játra, apod.).
3. Jiné lékařské přístroje (např. elektrokardiograf).



VÝSTRAHA

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, **je zakázáno** funkci elektrických pulzů EMS používat:

1. Akutní potíže
2. Srdeční problémy
3. Vysoké horečky
4. Těhotenství
5. Zhoubné nádory
6. Trvalý nízký nebo vysoký krevní tlak
7. Infikovaná rána nebo podobné vážné zranění
8. Alergické kožní problémy
9. Podrobení se lékařské diagnostické terapii
10. Nepříjemná souvislá bolest svalů v důsledku jejich nadměrného přetížení



DŮLEŽITÉ POKYNY

1. Je zakázáno umísťovat elektrodu na oblast srdce, krku, hlavy, do oblasti genitálií. Elektrody nepoužívejte na oblasti, které trpí kožními chorobami nebo odřeninami.
2. Příklad se nesmí používat v kombinaci s jinými lékařskými přístroji. Před používáním nepoužívejte krémy nebo spreje. Mohlo by dojít k poškození pokožky.
3. Příklad používejte podle přesně daných pokynů v tomto návodu. Příklad se nesmí používat k jiným účelům než tlumení svalové bolesti, napětí a posilování svalů.
4. Elektrody, které jsou součástí balení, nepřipojujte do jiného zařízení nebo dokonce zdroje elektrického proudu 220V. Jsou určeny výhradně k připojení do zdířky přístroje.


UPOZORNĚNÍ

1. Pokud se necítíte při používání přístroje dobře nebo se vyskytnou nečekané zdravotní komplikace, činnost přístroje okamžitě vypněte a další použití konzultujte se svým lékařem.
2. Pokud chcete elektrodu umístit na jinou část těla, nejprve činnost přístroje vypněte. Poté můžete bezpečně elektrodu přesunout a přístroj znovu zapnout.
3. Vzhledem k zajištění maximální účinnosti přístroje vypněte veškerá elektronická zařízení, která případně používáte (MP3 přehrávač, mobilní telefon při telefonování).
4. Příklad se nesmí používat ve spánku, kdy nejste schopni mít přístroj plně pod kontrolou. Mohlo by dojít k vážnému zranění.
5. Elektrodu nepoužívejte na jednom místě déle než 30 minut.
6. Dbejte na to, aby se během používání elektroda nedostala do kontaktu s kovovými vodivými předměty (řetízky, náramky, prsteny, ...)



UMÍSTĚNÍ GELOVÝCH ELEKTROD

Gelové elektrody nikdy nenalepujte na tělo ve výše zobrazených kombinacích. Elektrické impulzy by proudily přímo přes srdce, což je striktně zakázáno!

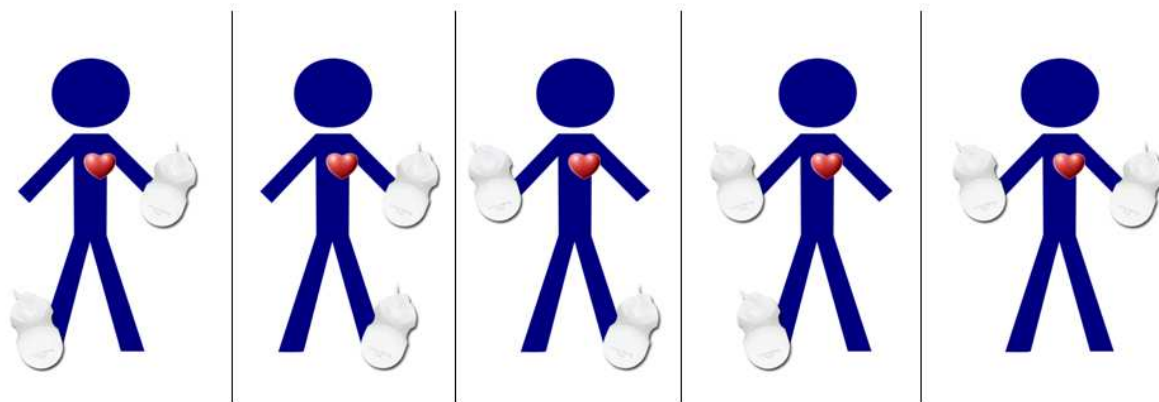

POKYNY PRO POUŽITÍ FUNKCE EMS

1. Nejprve důkladně očistěte pokožku, kde budete gelové elektrody aplikovat. To je velmi důležité pro správný přenos pulsů přes pokožku a elektrody vám nebudou při používání padat.
2. Každou elektrodu zapojte k plochým konektorům.
3. Elektrody nalepte na partie, které chcete ošetřit.
4. Kabel s elektrodami připojte k přístroji. Zdířka je umístěna na boční straně pod aplikační hlavicí přístroje.
5. Přístroj zapněte a postupujte dle předchozí pasáže s popisem nastavení funkce EMS.
6. Po skončení používání gelové elektrody odlepte a pokuste se znovu přilepit k papírku, které byly na elektrodách přilepeny. Elektrodu tím ochráníte před uchycením prachu a tím výrazně prodloužíte životnost.



Režimy vhodné pro uvolnění svalstva		Režimy vhodné pro aktivní posilování svalů	
TAPPING	POKLEPÁVÁNÍ	SCRAP	PROTAHOVÁNÍ
MASSAGE	MASÁŽ	SLIM	FORMOVÁNÍ
KNEAD	HNĚTENÍ		

Poznámka: Pokud s přístrojem začínáte, doporučujeme délku aplikace v délce 10 minut, později 20 minut. Nikdy nepoužívejte elektrickou stimulaci na jednom místě déle než 30 minut!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Tímto přípravkem čistěte výhradně obě aplikační hlavice. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro ošetření ultrazvukovou kavitací přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.

Jaké opatření je před a po ošetření nutno dodržovat?

Minimálně 4 hodiny před ošetřením nejezte těžká nebo mastná jídla. Doporučujeme lehká jídla (např. zeleninový salát, jogurt). Den před ošetřením, v den ošetření a několik dní po ošetření zvýšte váš pitný režim na 2 až 2,5 litru čisté vody denně. Vyhýbejte se perlivým a slazeným vodám. Týden po ošetření ultrazvukem byste se měli vyvarovat konzumaci alkoholu, kofeinu, nikotinu, těžkých a mastných jídel. Všechny tyto faktory zatěžují vaše játra, která jsou již tak zatížena filtrováním uvolněných tuků z vašeho těla. Další jejich zatížení by mohlo vést k nevolnosti. Po ošetření doporučujeme zvýšit pohybovou aktivitu. Zvýší se krevní oběh a celková látková výměna, která podpoří vyplavení uvolněných tuků ven z těla.

Bolí ošetření přístrojem Cavimax?

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné.

Jak poznám, že ultrazvuk opravdu funguje?

Během ošetření uslyšíte pouze vysoké slabé pískání, které vydává ultrazvuk. Citliví jedinci mohou cítit jemné mravenčení. Pro ověření funkčnosti ultrazvukových vln naneste drobné množství kapek vody na aplikační hlavici. Ultrazvukové vlny molekuly vody rozkmitají.

Jakých výsledků je možné dosáhnout?

Výsledek je výrazně ovlivněn několika faktory. Uvolněný tuk musí tělo zpracovat. To, jak rychle jej zpracuje, závisí především na rychlosti metabolismu, typu vašeho tuku, stavu lymfatického systému nebo životosprávě. Za optimálních podmínek se může jednat až o několikacentimetrový úbytek po opakovaném ošetření při dodržení výše uvedené životosprávy.

Je používání přístroje Cavimax bezpečné?

Pokud se přístroj používá na správných partiích a uživatelé neodpovídají některým z uvedených kontraindikací, je ultrazvuková kavitace naprosto bezpečná. Uvolněný tuk je organizmus schopen postupně zpracovat. Výkon je speciálně nastaven tak, aby nedošlo k poškození ostatních buněk a cév.

Jaké zásady je nezbytné dodržovat, aby se požadovaný hubnoucí účinek dostavil?

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu. Je nezbytné upravit životosprávu a zvýšit příjem tekutin. Ošetření ultrazvukovou kavitací můžete bez obav podstoupit již po 7 až 10 dnech. Nedoporučujeme ošetření více než dvou partií najednou. Pokud ošetřujete partie, které jsou blíže u sebe, efekt kavitace se násobí. V opačném případě (vzdálenějších partií) se efekt rozdělí.

Proč je výrazný cenový rozdíl přístrojů v kosmetických salonech a přístrojích pro domácí použití?

Hlavním důvodem je rozdílná frekvence používání. Přístroje v kosmetických musí být schopné pracovat nepřetržitě od rána do večera. Tím je kladena zvýšená náročnost na použité materiály a celkovou technologickou koncepci (větší zdroje napájení, větší míra chlazení, atd.) Výkon kosmetických přístrojů pro domácí použití je navržen tak, aby uživateli splnil avizované benefity. Vyšší frekvence použití = dražší výrobní náklady.

Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavičky?

Kontaktní hlavičky je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu. Očištěním zabráníte případnému vniknutí do přístroje a zajistíte co nejlepší hygienu provozu.

Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?

Doporučená délka individuálního ošetření je v rozsahu od 10 do 20 minut.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Nelikov.

Lze přístrojem ošetřit hlavu nebo obličej?

Nelze.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj má standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě naleznete na konci tohoto návodu k obsluze.

Kde se přístroj vyrábí?

Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní záruční i pozáruční servis.

Může přístroj používat více osob?

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce kontaktních hlaviček, druhá osoba přístroj použít může.

Je přístroj vodotěsný?

Není.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Ultrazvuková kavitace Beautyrelax

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1410**

EAN: **8594166116801**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN6100-3-3:2013

Dle registračního čísla certifikátu: A1907383-C01-R01

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 9.6.2020