

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj **BeautyRelax BR-2938**

KNEE REHAB PRESTIGE



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
OBSAH BALENÍ	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
ZATÍŽENÍ KOLEN V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ	7
KOMFORTNÍ PŮSOBENÍ V OBLASTI KOLEN	7
BOLEST KOLENOU JAKO SVĚTOVÝ PROBLÉM	8
POPIS PŘÍSTROJE	13
POPIS DOTYKOVÉHO PANELU	14
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	15
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	16
NABÍJENÍ BATERIE	18
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE	19
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	20
CERTIFIKACE	20
DOVOZCE	20
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	21

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravovat. V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Přístroj používejte a skladujte v suchém, uzavřeném prostředí. Není určen k použití ve vlhkých prostorech, například v koupelně.
- Použití přístroje se nedoporučuje osobám po nedávných operačních zákrocích v oblasti, pro kterou je přístroj určen, ani osobám se závažnými zdravotními obtížemi v této oblasti.
- Pokud trpíte chronickými zdravotními potížemi, zvýšenou citlivostí krční páteře nebo jinými zdravotními omezeními, doporučujeme před použitím konzultaci s lékařem.
- Přístroj používejte po přiměřenou dobu. Doporučená délka použití je přibližně 15 až 20 minut denně. Delší používání může vést k nepříjemným pocitům, například k bolesti hlavy při aplikaci v oblasti krční páteře.
- Před čištěním vždy odpojte přístroj od napájecího adaptéru. Povrch čistěte pouze suchou nebo mírně navlhčenou měkkou utěrkou.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, nejsou určeny ke hraní.
- S přístrojem zacházejte opatrně, nevystavujte jej pádům, nárazům ani silným otřesům.
- Přístroj používejte pouze v doporučeném teplotním rozmezí okolního prostředí od 5 °C do 50 °C.
- Používání přístroje v rozporu s tímto návodem může mít vliv na jeho funkčnost a bezpečnost. Záruka se nevztahuje na závady nebo poškození vzniklé v důsledku nesprávného používání, mechanického poškození, neodborných zásahů nebo používání v rozporu s doporučeními výrobce, v souladu s platnými právními předpisy.
- Tímto nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Přístroj **není doporučeno** používat v těchto případech:

- Při akutním úrazu kolene (čerstvý výron, pohmoždění, silná bolest po úrazu)
- Při výrazném otoku, zarudnutí nebo horkosti kolene
- Na otevřené rány, porušenou nebo zanícenou kůži
- Při horečnatém nebo infekčním onemocnění

HLAVNÍ VÝHODY

- Určeno k podpoře komfortu v oblasti kolen
- Může přispět k pocitu uvolnění v oblasti kolenních svalů
- Vhodné při nepříjemných pocitech chladu v oblasti kolen
- Lze využít jako doplněk při rekonvalescenci po fyzické zátěži
- Kombinace infračerveného zahřívání, vibrací a kompresního působení
- Integrovaný světelný systém s 11 LED diodami
- 3 úrovně nastavení intenzity tepla (nízká, střední, vysoká)
- Dotykové ovládání
- Bezdrátové provedení pro pohodlné používání
- Vestavěná dobíjecí baterie

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nabíjecí napětí: 5V
- Kapacita baterie: 3000mAh 3,7V
- Napájení: USB kabelem se síťovým adaptérem 220V (součást balení)
- Rozměry: 28x16x20cm
- Hmotnost: 900g

OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj BeautyRelax KneeRehab
- Nabíjecí USB kabel
- Síťový adaptér 220V
- Návod k obsluze

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax KneeRehab je zařízení určené k podpoře komfortu v oblasti kolen při každodenním používání. Konstrukce a funkční provedení vycházejí z dlouhodobého sledování potřeb uživatelů při fyzické zátěži a běžných pohybových aktivitách. Přístroj kombinuje několik typů působení, jako je infračervené zahřívání, světelné LED prvky, vibrace a kompresní tlakové působení, které jsou navrženy tak, aby přispívaly k příjemnému pocitu uvolnění v oblasti kolen. Jednotlivé funkce lze jednoduše nastavit prostřednictvím dotykového ovládacího panelu. Zařízení je určeno k bezdrátovému použití a je vybaveno vestavěnou dobíjecí Li-ion baterií, která umožňuje pohodlné používání bez nutnosti připojení k elektrické síti. BeautyRelax KneeRehab je vhodný pro uživatele, kteří chtějí pečovat o komfort svých kolen v domácím prostředí.



Následující kapitola má informativní charakter a neslouží jako lékařské doporučení.

ZATÍŽENÍ KOLEN V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Kolenní klouby jsou během běžného života vystaveny dlouhodobé mechanické zátěži, a to jak při práci, tak při sportovních či volnočasových aktivitách. Zátěž může být spojena například s nadváhou, jednostranným zatěžováním nebo zvýšenou fyzickou aktivitou. Při pohybu dochází k opakovanému namáhání kloubních struktur, což může vést k nepříjemným pocitům v oblasti kolen, zejména při dlouhodobém nebo intenzivním zatížení. Z tohoto důvodu se mnoho uživatelů zaměřuje na pravidelnou péči o oblast kolen jako součást svého životního stylu. BeautyRelax KneeRehab je navržen jako doplněk ke komfortní péči o kolena, zejména v obdobích zvýšené fyzické zátěže nebo při pocitech únavy v oblasti kloubů.

KOMFORTNÍ PŮSOBNÍ V OBLASTI KOLEN

Zařízení využívá kombinaci více typů působení, které jsou aplikovány neinvazivním způsobem přímo v oblasti kolen. Cílem těchto funkcí je navodit příjemný pocit zahřátí, uvolnění a relaxace během používání. Infračervené zahřívání může být vhodné při nepříjemných pocitech chladu v oblasti kolen, zatímco vibrace a kompresní působení jsou určeny k podpoře celkového komfortu při používání přístroje. BeautyRelax KneeRehab není zdravotnickým prostředkem a nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Je určen k běžnému domácímu použití jako součást relaxační a komfortní péče o kolena. Kompresní tlakové působení u přístroje BeautyRelax KneeRehab je založeno na konstrukci vnitřní výstelky zařízení, která je navržena tak, aby při používání přiléhala k vybraným částem kolene. Při aktivaci vibrací dochází k mechanickému přenosu jemného tlaku prostřednictvím této vnitřní výstelky. Tlak je rozložen cíleně na specifické oblasti kolene v závislosti na tvaru a usazení přístroje. Tento způsob působení je určen k navození pocitu kontaktu, tlaku a uvolnění v oblasti kolenního kloubu během používání. Kompresní tlakové působení je neinvazivní, nezasahuje do těla a slouží výhradně ke komfortnímu a relaxačnímu používání přístroje v domácím prostředí.



BOLEST KOLENOU JAKO SVĚTOVÝ PROBLÉM



Bolest kolen se v posledních desetiletích stala jedním z nejčastějších zdravotních problémů napříč kontinenty. Nejde už jen o individuální obtíž, ale o fenomén, který má významné dopady na pracovní schopnost, sportovní výkonnost i celkovou kvalitu života. Sedavý způsob života, technologický pokrok a změny ve struktuře práce vedou k oslabení pohybového aparátu, zatímco současně roste tlak na výkon, rychlost a produktivitu. Výsledkem je nepřirozená zátěž kloubů, především kolen, která jsou klíčovým nosným prvkem lidského těla. Zdravotnické statistiky dlouhodobě potvrzují, že bolesti kolenních kloubů patří mezi nejčastější důvody návštěvy ortopeda nebo fyzioterapeuta. V mnoha případech se jedná o potíže, kterým bylo možné předejít včasnou prevencí a správnou péčí.

Bolest kolen nezná věk ani pohlaví

Ještě donedávna byly bolesti kolen považovány především za problém vyššího věku. Dnes je však situace zcela odlišná. Stále častěji se s nimi setkávají lidé v produktivním věku, mladí dospělí i dospívající. Významnou roli hraje nadváha, která dramaticky zvyšuje tlak na kolenní klouby při každém kroku. Každý kilogram navíc představuje několikanásobné zatížení kloubních ploch. Dalším rizikovým faktorem je jednostranná nebo monotónní fyzická práce – dlouhé stání, klečení, chůze po tvrdém povrchu nebo opakované pohyby bez dostatečné regenerace. U sportovců pak dochází k přetěžování kolen v důsledku intenzivního tréninku, nedostatečného zahřátí, špatné techniky pohybu nebo absence kompenzačních cvičení. Bolest kolen se tak stává univerzálním problémem, který nešetří žádnou věkovou skupinu.



Kolenní kloub pod extrémním tlakem

Kolenní kloub je konstrukčně velmi složitý a zároveň extrémně namáhaný. Během chůze nese váhu celého těla, při běhu nebo skocích je zatížení několikanásobně vyšší. Při dřepch, výstupech do schodů nebo rychlých změnách směru se tlak na kloubní chrupavku může vyšplhat až na několik set kilogramů na jeden centimetr čtverečný. Chrupavka přitom nemá vlastní cévní zásobení a její výživa závisí především na pohybu a správné funkci kloubu. Jakmile dojde k jejímu poškození nebo zhoršení metabolických procesů, regenerace je velmi pomalá. To vede k bolestem, zánětům, omezení rozsahu pohybu a postupnému rozvoji degenerativních onemocnění, jako je artróza. Právě proto je včasná reakce na první příznaky bolesti naprosto zásadní.

Voda v koleni jako varovný signál

Voda v koleni, odborně označovaná jako kloubní výpotek, je jedním z nejčastějších projevů přetížení nebo poškození kolenního kloubu. Jedná se o obrannou reakci organismu, při které dochází k nadměrné tvorbě tekutiny v kloubním pouzdru. Koleno je následně oteklé, bolestivé, ztuhlé a často teplejší na dotek. Příčin vzniku kloubního výpotku může být celá řada – od akutního úrazu přes zánětlivé procesy až po dlouhodobé mikrotraumata způsobené přetížením. Pokud není tento stav řešen, tekutina omezuje správný pohyb kloubu, zhoršuje výživu chrupavky a může urychlit degenerativní změny. Kloubní výpotek je proto jasným signálem, že koleno potřebuje cílenou a šetrnou péči.



Moderní přístup k rehabilitaci kolen

Současná rehabilitace klade důraz na neinvazivní metody, které podporují přirozené regenerační schopnosti organismu. Aktivní stimulace tkání, zlepšení krevního oběhu a podpora metabolických procesů hrají klíčovou roli v úlevě od bolesti i v dlouhodobé prevenci.

Péče o kolena jako součást životního stylu

Zdravá kolena nejsou samozřejmostí, ale výsledkem dlouhodobé a vědomé péče. Pravidelná rehabilitace, dostatečný odpočinek, kontrola tělesné hmotnosti a cílená podpora regenerace mohou výrazně oddálit nebo zcela zabránit rozvoji chronických potíží. Investice do péče o kolenní klouby se vrací v podobě lepší mobility, vyšší životní kvality a schopnosti zůstat aktivní bez omezení.



Jak může BeautyRelax KneeRehab uživateli pomoci

Po vysvětlení, proč je diskomfort v oblasti kolen tak častým problémem moderní společnosti, je vhodné představit možnosti podpůrné péče, které může uživatel zařadit do své každodenní rutiny.

Masážní přístroj **BeautyRelax KneeRehab** je určen k **relaxační a komfortní péči o oblast kolenních kloubů v domácím prostředí**. Slouží jako doplněk běžné péče o pohybový aparát a je navržen pro uživatele, kteří hledají způsob, jak si zpříjemnit regeneraci a odpočinek po fyzické zátěži.

Vícevrstevná technologie péče

Přístroj kombinuje několik typů fyzikální stimulace, které se používají v oblasti wellness a domácí masáže:

- **infračervené zahřívání** – vytváří příjemný hřejivý efekt v oblasti kolene a přispívá k pocitu uvolnění během používání;
- **LED světelné prvky** – slouží jako doplňkový prvek komfortní péče o ošetřovanou oblast;
- **vibrační masáž** – jemné vibrace podporují pocit uvolnění svalů v okolí kolenního kloubu;
- **kompresní masáž** – střídavý tlak může napomoci pocitu lehkosti a komfortu v oblasti kolene po zátěži.

Kombinace těchto funkcí je navržena tak, aby **zvyšovala uživatelský komfort při relaxaci a regeneraci** a umožňovala cílenou masáž oblasti kolene v domácích podmínkách.

Možné přínosy z hlediska komfortu a relaxace

Při pravidelném používání může přístroj přispět zejména k:


- pocitu uvolnění a relaxace v oblasti kolen po fyzické aktivitě;
- zvýšení subjektivního komfortu při odpočinku;
- zmírnění pocitu ztuhlosti spojené s dlouhodobým sezením, stáním nebo jednostrannou zátěží;
- pohodlné a snadné péči díky bezdrátovému provedení a jednoduchému ovládání.

Účinky se mohou u jednotlivých uživatelů lišit v závislosti na individuálních faktorech, způsobu používání a celkovém životním stylu.

Praktická podpora každodenní péče

BeautyRelax KneeRehab může být vhodným doplňkem běžné péče o pohybový aparát, zejména u osob vystavených zvýšené fyzické zátěži, sportovní aktivitě nebo dlouhodobé pracovní zátěži. V kombinaci s dostatečným odpočinkem, přiměřeným pohybem a zdravým životním stylem může přispět k **pravidelnému relaxačnímu rituálu zaměřenému na oblast kolen.**

Přístroj **nenahrazuje lékařskou péči ani odbornou rehabilitaci** a není určen k diagnostice, léčbě nebo prevenci onemocnění.

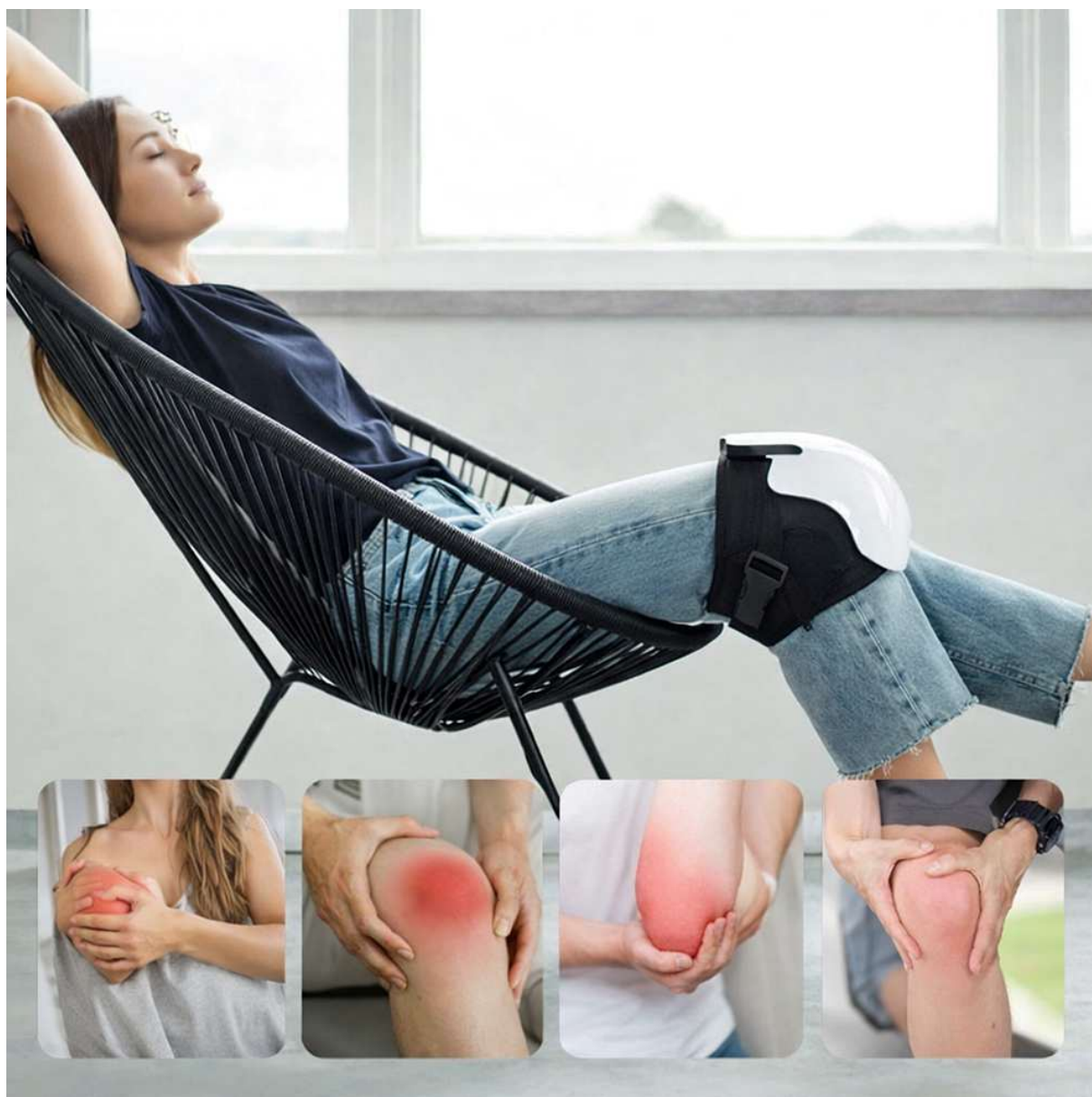

POPIS PŘÍSTROJE




1. Světelný indikátor
2. Dotykový panel
3. Síťovina
4. Spona pro utažení
5. Infračervené světlo
6. Oblast vibrací
7. Vstup pro napájecí kabel
8. Popruhy

POPIS DOTYKOVÉHO PANELU



1. Ukazatel úrovně tepla
2. Ukazatel úrovně vibrací
3. Tlačítko **VIBRACE**
4. Tlačítko **ON/OFF**
5. Tlačítko **TEPLO**
6. Indikace **ČERVENÉHO SVĚTLA**
7. Indikace **KOMPRESNÍ MASÁŽE**

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

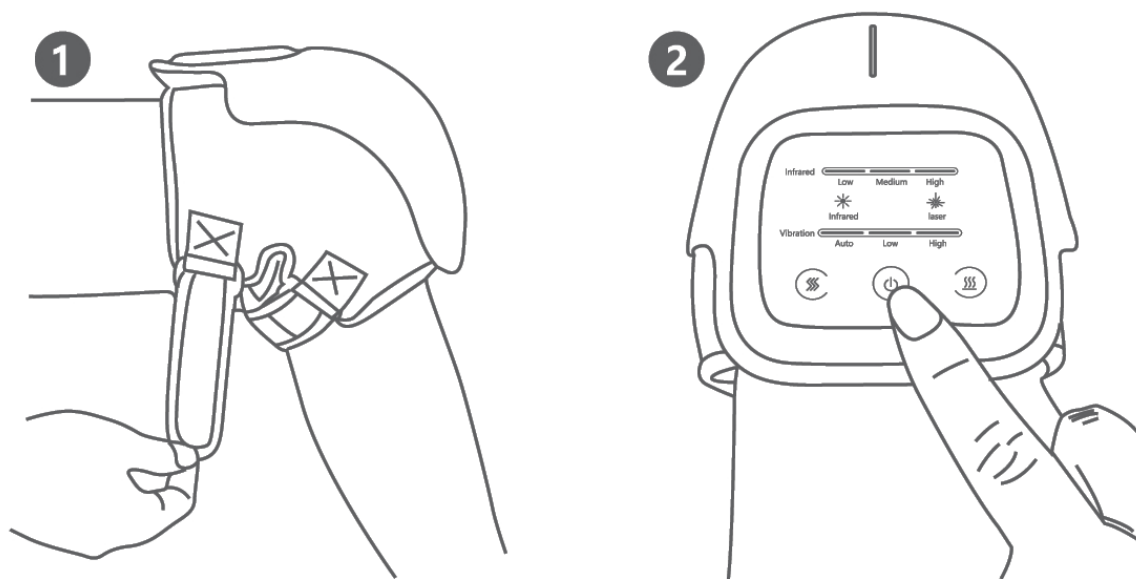

1. Před prvním použitím plně nabijte baterii, vyzkoušejte nejnižší intenzitu, první použití kratší dobu.
2. Nasadte přístroj na koleno. Přístroj používejte vždy na holou pokožku. Mezi přístrojem a pokožkou se nesmí nacházet žádná látka ani jiná tkanina. Pomocí popruhů upevněte přístroj na koleno. Popruhy by neměly být příliš utaženy. Utáhněte tak, aby vám bylo použití přístroje příjemné.
3. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** zapnete přístroj. Přístroj ihned zahájí činnost.
4. Stisknutím tlačítka **VIBRACE** si můžete nastavit úroveň vibrační masáže. K dispozici jsou tři úrovně – nízká (LOW), vysoká (HIGH), AUTO – pulzování vibrací se mění podle automatického programu. Dalším stiskem tlačítka **VIBRACE** funkci vibrací vypnete.
5. Stisknutím tlačítka **TEPLO** si můžete nastavit úroveň působení tepla. K dispozici jsou tři úrovně – nízká, střední, vysoká. Dalším stiskem tlačítka **TEPLO** funkci tepla vypnete.
6. Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** si můžete postupně zapnout nebo vypnout funkci červeného světla (INFRARED). Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete zapnout kompresní masáž (PNEUMATIC). Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF** si můžete kompresní vzduchovou masáž a červené světlo vypnout nebo zapnout.
7. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

K ČEMU JE PŘÍSTROJ BEAUTYRELAX KNEEREHAB URČEN?

Přístroj je určen k **relaxační a komfortní péči o oblast kolen** v domácím prostředí. Slouží jako doplněk běžné péče po fyzické zátěži nebo při pocitu únavy a ztuhlosti kolen.

JE PŘÍSTROJ ZDRAVOTNICKÝM PROSTŘEDKEM?

Ne. BeautyRelax KneeRehab **není zdravotnický prostředek** a nenahrazuje lékařskou péči nebo léčbu onemocnění.

JAKÉ FUNKCE PŘÍSTROJ NABÍZÍ?

Přístroj kombinuje:

- infračervené zahřívání
- vibrační masáž
- kompresní tlakové působení (vnitřní tvarování polstrování)
- LED světelné prvky

JAK DLOUHO MÁM PŘÍSTROJ DENNĚ POUŽÍVAT?

Doporučená doba používání je **15 až 20 minut denně**. Pokud chcete používat přístroj 2x denně, upravte režim použití na ráno na večer.

MOHU PŘÍSTROJ POUŽÍVAT KAŽDÝ DEN?

Ano, přístroj je určen k **pravidelnému každodennímu používání**, pokud nemáte žádnou z uvedených kontraindikací.

JE MOŽNÉ POUŽÍVAT PŘÍSTROJ NA OBLEČENÍ?

Pro **maximální účinek použití přístroje** doporučujeme používat přístroj přímo na holou pokožku.

LZE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT PŘI OTOKU NEBO ZARUDNUTÍ KOLENE?

Ne. Přístroj **není vhodné používat při výrazném otoku, zarudnutí, horkosti kolene nebo akutní bolesti**.

MOHU PŘÍSTROJ POUŽÍT PO ÚRAZU KOLENE?

Ne. Při **čerstvém úrazu, výronu nebo silné bolesti po úrazu** se používání přístroje nedoporučuje.

JE PŘÍSTROJ VHODNÝ PŘI POCITU CHLADU V KOLENI?

Ano. Infračervené zahřívání je vhodné právě při **nepříjemných pocitech chladu v oblasti kolen**.

KOLIK ÚROVNÍ INTENZITY MÁ VYHŘÍVÁNÍ A VIBRACE?

- Vibrace: **3 úrovně** (nízká, střední, vysoká)
- Teplo: **3 úrovně** (nízká, střední, vysoká)

JAK PŘÍSTROJ ZAPNU?

Přístroj zapnete **dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF**. Po zapnutí se spustí automatický režim.

LZE JEDNOTLIVÉ FUNKCE ZAPÍNAT A VYPÍNAT SAMOSTATNĚ?

Ano. Pomocí dotykového panelu lze **samostatně nastavovat vibrace, teplo a světelné prvky**.

JE PŘÍSTROJ BEZDRÁTOVÝ?

Ano. Přístroj má **vestavěnou dobíjecí baterii** a lze jej používat bez připojení k elektrické síti.

JAK DLOUHO TRVÁ NABÍJENÍ BATERIE?

Doba nabíjení závisí na míře vybití baterie. Přibližně několik hodin. **Během nabíjení přístroj nepoužívejte**. Kapacita baterie se opakovanými cykly nabíjení a vybíjení postupně snižuje.

JAK POZNÁM, ŽE JE BATERIE VYBITÁ?

Vybití baterie signalizuje **blikající světelná indikace**.

MOHU PŘÍSTROJ POUŽÍVAT BĚHEM NABÍJENÍ?

Ne. **Používání přístroje během nabíjení není dovoleno**.

JAK PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ UPEVNIT NA KOLENO?

Přístroj upevněte pomocí popruhů tak, aby **dobře přiléhal, ale netlačil**. Použití musí být vždy příjemné.

JAK PŘÍSTROJ ČISTIT?

Používejte pouze **suchý nebo mírně navlhčený měkký hadřík**. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani ostré předměty.

LZE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ?

Ne. Přístroj **není určen k použití v koupelně ani ve vlhkém prostředí.**

CO DĚLAT, POKUD PŘÍSTROJ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ?

Přístroj nerozebírejte. V případě poruchy kontaktujte **prodejce nebo autorizovaný servis** uvedený v dokumentaci.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj je vybaven vestavěnou dobíjecí baterií, která zajišťuje plynulý a nepřerušovaný provoz všech funkcí. Kapacita baterie umožňuje dostatečně dlouhé používání při běžném režimu. Jakmile kapacita baterie klesne na nízkou úroveň, přístroj vás na nutnost nabití upozorní blikající světelnou signalizací. Výkon funkcí přístroje závisí na stavu a kondici baterie.

Postup nabíjení:

1. Jakmile je baterie téměř vybitá, světelná signalizace začne blikat.
2. Pro nabíjení používejte výhradně kabel, který je součástí balení.
3. Připojte nabíjecí kabel k síťovému adaptéru o napětí 220 V.
4. Délka nabíjení se liší v závislosti na míře vybití a celkové kondici baterie.
5. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte, aby byla zajištěna bezpečnost a maximální životnost baterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Správná a pravidelná údržba přístroje BeautyRelax KneeRehab přispívá k jeho dlouhé životnosti, zachování funkčnosti a hygienickému používání.

Čištění přístroje

- Před zahájením čištění vždy přístroj vypněte a ujistěte se, že není připojen k nabíjecímu kabelu.
- Vnější povrch přístroje a dotykový ovládací panel čistěte **suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem**.
- V případě potřeby lze použít malé množství jemného čistícího prostředku bez alkoholu a abrazivních složek.
- Po čištění nechte přístroj zcela oschnout při pokojové teplotě.

Upozornění k čištění

- Nikdy **neponořujte přístroj do vody** ani jiných kapalin.
- Zabraňte vniknutí vody do vnitřních částí přístroje, nabíjecího konektoru a ovládacího panelu.
- Nepoužívejte agresivní chemické prostředky, rozpouštědla, alkohol, benzín, abrazivní čističe ani ostré předměty – mohlo by dojít k poškození povrchu nebo elektroniky.
- Přístroj nečistěte během nabíjení ani bezprostředně po použití, pokud je ještě zahřátý.

Údržba a skladování

- Přístroj skladujte v suchém, čistém a dobře větraném prostředí, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla.
- Doporučená skladovací teplota je v rozmezí **5 °C až 50 °C**.
- Při delší době nepoužívání doporučujeme přístroj alespoň jednou za několik měsíců dobít, aby byla zachována kondice vestavěné baterie.
- Chraňte přístroj před pády, nárazy a mechanickým poškozením.
- Nepokoušejte se přístroj rozebrat ani opravovat – v případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.

Dodržováním uvedených pokynů zajistíte bezpečné používání přístroje, zachování jeho vzhledu a optimální funkčnost po celou dobu jeho životnosti.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160



PO - PÁ 11:00 - 18:00
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Masážní přístroj na kolena

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2938**

EAN **8594166122178**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2021 EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 6100-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2015 EN 62233:2008

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt není zdravotnický prostředek.

Tento výrobek není zdravotnickým prostředkem ve smyslu platné legislativy. Není určen k diagnostice, léčbě, zmírnění, prevenci ani sledování jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního stavu. Přístroj slouží výhradně k masážní, relaxační a komfortní péči o oblast kolen v domácím prostředí. Nenahrazuje odbornou lékařskou péči, fyzioterapii ani rehabilitační léčbu. V případě zdravotních obtíží, bolesti nebo podezření na onemocnění se vždy obraťte na lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno

Datum vydání: 1.2.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Hrbek', is written over a horizontal dotted line.

Martin Hrbek, jednatel