

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na krční svaly
BeautyRelax BR-2807

3D RELAX



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ VÝHODY	7
TECHNICKÉ PARAMETRY	8
POPIS PRODUKTU	9
APLIKACE PŘÍSTROJE	10
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	11
NABÍJENÍ BATERIE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	12
CERTIFIKACE	12
DOVOZCE	12
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	13

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřijímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je striktně ZAKÁZÁNO používat masážní přístroj během jízdy v automobilu. V případě nehody se vystavujete riziku poranění páteře nebo jiné oblasti, která by byla masážním přístrojem masírována.

OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj na krční svaly BeautyRelax BR-2807 3D RELAX
- Nabíjecí USB kabel
- Návod k obsluze


KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Ihned po operaci krční páteře
- Při stavu vysokých horeček
- Závažné kožní onemocnění na místě použití přístroje
- Srdeční onemocnění, hypertenze
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem




OKAMŽITÉ PŮSOBENÍ TEPLA

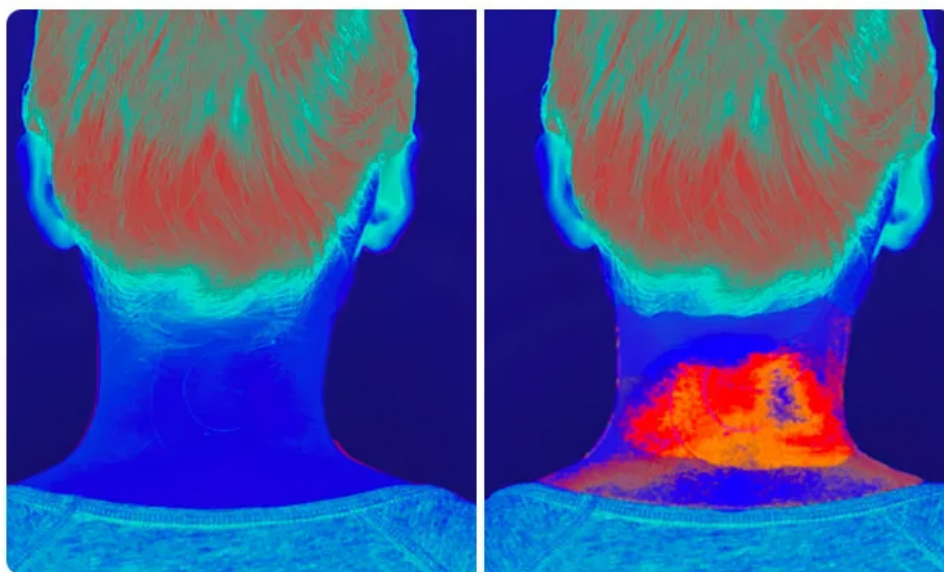

SNÍMEK INFRAKAMEROU PŘED A PO APLIKACI PŘÍSTROJE

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax 3D Relax je masážní přístroj, který nabízí zcela jiný koncept uvolnění zatuhlých krčních svalů, než s jakým jste se měli možnost doposud setkat u přístrojů obdobného typu. Přístroj je vybaven 10 oscilačními kolíčky, které jsou v kontaktu s vaším krkem. Kolíčky v průběhu použití oscilují v různých rychlostech a rytmu. Dochází k mechanické masáži zatuhlých krčních svalů. K dosažení maximálního relaxačního účinku přispívají funkce vyhřívání a červeného světla. Vyhřívání v rozsahu od 37 do 43°C. Červené světlo fotonové terapie je nastaveno na vlnovou délku 630nm. Bezdrátové použití. Vestavěná nabíjecí li-ion baterie s kapacitou 1500mAh. 3 automatické masážní programy. Možnost nastavení intenzity masáže. Přizpůsobí se velikosti každého krku. Výkon: 10W.

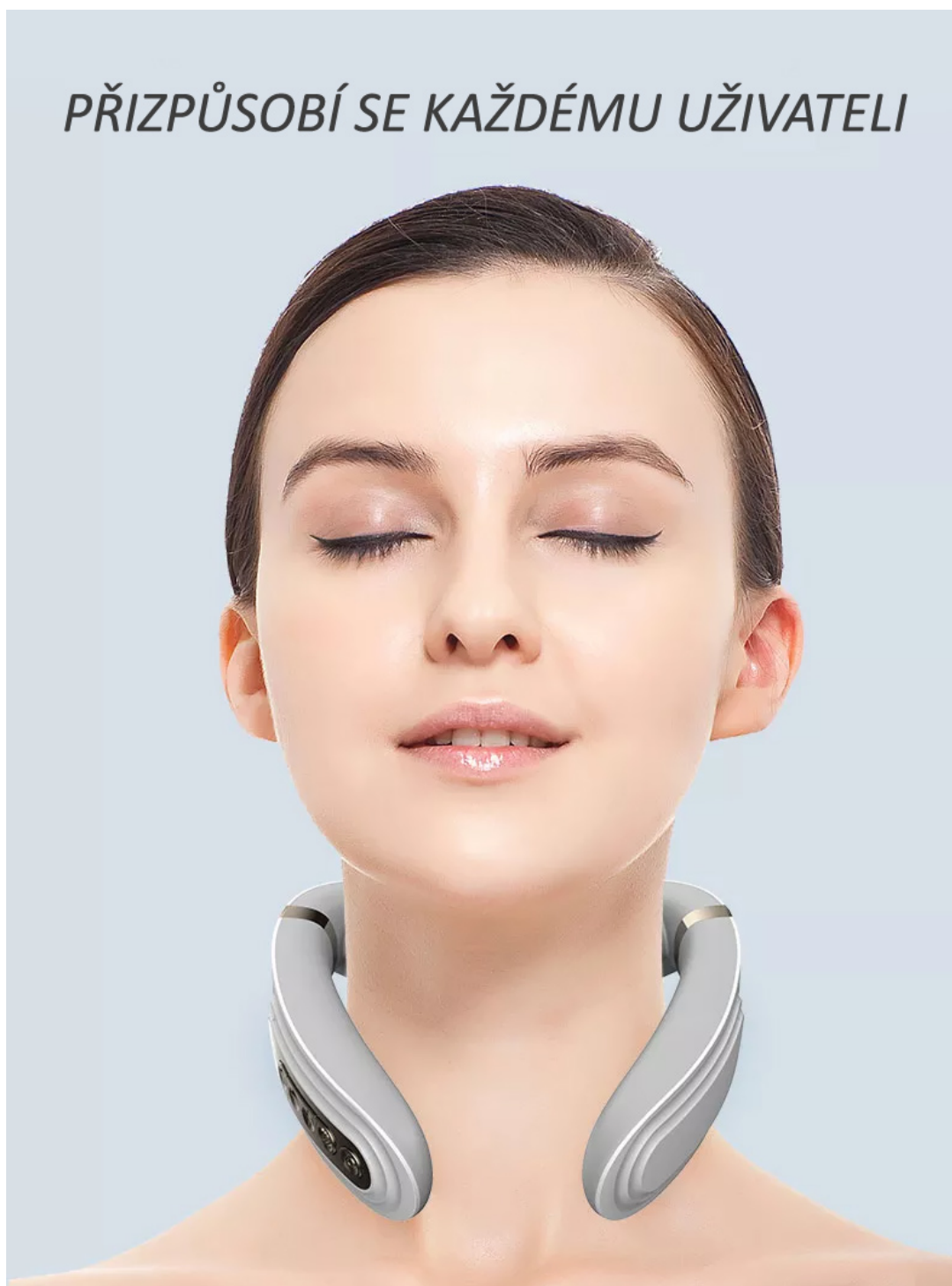

HLAVNÍ VÝHODY

- 10 kontaktních oscilačních kolíčků pokryje celou plochu krční páteře.
- Infračervené vyhřívání.
- Integrovaný displej.
- 3 masážní programy.
- Možnost nastavení intenzity masáže.
- Uvolnění svalového napětí v oblasti krční páteře.
- Infračervené vyhřívání výrazně eliminuje svalovou únavu.
- Zlepšení prokrvení bolestivých míst a látkovou výměnu.
- Přizpůsobí se každé velikosti krku.
- Časovač s funkcí automatického vypnutí.




TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nabíjení: vestavěná baterie Li-ion 1500mAh
- Napájení: USB kabelem (součástí balení)
- Rozměry: 19x17x7cm
- Hmotnost: 177g





POPIS PRODUKTU

1. Aplikační masážní hlavice
2. Vstup pro nabíjecí kabel
3. Displej
4. Tlačítko **START/STOP**
5. Tlačítko **(-)**
6. Tlačítko **(+)**
7. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
8. Tlačítko **ON/OFF/MODE**

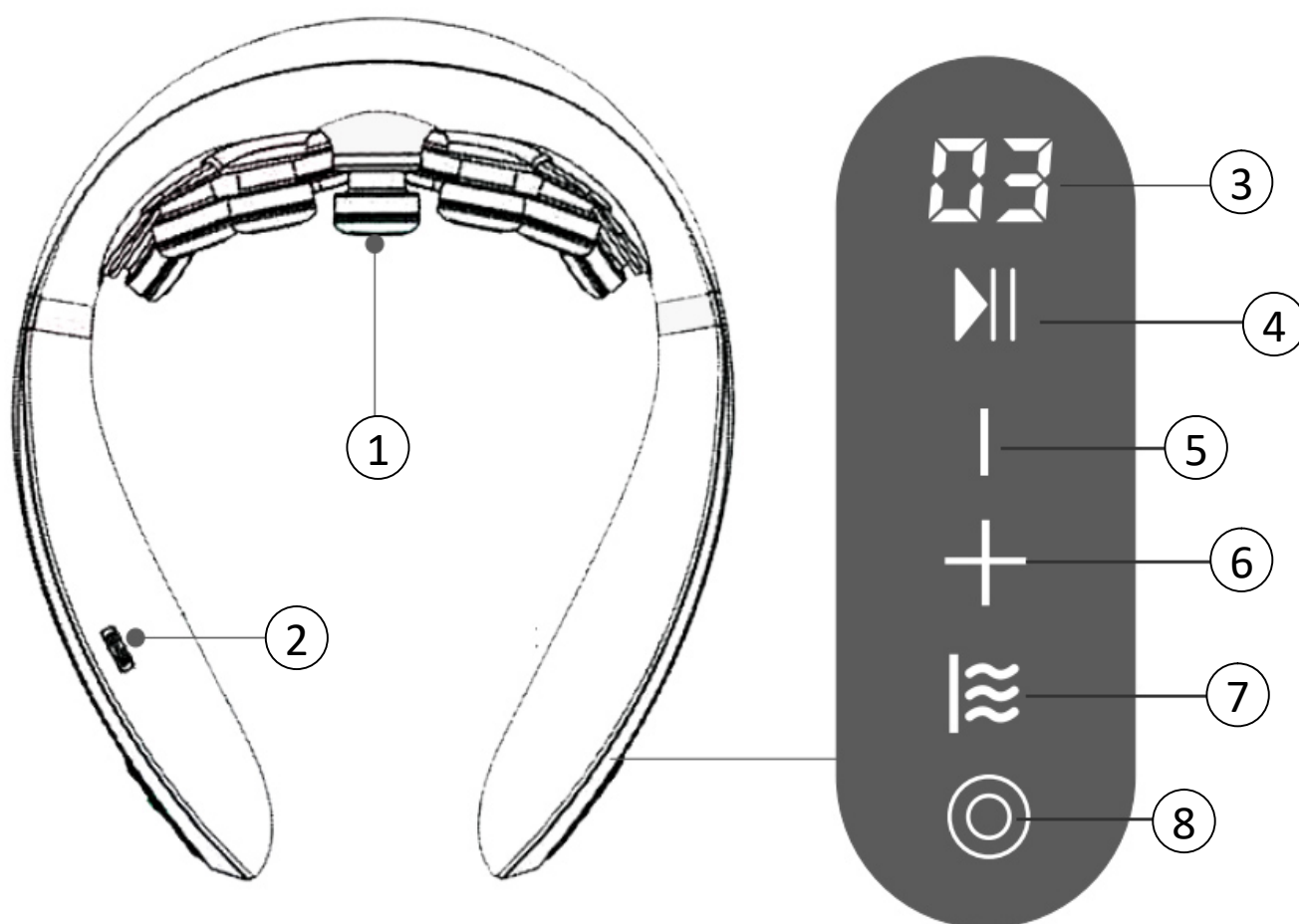

APLIKACE PŘÍSTROJE

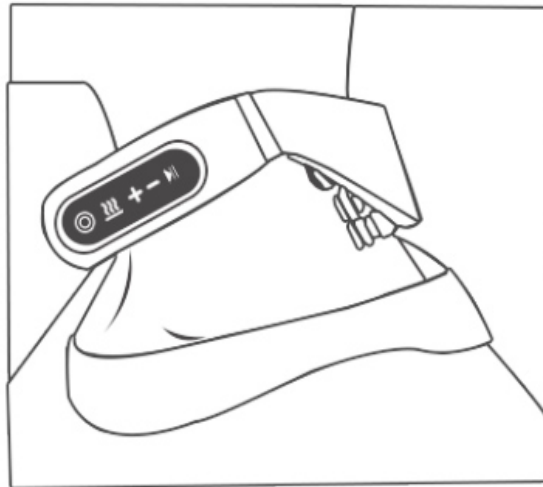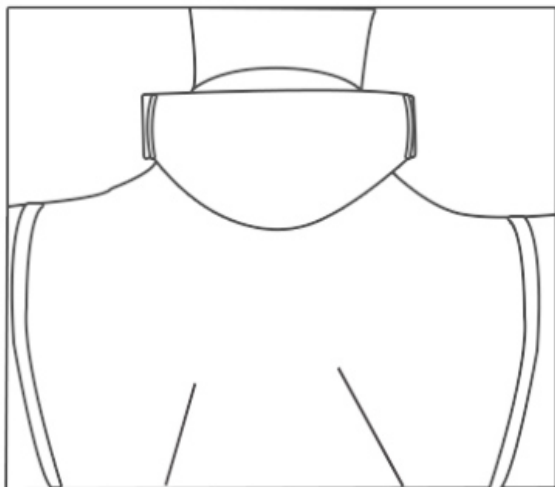


ERGONOMICKÝ TVAR PŘÍSTROJE



10 INTEGROVANÝCH ELEKTROMOTORKŮ

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Vždy dbejte na to, aby byla baterie dostatečně nabitá. K nabíjení používejte výhradně kabel, který je součástí balení. V případě použití jiného typu adaptéru může dojít k fatálnímu poškození baterie a ztrátě záruky.
2. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF/MODE**.
3. Pomocí tlačítka **HEATING** si můžete aktivovat nebo vypnout působení tepla. K dispozici jsou 3 úrovně tepla: **H1, H2, H3** (nízká, střední, vysoká).
4. Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF/MODE** si můžete nastavit program masáže. Každý program střídá různou frekvenci působení kmitů masážních hlavic.
5. Pomocí tlačítka **(+)** a **(-)** si můžete upravit intenzitu masáže. **(+)** = zvýšení. **(-)** = snížení. K dispozici jsou tři úrovně intenzity: **L1, L2, L3** (nízká, střední, vysoká).
6. Pomocí tlačítka **START/STOP** můžete pozastavit nebo pokračovat dále v činnosti přístroje.
7. Pokud displej zobrazuje symbol **LO**, je nízký stav baterie a je třeba baterii nabít.
8. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF/MODE**.

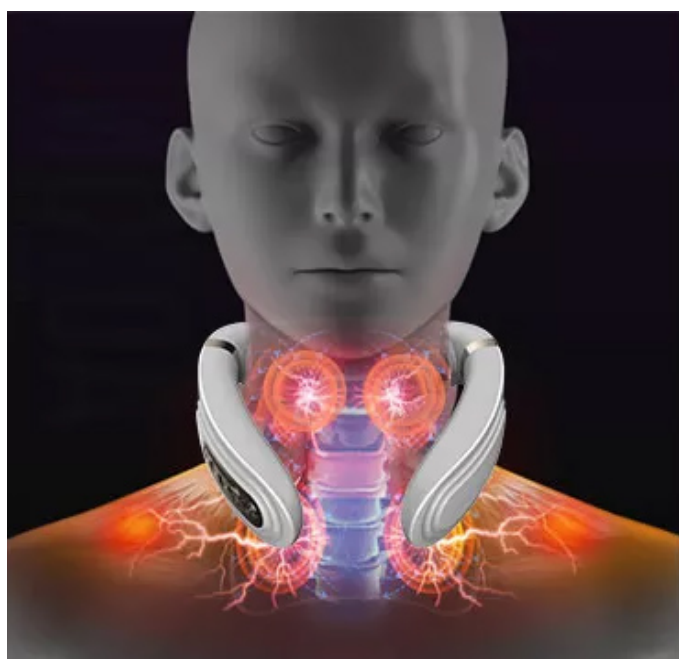

PŘÍMÉ ZACÍLENÍ NA KRČNÍ SVALY

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Kontinuální působení všech funkcí přístroje umožňuje dostatečně nabitá baterie.

Postup nabíjení:

1. Jakmile je baterie vybita, na displeji se zobrazí nápis **LO**.
2. Pro nabíjení používejte nabíjecí USB kabel, který je součástí balení.
3. Druhý konec připojte do zdířky na boční straně límce.
4. Průběh nabíjení signalizuje symbol na displeji **CH**.
5. Jakmile je proces nabíjení dokončen, displej zobrazí symbol **FU**.
6. Délka nabíjení závisí na stavu vybití a celkové kondici baterie.

Upozornění: K nabíjení používejte výhradně adaptér, který je součástí balení. V případě použití jiného typu adaptéru může dojít k fatálnímu poškození baterie a ztrátě záruky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch. Přístroj není vodotěsný.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj na krční svaly

BeautyRelax BR-2807 3D RELAX

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2807**

EAN: **8594166120242**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 9.7.2022