

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na oblast pasu
BeautyRelax BR-2891
Shape&Relax EMS Compact



OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	4
VAROVÁNÍ	5
ELEKTRICKÉ PULZY EMS	6
ÚČINNÉ POSILOVÁNÍ ÚČEL POUŽITÍ A PŘÍJEMNÁ RELAXACE	6
ÚČEL POUŽITÍ	7
HLAVNÍ VÝHODY	8
POPIS PRODUKTU	9
VÝZNAM TLAČÍTEK	10
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	11
NABÍJENÍ BATERIE	15
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	15
CERTIFIKACE	15
DOVOZCE	15
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	16

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

KONTRAIKACE

Pokud se na vás vztahuje následující omezení, je zakázáno přístroj používat.

1. Jste-li těhotná
2. Jste-li epileptik
3. Jste-li diabetik
4. Máte-li v těle kovové předměty nebo piercing (v místě použití přístroje)
5. Máte-li zhoubné nádorové onemocnění
6. Máte-li vysokou horečku
7. Trpíte-li vysokým krevním tlakem



VAROVÁNÍ

1. Pás nepoužívejte v blízkosti srdce.
2. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.
3. Přístroj je určen pouze k vnějšímu použití.
4. Přístroj mohou používat pouze osoby starší 16 let.

Velmi pečlivě dbejte o úroveň intenzity elektrických impulzů pro jednotlivé oblasti těla. Vždy začněte od nejnižší hodnoty, tj. od hodnoty 1. Intenzitu masáže zvyšujte pomalu a **POSTUPNĚ!** Pokud budete cítit, že vám aktuálně nastavená intenzita není příjemná, snižte ji nebo přístroj vypněte!

ELEKTRICKÉ PULZY EMS

Základem pohybu těla je kontrakce svalů, které dostávají příkazy k činnosti prostřednictvím impulzů vysílané z mozku. Pohybem se svaly přirozenou cestou posilují. Stejným způsobem fungují elektrostimulátory. Nahrazují impuls z mozku a dají svalu příkaz k aktivitě. Elektrostimulátor se skládá ze dvou částí – hlavní ovládací jednotky a nalepovacích elektrod. Svaly pracují přesně na těch partiích, kam elektrody nalepíte. Na ovládací jednotce si můžete snadno nastavit sílu impulzů, které jsou od elektrod přes pokožku přenášeny ke svalům. Silnější impulzy slouží k aktivnímu posilování svalstva. Jemnější naopak k jejich uvolnění po fyzické námaze.

ÚČINNÉ POSILOVÁNÍ A PŘÍJEMNÁ RELAXACE

Elektrostimulátor využijete na tělesných partiích, které potřebujete vyformovat nebo jim naopak poskytnout uvolňující svalovou masáž. Elektrody jsou primárně určeny pro aplikaci na paže a břicho. Elektrody mají ze spodní strany měkkou pevnou hmotu připomínající želatinu. Díky tomu drží přesně tam, kde je nalepíte. Během používání se opotřebují a časem je třeba zakoupit nové. Elektrostimulátor má skutečně široké možnosti využití. Od podpory aktivního tréninku sportovce, přes celkovou svalovou regeneraci. Své uplatnění mají také při rehabilitaci, kdy je třeba ochablé svalstvo po delším pobytu v nemocnici dostat zpět do kondice. Při správném nastavení hodnot impulzů můžete odstranit svalovou bolest.

ÚČEL POUŽITÍ

Masážní přístroj BeautyRelax je určen pro aktivní posílení břišních svalů. Využívá elektrických pulzů EMS a působení tepla. Aktivní uvolnění a posílení svalů. K dispozici je 10 masážních programů s možností nastavení až 29 úrovní intenzity. Tři úrovně působení tepla. Bezdrátové použití díky zabudované li-ion baterii. Snadné nastavení funkcí pomocí ovládacího panelu. Displej. Tenký profil pásu. Přizpůsobí se každému uživateli díky zapínání na suchý zip.




HLAVNÍ VÝHODY

- EMS elektrické pulzy
- Elektrické pulzy stimulují svaly jako při skutečném pohybu
- Aktivní posilování svalů
- Působení tepla pro účinné uvolnění svalů
- 10 masážních programů
- 29 úrovní intenzity
- 3 úrovně působení tepla (38°C, 42°C, 45°C)
- Posílení břišních svalů
- Určeno pro oblast břicha
- Časovač: ano
- Snadno se přizpůsobí každému uživateli
- Zapínání na suchý zip
- Snadné nastavení funkcí pomocí ovládacího panelu
- Integrovaný displej v hlavní ovládací jednotce
- Bezdrátové použití díky vestavěné li-ion baterii
- Kapacita baterie: 2000mAh
- Nabíjení pomocí USB kabelu (součástí balení)
- Velmi tenký profil pásu
- Nízká hmotnost
- Barva: šedá
- Rozměry: 25x12x3cm
- Hmotnost: 120g



POPIS PRODUKTU

1. Masážní kontaktní plochy pásu
2. Pás pro uchycení na tělo
3. Zobrazení intenzity masáže
4. Světelná signalizace činnosti přístroje
5. Tlačítko snížení intenzity masáže
6. Tlačítko zvýšení intenzity masáže
7. Tlačítko funkce vyhřívání
8. Tlačítko ON/OFF/MODE
9. Vstup pro napájecí kabel

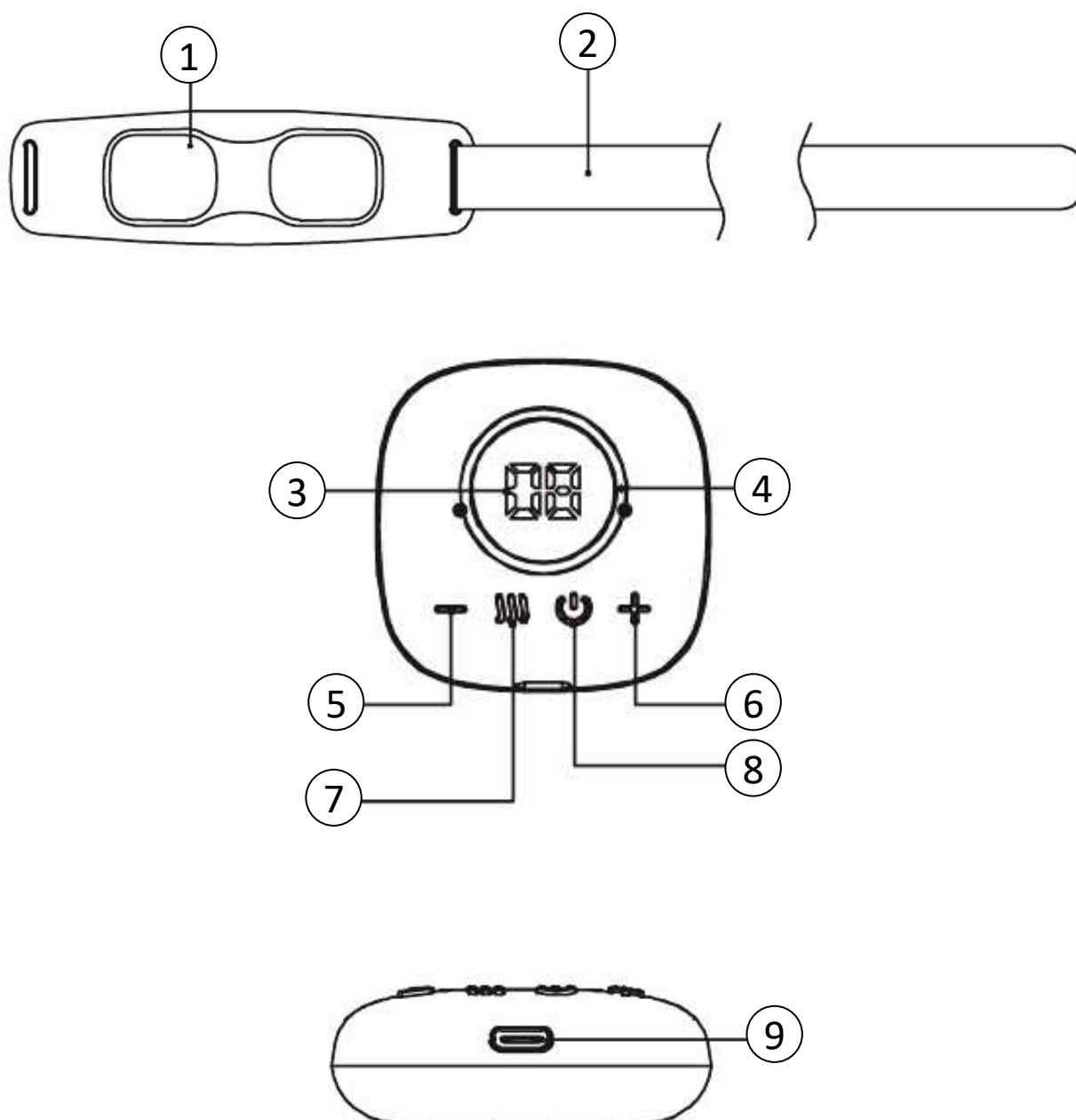

VÝZNAM TLAČÍTEK

1. TLAČÍTKO ON/OFF/MODE

Dlouhý stisk tlačítka = vypnutí/zapnutí přístroje. Krátký stisk tlačítka - masážní program. V průběhu používání přístroje si můžete snadno nastavit masážní program. K dispozici je na výběr celkem 10 programů. Jejich efektivita a význam je srovnatelný. Uživatel má však možnost na výběr, aby při dlouhodobém používání přístroje nebylo jeho používání příliš monotónní.

2. TLAČÍTKO (-) A (+)

Nastavení intenzity masáže. V průběhu používání přístroje si můžete snadno nastavit intenzitu působení EMS pulzů. K dispozici je na výběr rozsah od 1 do 29. Pohodlně si tak můžete nastavit výkon působení EMS pulzů podle vaší aktuální potřeby.

3. VYHŘÍVÁNÍ

Infračervené teplo proudí do vašeho těla přes kontaktní plochy pásu. V průběh používání přístroje si můžete pomocí tlačítka snadno nastavit úroveň působení vyhřívání. K dispozici jsou 3 úrovně tepla.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před použitím vždy ověřte, že jsou kontaktní plochy pásu čisté a nejsou pokryty žádnou mastnotou.
- Stejně tak by se na pokožce neměly vyskytovat žádné nečistoty. Vytvářely by mechanickou bariéru mezi vámi a přístrojem. Výraznější výskyt chloupků může vytvářet mechanickou bariéru pro efektivní přenos elektrických pulzů.
- Hlavní jednotku přístroje připojte k pásu pomocí 4 magnetických kontaktních bodů.
- Pás aplikujte na tělo. Pás si zapněte tak, aby se kontaktní plocha pásu nacházela v plném kontaktu s pletí.
- Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** na ovládacím panelu hlavní jednotky.
- Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** si můžete nastavit masážní program. K dispozici je celkem 10 masážních programů.
- **INTENZITA MASÁŽE** - Pomocí tlačítek **(+)** a **(-)** si můžete vybrat intenzitu masáže. K dispozici je na výběr celkem 29 úrovní intenzity.
- **VYHŘÍVÁNÍ** - Pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** si můžete zvolit režim působení tepla. K dispozici jsou stavy **NÍZKÁ** 38°C, **STŘEDNÍ** 42°C, **VYSOKÁ** 45°C.
- Doporučená délka použití je 20 minut s frekvencí 2x až 3x týdně.
- Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** na přístroji nebo ovladači.







NABÍJENÍ BATERIE

1. Jakmile je nízký stav baterie, oranžová světelná signalizace bliká.
2. K nabíjení baterie používejte výhradně USB kabel s adaptérem, které jsou součástí balení.
3. Průběh nabíjení baterie je doprovázen světelnou signalizací oranžové barvy.
4. Přístroj v průběhu nabíjení nepoužívejte.
5. Délka nabíjení se odvíjí od stavu vybití baterie a její kondici. Jakmile je baterie nabita, světelná signalizace se změní na zelenou barvu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj na oblast pasu

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2891**

EAN: **8594166121638**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 2.1.2023