

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na oblast pasu

**BeautyRelax BR-2902**

**Shape&Relax EMS Prestige**





## OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
OBSAH BALENÍ	5
POPIS PŘÍSTROJE	6
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	7
NABÍJENÍ BATERIE	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9
CERTIFIKACE	9
DOVOZCE	9
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	10

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

## ÚČEL POUŽITÍ

Masážní přístroj BeautyRelax je určen pro aktivní posílení břišních svalů. Využívá elektrických pulzů EMS a působení tepla. Aktivní uvolnění a posílení svalů. K dispozici jsou 4 masážní programy s možností nastavení až 15 úrovní intenzity. Tři úrovně působení tepla. Bezdrátové použití díky zabudované li-ion baterii. Snadné nastavení funkcí pomocí ovládacího panelu.

## HLAVNÍ VÝHODY


- EMS elektrické pulzy
- Elektrické pulzy stimulují svaly jako při skutečném pohybu
- Aktivní posilování svalů
- Působení tepla pro účinné uvolnění svalů
- 4 aplikační hlavice pro masáž EMS pulzy
- 4 masážní programy
- 15 úrovní intenzity
- Působení tepla (40°C až 45°C)
- Posílení břišních svalů
- Určeno pro oblast břicha
- Časovač: ano
- Snadno se přizpůsobí každému uživateli
- Pás je možné snadno upravit pro potřeby každého uživatele
- Snadné nastavení funkcí pomocí ovládacího panelu
- Integrovaný displej v hlavní ovládací jednotce
- Bezdrátové použití díky vestavěné li-ion baterii
- Kapacita baterie: 2000mAh
- Nabíjení pomocí USB kabelu (součástí balení)
- Nízká hmotnost
- Časovač: 10 minut
- Barva: bílá
- Výkon: 5W
- Rozměry přístroje: 23x10cm
- Hmotnost: 344g

## OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj na oblast pasu BeautyRelax Shape&Relax EMS Prestige 1x
- Nabíjecí USB kabel 1x
- Síťový adaptér 220V 1x
- Návod k obsluze 1x

## POPIS PŘÍSTROJE


1. Tlačítko ON/OFF
2. Světelný indikátor
3. Tlačítko VYHŘÍVÁNÍ
4. Tlačítko EMS
5. Tlačítko ZVÝŠENÍ intenzity EMS pulzů
6. Tlačítko SNÍŽENÍ intenzity EMS pulzů

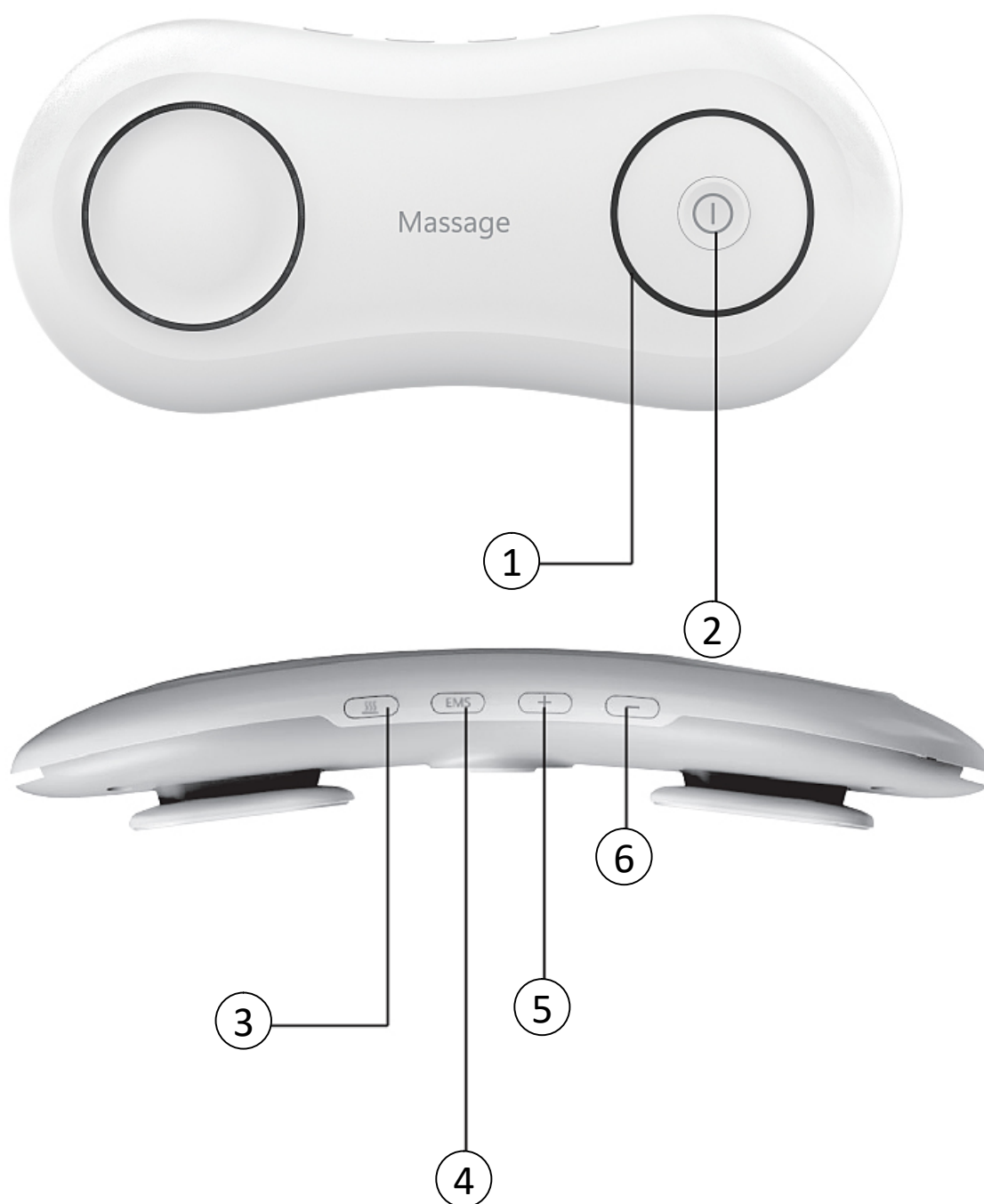

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před použitím vždy ověřte, že jsou všechny čtyři kontaktní elektrody čisté a nejsou pokryty žádnou mastnotou.
- Stejně tak by se na pokožce neměly vyskytovat žádné nečistoty. Vytvářely by mechanickou bariéru mezi vámi a přístrojem.
- V případě potřeby můžete na pokožku nanést vrstvu sonogelu.
- Pásek si upravte tak, aby se nacházely všechny aplikační hlavice v plném kontaktu s pleť.
- Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** na přední části přístroje.
- Po vypnutí hlasové indikace stiskněte rychle dvakrát tlačítko **ON/OFF**.
- Pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** si můžete aktivovat funkci působení tepla. K dispozici jsou celkem 3 úrovně. Pro nastavení úrovně tepla použijte krátký stisk tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ**. Dlouhým stiskem tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** funkci tepla vypnete. Pokud je funkce vyhřívání aktivní, rozsvítí se světelný indikátor ve střední části přístroje.
- Funkci působení **EMS** pulzů aktivujete pomocí tlačítka **EMS**. Pomocí tlačítka (+) zvýšíte intenzitu působení pulzů. Pomocí tlačítka (-) snížíte působení pulzů. K dispozici je celkem 15 úrovní intenzity.
- Výkon působení elektrických pulzů si nastavte tak, aby vám bylo použití příjemné.
- Časovač je nastaven na výchozí čas 10 minut.
- Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.

*Pás můžete použít nejen na oblast břicha, ale také pro masáž jiných částí těla.*

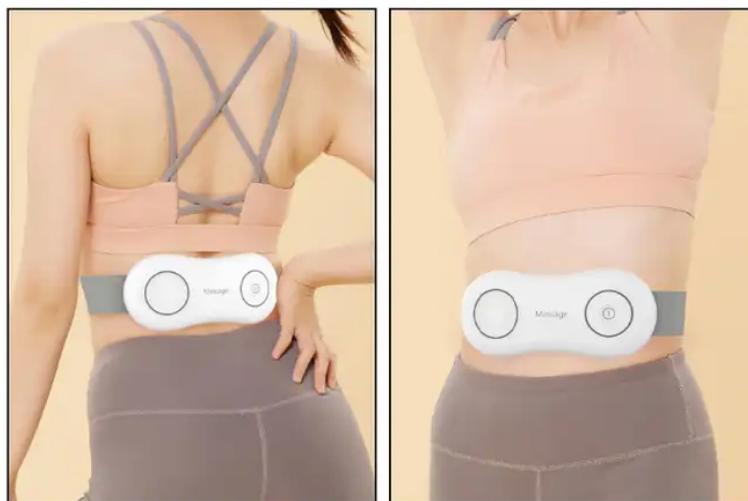

## NABÍJENÍ BATERIE

1. Jakmile je nízký stav baterie, světelná signalizace červeně.
2. K nabíjení baterie používejte výhradně USB kabel s adaptérem, které jsou součástí balení.
3. Jakmile je baterie nabitá, světelný indikátor svítí zelenou barvou.
4. Přístroj v průběhu nabíjení nepoužívejte.
5. Délka nabíjení se odvíjí od stavu vybití a kondici baterie.



*Zdíčka pro připojení USB kabelu*



## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737196160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

**Masážní přístroj na oblast pasu**

**Shape&Relax EMS Prestige**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2902**

EAN: **8594166119772**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015**

**EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2023