

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na ruce

BeautyRelax BR-2914

HandRelax Compact



OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
POPIS PRODUKTU	7
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	8
POUŽITÍ PRODUKTU	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
NABÍJENÍ BATERIE	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	12
CERTIFIKACE	12
DOVOZCE	12
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	13

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz


Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozornění a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

ÚČEL POUŽITÍ

Masážní přístroj BeautyRelax představuje důmyslné technologické řešení pro příjemnou relaxaci vašich unavených rukou. Přímé zacílení na horní a spodní část ruky. Vysoce účinná metoda vzduchové kompresní masáže. Tepelná terapie přispívá k rychlejší svalové regeneraci. Napomáhá zmírnit chronické bolesti zápěstí z dlouhodobého používání počítačové myši. 3 úrovně intenzity masáže. Různé programy masáže. Určen pro všechny velikosti rukou.

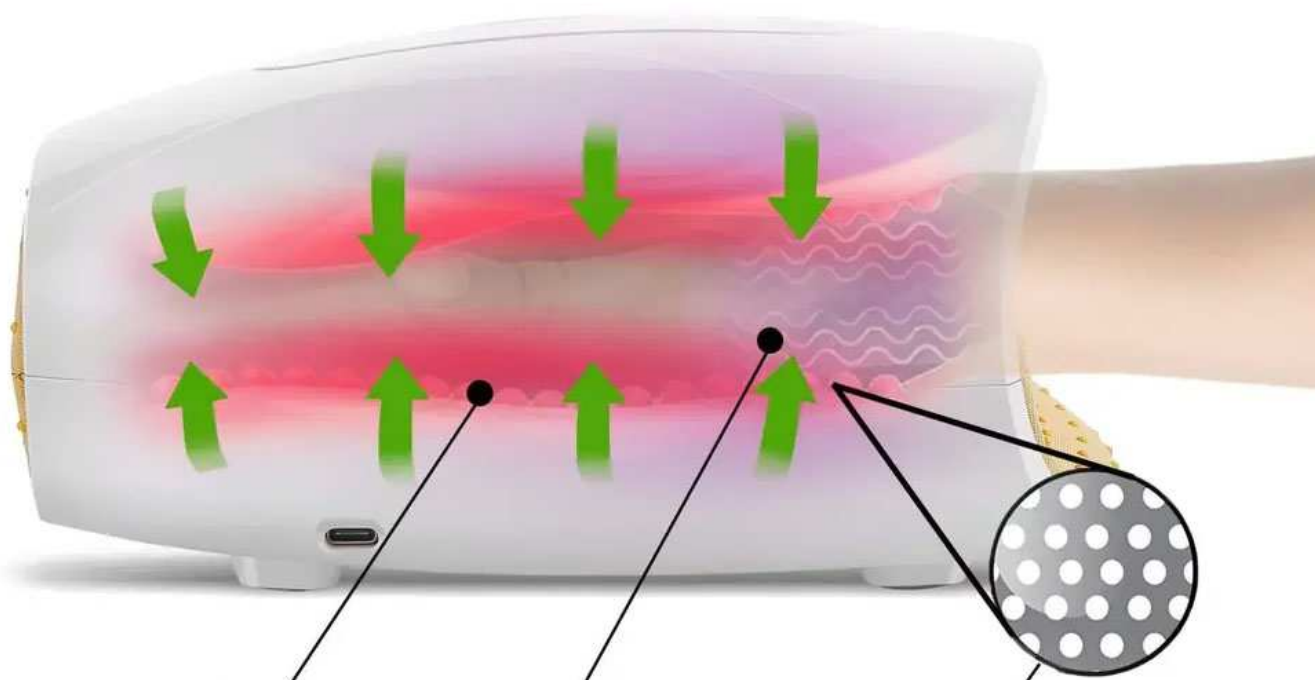

**VZDUCHOVÉ VAKY
PRO OKAMŽITÉ
SVALOVÉ UVOLNĚNÍ**

**PŮSOBNÍ TEPLA
PODPORUJE KREVNÍ
OBĚH**

**PRYŽŽOVÉ VÝSTUPKY
PRO AKUPRESURNÍ
STIMULACI**

HLAVNÍ VÝHODY

- Vzduchová kompresní masáž
- Různé programy masáže
- 3 úrovně intenzity masáže
- 2 úrovně působení tepla
- Rychlý nástup působení tepla
- Zmírnění svalové tenze
- Uvolňující masáž zápěstí
- Vysoká účinnost masáže
- Časovač: ano
- Gumové nožičky na spodní straně přístroje zabraňují klouzání
- Napájení: USB kabelem (součást balení)
- Rozměry: 21x18x10cm
- Hmotnost: 750g

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE



DVĚ ÚROVNĚ VYHŘÍVÁNÍ



REŽIMY MASÁŽE



3 ÚROVNĚ INTENZITY



TLAČÍTKO ON/OFF


POPIS PRODUKTU

1. OTVOR NA ZADNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE
2. ZDÍŘKA PRO NAPÁJECÍ KABEL
3. OVLÁDACÍ PANEL
4. VSTUP PRO RUKU




POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. VYHŘÍVÁNÍ
2. MASÁŽNÍ PROGRAM PRO VĚTŠÍ RUKU
3. MASÁŽNÍ PROGRAM PRO MENŠÍ RUKU
4. INTENZITA A TYP MASÁŽNÍHO PROGRAMU
5. TLAČÍTKO ON/OFF

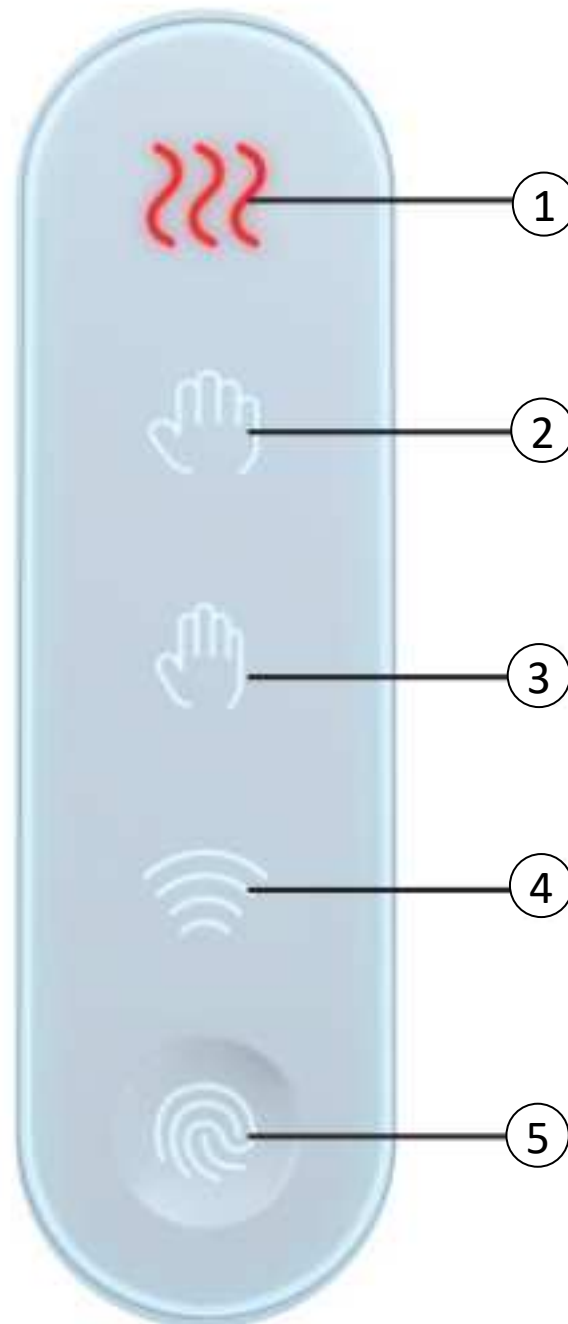

POUŽITÍ PRODUKTU

1. Vložte do přístroje ruku.
2. Pozici ruku upravte tak, aby vám co nejvíce vyhovoval dotyk s masážním mechanismem.
3. Stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro zapnutí přístroje.
4. Zvolte masáž pro větší nebo menší ruku. Oba režimy se liší mírou intenzity masáže.
5. Zvolte masážní program. K dispozici jsou celkem 3 režimy a tři úrovně výkonu. Používejte ten, který je vám nejvíce příjemný.
6. V případě potřeby si můžete navíc aktivovat působení vyhřívání.
7. Časovač je nastaven na délku 15 minut. Po uplynutí této doby se přístroj automaticky vypne.
8. Přístroj můžete kdykoliv vypnout stiskem tlačítka **ON/OFF**.
9. Produkt není určen k použití v průběhu nabíjení baterie.

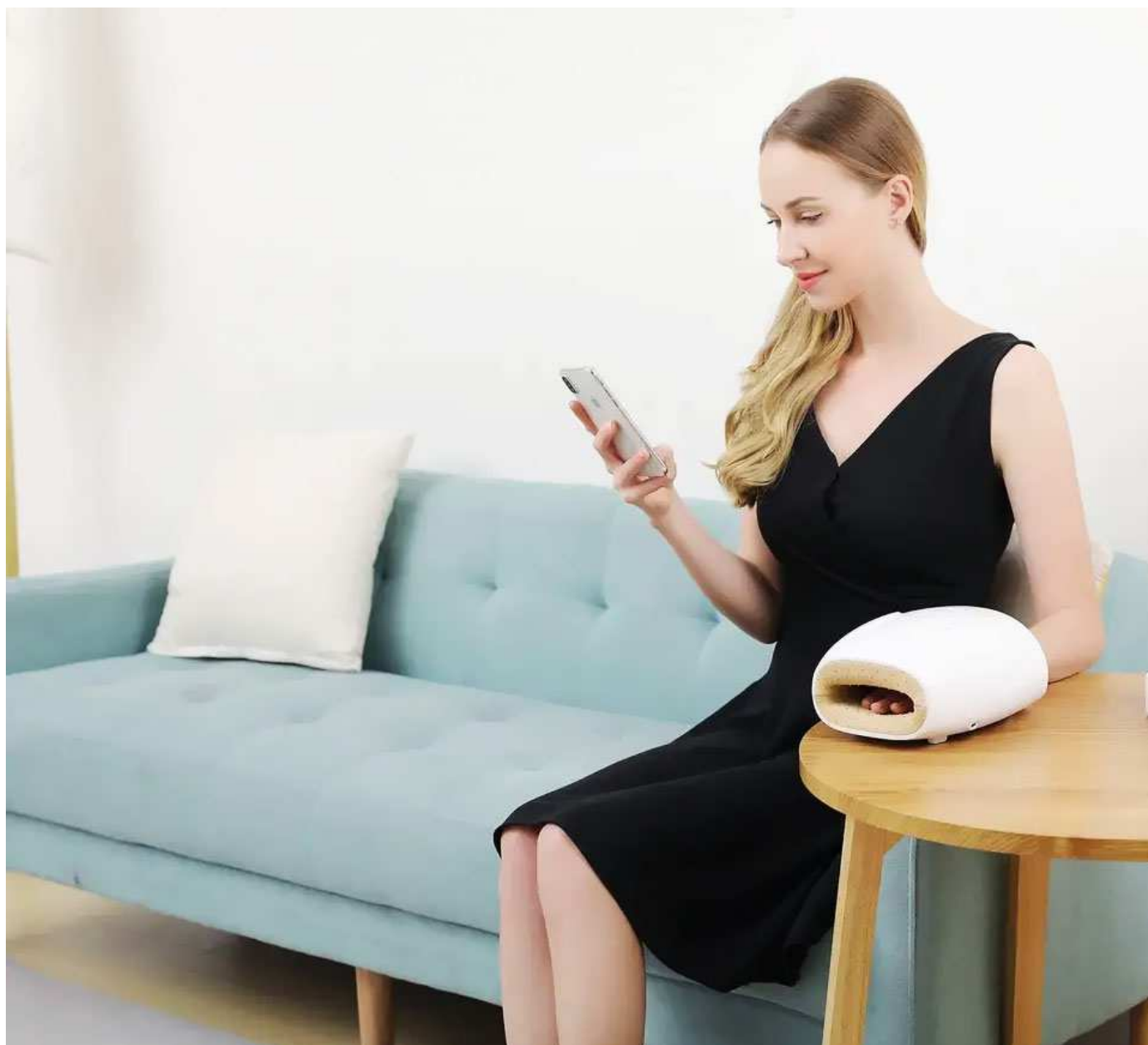



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vnější plastovou část přístroje čistěte vlhkým hadříkem a utřete do sucha. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Přístroj není vodotěsný. Není určen pro ponoření do vody nebo proud vody. Vnitřní část přístroje pro vložení ruky nelze nějakým způsobem vyjmout.

NABÍJENÍ BATERIE

1. Nízký stav baterie signalizuje ikona baterie na displeji.
2. K nabíjení baterie používejte výhradně USB kabel, který je součástí balení.
3. Adaptér připojte do USB portu počítače nebo notebooku nebo adaptéru.
4. Průběh nabíjení signalizuje světelná signalizace.
5. Délka nabíjení se odvíjí od stavu baterie a kondice baterie.
6. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj na ruce HandRelax Compact

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2914**

EAN: **8594166121867**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2023