

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj pro stimulaci hlavy  
**BeautyRelax BR-2470**

## BRAINRELAX





## OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ VÝHODY	7
OBSAH BALENÍ	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
NABÍJENÍ BATERIE	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	10
CERTIFIKACE	10
DOVOZCE	10
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	11

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Pokud si nejste jisti, zda váš fyziologický zdravotní stav umožňuje použití funkcí přístroje, konzultujte možnosti použití před prvním použitím se svým lékařem.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- **Produkt není zdravotnický prostředek.**







## **PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE**

Masážní přístroj pro stimulaci hlavy BeautyRelax Brainrelax. Unikátní technologie, která přispívá k celkové duševní pohodě a relaxaci. Simuluje pokožku hlavy jako 10 skutečných lidských prstů. Pokročilá patentovaná technologie TMS. Frekvenční rozsah vibrací 5 až 20Hz. Stimulace akupunkturních bodů. Přístroj napomáhá naladit lidský mozek na alfa vlny (o frekvenci 7-13 Hz) a navodit stav, kdy dochází k odpočinku a relaxaci. Přizpůsobí se velikosti každé hlavy. 4 masážní programy. Časovač. Ideální délka použití 15 minut každý den. Nízká hmotnost. Bezdrátové použití.



## HLAVNÍ VÝHODY


- Simuluje pokožku hlavy jako 10 skutečných lidských prstů
- Pokročilá patentovaná technologie TMS
- Frekvenční rozsah vibrací 5 až 20Hz
- Stimulace akupunkturních bodů
- Přístroj napomáhá naladit lidský mozek na alfa vlny a navodit stav odpočinku a relaxace
- 4 masážní programy
- Časovač
- Ideální délka použití: 15 minut každý den
- Nízká hmotnost
- Bezdrátové použití
- Dlouhá výdrž baterie na jedno nabití (až 480 minut)
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Přizpůsobí se velikosti každé hlavy
- Baterie: li-ion 110mAh
- Rozměry: 15x14cm
- Hmotnost: 210g

## OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj pro stimulaci hlavy BeautyRelax BR-2470 BRAINRELAX
- Nabíjecí USB kabel
- Návod k obsluze



## POPIS PŘÍSTROJE

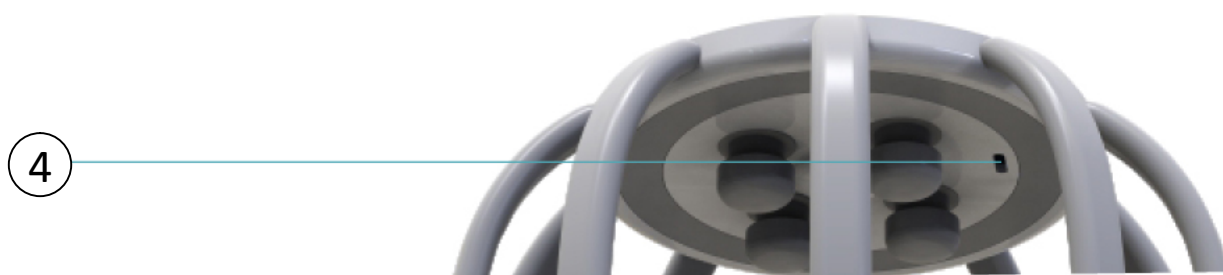

1. Tlačítko ON/OFF/MODE/světelná indikace
2. Masážní body
3. Masážní body
4. Vstup pro nabíjecí USB kabel



## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Nasadte si přístroj na hlavu tak, jak je vám to komfortní. 4 kontaktní masážní body ze spodní strany přístroje by se měly nacházet v kontaktu s vaší hlavou.
2. Stiskněte dlouze tlačítko **ON/OFF**. Přístroj se zapne a ihned se aktivuje masážní program.
3. K dispozici jsou celkem 4 masážní programy.
4. Všechny programy aktivně přispívají k vaší relaxaci a odpočinku. Pravidelným používáním přístroje si některé programy více oblíbíte. Nastavte si takový masážní program, který je vám nejvíce příjemný.
5. Jednotlivé masážní programy můžete přepínat krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Každý masážní program je doprovázen individuálním zvukovým tónem.
6. Přístroj je vybaven časovačem. Automaticky se vypne po uplynutí 15 minut.
7. Přístroj můžete kdykoliv vypnout ručně dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF.
8. Doporučená frekvence používání přístroje je každý den.
9. Optimální délka použití je 15 minut.
10. Pokud jednotlivé masážní programy střídáte, celková doba použití by neměla přesáhnout 15 minut za den.

***Poznámka:** tlačítko ON/OFF je tlačítko nové generace, kdy při jeho stisknutí neucítíte žádné "cvaknutí". Reaguje na dotyk vašeho prstu. Pro aktivaci tlačítka se nebojte vyvinout prstem větší tlak.*

## NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii s kapacitou 1100mAh. Nízký stav energie baterie indikuje červená světelná signalizace.

### **Postup nabíjení:**

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Průběh nabíjení indikuje červená světelná signalizace.
4. Jakmile je baterie nabita, světelná signalizace se změní na modrou barvu.
5. Nabíjení může trvat až 3 hodiny v závislosti na kondici baterie.

***Upozornění:** Nabíjecí kabel nepřipojujte k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.*

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

## **Masážní přístroj pro stimulaci hlavy BRAINRELAX**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2470**

EAN: **8594166119345**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019**

**Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: ATT2020SZ0903074S**

**Produkt není zdravotnický prostředek.**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.3.2022