

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj pro uvolnění bederní páteře
BeautyRelax BR-2480

LUMBPRESS



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	5
OBSAH BALENÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
ERGONOMICKÝ TVAR	6
UVOLNĚNÍ A PROTAŽENÍ PÁTEŘE	7
3 NÁSOBNÁ OCHRANA VAŠEHO ZDRAVÍ	8
DYNAMICKÁ KOMPRESNÍ MASÁŽ	9
VZDUCHOVÁ KOMPRESNÍ MASÁŽ	10
3 ÚROVNĚ VYHŘÍVÁNÍ	11
VIBRAČNÍ MASÁŽ	12
SVĚTELNÁ TERAPIE	13
BALANČNÍ PODLOŽKA	14
KOMPAKTNÍ ROZMĚRY	15
POPIS PŘÍSTROJE	16
POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	17
VÝZNAM FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE	18
DOPORUČENÉ POZICE POUŽITÍ PŘÍSTROJE	19
UKONČENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE	20
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	21
CERTIFIKACE	21
DOVOZCE	21
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	22

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Pokud jste po vážné operaci bederní páteře, konzultujte možnost použití se svým lékařem.
- Pokud si nejste jisti, zda váš fyziologický zdravotní stav umožňuje použití funkcí přístroje, konzultujte možnosti použití před prvním použitím se svým lékařem.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- **Produkt není zdravotnický prostředek.**



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Lumbpress je špičkový masážní přístroj se zaměřením na okamžité uvolnění svalů v oblasti bederní páteře. Pokročilá technologie kompresní masáže. Okamžité uvolnění ztuhlých svalů kolem bederní části zad. Šetrné a bezpečné používání. Speciálně anatomicky tvarovaný. Kompresní masáž, vibrace, světelná terapie, vyhřívání. Podporuje krevní oběh. Dálkové ovládání. Automatické masážní programy. Časovač.

OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj pro uvolnění bederní páteře BeautyRelax BR-2480
- Podložka
- Adaptér do sítě 220V
- Návod k obsluze

HLAVNÍ VÝHODY

- Pokročilá technologie kompresní masáže
- Okamžité uvolnění ztuhlých svalů kolem bederní páteře
- Šetrné a bezpečné používání
- Speciálně anatomicky tvarovaný
- Vibrace, vyhřívání, fotonové světlo, kompresní masáž
- Podporuje krevní oběh
- Možnost nastavení teploty: nízká, střední, vysoká
- Dálkové ovládání
- Dva automatické masážní programy
- Automatický časovač 15 minut
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry: 40x19x6,5cm



ERGONOMICKÝ TVAR

ERGONOMICKÝ TVAR

KOPÍRUJE ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE

DESIGN NAVRŽEN FYZIOTERAPEUTY



UVOLNĚNÍ A PROTAŽENÍ PÁTEŘE


UVOLNĚNÍ
& PROTAŽENÍ PÁTEŘE
ÚLEVA OD BOLESTI JIŽ ZA 15 MINUT



2 AUTOMATICKÉ
MASÁŽNÍ PROGRAMY

3 NÁSObNÁ OCHRANA VAŠEHO ZDRAVÍ

3 NÁSObNÁ OCHRANA VAŠEHO ZDRAVÍ

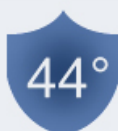

OMEZOVAČ TEPLOTY

JAKMILE DOSÁHNE
TEPLOTA 44°C DÁLE SE
JIŽ NEZVYŠUJE



VZDUCHOVÁ KOMPRESÉ

AUTOMATICKÉ
ZASTAVENÍ TLAKOVÁNÍ,
JAKMILE JE VAK
NAPLNĚNÝ VZDUCHEM




AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

NEMUSÍTE SLEDOVAT
HODINKY AUTOMATICKÉ
VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

DYNAMICKÁ KOMPRESNÍ MASÁŽ

DYNAMICKÁ KOMPRESNÍ MASÁŽ

AKTIVNÍ UVOLNĚNÍ OBRATLŮ V BEDERNÍ ČÁSTI ZAD
OPTIMÁLNÍ ZAKŘIVENÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

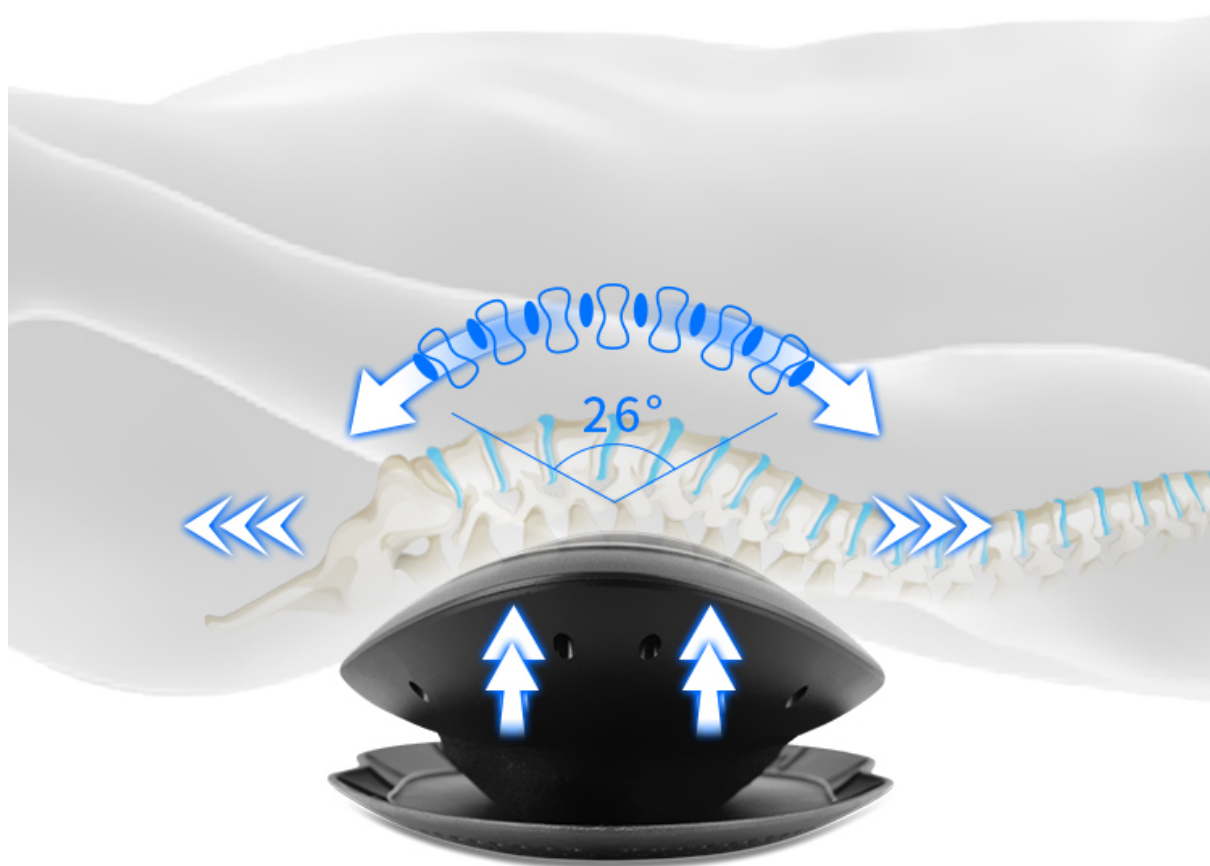


VZDUCHOVÁ KOMPRESNÍ MASÁŽ



3 ÚROVNĚ VYHŘÍVÁNÍ

3 ÚROVNĚ VYHŘÍVÁNÍ

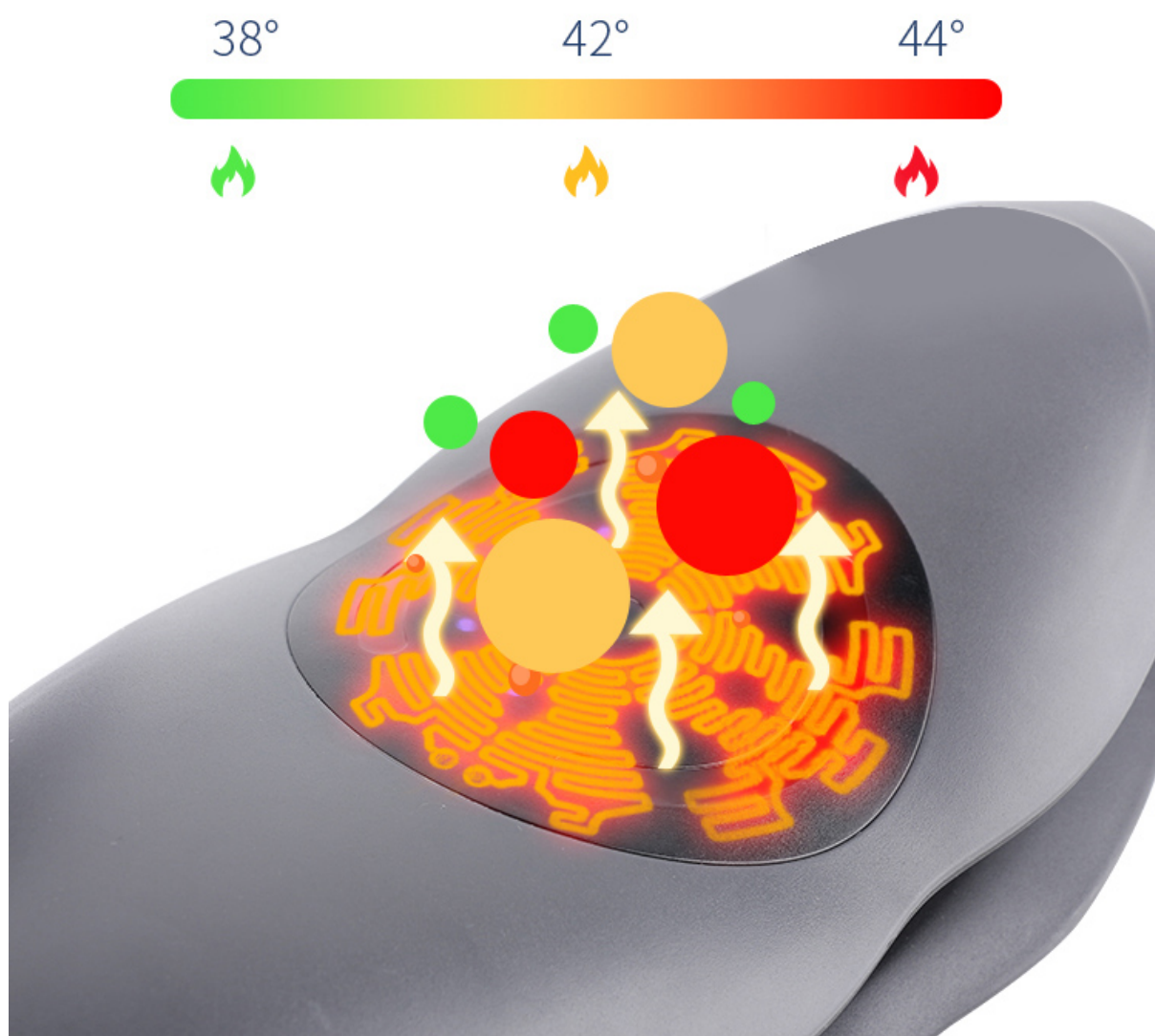

VIBRAČNÍ MASÁŽ

VIBRAČNÍ MASÁŽ

UNIKÁTNÍ TVAR PŘÍSTROJE S VĚSTAVENOU FUNCÍ VIBRACÍ UMOŽŇUJE, ABY BYLA VAŠE BEDERNÍ ČÁST ZAD DOKONALE OBKLOPENA MĚKKÝM KOMFORTNÍM MATERIÁLEM. VIBRAČNÍ MASÁŽ TAK MŮŽE PŮSOBIT PO CELÉ PLOŠE PŘÍSTROJE.





SVĚTELNÁ TERAPIE

3 BARVY

FOTONOVÉ TERAPIE

ČERVENÁ | MODRÁ | FIALOVÁ

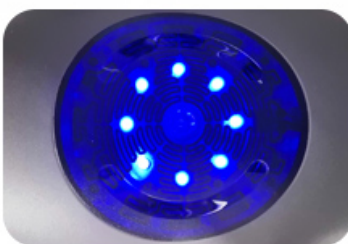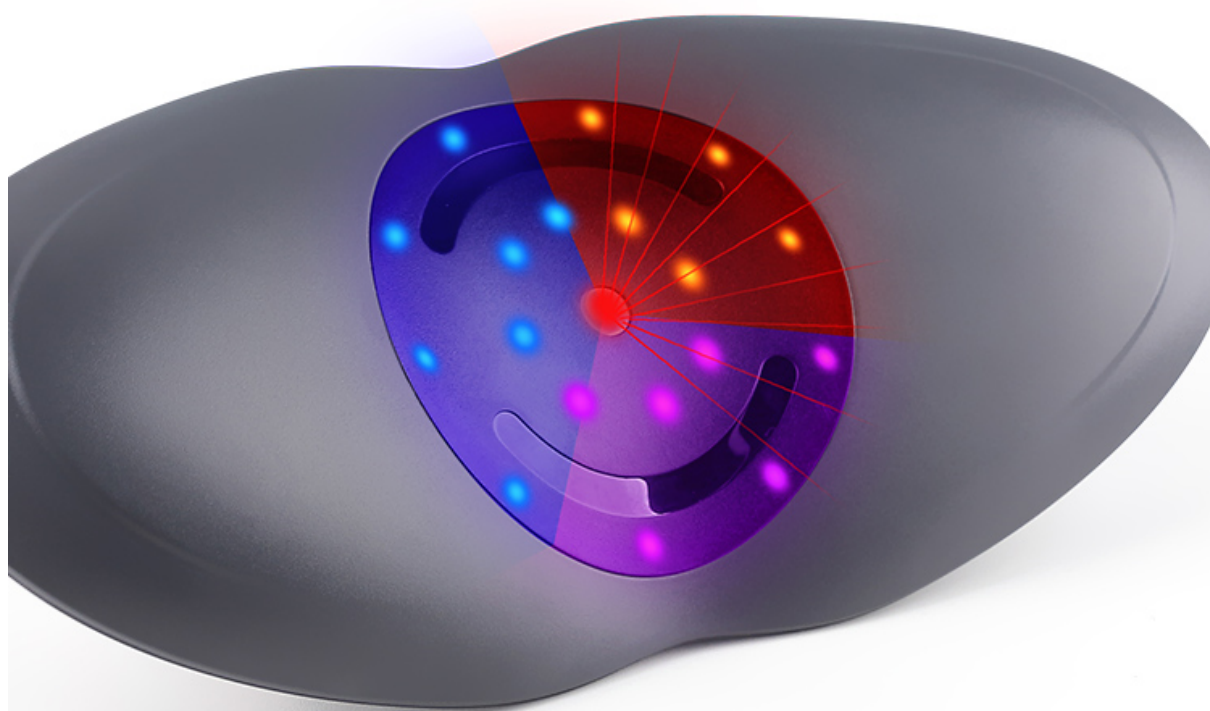

BALANČNÍ PODLOŽKA

BALANČNÍ PODLOŽKA

MOŽNOST POUŽITÍ PŘÍSTROJE
NA TVRDÉM I MĚKKÉM PODKLADU



KOMPAKTNÍ ROZMĚRY



POPIS PŘÍSTROJE



1. Zóna působení tepla
2. Kabel dálkového ovladače
3. Konektor pro napájecí adaptér
4. Spodní část přístroje
5. Balanční podložka
6. Dálkový ovladač

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



1. Dva masážní programy: M1, M2
2. Vyhřívání: 3 úrovně (nízká, střední, vysoká)
3. Nahoru a dolů: zvýšení a snížení intenzity
4. Světelná indikace vibrací
5. Automatický program: M1, M2
M1: vzduchová komprese + vibrace
M2: vzduchová komprese
6. Tlačítko **ON/OFF**
7. Tlačítko **VIBRACE**

8. Indikace zapojení adaptéru (problikne jednou při zapojení adaptéru, poté je indikace vypnutá)
9. Světelná terapie
10. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
11. Tlačítko **ZVÝŠENÍ** vzduchové komprese
12. Tlačítko **SVĚTELNÉ TERAPIE**
13. Tlačítko **SNÍŽENÍ** vzduchové komprese

VÝZNAM FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE

Pomocí dálkového ovladače můžete nastavit všechny funkce masážního přístroje. Jednotlivé funkce mají následující význam:

(1) Tlačítko ON/OFF (6)

Pomocí tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv zapnout nebo vypnout. Použití tlačítka je podmíněno zapojením přístroje k napájecímu adaptéru.

(2) Tlačítko VIBRACE (7)

Pomocí tlačítka **VIBRACE** můžete zapnout nebo vypnout vibrační masáž.

(3) Tlačítko SVĚTELNÉ TERAPIE (12)

Pomocí tlačítka **SVĚTELNÁ TERAPIE** si můžete zapnout nebo vypnout působení světla.

(4) Tlačítko NAHORU/DOLŮ (11)+(13)

Pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ** si můžete ručně nastavit zdvih přístroje. Funkčnost tlačítka pracuje krátkými stisky nebo dlouhým podržením.

(5) Tlačítko AUTO (5)


Pomocí tlačítka **AUTO** aktivujete automatický program masáže. K dispozici jsou dva automatické programy. Program M1 a M2.

(6) Tlačítko HEAT


Pomocí tlačítka **HEAT** můžete zapnout nebo vypnout působení vyhřívání.

DOPORUČENÉ POZICE POUŽITÍ PŘÍSTROJE

(1)

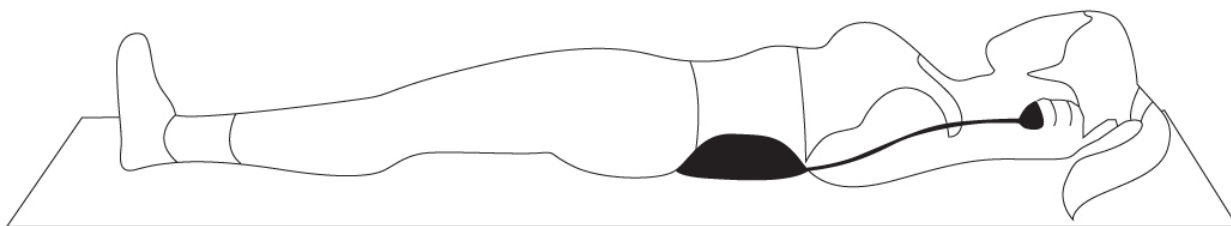


(2)

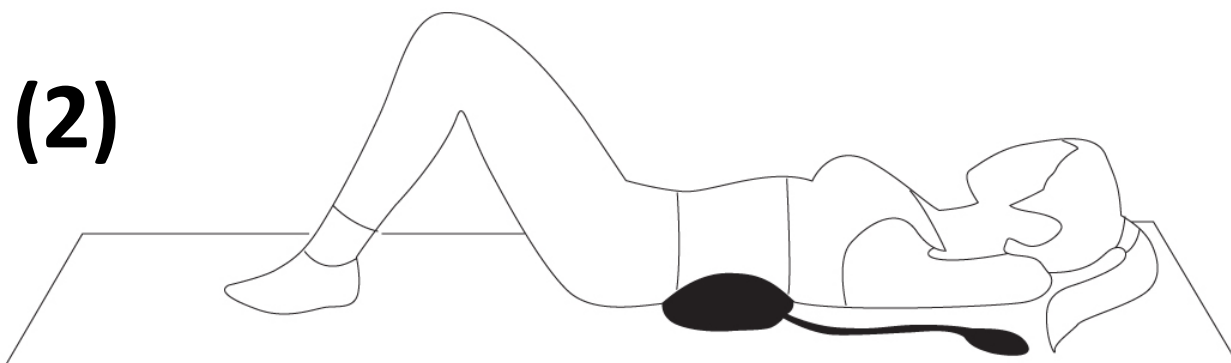


- *Přístroj používejte maximálně 15 minut denně*
- *Při použití si nastavte takové funkce, které jsou vám příjemné*
- *Frekvenci použití přístroje upravte podle stavu vaší bederní páteře*
- *Pokud máte zvýšenou citlivost bederní páteře, ponechejte mezi jednotlivým použitím přístroje delší časový úsek*

UKONČENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

(SPRÁVNÝ ZPŮSOB)

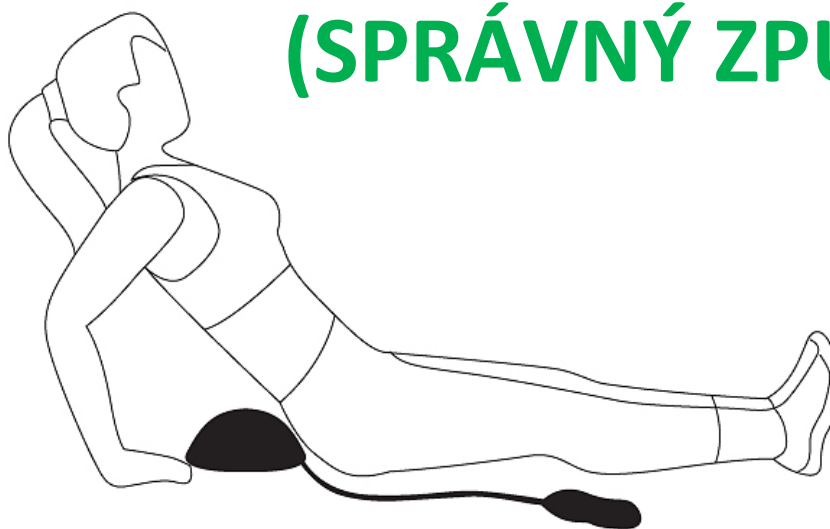

(CHYBNÝ ZPŮSOB)

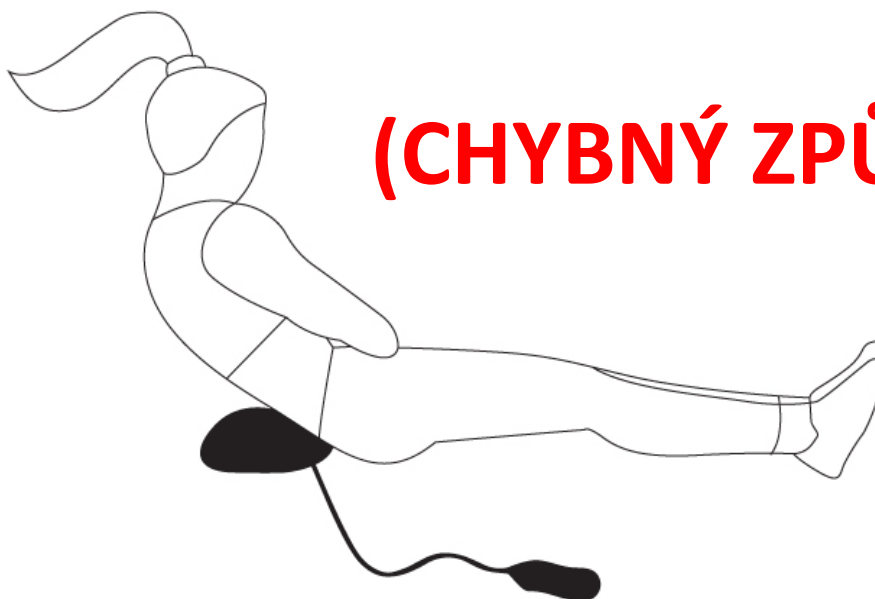

- *Po skončení činnosti přístroje vyčkejte ještě 2 až 3 minuty.*
- *Zvednutí ze země provádějte velice opatrně a pomalu*
- *Vždy si pomáhejte pomocí rukou*
- *Zvednutí proveďte až v momentě, kdy je vzduchový vak přístroje prázdný a přístroj se tak nachází v nejnižším možném profilu*

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj pro uvolnění bederní páteře

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2480**

EAN: **8594166119352**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: ATT2020SZ0903074S

Produkt není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.3.2022