

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj **BeautyRelax BR-2903**

SHIATSUSOFT



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ VÝHODY	6
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	7
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	8
NABÍJENÍ BATERIE	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9
CERTIFIKACE	9
DOVOZCE	9
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	10

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je striktně ZAKÁZÁNO používat masážní přístroj během jízdy v automobilu. V případě nehody se vystavujete riziku poranění páteře nebo jiné oblasti, která by byla masážním přístrojem masírována.

OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj BeautyRelax BR-2903 SHIATSUSOFT
- Nabíjecí USB kabel + síťový adaptér 220V
- Návod k obsluze

KONTRAIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
- Při stavu vysokých horeček
- Závažné kožní onemocnění na místě použití přístroje
- Srdeční onemocnění, hypertenze
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



BOLESTI KRČNÍ PÁTEŘE PŘINÁŠÍ SPOUSTU ZDRAVOTNÍCH RIZIK!



BOLEST VE VYŠŠÍM VĚKU



UŽIVATELÉ MOBILNÍCH TELEFONŮ



DLOUHÁ PRÁCE U POČÍTAČE



NÁSLEDEK
BOLESTÍ
KRKU?

VYBOULENÍ U KRČNÍ PÁTEŘE

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE


Masážní přístroj BeautyRelax pro okamžité uvolnění svalů v oblasti krční páteře. Unikátní konstrukce masážního mechanismu věrně kopíruje pohyby prstů rukou maséra a je doplněna o funkci vyhřívání infračerveným světlem. Dvě oblasti pohyblivého masážního mechanismu s celkem 6 hlavicemi. Blahodárná funkce vyhřívání. Dva směry pohybu masáže. Časovač. Bezdrátové použití. Zabudované Li-ion baterie.

HLAVNÍ VÝHODY

- Okamžité uvolnění ztuhlých svalů
- Určen pro použití v oblasti krční páteře
- Vyrobeno účinná Shiatsu masáž simuluje pohyby rukou maséra
- Blahodárné účinky působení tepla
- Dva páry masážních hlavic
- Každá z masážních hlavic disponuje 3 masážními body
- Dva směry pohybu masážních hlavic
- Funkce vyhřívání
- 3 masážní programy
- Časovač: automatické vypnutí po 15 minutách
- Bezdrátové použití díky zabudované nabíjecí baterii
- Velmi příjemný materiál na dotyk
- Zapínání na suchý zip
- Nabíjení: vestavěná baterie Li-ion 1500mAh
- Výkon: 5W
- Rozměry: 50x50x31cm
- Hmotnost: 590g

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Zdířka pro připojení napájecího kabelu
2. Tlačítko **MODE**
3. Světelný indikátor nabíjení
4. Světelný indikátor činnosti přístroje
5. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
6. Tlačítko **ON/OFF**

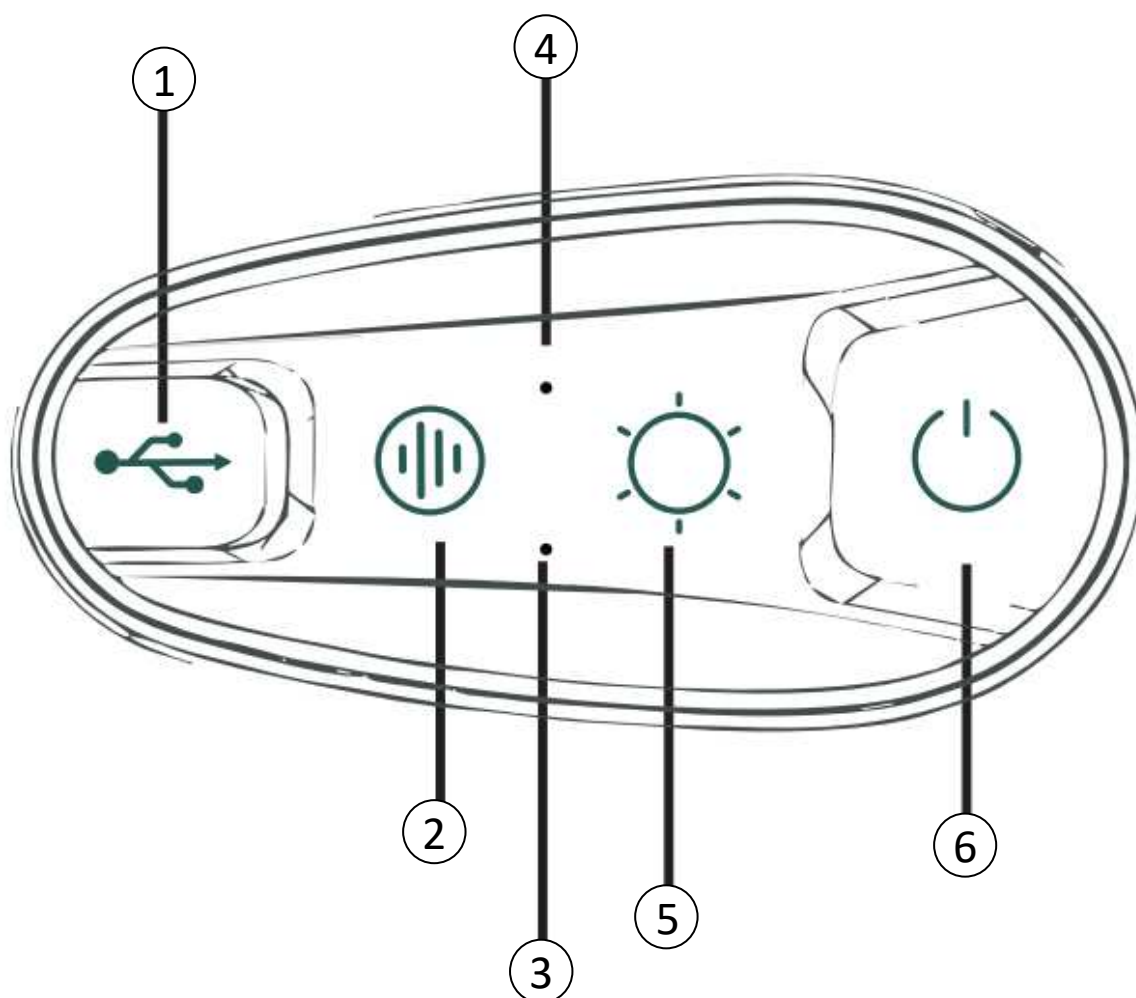

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Vždy dbejte na to, aby byla baterie dostatečně nabita. K nabíjení používejte výhradně kabel s adaptérem, které jsou součástí balení. V případě použití jiného typu adaptéru může dojít k fatálnímu poškození baterie a ztrátě záruky.
2. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Přístroj zahájí činnost pohybem masážního mechanismu. Pro vypnutí hlasového doprovodu stiskněte dvakrát za sebou krátce tlačítko **ON/OFF**.
3. Pomocí tlačítka **MODE** si můžete nastavit program masáže. K dispozici jsou tři programy: **SMOOTH, ACTIVE, SLEEP**. Každý program má přednastavený jiný pohyb a rychlost masážních hlavic. Zvolte si takový program, který je vám nejvíce příjemný. V průběhu masáže můžete jednotlivé programy měnit dle vaší volby.
4. Pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** si můžete zapnout nebo vypnout vyhřívání límce. Pomocí tlačítka si můžete nastavit tři úrovně tepla - nízká, střední a vysoká.
5. Přístroj má časovač. Po uplynutí několika minut se vypne. Délka masáže je doporučena na 10 až 15 minut. S délkou to rozhodně nepřehánějte. Stejně tak nevyvíjejte na krk přílišný tlak pomocí madel.
6. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
7. Délka masáže by neměla být v daný den delší než 30 minut.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Kontinuální působení všech funkcí přístroje umožňuje dostatečně nabitá baterie.

Postup nabíjení:

1. Jakmile je baterie vybita, světelný indikátor na panelu svítí červenou barvou.
2. Pro nabíjení používejte nabíjecí USB kabel s adaptérem, které jsou součástí balení.
3. Druhý konec připojte do zdířky na boční straně límce.
4. Průběh nabíjení signalizuje blikání červené světelné indikace.
5. Jakmile je proces nabíjení dokončen, blikání světelné indikace ustane.
6. Délka nabíjení závisí na stavu vybití a celkové kondici baterie.
7. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.

Upozornění: K nabíjení používejte výhradně adaptér, který je součástí balení. V případě použití jiného typu adaptéru může dojít k fatálnímu poškození baterie a ztrátě záruky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch. Přístroj není vodotěsný.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE

- Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj SHIATSUSOFT

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2903**

EAN: **8594166121751**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Dle registračního čísla certifikátu: TB-EMS173623

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 9.2.2023