

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj s tepelnou terapií

BeautyRelax BR-2827

EYERELAX HOT&COLD



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	5
OBSAH BALENÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
POPIS PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	10
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	11
NABÍJENÍ BATERIE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	13
CERTIFIKACE	13
DOVOZCE	13
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka v místě použití přístroje postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesé distributor odpovědnost.
- V průběhu použití přístroje mějte zavřené oči.
- Pokud je vám použití přístroje v jakémkoliv okamžiku nepříjemné, použití ukončete.
- Produkt není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádných typů onemocnění.
- S ohledem na šetrnost technologií přístroje není žádné striktní omezení, jak dlouho a jak často přístroj používat. Přístroj používejte vždy, když je vaše oční okolí unavené. Můžete cítit pocity svalové bolesti v oblasti kolem očí. Optimální doporučená délka použití je 30 minut.
- V průběhu použití přístroje nemějte aplikované oční čočky.
- V průběhu použití přístroje nepoužívejte brýle.



PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax EyeRelax Hot&Cold je inovativní masážní přístroj pro účinnou relaxaci oblasti kolem očí. Kombinuje tři účinné technologie: vibrace, působení tepla a chladu. Blahodárné účinky působení tepla. Příjemná relaxace přináší okamžité svalové uvolnění obličejových svalů. Efektivně potlačuje tmavé kruhy pod očima. Snižuje nepříjemné otoky. Redukuje stres a napomáhá ke zlepšení nálady. Bezdrátové použití díky vestavěné nabíjení li-ion baterii.




OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj s tepelnou terapií BeautyRelax BR-2827
- Chladící gelová vložka
- Nabíjecí kabel.
- Síťový adaptér 220V.
- Návod k obsluze.

HLAVNÍ VÝHODY

- Příjemná relaxace oblasti kolem očí
- Vysokofrekvenční vibrační masáž pro zlepšení krevního oběhu a uvolnění svalové tenze
- Působení tepla pro efektivní potlačení tmavých kruhů pod očima
- Působení chladu pro snížení otoků
- Přináší okamžité svalové uvolnění obličejových svalů
- Redukuje stres a napomáhá ke zlepšení nálady
- Napomáhá při únavě po dlouhém sledování monitoru počítače
- Působení tepla 45°C
- Působení chladu pomocí gelové vložky
- 3D tvarování – snadno se přizpůsobí povrchu hlavy
- Světelná indikace stavu baterie
- Bezdrátové použití díky vestavěné nabíjení li-ion baterii
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Měkká tkanina pro příjemné používání
- Flexibilní uchycení na hlavu (přizpůsobí se každému uživateli)
- Výkon: 5W
- Napětí: 5V
- Časovač: 15 minut
- Napájení: li-ion baterie
- Kapacita baterie: 1200mAh
- Nabíjení: USB-C kabel (součástí balení)
- Rozměry: 27,4x9cm
- Hmotnost: 70g



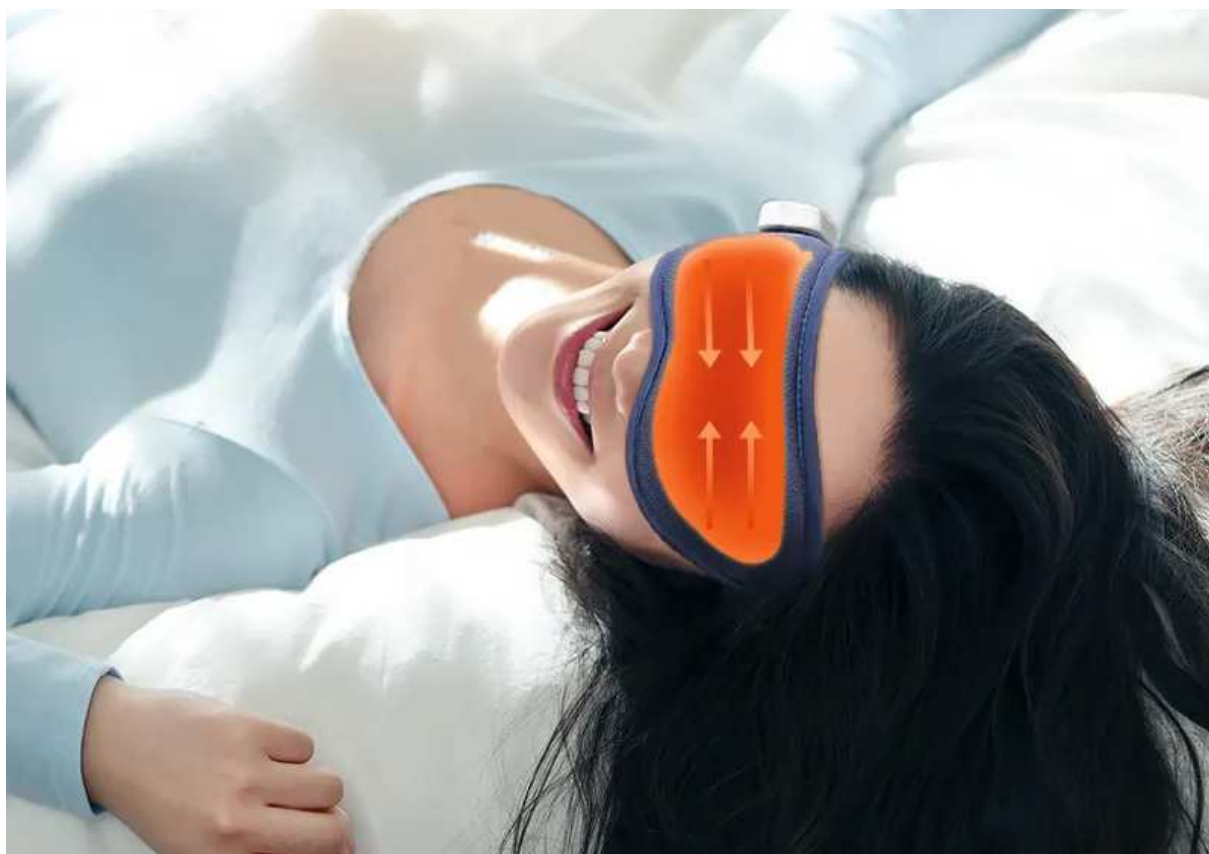


POPIS PŘÍSTROJE

1. Hlavní jednotka
2. Vstup pro nabíjecí kabel
3. Tlačítko **ON/OFF**
4. Stahovací popruh pro uchycení za hlavu



POPIS PŘÍSTROJE

1. Indikace provozu/stavu baterie
2. Tlačítko ON/OFF

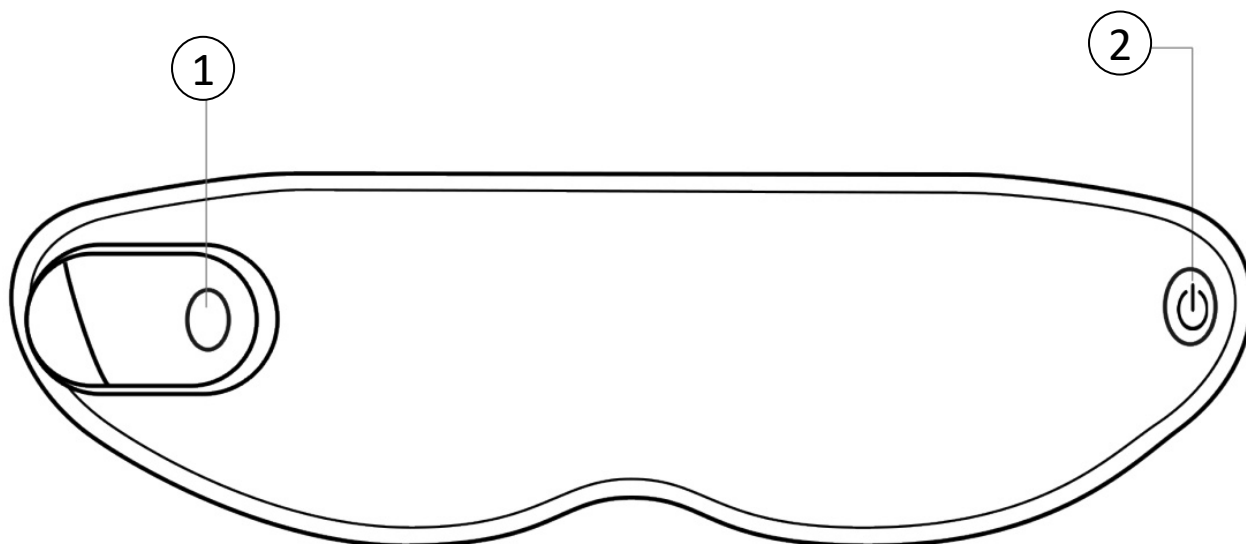

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Pro správnou činnost přístroje nabijte baterii. Více v pasáži: **NABÍJENÍ BATERIE**. K nabíjení baterie používejte pouze originální příslušenství. V opačném případě by mohlo dojít k poškození baterie a ztrátě záruky.
2. Před použitím vždy zkontrolujte, že je hlavní jednotka pevně připojena k přístroji.
3. Přístroj si nasadte na hlavu. Přístroj umístěte tak, aby o nejlépe pokrýval oblast kolem očí.
4. Udělejte si pohodlí. Ideálně si lehněte na postel nebo pohovku.
5. Pro zapnutí přístroje stiskněte dlouze tlačítko **ON/OFF**. Přístroj se snadno ovládá pomocí tohoto tlačítka.
6. Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF** můžete zapnout nebo vypnout funkci vibrační masáže a vyhřívání. Pokud je funkce vyhřívání aktivní, teplo se pohybuje kolem 42°C.
7. Přístroj má přednastavený časovač v délce 15 minut.
8. Pokud si přejete po uplynutí činnosti pokračovat v použití přístroj, znovu jej zapněte.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
10. Pro terapii chladem je součástí balení gelová vložka. Pro ochlazení vložky použijte lednici nebo mrazák. Gelovou vložku poté umístěte dovnitř přístroje. Při působení chladu dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý. Případně můžete od přístroje odpojit hlavní jednotku.
- 11. Přístroj můžete používat bez problémů každý den nebo tehdy, pokud budete cítit výraznou únavu očního okolí. Postupně vyzkoušejte terapii teplem i chladem. Časem si ověříte, která metoda je vám příjemnější. Zákazníci produkty využívají především působení tepla. Teplo má blahodárné účinky pro uvolnění očních svalů a potlačení tmavých kruhů pod očima zejména v kombinaci s vibrační masáží. Působení chladu je vhodné pro okamžité snížení otoků (například při otlačení z dlouhého nošení brýlí nebo sledování monitoru počítače po velmi dlouhou dobu).**

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Před použitím přístroje doporučujeme pleť odlíčit. Odstranit jakékoliv zbytky dekorativní kosmetiky v oblasti použití přístroje.
- 2.** Použití přístroje je vhodné naplánovat před případným dalším typem procedury se zaměřením na ošetření oblasti kolem očí (např. oční sérum).
- 3.** V průběhu použití přístroje mějte zavřené oči.
- 4.** Pokud je vám použití přístroje v jakémkoliv okamžiku nepříjemné, použití ukončete.
- 5. Produkt není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádných typů onemocnění.**
- 6.** S ohledem na šetrnost technologií přístroje není žádné striktní omezení, jak dlouho a jak často přístroj používat. Přístroj používejte vždy, když je vaše oční okolí unavené. Můžete cítit pocity svalové bolesti v oblasti kolem očí. Optimální doporučená délka použití je 15 až 30 minut.
- 7.** V průběhu použití přístroje nemějte aplikované oční čočky.
- 8.** V průběhu použití přístroje nepoužívejte brýle.



NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě nabíjecí baterii, která umožňuje pohodlné bezdrátové použití.

Postup nabíjení:

1. Nízký stav baterie indikuje červená světelná signalizace.
2. Přístroj připojte k nabíjecímu kabelu, který je součástí balení. Druhý konec kabelu připojte do USB portu počítače nebo notebooku. Využít můžete také síťový adaptér, který je součástí balení.
3. Průběh nabíjení doprovází světelná blikající signalizace.
4. Jakmile je baterie nabitá, blikání ustane.
5. Přístroj v průběhu nabíjení nezapínejte.
6. Čas nabíjení závisí na kondici baterie.
7. Výdrž přístroje na jedno nabití závisí na kondici baterie.
8. Jakmile je baterie nabitá, přístroj odpojte od kabelu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout dovnitř přístroje, zejména do hlavní jednotky, kde se nachází elektronika přístroje. Pokud přístroj používá více osob, dbejte zvýšenou pozornost čištění plochy, která je v kontaktu s pokožkou.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Masážní přístroj s tepelnou terapií BeautyRelax EYERELAX HOT&COLD

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2827**

EAN **8594166120440**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

Přístroj není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádné nemoci.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno
Datum vydání: 1.2.2023

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel