

NÁVOD K OBSLUZE

Ultrazvuková špachtle **BeautyRelax BR-2110**

PEEL&CLEAN



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI	7
ANTI-AGE EFEKT	7
POUŽITÍ SONOGELU	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	9
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	10
NABÍJENÍ BATERIE	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	12
CERTIFIKACE	12
DOVOZCE	12

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



OBSAH BALENÍ

- Ultrazvuková špachtle BeautyRelax BR-2110 PEEL&CLEAN.
- Napájecí USB kabel.
- Návod k obsluze.

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteroskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



HLAVNÍ VÝHODY

- Hlubkové čištění pleti pomocí ultrazvukové technologie
- Intenzivní odstranění odumřelých kožních buněk
- Jemná mikromasáž pro zlepšení lokálního krevního oběhu
- Prevence proti tvorbě černých teček, pupínků a akné
- Příznivé účinky na pleť
- Používání je naprosto bezpečné
- Vhodné pro všechny typy pleti
- Kompaktní malé provedení ideální do kabelky na cesty

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence ultrazvukových vln: 25KHz
- Provozní napětí: 5V
- Materiál aplikátoru: nerez ocel
- Napájení: nabíjecí Li-ion baterie
- Nabíjení: USB kabelem (součástí balení)
- Rozměry: 17x4,2x2,5cm
- Hmotnost: 170g

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax Peel&Clean je vysoce účinná kosmetická pomůcka pro dokonalé vyčištění pleti. Nabízí skvělý poměr užitné hodnoty a ceny. Dopřejte své pleti péči jako ze salonu. Pouze dokonale čistá pleť může být zdravá a krásná!

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI

Aplikátor je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli. Na konci aplikátoru jsou generovány ultrazvukové vlny o frekvenci 25 tisíc pulzů za sekundu. Ultrazvuk působí na pokožku až do hloubky kožních pórů. Přístroj je výkonný, ale zároveň velmi šetrný k pokožce. Používání je naprosto bezpečné. Technologie čištění ultrazvukem byla doposud výbavou pouze špičkových estetických klinik. S přístrojem BeautyRelax Peel&Clean si kvalitní péči dopřejete v pohodlí domova. Pouze důkladně čistá pleť efektivně absorbuje účinné látky z kosmetických přípravků.

ANTI-AGE EFEKT

Aplikační hlavice má dvě strany použití. Úzká slouží pro intenzivní čištění pleti. Větší plocha aplikátoru generuje ultrazvukové vlny o specifické frekvenci. Tato jemná mikromasáž významně podporuje lokální krevní oběh a zapracovat kosmetické přípravky hlouběji do pokožky.

POUŽITÍ SONOGELU

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny tak mohou do pleti lépe pronikat. Použít můžete jakýkoliv kosmetický přípravek na vodní bázi (kosmetický krém, sérum, ...).

POPIS PŘÍSTROJE



- 1. *Aplikační hlavice*
- 2. *Tlačítko ON/OFF*
- 3. *Vstup pro nabíjecí USB kabel*

POUŽITÍ PŘÍSTROJE


1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka **ON/OFF (2)**. Činnost přístroje potvrdí zelená světelná signalizace.
2. Pohybujete se aplikační hlavice po pokožce pomalu a tlačte na ni jemnou silou (aby celá aplikační hlavice byla v kontaktu s pokožkou). Více v pasáži „METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU“.
3. Činnost přístroje ukončíte stiskem tlačítka **ON/OFF (2)**.

Poznámka 1: Pro čištění pleti používejte pouze špičku přístroje (**Obr.1**). Pro intenzivní mikromasáž pleti používejte větší plochu špachtle (**Obr.2**).

Poznámka 2: Na pokožku naneste tenkou vrstvičku sonogelu, kosmetického krému nebo séra. Zvýšíte tak účinnost působení ultrazvukových vln.

DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Aplikační hlavice je díky speciálnímu tvarování určena pro ošetření pleti dvěma způsoby. Dvě možnosti, jakými ošetřit povrch pleti:

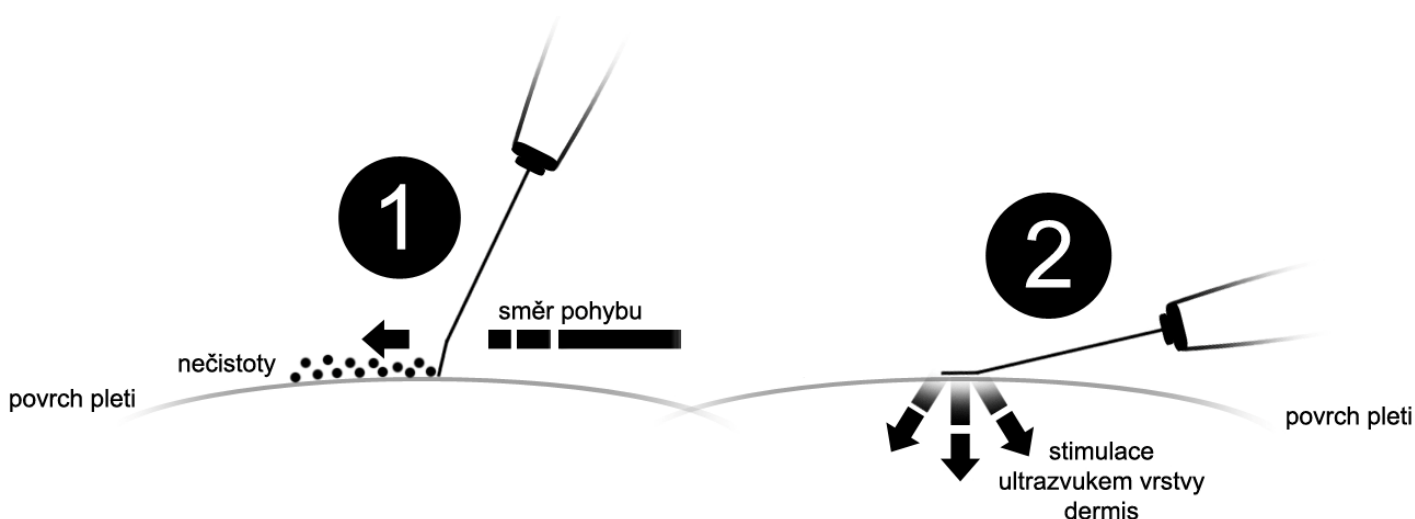

Obrázek (1) Špička aplikátoru je ideální zejména pro intenzivní čištění pleti. Pohyb aplikátoru v kombinaci s působením ultrazvukových vln zbavuje pokožku odumřelých buněk a reziduí.

Obrázek (2) Horní plocha aplikátoru je ideální pro stimulaci pleti ultrazvukovými vlnami s cíle podpořit lokální krevní oběh a stimulovat tvorbu kolagenních a elastických vláken (jemná ultrazvuková mikromasáž).

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

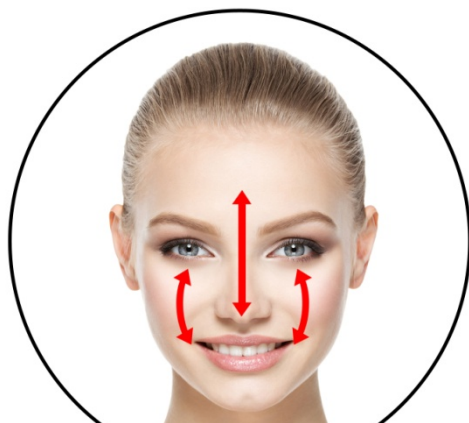

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí Li-ion baterii.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Průběh nabíjení signalizuje červené světlo.
4. Nabíjení může trvat až 3 hodiny v závislosti na kondici baterie.
5. Jakmile je baterie plně nabitá, červená baterie zhasne.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.