

# NÁVOD K OBSLUZE

Ultrazvuková špachtle **BeautyRelax BR-1640**

**PEEL&LIFT COMPACT**

***LIMITOVANÁ EDICE BEAUTYRELAX LEIOUNG WHITE***





## OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
INTENZIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI	7
PREVENCE VZNIKU AKNÉ A ČERNÝCH TEČEK	7
POUŽITÍ SONOGELU	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	10
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	11
NABÍJENÍ BATERIE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	12
CERTIFIKACE	12
DOVOZCE	12

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



## OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BR-1640.
- Napájecí USB kabel.
- Návod k obsluze.

## KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



## HLAVNÍ VÝHODY

- Hlubkové čištění pleti pomocí ultrazvukové technologie.
- Intenzivní odstranění odumřelých kožních buněk.
- Jemná ultrazvuková mikromasáž pro zlepšení lokálního krevního oběhu.
- Prevence proti tvorbě černých teček, pupínků a akné.
- Příznivé účinky na pleť.
- Technologie působení ultrazvuku.
- Frekvence ultrazvuku: 25kHz.
- Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli.
- Používání je naprosto bezpečné.
- Vhodné pro všechny typy pleti.
- Kompaktní malé provedení ideální do kabelky na cesty.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Provozní napětí: 5V.
- Výkon: 2W.
- Napájení: nabíjecí Li-ion baterie 500mAh.
- Nabíjení: USB kabelem (součástí balení).
- Rozměry: 10x5x26cm.
- Hmotnost: 100g.



## **PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE**

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax Peel&lift Compact je vysoce účinná kosmetická pomůcka pro dokonalé vyčištění pleti. Peel&lift Compact nabízí nejlepší poměr užitné hodnoty a ceny na trhu. Dopřejte své pleti péči jako ze salonu. Pouze dokonale čistá pleť může být zdravá a krásná!

## **INTENZIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI**

Aplikátor je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli. Na konci aplikátoru jsou generovány ultrazvukové vlny o frekvenci 25 tisíc pulzů za sekundu. Ultrazvuk působí na pokožku až do hloubky kožních pórů. Ultrazvukové vlny pracují v režimu souvislých nebo přerušovaných pulzů. Přístroje je výkonný, ale zároveň velmi šetrný k pokožce. Používání je naprosto bezpečné. Technologie čištění ultrazvukem byla doposud výbavou pouze špičkových estetických klinik. S přístrojem BeautyRelax Peel&lift Compact si kvalitní péči dopřejete v pohodlí domova. Pouze důkladně čistá pleť efektivně absorbuje účinné látky z kosmetických přípravků.


## **PREVENCE VZNIKU AKNÉ A ČERNÝCH TEČEK**

Používání přístroje je velice snadné a intuitivní. Správné používání si osvojíte během několika minut. Aplikátor má speciální tvar, který maximálně kopíruje záhyby obličeje. Před použitím je doporučeno pleť jemně navlhčit nebo použít tenkou vrstvu vodivého sonogelu, aby se aplikátor na pokožce dobře pohyboval. Již po prvním ošetření můžete vnímat, že je vaše pokožka mnohem hladší než předtím. Ultrazvukový kosmetický přístroj BeautyRelax Peel&lift Compact je primárně určen pro ošetření obličeje. Zaměřit se můžete také na oblast dekoltu. Čistá pleť je základem prevence před vznikem černých teček a akné. Peeling je velmi důležitý, aby mohla pokožka lépe dýchat. Pleť plná nečistot vytváří vhodné prostředí pro tvorbu pupínků a zánětů. Hladká a jemná pokožka je synonymem mládí. Pečujte o ni důkladně, abyste si uchovali tento mladistvý vzhled co nejdéle!

## **POUŽITÍ SONOGELU**

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). Aplikáční gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny tak mohou do pleti lépe pronikat. Použít můžete jakýkoliv kosmetický přípravek na vodní bázi (kosmetický krém, sérum, ...).

## POPIS PŘÍSTROJE

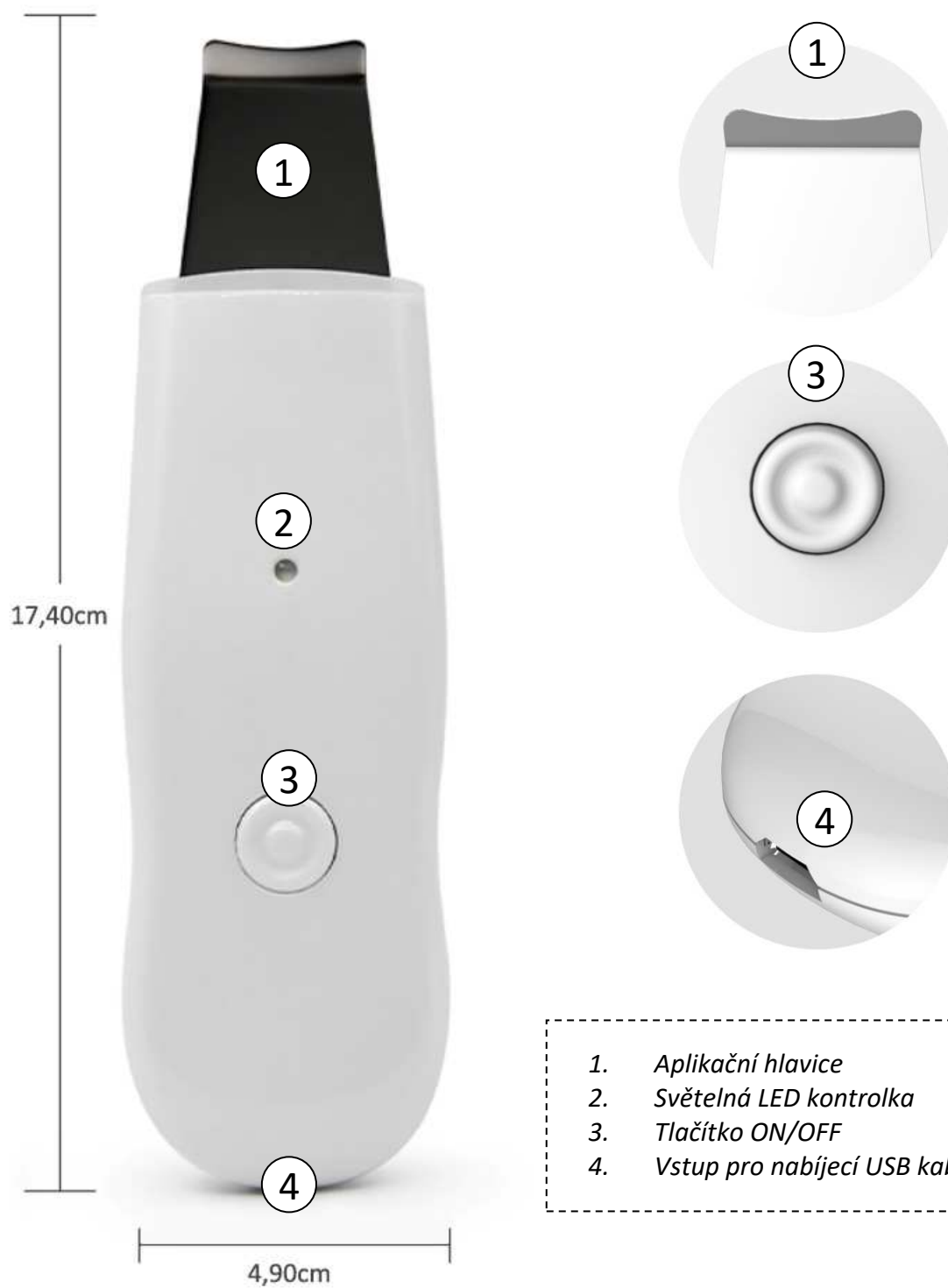



## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Zapněte přístroj pomocí dlouhého stisku tlačítka **ON/OFF (3)**. Činnost přístroje doprovází jemné „bzučení“ (ultrazvukové vlny jsou zapnuty) a světelná LED kontrolka se změní na zelenou barvu.
2. Aplikační hlavice má speciální tvar, díky kterému lze ošetřit pleť dvěma způsoby. Pro čištění pleti využijte úzký hrot aplikátoru. Pro vmasírování kosmetických krémů, sér a masek, větší plochu aplikátoru.
3. Pohybujete se aplikační hlavicí po pokožce pomalu a tlačte na ni jemnou silou (aby celá aplikační hlavice byla v kontaktu s pokožkou).
4. Pokud se činnost přístroje zastaví, dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF (3)** můžete celý proces znovu opakovat.
5. Činnost přístroje ukončíte stiskem tlačítka **ON/OFF (3)**.


**Poznámka 1:** Pro čištění pleti používejte pouze špičku přístroje (**Obr. 1**). Pro intenzivní mikromasáž pleti za účelem zapracování kosmetického přípravku používejte větší plochu aplikátoru (**Obr. 2**).

**Poznámka 2:** Na pokožku naneste tenkou vrstvičku sonogelu, kosmetického krému nebo séra. Zvýšíte tak účinnost působení ultrazvukových vln. Sonogel významně přispívá při vyčištění pleti. Poté pleť od sonogelu otřete, naneste popřípadě krém nebo sérum a vmasírujte pomocí větší plochy aplikátoru.



## DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Aplikační hlavice je díky speciálnímu tvarování určena pro ošetření pleti dvěma způsoby. Dvě možnosti, jakými ošetřit povrch pleti:

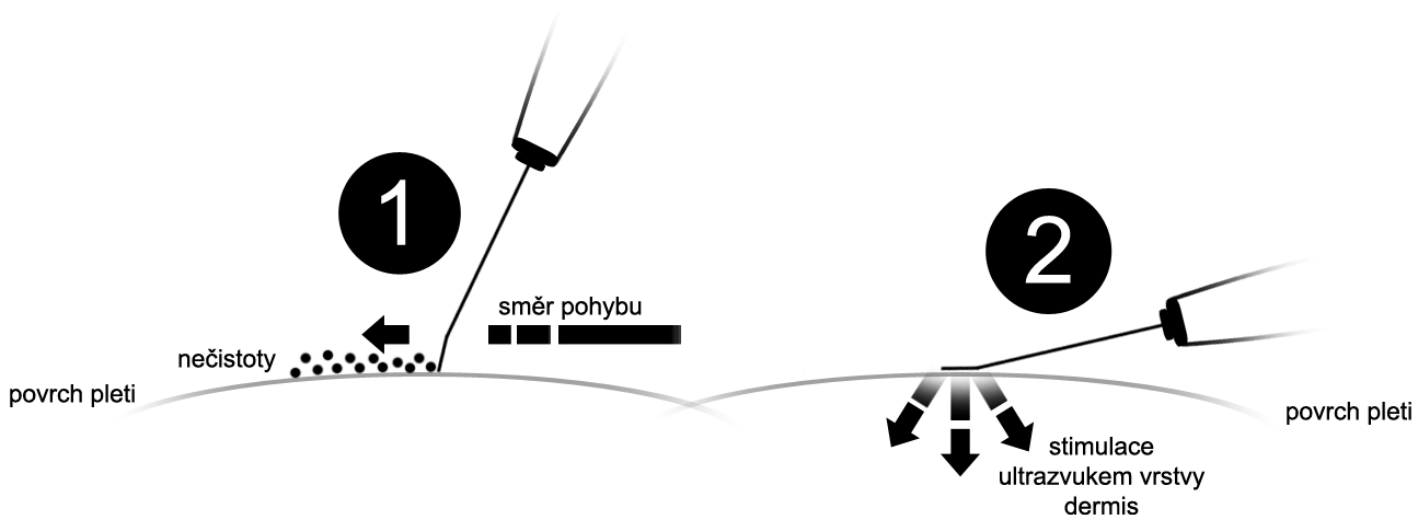


**Obrázek (1)** Špička aplikátoru je ideální zejména pro intenzivní čištění pleti. Pohyb aplikátoru v kombinaci s působením ultrazvukových vln zbavuje pokožku odumřelých buněk a reziduí.


**Obrázek (2)** Horní plocha aplikátoru je ideální pro stimulaci pleti ultrazvukovými vlnami s cíle podpořit lokální krevní oběh a stimulovat tvorbu kolagenních a elastických vláken (jemná ultrazvuková mikromasáž). Skvělé pro zapracování kosmetických přípravků a sér.



režim **čištění** pleti

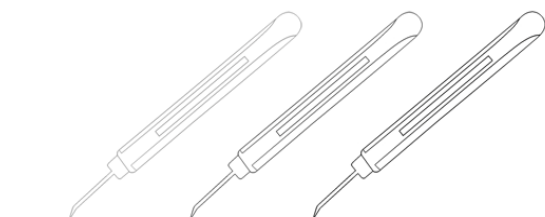

režim **výživy** pleti

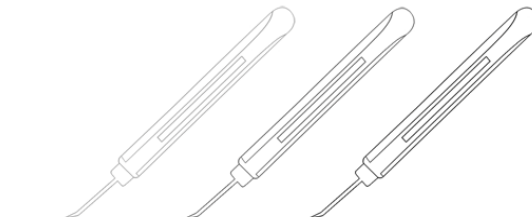

## METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

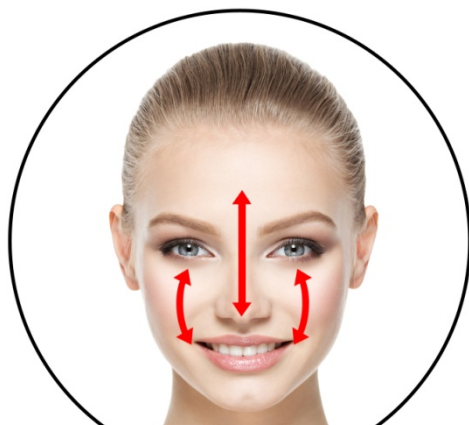

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

## NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii.

### **Postup nabíjení:**

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Pokud je baterie vybita, světelná signalizace svítí červeně.
3. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
4. Nabíjení trvá přibližně v rozsahu od 1-2 hodin. Během nabíjení blik světelná signalizace žlutou barvou.
5. Dokončení nabíjení baterie signalizuje světelná LED kontrolka zelenou barvou.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**