

NÁVOD K OBSLUZE

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax BR-2270

PEEL&LIFT SILVER



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
OBSAH BALENÍ	5
SPECIFIKACE	6
CO MŮŽETE OČEKÁVAT	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
INTENZIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI	7
PREVENCE VZNIKU AKNÉ A ČERNÝCH TEČEK	7
POUŽITÍ SONOGELU	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	9
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	9
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
SCHÉMA AUTOMATICKÝCH PROGRAMŮ	10
PODROBNÝ POPIS PROGRAMŮ	11
RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	12
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	13
NEJČASTEJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	14
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	16
NABÍJENÍ BATERIE	16
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	17
CERTIFIKACE	17
DOVOZCE	17
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	18

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nese distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteroskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence ultrazvuku: 24 tisíc pulzů za sekundu
- Výkon: 1,5W
- Provozní napětí: 3,7V
- Napájení: zabudovaná nabíjecí baterie
- Kapacita baterie: 300mAh
- Délka nabíjení: až 3 hodiny
- Provozní doba: až 2 hodiny
- Rozměry: 17x4x1,5cm
- Hmotnost: 85g

OBSAH BALENÍ

- Ultrazvuková špachtle BeautyRelax BR-2270 PEEL&LIFT SILVER.
- Napájecí USB kabel.
- Návod k obsluze.

SPECIFIKACE

- Tři režimy ošetření pleti: CLEANSING, MOISTURIZING, LIFTING
- Vysokofrekvenční ultrazvukové vlny
- Frekvence dosahuje až 24 tisíc pulzů za sekundu
- Galvanický proud (záporná ionizace)
- Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli
- Bezdrátové používání díky zabudované nabíjecí baterii
- Kompaktní, malý a lehký

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

- Příznivé účinky na pleť
- Hlubkové čištění pokožky, tzv. peeling
- Liftingový efekt jemných mimických vrásek a nerovností
- Příjemná masáž pokožky
- Odstraňuje z pokožky odumřelé buňky a kožní rezidua
- Pokožka je hladší a mladistvější
- Prevence proti tvorbě černých teček, pupínků a akné
- Používání je naprosto bezpečné
- Šetrný k pokožce



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax Peel&lift Silver je určena pro efektivní ošetření pleti. Při kontaktu s pletí působí ultrazvukové vlny přímo do hloubky kožních pórů. Díky optimalizované frekvenci ultrazvukových vln je ultrazvuková špachtle schopna pleť nejen důkladně vyčistit, ale pozitivně působí na jemné mimické vrásky a nerovnosti pleti. Přestože je přístroj v čištění výkonný, je velmi šetrný k pokožce a jeho používání je naprosto bezpečné a hlavně bezbolestné.

INTENZIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI

Aplikátor je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli. Na konci aplikátoru jsou generovány ultrazvukové vlny o frekvenci 24 tisíc pulzů za sekundu. Ultrazvuk působí na pokožku až do hloubky kožních pórů. Přístroj je výkonný, ale zároveň velmi šetrný k pokožce. Používání je naprosto bezpečné. Technologie čištění ultrazvukem byla doposud výbavou pouze špičkových estetických klinik. S přístrojem BeautyRelax BR-2270 PEEL&LIFT SILVER si kvalitní péči dopřejete v pohodlí domova. Pouze důkladně čistá pleť efektivně absorbuje účinné látky z kosmetických přípravků.

PREVENCE VZNIKU AKNÉ A ČERNÝCH TEČEK


Používání přístroje je velice snadné a intuitivní. Správné používání si osvojíte během několika minut. Aplikátor má speciální tvar, který maximálně kopíruje záhyby obličeje. Před použitím je doporučeno pleť jemně navlhčit nebo použít tenkou vrstvu vodivého sonogelu, aby se aplikátor na pokožce dobře pohyboval. Již po prvním ošetření můžete vnímat, že je vaše pokožka mnohem hladší než předtím. Ultrazvukový kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2270 PEEL&LIFT SILVER je primárně určen pro ošetření obličeje. Zaměřit se můžete také na oblast dekoltu. Čistá pleť je základem prevence před vznikem černých teček a akné. Peeling je velmi důležitý, aby mohla pokožka lépe dýchat. Pleť plná nečistot vytváří vhodné prostředí pro tvorbu pupínků a zánětů. Hladká a jemná pokožka je synonymem mládí. Pečujte o ni důkladně, abyste si uchovali tento mladistvý vzhled co nejdéle!

POUŽITÍ SONOGELU

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). Aplikáční gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny tak mohou do pleti lépe pronikat. Použít můžete jakýkoliv kosmetický přípravek na vodní bázi (kosmetický krém, sérum, ...).



POPIS PŘÍSTROJE

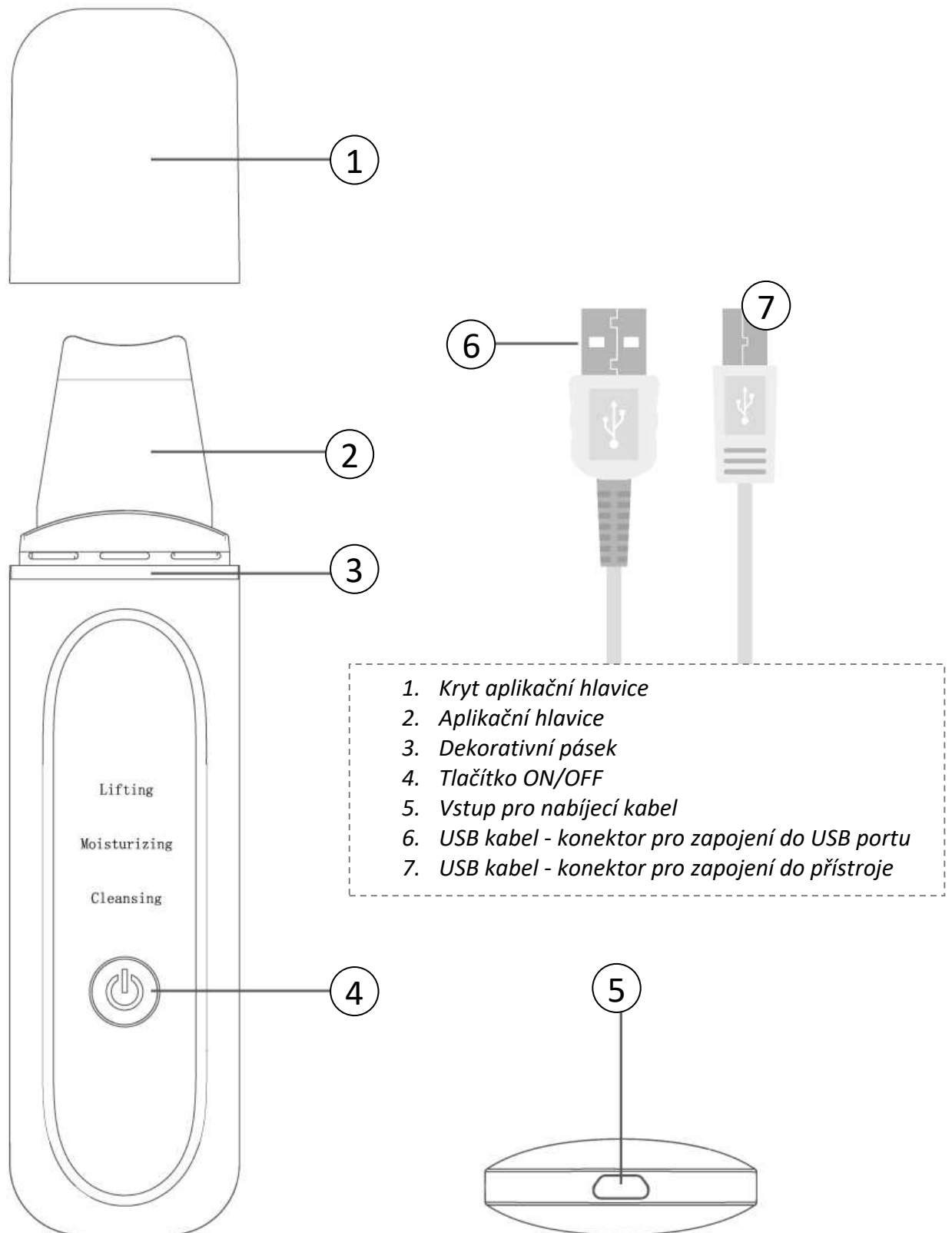

NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Než přistoupíte k samotnému ošetření pleti přístrojem, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Odlíčená pleť není to stejné, jako hloubkově vyčištěná pleť. Před prvním použitím přístroje si vyzkoušejte jeho aplikaci např. na předloktí. Vyčkejte několik minut, zda při použití ultrazvuku nebude pokožka negativně reagovat.



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM




- Příklad nepoužívejte na silně zjizvenou pokožku.
- Příklad nepoužívejte, pokud trpíte ekzémy nebo jiným kožním onemocněním.
- Pokud máte citlivou pleť, používejte přístroj se zvýšenou opatrností.
- Netlačte aplikační hlavici příliš velkou silou na pleť.
- Po ošetření může být pokožka mírně začervenalá. Jedná se o dočasný efekt, který by měl zmizet během několika desítek minut.
- Po ošetření obličeje můžete po zklidnění pleti téměř ihned aplikovat make-up podle potřeby.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka **ON/OFF**. Příklad po zapnutí aktivuje režim **CLEANSING**.
2. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** přepnete přístroj do režimu **MOISTURIZING**.
3. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** přepnete přístroj do režimu **LIFTING**.
4. Činnost přístroje ukončíte dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.

SCHÉMA AUTOMATICKÝCH PROGRAMŮ

Kosmetický přístroj BeautyRelax nabízí ošetření pleti pomocí 3 automatických programů. Každý program má specifický účinek.

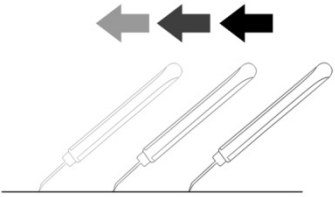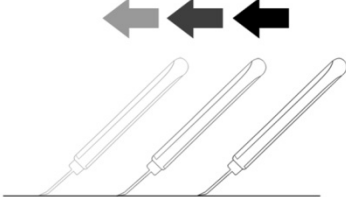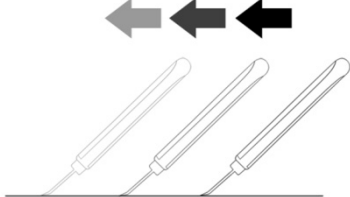
POŘADÍ	1	2	3
PROGRAM	CLEANSING	MOISTURIZING	LIFTING
TECHNOLOGIE	ultrazvukové vlny	ultrazvukové vlny, záporná ionizace	ultrazvukové vlny
SPECIFIKACE	čištění pleti	zapracování kosmetických přípravků do pleti	ultrazvuková mikromasáž pleti
ZPŮSOB OŠETŘENÍ PLETI			
DOPORUČENÝ PŘÍPRAVEK	sonogel	kosmetický krém, sérum	sonogel
DOPORUČENÁ DÉLKA OŠETŘENÍ	5 minut	5 minut	5 minut
DOPORUČENÁ FREKVENCE OŠETŘENÍ	2x až 3x týdně	2x až 3x týdně	2x až 3x týdně

PODROBNÝ POPIS PROGRAMŮ

Kosmetický přístroj BeautyRelax nabízí pro ošetření pleti **3 automatické programy**. Následující pasáž vám pomůže objasnit konkrétní význam jednotlivých programů. Jaké programy jsou pro vás nevhodnější při cestě za krásnou a zdravou pleť. Rozhodně nemusíte použít všechny režimy přesně po sobě a najednou. Pojdme si podrobně vysvětlit vlastnosti jednotlivých programů:


1. CLEANSING

Program je určen pro intenzivní čištění pleti. Aplikátor generuje ultrazvukové vlny. Doporučujeme nanést na pleť tenkou vrstvičku sonogelu. K ošetření pleti používejte **hrot aplikátoru**. Pomocí táhlých pohybů postupně stírejte sonogel z povrchu pleti. Po každém setření gelu z pleti doporučujeme gel, který ulpí na aplikátoru, odstranit pomocí hadříčky. Setřený sonogel obsahuje nežádoucí rezidua a odumřelé kožní buňky.

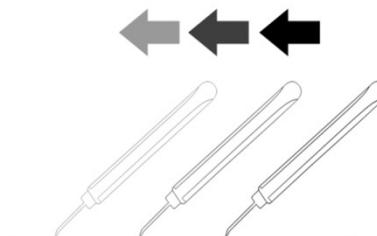


2. MOISTURIZING

Program je určen pro zapracování kosmetických přípravků. Aplikáční hlavice generuje ultrazvukové vlny v kombinaci se zápornou ionizací. Galvanický proud penetruje výživové látky z kosmetických sér hluboko do pokožky. Je zabráněno vyschnutí na povrchu. Absolutní turboefekt pro vaše kosmetické přípravky! K ošetření pleti používejte větší plochu aplikátoru. Před použitím programu **MOISTURIZING** odstraňte pomocí kosmetického hadříku nebo tampónku zbytky sonogelu v případě, kdy jste v předchozím kroku ošetření pleti gel využily.

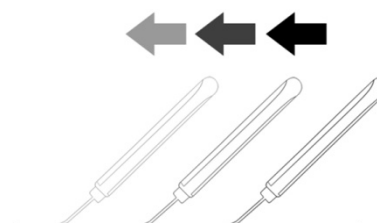


3. LIFTING

Program je určen pro intenzivní mikromasáž pleti. Aplikátor generuje ultrazvukové vlny. Doporučujeme nanést na pleť tenkou vrstvičku sonogelu. K ošetření pleti použijte větší plochu aplikátoru. Ultrazvukové vlny aktivně podporuje lokální krevní oběh. Sonogel nemusíte z aplikátoru setřít po každém pohybu. Naopak využijte přítomnost gelu na pleť. Po skončení používání programu **LIFTING** setřete veškeré zbytky gelu z pleti (pokud již neplánujete používat další program, při kterém je doporučeno použít sonogel).

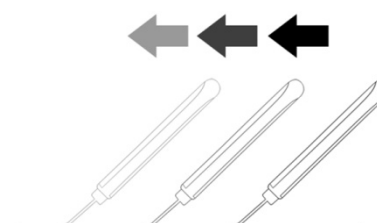

RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Aplikační hlavice je díky speciálnímu tvarování určena pro ošetření pleti dvěma základními způsoby.

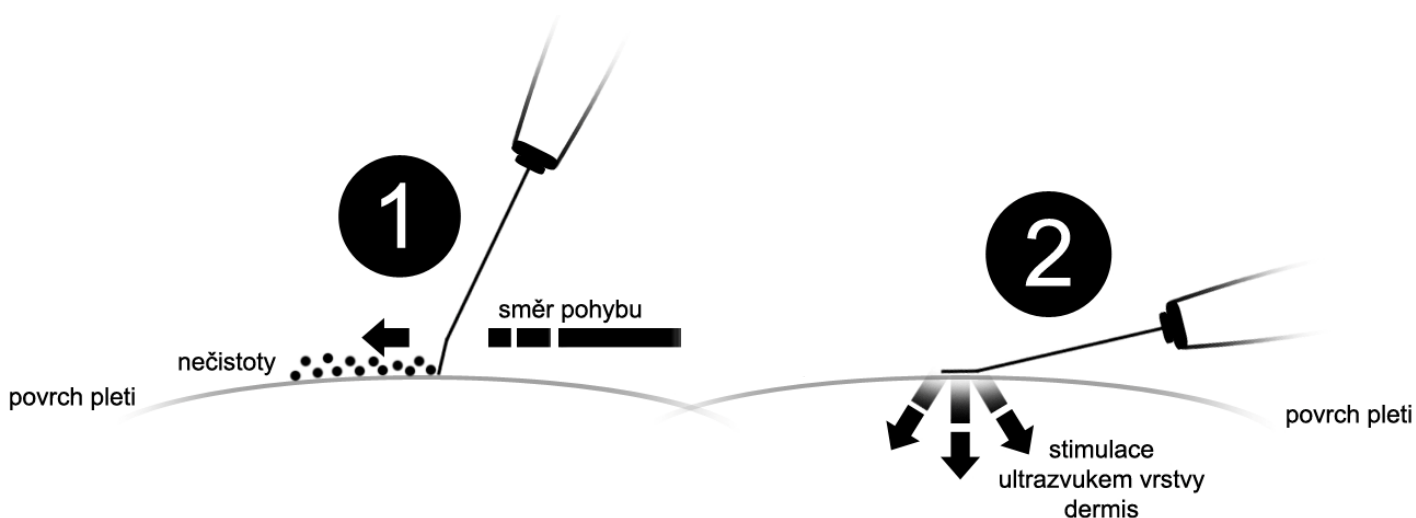

Obrázek (1)

Špička aplikátoru je ideální zejména pro intenzivní čištění pleti. Pohyb aplikátoru v kombinaci s působením ultrazvukových vln zbavuje pokožku odumřelých buněk a reziduí.

Programy: **CLEANSING**

Obrázek (2)

Horní plocha aplikátoru je ideální pro stimulaci pleti ultrazvukovými vlnami s cílem podpořit lokální krevní oběh a stimulovat tvorbu kolagenních a elastických vláken (jemná ultrazvuková mikromasáž). Skvělé pro zapracování kosmetických přípravků pomocí ultrazvukových vln a záporné ionizace.

Programy: **MOISTURIZING, LIFTING**



METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

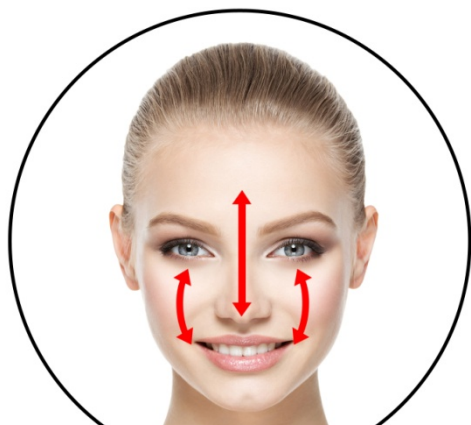

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NEJČASTEJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč je před použitím přístroje doporučeno odstranit make-up pomocí kosmetického tampónku? Vždyť přeci je přístroj jako takový určen pro čištění pleti?

Před použitím přístroje je vhodné odstranit make-up běžným způsobem, jak jste zvyklá. Hlavním smyslem je odstranit nečistoty pleti tzv. „nahrubo“. Pomocí aplikátoru kosmetického přístroje se tak můžete zaměřit na skutečně hloubkové a důkladné vyčištění pleti. Na nečistoty, které nejsou pouhým okem vidět.



Mohu přístroj použít na pleť „na sucho“ bez použití jakéhokoliv přípravku?

Ultrazvukové vlny patří do kategorie technologií neinvazivního kosmetického ošetření. Pro tento typ ošetření je lidská pleť příliš suchá. Pokožku je nezbytné dostatečně hydratovat, aby se na ni mohly ultrazvukové vlny lépe navázat. Použitím na suchou pleť je účinek ultrazvuku minimální. V krajním případě můžete pro hydrataci pleti použít kojeneckou nebo destilovanou vodu. V praxi to však není moc praktické. Voda se neudrží na místě, které chcete ošetřit přístrojem. Voda během použití přístroje navíc rychle vysychá. Používejte přístroj, jako skutečný profesionál! K přístroji doporučujeme zakoupit v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb sonogel. Je levný a pro přístrojové ošetření nabízí skvělé vlastnosti. Postačí nanést tenkou vrstvičku. Gel zůstane přesně tam, kde potřebujete. Nestéká a rychle z pleti nevyschne. Mazlavá konzistence umožní hladký pohyb aplikátoru po pleti. Takto můžete snadno provést celý proces čištění pleti, kdy aplikátorem stíráte z pleti nečistoty společně s gelem. Po skončení použití přístroje otřete z pleti zbytky gelu.

Sonogel, kosmetický krém, sérum.... Jak tedy kosmetické přípravky správně používat nebo kombinovat v jednotlivých programech? Který je nejlepší?

Je třeba vycházet z předpokladu, že při působení technologie ultrazvukových vln je vždy nezbytné zapojit minimálně sonogel. Pokud aplikační hlavice generuje kromě ultrazvukových vln také galvanický proud se záporným nábojem, můžete využít k ošetření pleti v kombinaci s kosmetickým přípravkem. Účinné látky, které jsou v kosmetickém přípravku obsaženy, jsou lépe penetrovány hluboko do pleti. Pro stimulaci pleti ultrazvukem je tedy absolutní minimum použít alespoň sonogel. Základní levný sonogel neobsahuje žádné účinné látky, jako např. aloe vera, kyselinu hyaluronovou popř. další složky. V režimu čištění pleti vytvoří vhodné pojivo mezi aplikátorem a pletí. V režimu masírování pleti zakřivenou plochou aplikátoru můžete efektivně stimulovat jemné vlásčnicové vrásky působením ultrazvuku. Na trhu však existují dražší varianty sonogelu, které obsahují další přísady pro blahodárnou pleťovou péči. Záleží na vás, kolik chcete do těchto přípravků investovat. Ať se již rozhodnete pro kterýkoliv, určitě sledujte podíl těchto účinných látek. Pokud takový přípravek obsahuje pouze stopové množství, pro pleť de facto nemá žádný účinek. Můžete použít váš oblíbený kosmetický krém. V tomto případě nastavte na přístroji program **MOISTURIZING**. Ultrazvukové vlny ruku v ruce se záporným galvanickým proudem napomohou krém lépe do pleti zapracovat.

Z hlediska použití kosmetických přípravků bychom rádi zmínili důležitý aspekt. Kosmetický přístroj s neinvazivní technologií ošetření pleti si nejvíce rozumí se sonogelem popřípadě sonogelem s obsahem dalších příměsí. Pokud použijete jakýkoliv jiný krém/sérum, uživatelům s velmi citlivou pletí může kombinace ultrazvuku + galvanického proudu + krému/séra vyvolat alergickou reakci v podobě lokálního zarudnutí pleti. Mohou to způsobit další látky, které tyto přípravky obsahují (barviva, aroma, apod.). Před ošetřením obličeje doporučujeme nanést přípravek na malý kousek

pleti např. na ruku s použitím přístroje. Pokud po několika minutách nenastane na pleti výrazné zarudnutí, můžete pokračovat s ošetřením obličeje.

Jak často je doporučeno přístroj používat?

Četnost použití by měla vycházet z kvality prostředí, ve kterém se nejvíce pohybujete. Pokud trávíte hodně času v prašném prostředí, intervaly mezi čištěním pleti zkraťte. Neméně důležitý aspekt hraje typ vaší pleti. Pokud máte pleť, která je mastnější a má sklony k častějšímu ucpávání kožních pórů, opět zkraťte intervaly použití. Pokožka by měla být na dotyk hladká a jemná. Pokud ztratí tuto vlastnost, je správný čas na použití přístroje. Doporučení 2x až 3x týdně není směrodatné a záleží na více faktorech.

Pro jaké partie je přístroj primárně určen?

Obličej, krk a dekolt.

Jakým způsobem vhodně kombinovat jednotlivé automatické programy (CLEANSING, MOISTURIZING, LIFTING)?

Jak již bylo uvedeno výše, není třeba všechny programy skombinovat najednou. Frekvence čištění pleti (CLEANSING) nemusí korespondovat s četností použití vašeho kosmetického přípravku. Každá pleť má individuální potřeby. Z počátku vyzkoušejte všechny možné kombinace. Zjistíte, jak vaše pleť na jednotlivé možnosti použití přístroje reaguje. Sami si můžete vytvořit vlastní plán péče o pleť.

Tento návod k obsluze slouží pouze jako vodítko, jak s přístrojem pracovat. Vytváří však zároveň prostor pro vaši kreativitu vytvořit si vlastní plán použití přístroje, který bude maximálně vyhovovat vaší pleti. Nebojte se trochu experimentovat. Zapojit fantazii! Technologie přístroje jsou pro vaši pleť bezpečné a žádným způsobem si nemůžete ublížit. Pokud si nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás. Tým BeautyRelax



ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nejde zapnout.	Přístroj je zapojen k nabíjecímu USB kabelu.	Před použitím přístroje odpojte přístroj od napájecího kabelu.
	Baterie je vybitá.	Baterii přístroje před použitím dostatečně nabijte.
Problém s nabíjením.	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k USB portu počítače nebo notebooku.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu do USB portu počítače nebo notebooku.
	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k přístroji.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu od přístroje.
	Nabíjecí kabel je poškozen.	Vyměňte nabíjecí kabel za nový.
Působení ultrazvukových vln na pleti vůbec necítím v podobě jemného brnění	Sonogel je na pleti v příliš malém množství nebo vůbec.	Aplikujte na plet' větší množství sonogelu pro zvýšení vodivosti pleti.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Pokud přístroj nejde zapnout, baterii nabijte.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Jeden konec USB kabelu připojte do vstupu ve spodní straně přístroje.
3. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
4. Průběh nabíjení doprovází blikající světelná signalizace.
5. Jakmile je baterie nabita, blikání ustane.
6. Nabíjení může trvat až 1,5 až 2 hodiny v závislosti na kondici baterie.

Upozornění: Nabíjecí kabel nepřipojujte k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax PEEL&LIFT SILVER

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2270**

EAN: **8594166119031**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1: 2017 EN 55014-2: 2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 9.6.2020