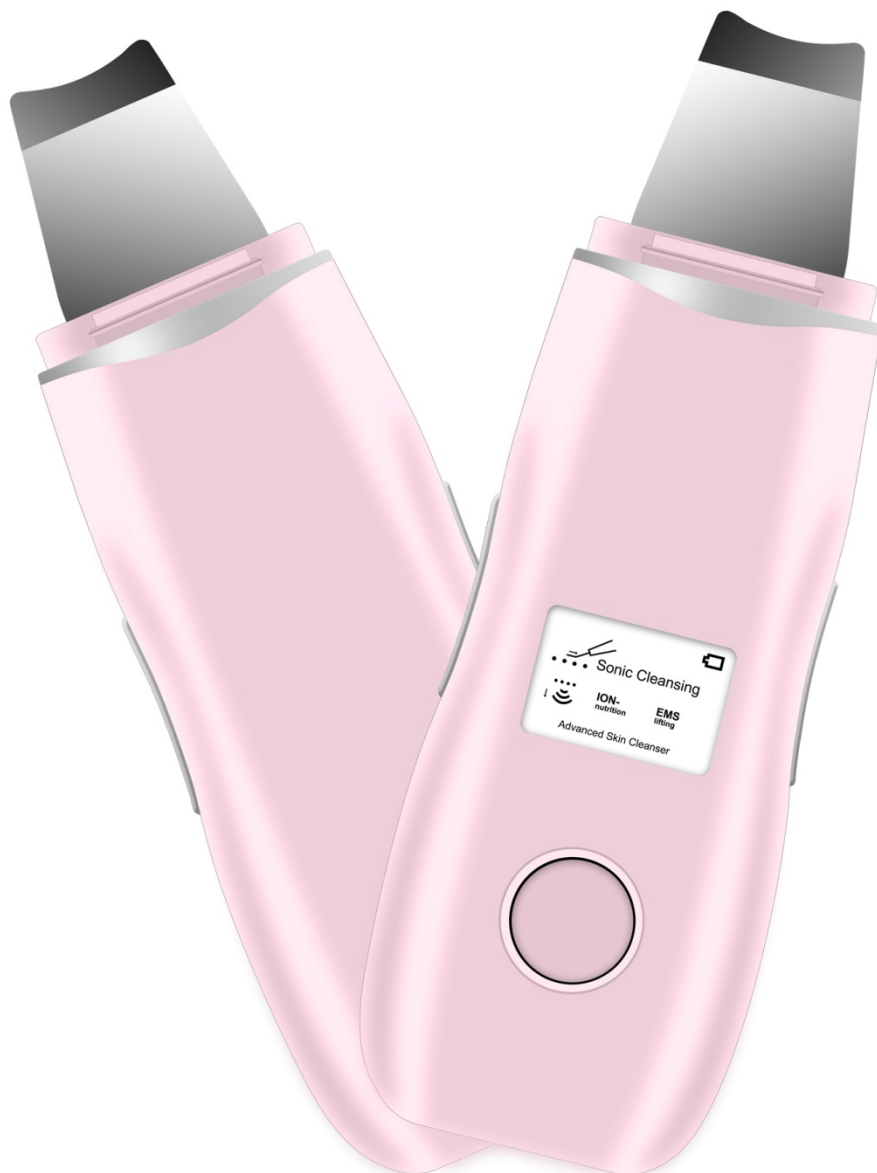


NÁVOD K OBSLUZE

Ultrazvuková špachtle
BeautyRelax BR-2290P

PEEL&LIFT EMS



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
OBSAH BALENÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
TECHNOLOGIE	7
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	7
EMS	7
GALVANICKÝ PROUD	7
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	8
INTENZIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI	8
PREVENCE VZNIKU AKNÉ A ČERNÝCH TEČEK	8
POUŽITÍ SONOGELU	8
POPIS PŘÍSTROJE	9
NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	10
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	10
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	10
DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	11
SCHÉMA AUTOMATICKÝCH PROGRAMŮ	12
PODROBNÝ POPIS PROGRAMŮ	13
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	14
DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST	15
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	16
NEJČASTEJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	17
NABÍJENÍ BATERIE	19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	19
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	19
CERTIFIKACE	19
DOVOZCE	19

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nese distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteroskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



OBSAH BALENÍ

- Ultrazvuková špachtle BeautyRelax PEEL&LIFT EMS.
- Napájecí USB kabel.
- Návod k obsluze.

HLAVNÍ VÝHODY

- Unikátní kombinace působení ultrazvuku a EMS pulzů
- Hlubkové čištění pokožky + zvýšení pružnosti pleti
- Odstraňuje z pokožky odumřelé buňky a kožní rezidua
- Postupné vyhlazení jemných mimických vrásek
- Prevence proti tvorbě černých teček, pupínků a akné
- Příjemná masáž pokožky
- Příznivé účinky na pleť
- Technologie působení ultrazvuku
- Aplikátor vyroben z ušlechtilé nerezové oceli
- Používání je naprosto bezpečné
- Kompaktní, malý a lehký
- Šetrný k pokožce

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence ultrazvukových vln: 24KHz
- Provozní napětí: 5V
- Materiál aplikátoru: nerez ocel
- Napájení: nabíjecí Li-ion baterie 500mAh
- Nabíjení: USB kabelem (součástí balení)
- Rozměry: 18x4,2x2,5cm
- Hmotnost: 190g



TECHNOLOGIE

Aplikační hlavice je speciálně navržena, aby byla schopna poskytnout multifunkční ošetření pleti. Poskytuje až 3 různé technologie. Díky tomu patří mezi špičku v kategorii kosmetických přístrojů pro čištění pleti.

ULTRAZVUKOVÉ VLNY

Ultrazvukové vlny jsou schopné působit na pokožku hloubkově do všech pórů. Kromě toho je pokožka příjemně masírována, což přispívá ke zlepšení krevního oběhu. Pleť je hladká, jemná a působí mladistvým vzhledem. Hloubkové čištění pleti působí významně jako prevence proti vzniku akné!



EMS

Náš obličej je protkaný strukturou svalů. Obličejové svaly jsou zodpovědné za výraz a mimiku. Působením času svaly ztrácí přirozenou pružnost a elasticitu. Pleť působí fádním a unaveným dojmem. Aplikační hlavice BeautyRelax přenáší při kontaktu s pletí jemné elektrické mikropulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily účinné, ale zároveň bezbolestné ošetření obličejové. Dochází ke kontrakci svalů a tím jejich posílení. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. V oblasti obličejové docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.



GALVANICKÝ PROUD

Kosmetický přístroj generuje proud ve specifickém napětí. Řídící jednotka kosmetického přístroje následně umožňuje úpravu galvanického proudu takovým způsobem, aby docházelo ke kladnému či zápornému náboji. Kladná a záporná ionizace má odlišné účinky na pleť.



(+) Kladná ionizace - důkladné vyčištění pleti

Kladná ionizace vytáhne záporně nabitě nečistoty jako magnet. Zažijete skutečně čistou pleť jako nikdy předtím. Pouze čistá pleť je ta zdravá!

(-) Záporná ionizace - hloubkové vyživení pleti

Galvanický proud penetruje výživové látky z kosmetických sér hluboko do pokožky. Je zabráněno vyschnutí na povrchu. Absolutní turboefekt pro vaše kosmetické přípravky!

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax Peel&lift EMS je určena pro efektivní ošetření pleti. Při kontaktu s pletí působí ultrazvukové vlny přímo do hloubky kožních pórů. Díky optimalizované frekvenci ultrazvukových vln je ultrazvuková špachtle schopna pleť nejen důkladně vyčistit, ale pozitivně působí na jemné mimické vrásky a nerovnosti pleti. Aktivní posílení obličejových svalů pomocí technologie EMS. Používání je naprosto bezpečné a hlavně bezbolestné.

INTENZIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI

Aplikátor je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli. Na konci aplikátoru jsou generovány ultrazvukové vlny o frekvenci 24 tisíc pulzů za sekundu. Ultrazvuk působí na pokožku až do hloubky kožních pórů. Přístroj je výkonný, ale zároveň velmi šetrný k pokožce. Používání je naprosto bezpečné. Technologie čištění ultrazvukem byla doposud výbavou pouze špičkových estetických klinik. S přístrojem BeautyRelax si kvalitní péči dopřejete v pohodlí domova. Pouze důkladně čistá pleť efektivně absorbuje účinné látky z kosmetických přípravků.

PREVENCE VZNIKU AKNÉ A ČERNÝCH TEČEK

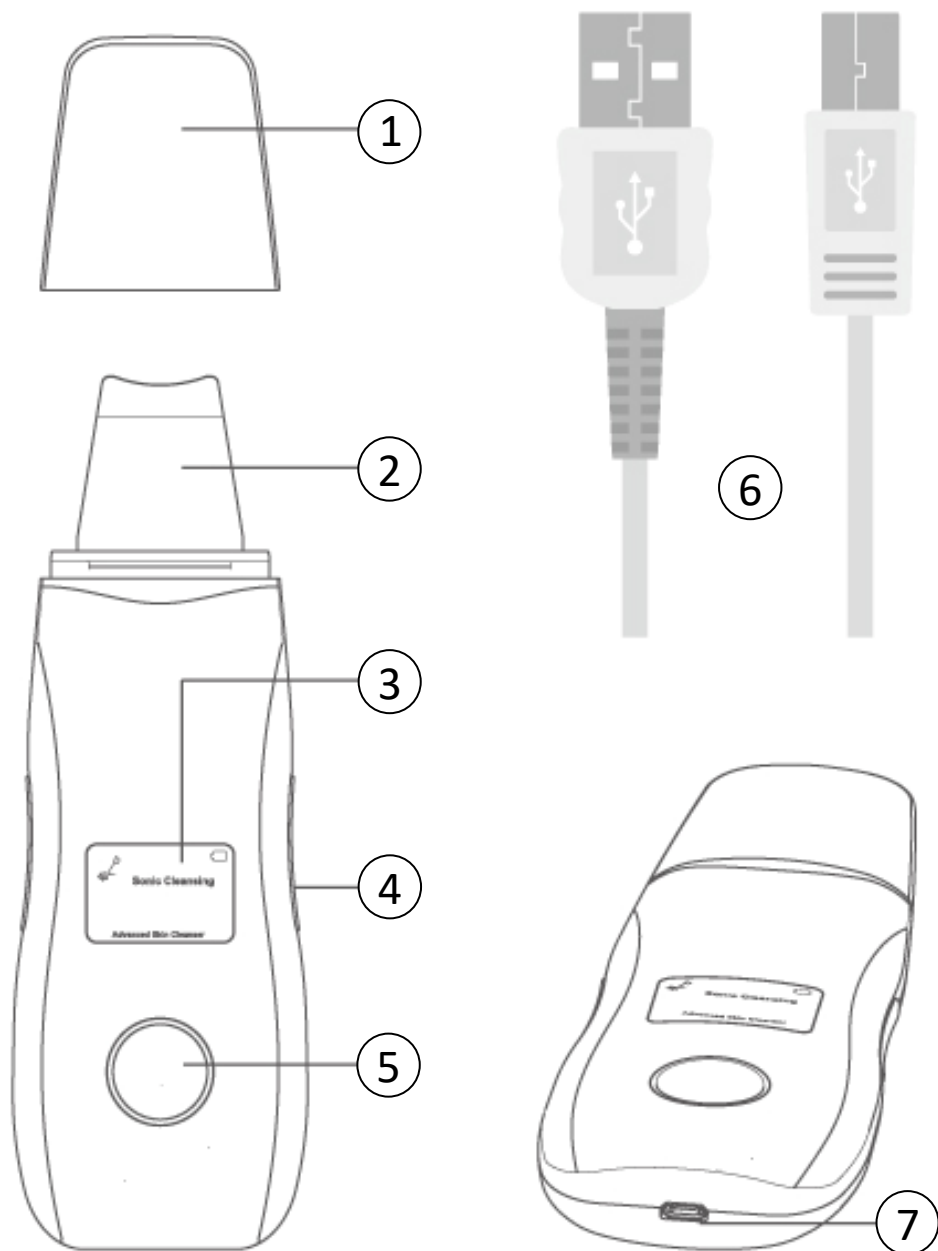
Používání přístroje je velice snadné a intuitivní. Správné používání si osvojíte během několika minut. Aplikátor má speciální tvar, který maximálně kopíruje záhyby obličeje. Před použitím je doporučeno pleť jemně navlhčit nebo použít tenkou vrstvu vodivého sonogelu, aby se aplikátor na pokožce dobře pohyboval. Již po prvním ošetření můžete vnímat, že je vaše pokožka mnohem hladší než předtím. Ultrazvukový kosmetický přístroj BeautyRelax je primárně určen pro ošetření obličeje. Zaměřit se můžete také na oblast dekoltu. Čistá pleť je základem prevence před vznikem černých teček a akné. Peeling je velmi důležitý, aby mohla pokožka lépe dýchat. Pleť plná nečistot vytváří vhodné prostředí pro tvorbu pupínků a zánětů. Hladká a jemná pokožka je synonymem mládí. Pečujte o ni důkladně, abyste si uchovali tento mladistvý vzhled co nejdéle!

POUŽITÍ SONOGELU

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). Aplikací gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny a EMS pulzy tak mohou do pleti lépe pronikat. Použít můžete jakýkoliv kosmetický přípravek na vodní bázi (kosmetický krém, sérum, ...).



POPIS PŘÍSTROJE



1. Kryt aplikační hlavice
2. Aplikační hlavice
3. Displej
4. Vodičí pásy na bočních stranách
5. Tlačítko ON/OFF
6. Nabíjecí USB kabel
7. Vstup pro nabíjecí USB kabel

NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Než přistoupíte k samotnému ošetření pleti přístrojem, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Odličená pleť není to stejné, jako hloubkově vyčištěná pleť. Před prvním použitím přístroje si vyzkoušejte jeho aplikaci např. na předloktí. Vyčkejte několik minut, zda při použití ultrazvuku nebo EMS elektrických pulzů nebude pokožka negativně reagovat.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

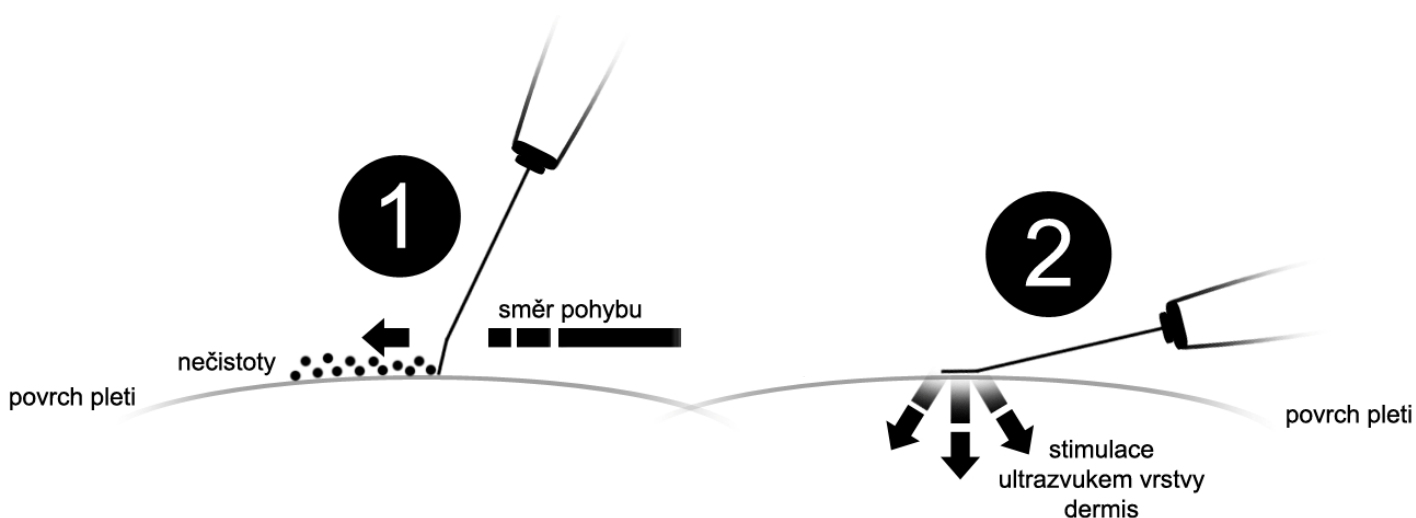
- Příklad nepoužívejte na silně zjizvenou pokožku.
- Příklad nepoužívejte, pokud trpíte ekzémy nebo jiným kožním onemocněním.
- Pokud máte citlivou pleť, používejte přístroj se zvýšenou opatrností.
- Netlačte aplikační hlavici příliš velkou silou na pleť.
- Po ošetření může být pokožka mírně začervenalá. Jedná se o dočasný efekt, který by měl zmizet během několika desítek minut.
- Po ošetření obličeje můžete po zklidnění pleti téměř ihned aplikovat make-up podle potřeby.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE


1. Zapněte přístroj dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
2. Po zapnutí přístroje je ihned aktivní program 1.
3. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete program 2.
4. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete program 3.
5. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete program 4.
6. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete program 5.
7. Příklad můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
8. Rychlý přehled jednotlivých programů naleznete v pasáži:
SCHÉMA AUTOMATICKÝCH PROGRAMŮ.
9. Význam jednotlivých programů je uveden v pasáži:
PODROBNÝ POPIS PROGRAMŮ.
10. Postup pohybu aplikační hlavice po pleti naleznete v pasáži:
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU.

DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Aplikační hlavice je díky speciálnímu tvarování určena pro ošetření pleti dvěma základními způsoby.



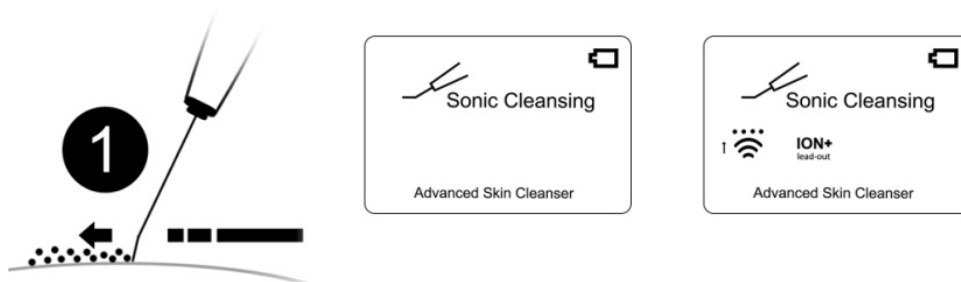Obrázek (1) Špička aplikátoru je ideální zejména pro intenzivní čištění pleti. Pohyb aplikátoru v kombinaci s působením ultrazvukových vln zbavuje pokožku odumřelých buněk a reziduí. Programy: 1 + 2.



Obrázek (2) Horní plocha aplikátoru je ideální pro stimulaci pleti ultrazvukovými vlnami nebo EMS pulzy s cílem podpořit lokální krevní oběh a stimulovat tvorbu kolagenních a elastických vláken (jemná ultrazvuková mikromasáž).

Programy: 3 + 4 + 5.

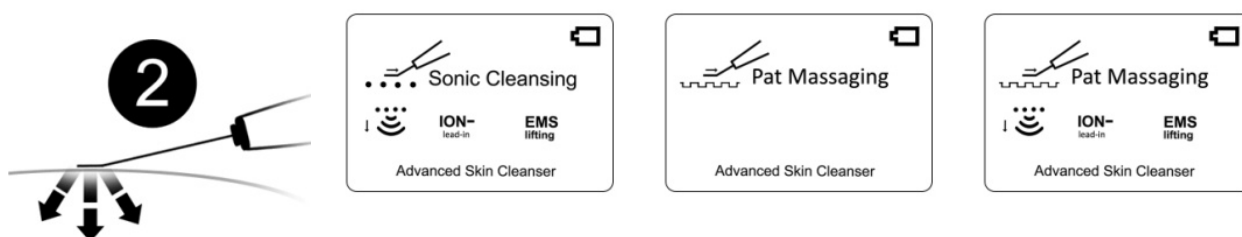





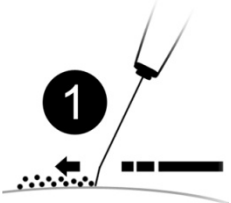
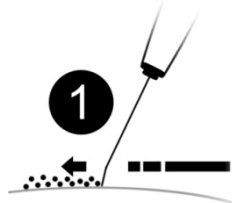
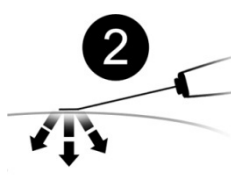
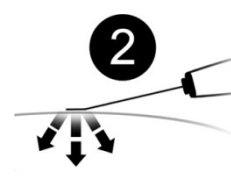
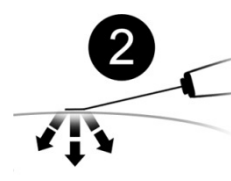


SCHÉMA AUTOMATICKÝCH PROGRAMŮ

Kosmetický přístroj BeautyRelax nabízí ošetření pleti pomocí 5 automatických programů. Každý program má specifický účinek.

PROGRAM	1	2	3	4	5
DISPLEJ					
TECHNOLOGIE	ultrazvukové vlny	ultrazvukové vlny, galvanický proud (kladný náboj)	ultrazvukové vlny, galvanický proud (záporný náboj), EMS pulzy	ultrazvukové vlny	ultrazvukové vlny, galvanický proud (kladný náboj)
SPECIFIKACE	čištění pleti	čištění pleti s galvanickým proudem	stimulace pleti pomocí ultrazvuku a EMS elektrických pulzů	masáž pleti ultrazvukovými vlnami	stimulace pleti pomocí ultrazvuku, galvanického proudu (záporný náboj) a EMS elektrických pulzů
ZPŮSOB OŠETŘENÍ PLETI					
DOPORUČENÝ PŘÍPRAVEK	sonogel	sonogel	sonogel nebo kosmetický krém nebo sérum	sonogel	sonogel nebo kosmetický krém nebo sérum
DOPORUČENÁ DÉLKA OŠETŘENÍ	2-5 minut	2-5 minut	2-5 minut	2-5 minut	2-5 minut
DOPORUČENÁ FREKVENCE OŠETŘENÍ	2x až 3x týdně	2x až 3x týdně	2x až 3x týdně	2x až 3x týdně	2x až 3x týdně

PODROBNÝ POPIS PROGRAMŮ

Kosmetický přístroj BeautyRelax nabízí pro ošetření pleti **5 různých programů**. Následující pasáž vám pomůže objasnit konkrétní význam jednotlivých programů. Jaké programy jsou pro vás nevhodnější při cestě za krásnou a zdravou pletí. Rozhodně nemusíte použít všechny režimy přesně po sobě a najednou. Pojdme si podrobně vysvětlit vlastnosti jednotlivých programů:

PROGRAM 1 - ultrazvukové vlny

Program je určen pro intenzivní čištění pleti. Aplikátor generuje ultrazvukové vlny. Doporučujeme nanést na pleť tenkou vrstvičku sonogelu. K ošetření pleti používejte hrot aplikátoru. Pomocí táhlých pohybů postupně stírejte sonogel z povrchu pleti. Po každém setření gelu z pleti doporučujeme gel, který ulpí na aplikátoru, odstranit pomocí hadříčky. Setřený sonogel obsahuje nežádoucí rezidua a odumřelé kožní buňky.




PROGRAM 2 - ultrazvukové vlny, galvanický proud (kladný náboj)

Program je určen pro intenzivní čištění pleti. Aplikátor generuje ultrazvukové vlny a navíc galvanický proud s kladným nábojem. Program 1 a 2 jsou velmi srovnatelné. Je vědecky dokázáno, že přítomnost působení galvanického proudu s kladným nábojem zlepšuje účinek čištění pleti. Rozdíl působení programu 1 a 2 je však pouhým pohledem a na dotyk srovnatelný. Doporučujeme nanést na pleť tenkou vrstvičku sonogelu. K ošetření pleti používejte hrot aplikátoru. Pomocí táhlých pohybů postupně stírejte sonogel z povrchu pleti. Po každém setření gelu z pleti doporučujeme gel, který ulpí na aplikátoru, odstranit pomocí hadříčky. Setřený sonogel obsahuje nežádoucí rezidua a odumřelé kožní buňky.




PROGRAM 3 - ultrazvukové vlny, galvanický proud (záporný náboj), EMS pulzy

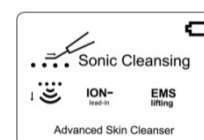Program je určen pro intenzivní stimulaci pleti pomocí ultrazvuku a elektrických pulzů EMS. Aplikační hlavice BeautyRelax přenáší při kontaktu s pletí jemné elektrické mikropulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily účinné, ale zároveň bezbolestné ošetření obličeje. Dochází ke kontrakci svalů a tím jejich posílení. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů. Po skončení používání programu 3 setřete veškeré zbytky gelu z pleti (pokud již neplánujete používat další program, při kterém je doporučeno použít sonogel). Namísto sonogelu můžete použít váš oblíbený kosmetický přípravek. Díky přítomnosti galvanického proudu se záporným nábojem vám aplikátor přístroje napomůže účinné látky z kosmetického přípravku penetrovat do pleti.



PROGRAM 4 - ultrazvukové vlny

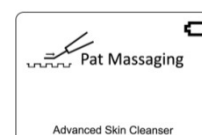Program je určen pro intenzivní mikromasáž pleti. Aplikátor generuje ultrazvukové vlny. Doporučujeme nanést na pleť tenkou vrstvičku sonogelu. K ošetření pleti používejte větší plochu aplikátoru. Velká plocha aplikátoru prostřednictvím ultrazvukových vln aktivně podporuje lokální krevní oběh. Sonogel nemusíte z aplikátoru setřít po každém pohybu. Naopak využijte přítomnost gelu na pleti. Po skončení používání programu setřete veškeré zbytky gelu z pleti (pokud již neplánujete používat další program, při kterém je doporučeno použít sonogel).



PROGRAM 5 - ultrazvukové vlny, galvanický proud (kladný náboj)


Program je srovnatelný s programem 3. K ošetření pleti použijte větší plochu aplikátoru. Zaměřte se na oblasti pleti s výskytem snížení pružnosti pleti a výskytu vrásek. Program vyžaduje aplikaci sonogelu nebo vašeho oblíbeného kosmetického přípravku. Aplikační hlavice generuje ultrazvukové vlny v kombinaci s galvanickým proudem se záporným nábojem a EMS pulzy. Galvanický proud penetruje výživové látky z kosmetických sér hluboko do pokožky. Je zabráněno vyschnutí na povrchu. Absolutní turboefekt pro vaše kosmetické přípravky!



ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nejde zapnout.	Přístroj je zapojen k nabíjecímu USB kabelu.	Před použitím přístroje odpojte přístroj od napájecího kabelu.
	Baterie je vybitá.	Baterii přístroje před použitím dostatečně nabijte.
Problém s nabíjením.	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k USB portu počítače nebo notebooku.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu do USB portu počítače nebo notebooku.
	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k přístroji.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu od přístroje.
	Nabíjecí kabel je poškozen.	Vyměňte nabíjecí kabel za nový.
Působení elektrických mikropulzů je příliš silné.	Sonogel je na pleti v příliš malém množství nebo vůbec.	Aplikujte na pleť větší množství sonogelu pro zvýšení vodivosti pleti.

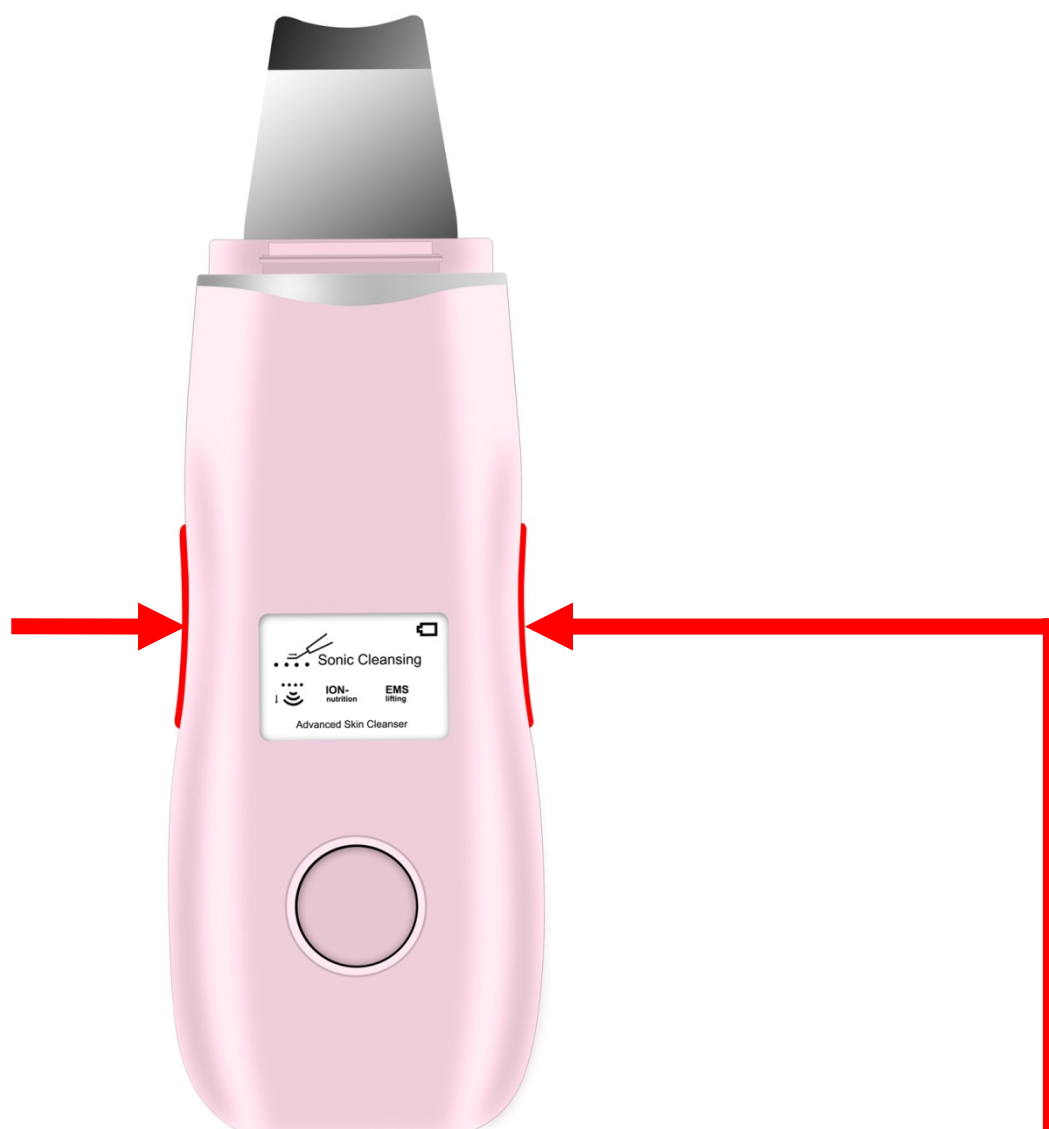DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST



Pro správnou funkci galvanického proudu (ionizace) a EMS elektrických pulzů je nezbytné, aby byl ukazováček a palec v kontaktu s bočními vodícími pásky. V opačném případě funkce nebude fungovat!

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu



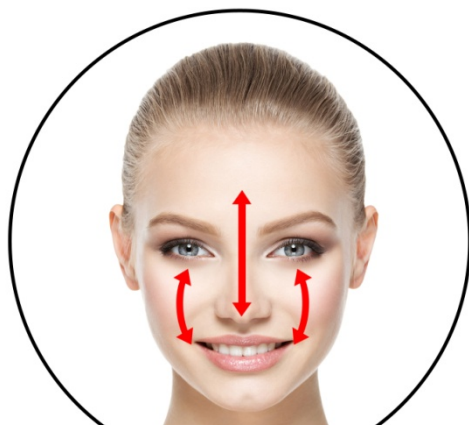
NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru



T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NEJČASTEJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč je před použitím přístroje doporučeno odstranit make-up pomocí kosmetického tampónku? Vždyť přeci je přístroj jako takový určen pro čištění pleti?

Před použitím přístroje je vhodné odstranit make-up běžným způsobem, jak jste zvyklá. Hlavním smyslem je odstranit nečistoty pleti tzv. „nahrubo“. Pomocí aplikátoru kosmetického přístroje se tak můžete zaměřit na skutečně hloubkové a důkladné vyčištění pleti. Na nečistoty, které nejsou pouhým okem vidět.



Mohu přístroj použít na pleť „na sucho“ bez použití jakéhokoliv přípravku?

Ultrazvukové vlny patří do kategorie technologií neinvazivního kosmetického ošetření. Pro tento typ ošetření je lidská pleť příliš suchá. Pokožku je nezbytné dostatečně hydratovat, aby se na ni mohly ultrazvukové vlny lépe navázat. Použitím na suchou pleť je účinek ultrazvuku minimální. V krajním případě můžete pro hydrataci pleti použít kojeneckou nebo destilovanou vodu. V praxi to však není moc praktické. Voda se neudrží na místě, které chcete ošetřit přístrojem. Voda během použití přístroje navíc rychle vysychá. Používejte přístroj, jako skutečný profesionál! K přístroji doporučujeme zakoupit v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb sonogel. Je levný a pro přístrojové ošetření nabízí skvělé vlastnosti. Postačí nanést tenkou vrstvičku. Gel zůstane přesně tam, kde potřebujete. Nestéká a rychle z pleti nevyschne. Mazlavá konzistence umožní hladký pohyb aplikátoru po pleti. Takto můžete snadno provést celý proces čištění pleti, kdy aplikátorem stíráte z pleti nečistoty společně s gelem. Po skončení použití přístroje otřete z pleti zbytky gelu.

Sonogel, kosmetický krém, sérum.... Jak tedy kosmetické přípravky správně používat nebo kombinovat v jednotlivých programech? Který je nejlepší?

Je třeba vycházet z předpokladu, že při působení technologie ultrazvukových vln je vždy nezbytné zapojit minimálně sonogel. Pokud aplikační hlavice generuje kromě ultrazvukových vln také galvanický proud se záporným nábojem, můžete využít k ošetření pleti v kombinaci s kosmetickým přípravkem. Účinné látky, které jsou v kosmetickém přípravku obsaženy, jsou lépe penetrovány hluboko do pleti. Pro stimulaci pleti ultrazvukem je tedy absolutní minimum použít alespoň sonogel. Základní levný sonogel neobsahuje žádné účinné látky, jako např. aloe vera, kyselinu hyaluronovou popř. další složky. V režimu čištění pleti vytvoří vhodné pojivo mezi aplikátorem a pletí. V režimu masírování pleti zakřivenou plochou aplikátoru můžete efektivně stimulovat jemné vlásničkové vrásky působením ultrazvuku. Na trhu však existují dražší varianty sonogelu, které obsahují další přísady pro blahodárnou pleťovou péči. Záleží na vás, kolik chcete do těchto přípravků investovat. Ať se již rozhodnete pro kterýkoliv, určitě sledujte podíl těchto účinných látek. Pokud takový přípravek obsahuje pouze stopové množství, pro pleť de facto nemá žádný účinek. Můžete použít váš oblíbený kosmetický krém. V tomto případě nastavte na přístroji program **3** nebo **5**. Ultrazvukové vlny ruku v ruce se záporným galvanickým proudem napomohou krém lépe do pleti zapracovat.

Z hlediska použití kosmetických přípravků bychom rádi zmínili důležitý aspekt. Kosmetický přístroj s neinvazivní technologií ošetření pleti si nejvíce rozumí se sonogelem popřípadě sonogelem s obsahem dalších příměsí. Pokud použijete jakýkoliv jiný krém/sérum, uživatelům s velmi citlivou pletí může kombinace ultrazvuku + galvanického proudu + krému/séra vyvolat alergickou reakci v podobě lokálního zarudnutí pleti. Mohou to způsobit další látky, které tyto přípravky obsahují (barviva, aroma, apod.). Před ošetřením obličej doporučujeme nanést přípravek na malý kousek

pleti např. na ruku s použitím přístroje. Pokud po několika minutách nenastane na pleti výrazné zarudnutí, můžete pokračovat s ošetřením obličeje.

Jak často je doporučené přístroj používat?

Četnost použití by měla vycházet z kvality prostředí, ve kterém se nejvíce pohybujete. Pokud trávíte hodně času v prašném prostředí, intervaly mezi peelingem pleti zkráťte. Neméně důležitý aspekt hraje typ vaší pleti. Pokud máte pleť, která je mastnější a má sklony k častějšímu ucpávání kožních pórů, opět zkráťte intervaly použití. Pokožka by měla být na dotyk hladká a jemná. Pokud ztratí tuto vlastnost, je správný čas na použití přístroje. Doporučení 2x až 3x týdně není směrodatné a záleží na více faktorech.

Pro jaké partie je přístroj primárně určen?

Obličej, krk a dekolt.

Jakým způsobem vhodně kombinovat čištění pleti (peeling), lifting pleti se zapracováním krémů do pleti?

Jak již bylo uvedeno výše, není třeba všechny programy skombinovat najednou. Frekvence peelingu pleti nemusí korespondovat s četností použití vašeho kosmetického přípravku. Každá pleť má individuální potřeby. Z počátku vyzkoušejte všechny možné kombinace. Zjistíte, jak vaše pleť na jednotlivé možnosti použití přístroje reaguje. Sami si můžete vytvořit vlastní plán péče o pleť.

Tento návod k obsluze slouží pouze jako vodítko, jak s přístrojem pracovat. Vytváří však zároveň prostor pro vaši kreativitu vytvořit si vlastní plán použití přístroje, který bude maximálně vyhovovat vaší pleti. Nebojte se trošku experimentovat. Zapojit fantazii. Technologie přístroje jsou pro vaši pleť bezpečné a žádným způsobem si nemůžete ublížit. Pokud si nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás. Tým BeautyRelax

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Proces nabíjení baterie je doprovázen ikonou baterie na displeji.
4. Čas nabíjení se může lišit v závislosti na stavu baterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.