

NÁVOD K OBSLUZE

Obličejová maska **Beautyrelax BR-2600**

LIGHTMASK SMART



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
OBSAH BALENÍ	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ BENEFITY	6
TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM	6
BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE	6
MODRÉ SVĚTLO	7
ČERVENÉ SVĚTLO	7
ŽLUTÉ SVĚTLO (VIZUÁLNĚ MÁ ODSTÍN DO ORANŽOVA)	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ DLE TYPU PLETI	9
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	10
NABÍJENÍ BATERIE	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	11
CERTIFIKACE	11
DOVOZCE	11
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	12

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Psychické onemocnění
- Stavy úzkosti
- Deprese
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



OBSAH BALENÍ

- Obličejová maska Beautyrelax BR-2600 LIGHTMASK SMART
- Nabíjecí USB kabel
- Návod k obsluze

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Modré světlo: vlnová délka 476 - 495nm
- Červené světlo: vlnová délka 620 - 695nm
- Žluté světlo: vlnová délka 590-620nm
- Časovač: ano, 15 minut
- Provozní výkon: 9W
- Provozní napětí: 5V
- Provozní proud: 1A
- Napájení: vestavěná nabíjecí li-ion baterie
- Nabíjení: USB kabelem (součástí balení)
- Rozměry: 21x16,5x12,5cm
- Hmotnost: 80g

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Terapie fotonovým světlem je v oblasti kosmetického ošetření velmi populární. Ošetření fotonovým světlem nebolí a má velmi dobré výsledky. Kosmetický přístroj s fotonovou terapií BeautyRelax Lightmask Smart poskytuje fotonovou terapii s pokrytím celého obličeje. Během používání je maximálně chráněn váš zrak. Obličejová maska slibuje vysoce komfortní použití ve srovnání s ručními přístroji. Přístroj nemusíte držet v ruce a zároveň světlo pokrývá rovnoměrně celou plochu obličeje. Stálost působení fotonovým světlem je pro úspěšné dosažení výsledků klíčové.

HLAVNÍ BENEFITY

- Rovnoměrné pokrytí obličeje světelnými pásky
- Během použití můžete snadno sledovat např. televizi
- Nízká hmotnost masky nepředstavuje velkou zátěž pro hlavu
- Snadné bezdrátové použití
- Napájení pomocí vestavěné nabíjecí baterie

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.



REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

Obličejová maska BeautyRelax Lightmask nabízí tři barvy fotonové terapie: modrá, červená, žlutá.

MODRÉ SVĚTLO

- aktivuje porfyriny
- chemická reakce, která ničí škodlivé bakterie
- antibakteriální a protizánětlivý účinek
- prevence proti tvorbě akné
- bezpečné a efektivní ošetření


ČERVENÉ SVĚTLO

- podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- příznivý vliv na elastická vlákna
- zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- brání v tvorbě pigmentu

ŽLUTÉ SVĚTLO *(vizuálně má odstín do oranžova)*

- podporuje absorbování kosmetických přípravků
- přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu
- zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti
- obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu
- napomáhá zpomalovat stárnutí kůže

POPIS PŘÍSTROJE

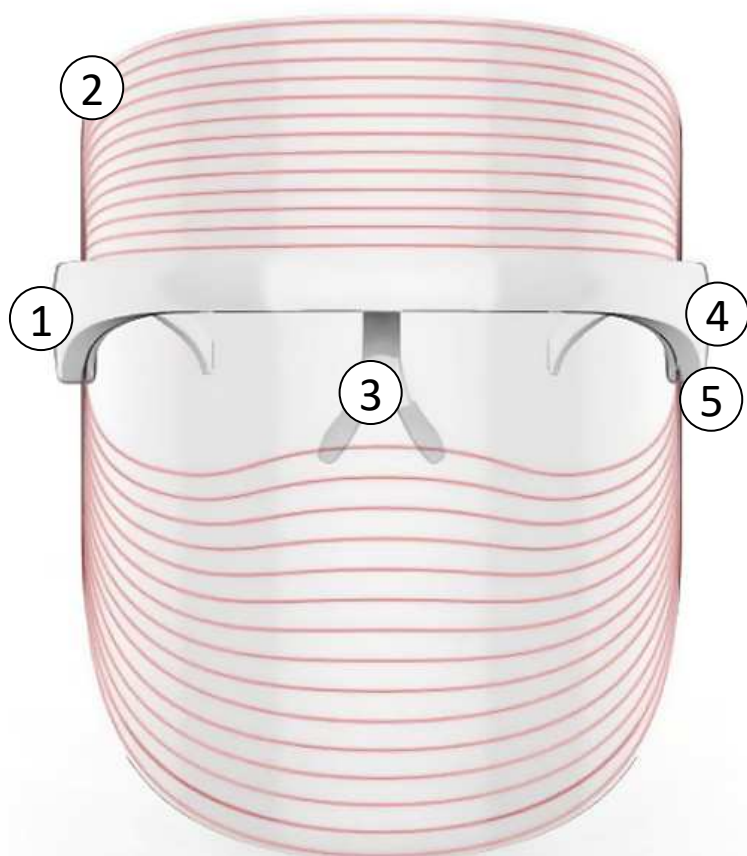

- 1. Hlavní rám masky
- 2. Světelné pásy fotonové terapie
- 3. Opěrka na nos
- 4. Tlačítko ON/OFF
- 5. Vstup pro nabíjecí USB kabel

POUŽITÍ DLE TYPU PLETI

Šetrnost ošetření fotonové terapie umožňuje ošetření všech typů pleti.



normální



suchá



smíšená



mastná



citlivá



aknézní

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před použitím doporučujeme pleť odličit od makeupu. Pleť důkladně omyjte a osušte.
2. V případě potřeby můžete nanést váš oblíbený kosmetický krém nebo sérum.
3. Přístroj si nasadte na hlavu tak, aby vám to bylo pohodlné.
4. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
5. Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF** si můžete snadno přepínat mezi jednotlivými barvami světelné terapie.
6. Přístroj se po uplynutí 15 minut automaticky vypne. Pokud budete přístroj znovu používat, je třeba ho zapnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.
7. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
8. Doporučená délka jednoho ošetření je 10 až 20 minut.
9. Doporučená frekvence použití je každý den.
10. Během používání přístroje není doporučeno být v pohybu. Ideální je pozice vleže nebo vsedě.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Proces nabíjení indikuje červená kontrolka.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrch přístroje udržujte čistý. Zejména pak plochu, kde jsou umístěny světelné pásy. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě žádné ostré předměty, které by mohly poškodit povrch přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Obličejová maska LIGHTMASK SMART

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2600**

EAN: **8594166119475**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2019

EN 61000-2-2: 2013+A1:2019

Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: POCE201114017KRE

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.3.2022